

# Aesculap








## Econom CL Econom CL Equipe Econom CL Fitter




- GB** **Használati útmutató/Technikai leírás**  
**USA** **Szarvasmarha és ló nyírógép**  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Szett 1 akkumulátoros (GT804)/2 akkumulátoros (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Szett 1 akkumulátoros (GT814)/2 akkumulátoros (GT816)
- D** **Econom CL Fitter Szett 1 akkumulátoros (GT834)**  
**Gebrauchsanweisung/Technische Beschreibung**  
Rinder- und Pferdeschermaschine  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Set 1 Akku (GT804)/2 Akkus (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Set 1 Akku (GT814)/2 Akkus (GT816)  
Econom CL Fitter Set 1 Akku (GT834)
- F** **Mode d'emploi/Description technique**  
Tondeuse pour la tonte des bovins et chevaux  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Set 1 batterie (GT804)/2 batteries (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Set 1 batterie (GT814)/2 batteries (GT816) Econom CL Fitter Set 1 batterie (GT834)
- E** **Instrucciones de manejo/Descripción técnica**  
Máquina para bovinos y caballos  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Set 1 batería (GT804)/2 baterías (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Set 1 batería (GT814)/2 baterías (GT816) Econom CL Fitter Set 1 batería (GT834)
- I** **Istruzioni per l'uso/Descrizione tecnica**  
Tosatrice per bovini ed equini  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Set 1 accumulatore (GT804)/2 accumulatori (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Set 1 accumulatore (GT814)/2 accumulatori (GT816)  
Econom CL Fitter Set 1 accumulatore (GT834)
- NL** **Gebruiksaanwijzing/Technische Beschrijving**  
Tondeuze voor runderen en paarden  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Set 1 accu (GT804)/2 accu's (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Set 1 accu (GT814)/2 accu's (GT816)
- DK** **Bruksanvisning/Teknisk Beskrivelse**  
Klippemaskine til kvæg og heste  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Set 1 akkumulator (GT804)/2 akkumulatorer (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Set 1 akkumulator (GT814)/2 akkumulatorer (GT816)  
Econom CL Fitter Set 1 akkumulator (GT834)
- N** **Bruksanvisning/Teknisk Beskrivelse**  
Klippemaskin til storfe og hest  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Set 1 batteri (GT804)/2 batterier (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Set 1 batteri (GT814)/2 batterier (GT816)  
Econom CL Fitter Set 1 batteri (GT834)
- S** **Bruksanvisning/Teknisk Beskrivning**  
Nötkreaturs- och hästklippmaskin  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Set 1 batteri (GT804)/2 batterier (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Set 1 batteri (GT814)/2 batterier (GT816)  
Econom CL Fitter Set 1 batteri (GT834)
- FIN** **Käyttöohjeet/Tekninen Kuvaus**  
Karjan ja hevosen klipperit  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Set 1 akku (GT804)/2 akkuja (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Set 1 akku (GT814)/2 akkuja (GT816)  
Econom CL Fitter Set 1 akku (GT834)
- RUS** **Инструкция по применению/Техническое описание**  
Машинка для стрижки крупного рогатого скота и лошадей  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Set 1 аккумулятор (GT804)/2 аккумулятора (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Set 1 аккумулятор (GT814)/2 аккумулятора (GT816)  
Econom CL Fitter Set 1 аккумулятор (GT834)
- PL** **Instrukcja użytkowania/Opis Techniczny**  
Maszynka do strzyżenia sierści bydłowej i końskiej  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Set 1 akumulator (GT804)/2 akumulatory (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Set 1 akumulator (GT814)/2 akumulatory (GT816)  
Econom CL Fitter Set 1 akumulator (GT834)
- J** **取扱説明書**  
動物用バリカン  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Set 1 バッテリー (GT804)/2 つのバッテリー (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Set 1 バッテリー (GT814)/2 つのバッテリー (GT816)
- IL** **Hebräisch**  
Klippemaskine til kvæg og heste  
Econom CL (GT800)  
Econom CL Set 1 Akku (GT804)/2 Akkus (GT806)  
Econom CL Equipe (GT810)  
Econom CL Equipe Set 1 Akku (GT814)/2 Akkus (GT816)  
Econom CL Fitter Set 1 Akku (GT834)



**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

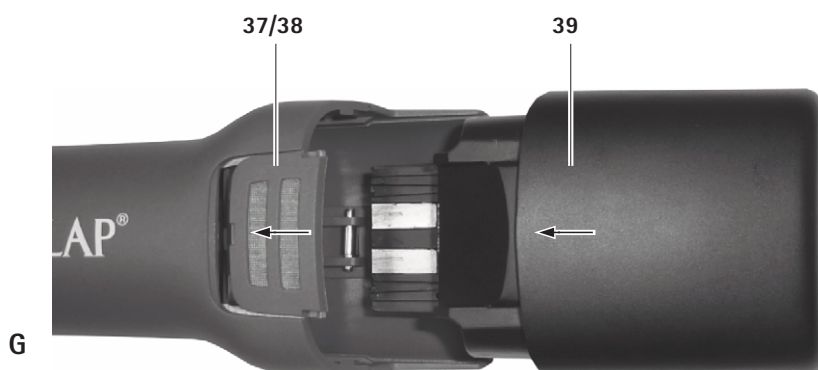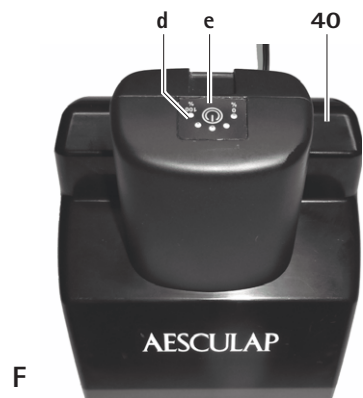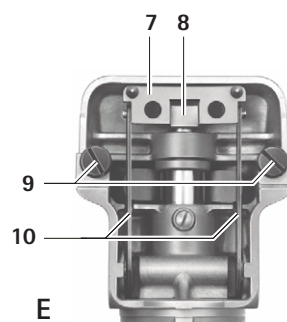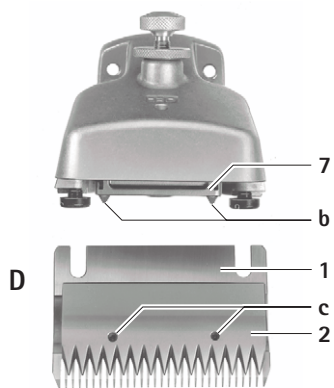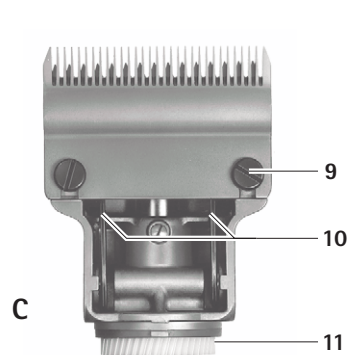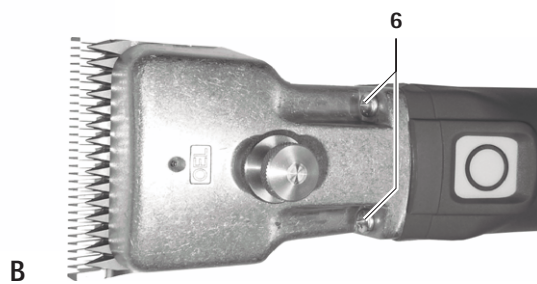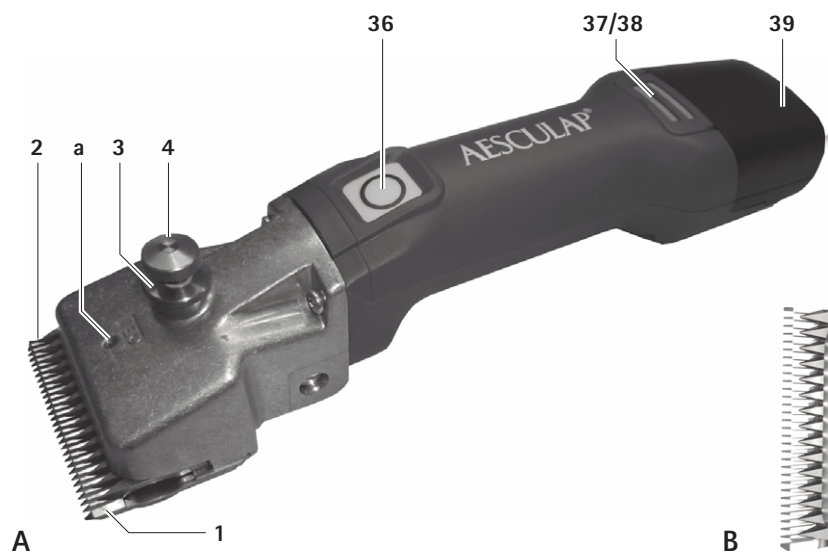

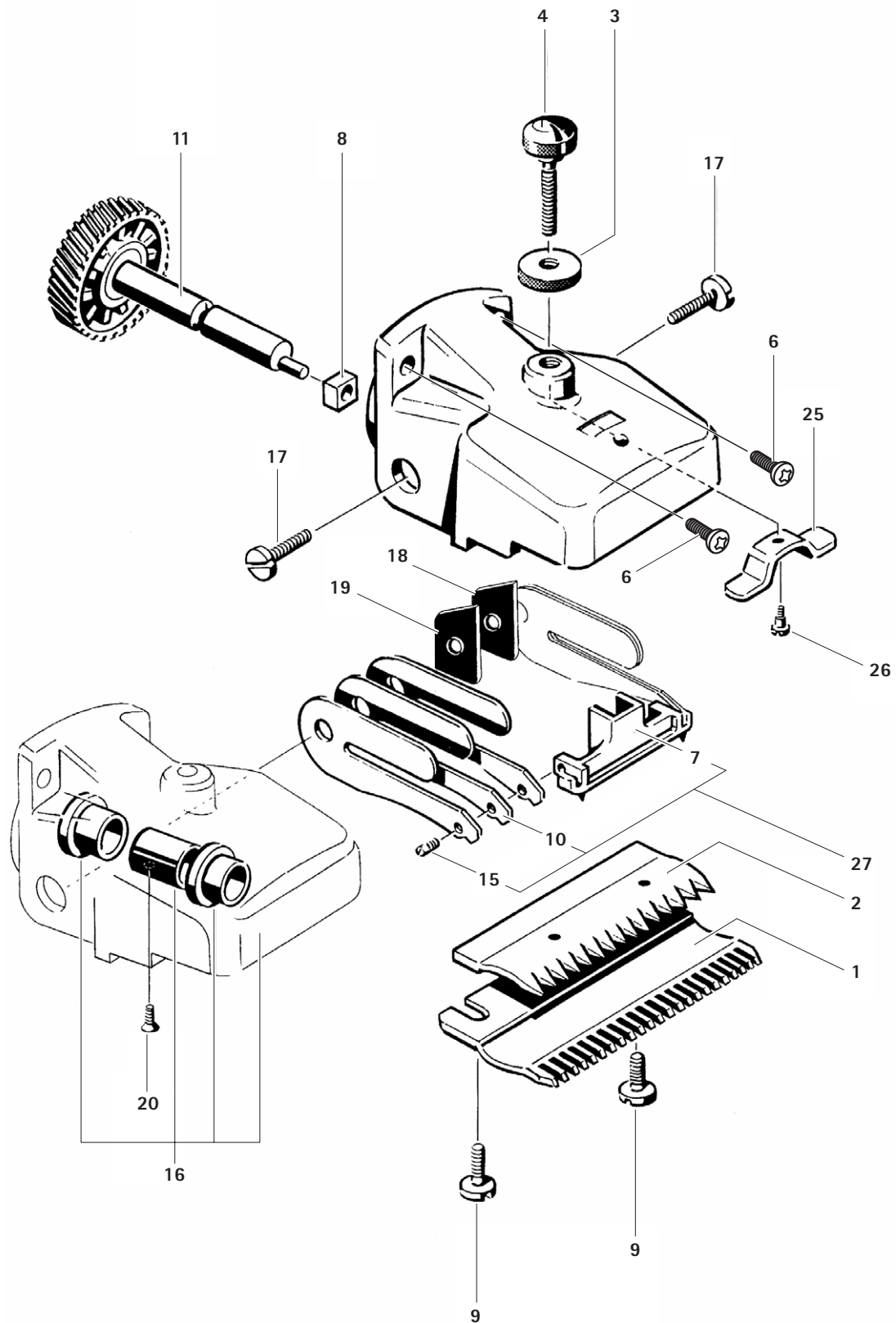



## Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter szarvasmarha és ló nyíró gép

### Áttekintés

Pos.	Cikkszám	Menny	Név
1	GT502	1	<b>Alsó vágólap</b> (GT804–GT816/GT834)
2	GT501	1	Felső vágólap (GT804/GT806/GT834)
	GT505	1	Felső vágólap (GT814/GT816)
3	GT610405	1	Recézett csavaranya
4	GT367205	1	Állító csavar
6	TA010017	2	Hajtó szeg
7	GT367201	1	Rezgésgerjesztő
8	GT610304	1	Rezgő tömb
9	GT610010	2	Rögzítő csavar
10	GT367202	6	Rezgő rugó szárny
11	GT367812	1	Fogaskerék excentertengellyel
15	TA008295	2	Írányító szeg
16	GT367801	1	Felszerelt vágófej tartó
17	TA005091	2	Hajtó szeg
18	GT367802	1	Bal oldali távtartó
19	GT367803	1	Jobb oldali távtartó
20	TA007765	1	Süllyesztett fejű csavar
25	GT610307	1	Rugó áthidaló
26	GT367207	1	Rögzítő csavar
27	GT367804	1	Felszerelt rezgésgerjesztő
35	TA009222	1	Csavarhúzó
36	GT800249	1	Ki/Be kapcsoló gomb LED-el
37	GT800804	1	Légszűrő (kék) Econom CL
38	GT800844	1	Légszűrő (bordó) Econom CL Equipe
39	GT801	1	Lítium ionos akkumulátor
40	GT803	1	Töltő
a	-	1	Olajozási pont akkumulátoros nyírógéphez
b	-	1	Rezgésgerjesztő csúcса
c	-	1	Lyukak a felső nyírólapon
d	-	1	Li-ion akkumulátor töltő státuszjelző
e	-	1	Li-ion akkumulátor gomb
f	-	1	Akkumulátor zár
g	GT800/ GT810	1	U K
-	GT604	1	Speciális olaj nyírófejhez és laphoz
	GT605	1	Készülék kenőolaj

### A terméken található szimbólumok

	Figyelmeztetés, általános figyelmeztető jel Kérjük olvassa el a termék dokumentációját
	2012/19/EU-nak megfelelő elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelésére vonatkozó címke

### Tartalomjegyzék

1.	Biztonságos használat.....	3
2.	Termék leírás.....	3
2.1	Csomagolás tartalma.....	3
2.2	Használathoz szükséges alkatrészek.....	3
2.3	Rendeltetésszerű használat.....	3
2.4	Működési alapelv.....	4
3.	Előkészületek.....	4
4.	Akkumulátoros nyírógép, töltő és Li-ion akkumulátor használata .....	4
4.1	Rendszer előkészítése.....	4
4.2	Funkciók ellenőrzése.....	4
4.3	Töltő csatlakoztatása/Li-ion akkumulátor töltése.....	5
4.4	A Li-ion akkumulátor töltése.....	5
4.5	Nyírófej kezelése.....	6
4.6	Tárolás.....	7
5.	Nyírólapok.....	7
5.1	GT367-es nyírófejvel kompatibilis nyírólapok.....	7
5.2	Ajánlott kombinációk.....	7
6.	Előkészítés.....	8
6.1	Tisztítás/fertőtlenítés.....	8
6.2	Szemrevételezés és ellenőrzés.....	8
7.	Karbantartás.....	8
8.	Hibakeresés.....	9
8.1	Akkumulátoros nyírógép Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter.....	9
8.2	Töltő és Li-ion akkumulátor.....	10
9.	Technikai segítségnyújtás.....	11
10.	Alkatrészek / kiegészítők.....	11
11.	Technikai adatok.....	12
11.1	Akkumulátoros nyírógép Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter.....	12
11.2	Töltő.....	12
11.3	Li-ion akkumulátor.....	12
11.4	Megfelelőségi nyilatkozat.....	12
12.	Hulladékkezelés.....	12
12.1	Csak EU országoknak.....	12
12.2	Li-ion akkumulátor.....	12
13.	Két év jótállás.....	13



## 1. Biztonságos kezelés



**VESZÉLY**

**Áramütés okozta halál veszélye!**

- Ne nyissa ki a berendezést.
- Csak földeléssel ellátott áramforrásba csatlakoztassa a berendezést.

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a berendezés jó állapotban van-e.
- A töltőt és a Li-ion akkumulátorokat szobahőmérsékleten tárolja.
- Száraz helyen tárolja a töltőt és a Li-ion akkumulátorokat.
- Első használat előtt töltsse fel a Li-ion akkumulátorokat.
- A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használatból eredő sérülés megelőzése érdekében és a gyártói garancia és kötelezettségvállalás megőrzése érdekében:
  - a használati útmutatóban rögzítetteknek megfelelően használja a gépet
  - kövesse a biztonsági és karbantartási útmutásokat.
  - csak Aesculap termékeket/alkatrészeket használjon.
- A használati útmutatót a kezelő számára elérhető helyen tárolja.
- Mindig kövesse a vonatkozó szabványokat.
- ellenőrizze, hogy az épületben használt elektromos ellátás, ahol a terméket használja megfelel a Uniós szabványoknak.
- A berendezést soha ne a vezetéknel fogva csatlakoztassa le az áramforrásról.
- Ne használja a berendezést robbanásveszélyes helyen.
- Ne használja a berendezést ha sérült vagy hibás. Ha a berendezés sérült tegye félre.

## 2. Termék leírás

### 2.1 Csomag tartalma

Cikkszám	Megnevezés
GT800 GT810 GT834	Akkumulátoros nyírógép Econom CL, Econom CL Equipe or Econom CL Fitter
GT801	Li-ion akkumulátor
GT803	Töltő
lásd alkatrészek/ kiegészítők	Csatlakozókábel (csatlakozóval)
TA013895	Használati útmutató
GT604	Kézi olajozó

### 2.2 A működtetéshez szükséges alkatrészek

- Akkumulátoros nyírógép Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter
- T ö l t ő
- Csatlakozókábel (csatlakozóval)
- Li-ion akkumulátor

### 2.3 Rendeltetésszerű használat

#### Akkumulátoros nyírógép Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Az akkumulátoros Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter nyírógépet nagy állatok nyírásához használja (pl. szarvasmarha, ló, nagy testű kutya)

#### Töltő GT803/Li-ion akkumulátor GT801

A GT803 töltő a GT801-es lítium ionos akkumulátor töltéséhez használható.

## Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter szarvasmarha és lónyíró gép

### 2.4 Működési alapelv

#### Akkumulátoros Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter nyírógép

Az akkumulátoros Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter nyírógépet a ki/be kapcsoló gomb segítségével kapcsolhatja ki és be **36**.

#### Megjegyzés

A ki/bekapcsoló gomb csak 0,5 mp-en belül reagál, így elkerülhető a berendezés véletlen ki és bekapcsolása.

#### Töltő GT803/Li-ion akkumulátor GT801

A töltő GT803 az alábbi feltételeknek megfelelő áramforrással működtethető: feszültség/frekvencia 100 V- 240 V és 50 Hz -60 Hz.

A töltőt a működtetéshez csatlakoztassa az áramforrásba.

A töltőn található egy töltő mélyedés.

A töltés azonnal elkezdődik, amikor a Li-ion akkumulátort behelyezik a töltőállomásba.

A töltési idő a töltöttségi állapottól és a Li-ion akkumulátor kapacitásától függ.

#### Töltési elv

A Li-ion akkumulátorok állandó áramimpulzusokkal kerül feltöltésre.

A töltési állapot a töltés alatt ellenőrzésre kerül. A töltés ellenőrzése lehetővé teszi az akkumulátor teljes feltöltését, a töltőtés veszélye nélkül.

Ezen felül az akkumulátor hőmérséklete és a töltési idő is ellenőrzés alatt van.

A Li-ion akkumulátor töltési státusz kijelzője 5 LEDből áll. Mindegyik LED a20%-os töltöttséget jelent. Az akkumulátor töltésekor a megfelelő töltési státuszhoz tartozó LED villog. Amikor az összes LED világít az akkumulátor teljesen fel van töltve.

#### Töltési idő

A töltés azonnal leáll, amikor az akkumulátor teljes töltési szintjét elérte. A töltési idő kb. 70 perc.

## 3. Előkészületek

Az alábbi szabályok be nem tartása az Aesculap részéről a teljes felelősségvállalás megszűnéséhez vezet.

- A berendezés előkészítésénél és használatánál mindig kövesse az alábbi iránymutatásokat:
  - nemzeti szabályozások az üzembe helyezésre és használatra vonatkozóan,
  - tűz és robbanásvédelemre vonatkozó nemzeti szabályozások,
  - IEC/VDE szabályozások a működtetésre vonatkozóan.

## 4. Az akkumulátoros nyírógéppel, töltővel és Li-ion akkumulátorral történő munkavégzés

### 4.1 Berendezés előkészítése

#### Alkatrészek csatlakoztatása

Olyan alkatrészek használata, amely a jelen használati útmutatóban nem szerepel, csak akkor alkalmazható, ha azok kifejezetten ezen termékre kerültek kifejlesztésre és ha nem befolyásolják a berendezés teljesítményét és biztonságos működését.

### 4.2 Funkciók ellenőrzése

#### Akkumulátoros nyírógép Econom CL/Econom CL Equipe/

#### Econom CL Fitter

- Ellenőrizze szemrevételezéssel a berendezést.
- Ellenőrizze, hogy a levegőszűrők 37/38 megfelelő helyen vannak lásd G.
- Helyezze a Li-ion akkut 39 a berendezés akkutartójába és nyomja be.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor feltöltött állapotban van: Nyomja meg az e gombot, lásd F ábra

*Megj* A töltési státusz kijelző d mutatja a töltési státuszt.

*Az akkumulátor lemerülését megakadályozandó, az akkumulátor és a berendezés közötti elektromos csatlakozás a berendezés használatának mellőzése esetén 1 óra múlva megszakításra kerül*

- A Li-ion akku újraaktiválása 39: nyomja meg az e gombot (F ábra). A töltésjelzés kijelzőjén lévő LED-ek felvillannak.

#### Töltő/Li-ion akkumulátor

- Ellenőrizze szemrevételezéssel a berendezést.
- A berendezés áramforráshoz való csatlakoztatása előtt:
  - Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kábel nem sérült-e.
  - Ellenőrizze, hogy a berendezés nem sérült (pl. elhajolt csatlakozás a csatlakozó mélyedésben).
- Csatlakoztassa a tápkábelt a berendezés csatlakozójába.
- Csatlakoztassa a főcsatlakozót az áramforrásba.
- Helyezze a Li-ion akkumulátort 39 a töltőmélyedésbe és töltse fel, lásd F ábra.



### 4.3 Töltő / Li-ion akkumulátor csatlakoztatás



**Tűzveszély az akku pólusait folyadék vagy fém alkatrész zárolja!**

- Li-ion akkumulátort ne helyezze be



**Sérült tápkábel miatti sérülésveszély!**

- Töltés előtt ellenőrizze a tápkábel
- Szükség esetén cseréltesse ki a sérült kábelt a gyártóval



**Sérült Li-ion akku miatti sérülésveszély.**

- Töltés előtt ellenőrizze, hogy a Li-ion akkumulátoron nincs-e sérülés.
- Ne használja és ne töltsen a sérült Li-ion akkumulátort.



**Teljesítményvesztés töltetlen Li-ion akkumulátor túl hosszú ideig történő tárolása miatt!**

- A Li-ion akkumulátorokat feltöltve tárolja és a tárolt akkumulátorokat havonta egyszer töltsen fel.



**A töltőmélyedés nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezéséből adódó sérülése!**

- Csak megfelelő akku-t helyezzen a töltőmélyedésbe.

#### Megjegyzés

A töltőt csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó instrukciók átadása után használhatja 8 évesnél idősebb gyermek, vagy csökkent fizikai vagy mentális képességgel rendelkező személy, vagy olyan személy, aki nem gyakorlott és nincs meg a megfelelő tudása, amennyiben a berendezés használatával kapcsolatos veszélyeket megértették

- Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a berendezéssel.
- Felügyelet nélkül ne hagyja, hogy gyermekek tisztítsák, vagy karbantartást végezzenek a berendezésen.

#### Megjegyzés

A Li-ion akkumulátorok töltés közben kissé felhevülnek

#### Megjegyzés

Ha nem használja a töltőt húzza ki a tápkábelét a tápcsatlakozásból.

- Csak GT803-as cikkszámú Aesculap töltőt használjon az akkumulátorok töltéséhez.
- a töltő csatlakoztatása 40: csatlakoztassa a berendezés tápkábelét a töltőbe.
- Csatlakoztassa a tápkábelt az áramforrásba.
- Helyezze az akku-t 39 a töltőmélyedésbe és töltsen fel, lásd F ábra.

A töltő státusz kijelzőjén található LED-ek a töltöttség állapotának megfelelően villognak. Amikor az összes LED világít az akkumulátor feltöltődött.

### 4.4 A li-ion akku töltése

- Fogja meg a nyírógépet g a nyírófejfelé lefelé, így az akkumulátor nem esik ki kilazításakor, lásd 1-es kép.
- Lazítsa ki az akkumulátor zárót f a hüvelykujjával.



Fig. 1

## Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter szarvasmarha és ló nyíró gép

- Vegye ki a Li-ion akkut 39, és tolja be a feltöltött csere akkut a berendezésbe g, lásd 2-es kép.



Fig. 2

- Biztosítsa a Li-ion akkut 39 a helyén az elemzáróval f, lásd 3-as kép.



Fig. 3

### 4.5 Nyírófej használata

#### Nyírófej olajozása



**Nem megfelelő olajozás miatti berendezés vagy nyírófej sérülés!**

- Csak akkor olajozza a nyírófejet, ha a berendezés működik.
- Soha ne mártsa a nyírófejet semmilyen folyadékba
- Csak GT604-es olajat használjon.

- Bőven olajozza meg a vágófejet az olajozási pontnál (a) minden állat nyírását megelőzően, lásd A ábra.
- Olajozza meg a rugó szárnyat (10) napi 2-3 alkalommal, 3-4 csepp olajjal, lásd C ábra

#### A sebességváltó olajozása



**Nem megfelelő olajozás miatti berendezés vagy váltó sérülés!**

- Csak GT605-ös váltóolajat használjon.
- A nyírási szezonban 1-2 alkalommal olajozza meg a váltót.

- Nyissa ki és vegye ki a li-ion akkut (39).
- Vegye ki mindkét csavart (6), lásd B ábra.
- Fordítsa el finoman a nyírófejet (kb 15°) az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le a motorházról.
- Vigyen fel kb. 1 cm kenőolajat a váltó kerék két ellentétes pontjára (11), lásd C ábra.
- Óvatosan helyezze fel a nyírófejet a motorra. A nyírófej visszacsatlakoztatásakor ellenőrizze, hogy oly módon forgatta el 15°-ban az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy az alsó perem összekapcsolódott a motorház vátával.

#### Nyírólap cseréje

- Nyissa ki és vegye ki a li-ion akkumt (39)
- Lazítsa meg a zárófedelelet (3) és a beállító csavart (4) kb. 2 fordítással, lásd A ábra.
- Lazítsa meg mindkét csavart (9), húzza le a nyírólapot (1) és vegye le a felső nyírólapot (2), lásd D és E kép.
- A felső nyírólap (2) behelyezése előtt, ellenőrizze, hogy a rezgő tömb (8) a rezgésgerjesztő (7) megfelelő mélyedésében legyen, lásd E ábra.
- helyezze be a felső vágólapot (2). Ellenőrizze, hogy a rezgésgerjesztő (7) mindkét csúcsa (b) pontosan illeszkedik a felső vágólap (2) lyukaiba(c), lásd D ábra.





- Nyomja le az alsó vágólapot (1) a leszorító csavarok feje alá (9), a nyírófejig és húzza meg jól mindkét leszorító csavart (9).
- Húzza meg a beállítócsavarokat (4), amíg mindkét vágólap finoman egymáshoz nem nyomódik, lásd A ábra.

#### A lapnyomás beállítása

##### Megjegyzés

A lapnyomást működés közben, segédeszköz nélkül kell beállítani.

##### Megjegyzés

Ha a lapnyomás túl nagy, túlhevülés léphet fel és a nyírólapok gyorsabban elhasználódhatnak.

- Óvatosan engedje ki a záró sapkát (3) és beállító csavart (4), amíg a felső nyírólap (2) már nem nyomja az alsó nyírólapot (1) (a motor hangja észrevehetőbben magasabb hangú lesz) lásd A ábra
- Csavarja be a beállító csavart (4), amíg ellenállást nem érez. Ettől a ponttól csavarja még kb. egy teljes fordulatot majd húzza meg a zárósapkát (3).

#### Vágófej tisztítása

- A nyírófejet legalább naponta, a nyírási feladatok után, vagy ha elkoszolódik.
- Nyissa ki és vegye ki az akkumulátort (39)
- Vegye ki mindkét csavart (6) lásd B ábra.
- Finoman fordítsa el kb. 15°-al az óramutató járásával ellentétes irányba a vágófejet és vegye ki a motorházból
- Vegye ki a vágólapokat, lásd vágólapok cseréje.
- Alaposan tisztítsa meg a belső részeket és a vágófej részeit egy kefe segítségével.
- Helyezze be a vágólapot és hőzza meg, lásd vágólap cseréje.
- Olajozza meg a sebességváltót, lásd sebességváltó olajozása.
- Óvatosan helyezze a vágófejet a motorra. A vágófej visszahelyezésekor ellenőrizze, hogy oly módon került 15o-al az óramutató járásával ellentétes irányba elfodítva, hogy az az alsó perem összekapcsolódott a motorház vájatával.
- Olajozza be a nyírófejet, lásd nyírófej olajozása.

#### Levegőszűrő tisztítása

- Legalább naponta egyszer vagy ha elpiszkolódik tisztítsa meg a szűrőt.
- Vegye ki a szűrőt (37/38) a nyírógépből, lásd G ábra.
- Alaposan tisztítsa meg meleg vízzel és kefével a szűrőt (37/38).
- Hagyja a szűrőt megszáradni.
- Tisztítsa meg a nyírógépet.
- Helyezze a légszűrőt (37/38) a berendezésre.

#### Nyírólapok újraélezése.

- A nyíróélek élezéséhez lépjen kapcsolatba technikai szervizünkkel, lásd technikai szervíz.

#### 4.6 Tárolás

- Tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a berendezést és a nyírólapokat.
- A berendezést száraz, sötét és tiszta szobában tárolja.

## 5. Vágólapok

### 5.1 GT367-es nyírófejjel kompatibilis vágólapok

Cikkszám	Megnevezés
GT501	Felső nyírólap 15 nyírófoggal
GT502	Alsó nyírólap 31 nyírófoggal, nyírási magasság 3 mm
GT503	Felső nyírólap 17 nyírófoggal
GT504	Alsó nyírólap 18 nyírófoggal, nyírási magasság 3 mm
GT505	Felső nyírólap 23 nyírófoggal
GT506	Alsó nyírólap 23 nyírófoggal, nyírási magasság 3 mm
GT508	Alsó nyírólap 51 nyírófoggal, nyírási magasság 1 mm
GT510	uaz, mint GT506, de nyírási magasság 5 mm
GT511	uaz, mint GT502, de nyírási magasság 1 mm

### 5.2 Ajánlott kombinációk

Kombináció	Felső/alsó él	Megfelel
közel elhelyezett fogak	GT501/GT502	Szarvasmarha és ló (általános GT474 és GT367)
	GT501/GT511	lpari nyírás
	GT505/GT508	(pl. szörnnyírás)
közepesen elhelyezett fogak	GT505/GT506	Szvmha, kutya, kecske
	GT505/GT510	Kutya kés kecske
szélesen elhelyezett fogak	GT503/GT504	Szarvarmarha, finom szőrű birka és egy birka

## Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter szarvamarha és ló nyíró gép

### 6. Előkészítés

#### 6.1 Tisztítás/fertőtlenítés



##### Áramütés és tűzveszély!

- **Tisztítás előtt:**
  - vegye ki a tápcsatlakozót a töltőből.
  - Vegye ki az akkumulátort a berendezésből

Ne használjon gyúlékony vagy

- **robbanásveszélyes tisztító vagy fertőtlenítőszer.**
- **Ne kerüljön folyadék a termékbe**



A termék mechanikus tisztítása/fertőtlenítése során keletkező sérülésveszély!

- **Csak kézi erővel tisztítsa a berendezést.**
- **Semmilyen körülmények között ne sterilizálja a berendezést.**



Nem megfelelő tisztító/fertőtlenítő szer okozta terméksérülés veszélye!

- **Csak felülettisztításra engedélyezett tisztító/fertőtlenítőszer használjon. Kövesse a gyártó utasításait a tisztító/fertőtlenítőszerrel kapcsolatban.**
- **Soha ne mártsa a terméket vízbe vagy tisztítószerbe**
- **Ne kerüljön folyadék a töltőmélyedésbe**
- **Különös odafigyeléssel tisztítsa a töltőmélyedés csatlakozóit.**

- Törölje le a berendezés vázát általános felületfertőtlenítő szerbe mártott ronggyal.
- Szükség esetén, az expozíciós idő után, töröljön le minden tisztító/fertőtlenítőszer egy tiszta vízbe mártott ronggyal.
- Törölje szárazra a berendezést egy tiszta ronggyal.
- A töltőmélyedés csatlakozóit isopronanonnal vagy etil alkohollal és pamuttamponnal. Ne használjon maró anyagot.
- Szükség esetén ismétlje meg a tisztítási/fertőtlenítési feladatot.

#### 6.2 Vizsgálat és ellenőrzés

- Hagyja, hogy a berendezés szobahőmérsékletűre hűljön.
- Minden tisztítás és fertőtlenítés után ellenőrizze a berendezést, hogy tiszta, működőképese és nem sérült.
- Ellenőrizze, hogy a berendezés nem sérült, nem ad ki abnormális hangot, nem melegszik-e túl és nem rázkódik-e.
- Ellenőrizze, hogy a nyírófej nem törött, sérült vagy tompa-e.
- amennyiben a berendezés sérült tegye félre.

### 7. Karbantartás

Megbízható működés biztosításához az Aesculap legalább évente egyszeri szervizelést javasol.



## 8. Hibakeresés

### 8.1 Akkumulátoros nyírógép Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Hiba	Észrevétel	Ok	Megoldás
a nyírógép nem indul el	-	Li-ion akkumulátor nincs aktiválva	Nyomja meg az e gombot a Li-ion akkumulátoron
	A ki/bekapcsoló gomb LED-je (36) mp-enként 2x villog	Li-ion akkumulátor nincs a berendezésben	Helyezze be a Li-ion akkumulátort
	-	Li-ion akku hiba	Helyezzen be új Li-ion akkut
	-	Li-ion akku nincs a berendezésben	Helyezze be a Li-ion akkut
A nyírógép működés közben leáll	-	Li-ion akku védőkör közben deaktiválásra került	Kapcsolja ki majd be a berendezést
	-	Li-ion akku lemerült	Helyezzen be ez új Li-ion akkut

Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter szarvasmára és ló nyíró gép

8.2 Töltő és Li-ion akkumulátor

Hiba	Észrevétel	Ok	Megoldás
Töltő nem működik	Az akkumulátor LED jelzőfénye nem világít	Tápkábel nincs bedugva	Dugja be a tápkábelt a berendezésbe és az áramforrásba
	Li-ion akku nincs behelyezve	Tápkábel hibás	Cserélje ki a tápkábelt
		Li-ion akkumulátor hibás	Küldje el a Li-ion akkut a gyártóhoz javításra, lásd technikai szerviz
Li-ion akkumulátor nem tölthető	Li-ion akku csatlakoztatva van, töltésjelző nem világít	Töltő elkoszolódott	Tisztítsa meg a töltőmedence csatlakozóit
	-	Töltő csatlakozó megsérült	Küldje el a töltőt a gyártónak, lásd technikai szerviz
	-	Li-ion akkumulátor hibás	Küldje el a Li-ion akkut a gyártóhoz javításra, lásd technikai szerviz
	-	Töltő meghibásodott	Küldje el a töltőt a gyártóhoz javításra, lásd Technikai szerviz
	-	Töltés közben túl nagy a hőmérséklet az akkumulátorban	Vegye ki az akkut a töltőmedencéből, hagyja lehűlni, majd ismétlje meg a töltést Ha a probléma ismét fennáll: küldje el az akkut a gyártóhoz javításra
	-	Akku töltési hiba vagy Li-ion akku hiba	Vegye ki az akkut a töltőmedencéből, majd ismétlje meg a töltést Ha a probléma ismét fennáll: küldje el az akkut a gyártóhoz javításra



## 9. Technikai szervíz



FIGYELEM

Sérülés és/vagy üzemzavar veszélye!

➤ Ne módosítsa a terméket.

A terméken történő módosítás jótállási jogok elvesztését és a vonatkozó engedélyek elvesztését vonhatják maguk után.

### Szervíz cím

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach / Germany

Phone: +49 (0) 8086 933-100

Fax: +49 (0) 8086 933-500

E-Mail: info@kerbl.com

www.kerbl.com

További szervíz címekkel kapcsolatos felvilágosítást a fenti címen kaphatnak.

## 10. Kiegészítők/alkatrészek

Cikksz.	Megnevezés	Design	Tápkábel vagy tápegység	Li-ion akku	Teljes töltő állomás	Kiegészítők
GT804/ GT806	Econom CL	Európa Nagy Britan- nián kívül	TA012170 Európai csatlakozó, fekete L=1.8 m	GT801	GT803	GT604 Speciális olaj nyírólapok és nyírófej olajozásához GT605 Váltó olaj (tubus)
GT814/ GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT804G/ GT806G	Econom CL	Nagy- Britannia	TA012169 GB csatlakozó, fekete, L=1.8 m			
GT814G/ GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT804K/ GT806K	Econom CL	USA	TA012168 2-tűs csatlakozó, fekete, L=1.8 m			
GT814K/ GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT804A/ GT806A	Econom CL	Ausztrália	TA013657 2-tűs csatlakozó, fekete, L=1.8 m			
GT814A/ GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

## Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter szarvasmarha és ló nyírógép

### 11. Technikai adatok

#### 11.1 Akkumulátoros nyírógép Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

	GT800 Econom CL	GT810 Econom CL Equipe	GT834 Econom CL Fitter
Ütés	max. 2 7 5 0 1 / p e r c	max. 2 2 5 0 1/peerc	max. 3 0 0 0 1/perc
Működési idő akkival	kb. 70 perc	kb. 80 perc	kb. 70 perc
Névleges feszültség	max. 21.6 V	max. 21.6 V	max. 21.6 V
Teljesítmény	max. 2.6 A	max. 2.6 A	max. 2.6 A
Súly (vágófejjel és akkival)	1 250 g	1 250 g	1 250 g
Minőségi jelölések	TÜV-GS, CE, UL, CSA	TÜV-GS, CE, UL, CSA	CE, UL, CSA


#### 11.2 Töltő

	GT803
Feszültség tartomány(áramfogyasztás)	100 V to 240 V
Frekvencia	50 Hz to 60 Hz
Töltési feszültség/kimenő feszültség	max. 25.2 V
Töltési áramerősség/kimenő áramerősség	max. 2.6 A
Súly (kábelrel és tápegységgel)	764 g
Minőségi jelölések	TÜV-GS, CE, UL, CSA

#### 11.3 Li-ion akkumulátor

	GT801
Cella típus	Li
Névleges feszültség	21.6 V
Teljesítmény	2.6 Ah
Töltési idő	kb. 70 perc
Minőségi jelölések	TÜV-GS, CE, UL, CSA


### 11.4 Megfelelőségi nyilatkozat

	<p>Saját felelősségünkre igazoljuk, hogy a termék megfelel az alábbi szabványoknak és szabályozási dokumentációknak: 2004/108/EC EMC Guidelines: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-8 Háztartási és hasonló berendezések biztonsága – általános követelmények – hajnyíró gépekhez Aesculap Suhl GmbH</p>
---	---

### 12. Hulladékkezelés

Elektromos eszközök, kiegészítők és csomagolás környezettudatos újrahasznosító helyre kerüljön.

#### 12.1 Csak az EU-ban

	<p>Elektronikus eszközöket ne dobjon háztartási hulladék közé! Az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU direktíva és azok nemzeti törvényekbe történő beillesztése alapján, a már nem használható elektromos eszközöket külön kell gyűjteni és környezettudatosan hasznosítsák.</p>
---	--

#### 12.2 Li-ion akkumulátor

Ne gyűjtse a Li-ion akkumulátort a háztartási hulladékkal, ne dobja tűzbe és ne tegye vízbe. A hibás vagy használt Li-ion akkumulátorokat környezetbarát módon, a 2006/66/EC direktívának megfelelően kell gyűjteni, újrahasznosítani vagy hulladékként kezelni.



## 13. Két év jótállás

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket választotta

Évtizedek óta az Aesculap név a minőség és az elsőosztályú szervíz szinonímája. Innovatív, magas minőségű termékek gyártójaként ismernek vevőink. Az Aesculap magas minőségű berendezéseket gyárt, és biztosítja Önöket a kiváló minőségű alapanyagok és kíméletes gyártási folyamatok használról. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy nem vagyunk felelősek olyan termékhibáért, amely a nem megfelelő használatból, normál elhasználódásból ered, vagy a berendezés nem megfelelő használatából, vagy nem megfelelő vagy nem tökéletesen működő, harmadik fél által biztosított termék használata során keletkezik

Azon alkatrészek, amelyek általánosságban elhasználódnak, és így amelyekre a garancia nem vonatkozik, az akkumulátor és a nyírőfej. Az olyan anyaghibák, amelyek nem vagy elhanyagolhatóan vannak hatással a termék értékére vagy a funkcionalitására ugyancsak nem tartoznak a garanciavállalás alá.



Amennyiben felelőssek vagyunk, garanciavállalásunkon belül fenntartjuk magunknak a jogok a termék javítására vagy cseréjére.

**Rinder- und Pferdeschermaschine Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter**

**Übersicht**

Pos.	Art.-Nr.	Anzahl	Benennung
1	GT502	1	Untere Schneideplatte (GT804-GT816/GT834)
2	GT501	1	Obere Schneideplatte (GT804/GT806/GT834)
	GT505	1	Obere Schneideplatte (GT814/GT816)
3	GT610405	1	Rändelmutter
4	GT367205	1	Regulierschraube
6	TA010017	2	Schraube
7	GT367201	1	Schwinger
8	GT610304	1	Schwingklötzchen
9	GT610010	2	Klemmschraube
10	GT367202	6	Schwingfederblatt
11	GT367812	1	Stirnrad mit Exzenterwelle
15	TA008295	2	Führungsstift
16	GT367801	1	Scherkopfgehäuse montiert
17	TA005091	2	Schraube
18	GT367802	1	Distanzteil, links
19	GT367803	1	Distanzteil, rechts
20	TA007765	1	Senkschraube
25	GT610307	1	Federbrücke
26	GT367207	1	Fixierschraube
27	GT367804	1	Schwinger, montiert
35	TA009222	1	Schraubendreher
36	GT800249	1	Ein-/Aus-Taster (mit LED)
37	GT800804	1	Luftfilter (blau) Econom CL
38	GT800844	1	Luftfilter (bordeaux) Econom CL Equipe
39	GT801	1	Lithium-Ionen-Akku
40	GT803	1	Ladegerät
a	-	1	Ölstelle Akku-Schermaschine
b	-	1	Spitzen des Schwingers
c	-	1	Bohrungen der oberen Schneidplatte
d	-	1	Ladezustandsanzeige Li-Ionen-Akku
e	-	1	Taste des Li-Ionen-Akkus
f	-	1	Akkuverriegelung
g	GT800/ GT810	1	Akku-Schermaschine
	GT604	1	Spezialöl für Scherkopf und Schneideplatten
	GT605	1	Getriebefett (Tube)

**Symbole am Produkt**

	Achtung, allgemeines Warnzeichen Achtung, Begleitdokumente beachten
	Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten entsprechend Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), siehe Entsorgung

**Inhaltsverzeichnis**

1	Sichere Handhabung.....	15
2	Gerätebeschreibung .....	15
2.1	Lieferumfang .....	15
2.2	Zum Betrieb erforderliche Komponenten.....	15
2.3	Verwendungszweck.....	15
2.4	Funktionsweise .....	16
3	Vorbereiten .....	16
4	Arbeiten mit Akku-Schermaschine, Ladegerät und Li-Ionen-Akku	16
4.1	Bereitstellen .....	16
4.2	Funktionsprüfung.....	16
4.3	Ladegerät anschließen/Li-Ionen-Akku laden .....	17
4.4	Li-Ionen-Akku wechseln .....	17
4.5	Handhabung des Scherkopfs .....	18
4.6	Lagerung.....	19
5	Schneideplatten .....	19
5.1	Schneideplatten passend zu Scherkopf GT367.....	19
5.2	Empfohlene Kombinationen.....	19
6	Aufbereitung .....	20
6.1	Reinigung/Desinfektion .....	20
6.2	Kontrolle und Prüfung .....	20
7	Wartung.....	20
8	Fehler erkennen und beheben.....	21
8.1	Akku-Schermaschine Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter .....	21
8.2	Ladegerät und Li-Ionen-Akku.....	22
9	Technischer Service .....	23
10	Zubehör/Ersatzteile .....	23
11	Technische Daten.....	24
11.1	Akku-Schermaschine Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter .....	24
11.2	Ladegerät.....	24
11.3	Li-Ionen-Akku .....	24
11.4	Konformitätserklärung .....	24
12	Entsorgung.....	24
12.1	Nur für EU-Länder .....	24
12.2	Li-Ionen-Akku .....	24
13	2 Jahre Gewährleistung .....	25





## 1. Sichere Handhabung



**Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!**

- Produkt nicht öffnen.
- Produkt nur an ein Versorgungsnetz mit Schutzleiter anschließen.

- Vor der Anwendung des Produkts Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Zustand prüfen.
- Ladegerät und Li-Ionen-Akkus bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Ladegerät und Li-Ionen-Akkus trocken halten.
- Vor dem ersten Einsatz Li-Ionen-Akkus laden.
- Um Schäden durch unsachgemäßen Aufbau oder Betrieb zu vermeiden und die Gewährleistung und Haftung nicht zu gefährden:
  - Produkt nur gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwenden.
  - Sicherheitsinformationen und Instandhaltungshinweise einhalten.
  - Nur Aesculap-Produkte miteinander kombinieren.
- Gebrauchsanweisung für den Anwender zugänglich aufbewahren.
- Gültige Normen einhalten.
- Sicherstellen, dass die elektrische Installation des Raums den IEC-Anforderungen entspricht.
- Netzverbindungen durch ziehen am Gerätestecker lösen, nie durch Ziehen am Kabel.
- Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.
- Kein beschädigtes oder defektes Produkt verwenden. Beschädigtes Produkt sofort aussortieren.

## 2. Gerätebeschreibung

### 2.1 Lieferumfang

Art.-Nr.	Bezeichnung
GT800 GT810	Akku-Schermaschine Econom CL, Econom CL Equipe bzw. Econom CL Fitter
GT801	Li-Ionen-Akku
GT803	Ladegerät
siehe Zubehör/ Ersatzteile	Netzanschlussleitung (mit Gerätestecker)
TA013895	Gebrauchsanweisung
GT604	Ölflasche

### 2.2 Zum Betrieb erforderliche Komponenten

- Akku-Schermaschine Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter
- Ladegerät
- Netzanschlussleitung (mit Gerätestecker)
- Li-Ionen-Akku

### 2.3 Verwendungszweck

#### **Akku-Schermaschine Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter**

Die Akku-Schermaschine Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter wird zum Scheren von Großtieren wie Rinder, Pferden und großen Hunden verwendet.

#### **Ladegerät GT803/Li-Ionen-Akku GT801**

Das Ladegerät GT803 wird zum Laden des Li-Ionen-Akkus GT801 eingesetzt.

## 2.4 Funktionsweise

### Akku-Schermaschine Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

Die Akku-Schermaschine Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter wird mit dem Ein-/Aus-Taster **36** ein- und ausgeschaltet.

#### Hinweis

Um ein versehentliches Ein-/Ausschalten der Maschine zu vermeiden, reagiert der Ein-/Aus-Taster erst nach einer Betätigung >0,5 s.

### Ladegerät GT803/Li-Ionen-Akku GT801

Das Ladegerät GT803 ist für einen Netzspannungsbereich von 100 V bis 240 V und von 50 Hz bis 60 Hz konzipiert.

Zur Herstellung der Betriebsbereitschaft wird das Ladegerät GT803 mit dem Netzstecker an das Versorgungsnetz angeschlossen.

Das Ladegerät GT803 verfügt über einen Ladeschacht.

Mit dem Einstecken des Li-Ionen-Akkus in die Ladestation startet der Ladevorgang automatisch.

Die Ladezeit hängt vom Ladezustand und der Kapazität des Li-Ionen-Akkus ab.

#### Ladeprinzip

Die Li-Ionen-Akkus werden mit konstanten Stromimpulsen aufgeladen.

Der Ladezustand des Li-Ionen-Akkus wird während der Aufladung überwacht. Durch die Überwachung der Ladekurve wird eine 100 %-Ladung ohne Überladung sichergestellt.

Zusätzlich werden Akku-Temperatur und Ladezeit überwacht.

Die Ladezustandsanzeige **d** des Li-Ionen-Akkus hat 5 LEDs. Jede LED steht für 20 % Ladevolumen. Befindet sich der Akku im Ladevorgang, blinkt die LED des jeweiligen Ladezustands. Wenn alle LEDs dauerhaft leuchten, ist der Akku vollständig geladen.

#### Ladezeit

Bei Erreichen der maximalen Ladezeit wird der Ladevorgang abgebrochen. Die Ladezeit beträgt ca. 70 min.

## 3. Vorbereiten

Wenn die folgenden Vorschriften nicht beachtet werden, übernimmt Aesculap insoweit keinerlei Verantwortung.

- Beim Aufstellen und Betrieb des Produkts einhalten:
  - die nationalen Installations- und Betreiber-Vorschriften,
  - die nationalen Vorschriften über Brand- und Explosionsschutz,
  - Anwendungshinweise gemäß IEC-/VDE-Bestimmungen.

## 4. Arbeiten mit Akku-Schermaschine, Ladegerät und Li-Ionen-Akku

### 4.1 Bereitstellen

#### Zubehör anschließen

Zubehörkombinationen, die nicht in der Gebrauchsanweisung erwähnt sind, dürfen nur verwendet werden, wenn sie ausdrücklich für die vorge-sehene Anwendung bestimmt sind. Leistungsmerkmale sowie Sicherheitsanforderungen dürfen nicht nachteilig beeinflusst werden.

### 4.2 Funktionsprüfung

#### Akku-Schermaschine Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

- Sichtprüfung durchführen.
- Sicherstellen, dass Luftfilter **37/38** korrekt sitzt, siehe Abb. G.
- Li-Ionen-Akku **39** in Maschinenschacht schieben und verriegeln.
- Ladezustand des Akkus prüfen: Taster **e** drücken, siehe Abb. F.
- Die Ladezustandsanzeige **d** zeigt den Ladezustand an.

#### Hinweis

Um zu verhindern dass sich der Li-Ionen-Akku bei Nichtgebrauch der Maschine entlädt, wird die elektronische Verbindung des Li-Ionen-Akku zur Steuerung der Akku-Schermaschine nach 1 h getrennt.

- Li-Ionen-Akku **39** reaktivieren: Taster **e** betätigen, siehe Abb. F.  
Alle LEDs der Ladezustandsanzeige **d** leuchten auf.

#### Ladegerät/Li-Ionen-Akku

- Sichtprüfung durchführen.
- Vor Anschluss des Produkts an das Versorgungsnetz:
  - Netzanschlussleitung auf mögliche Beschädigungen prüfen.
  - Produkt auf mögliche Beschädigungen prüfen (z. B. Kontakte des Ladeschachts auf verbogene Kontakte prüfen).
- Netzanschlussleitung in Gerätestecker an der Ladestation stecken.
- Netzstecker in Steckdose des Versorgungsnetzes stecken.
- Li-Ionen-Akku **39** in Ladeschacht des Ladegeräts stellen und aufladen, siehe Abb. F.



### 4.3 Ladegerät anschließen/Li-Ionen-Akku laden



WARNUNG

**Brandgefahr bei Kurzschluss der Pole durch Flüssigkeiten oder Metallteile!**

- Li-Ionen-Akku nicht kurzschließen.



WARNUNG

**Verletzungsgefahr durch beschädigte Netzanschlussleitung!**

- Netzanschlussleitung vor dem Laden auf Beschädigungen prüfen.
- Beschädigte Netzanschlussleitung durch Hersteller ersetzen lassen.



WARNUNG

**Verletzungsgefahr und Sachschäden durch beschädigten Li-Ionen-Akku!**

- Li-Ionen-Akku vor dem Laden auf Beschädigungen prüfen.
- Beschädigten Li-Ionen-Akku nicht verwenden oder aufladen.



VORSICHT

**Verlust der Kapazität/Leistungsfähigkeit des entladenen Li-Ionen-Akku durch längere Lagerung!**

- Li-Ionen-Akku bei längerer Lagerung nur vollgeladen einlagern und einmal pro Monat nachladen.



VORSICHT

**Zerstörung von Produkt, Ladeschacht oder Li-Ionen-Akku durch Stecken eines falschen Akkutyps in den Ladeschacht!**

- Li-Ionen-Akku nur in den dafür vorgesehenen Ladeschacht stecken.

#### Hinweis

Das Ladegerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
- Reinigung und Wartung des Ladegeräts nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchführen lassen.

#### Hinweis

Der Li-Ionen-Akku erwärmt sich leicht beim Ladevorgang.

#### Hinweis

Wenn nicht mit dem Ladegerät gearbeitet wird, muss die Netzanschlussleitung von der Steckdose getrennt werden.

- Nur Aesculap Ladegerät GT803 zum Aufladen der Lithium-Ionen-Akkus verwenden.
- Ladegerät **40** anschließen: Gerätestecker der Netzanschlussleitung in Ladegerät stecken.
- Netzstecker der Netzanschlussleitung in Steckdose stecken.
- Li-Ionen-Akku **39** in Ladeschacht des Ladegeräts stecken und aufladen, siehe Abb. F.

Die LEDs der Ladezustandsanzeige **d** des Li-Ionen-Akku blinken gemäß dem aktuellen Ladestatus. Wenn alle LEDs dauerhaft leuchten, ist der Akku vollständig geladen.

### 4.4 Li-Ionen-Akku wechseln

- Akku-Schermaschine **g** mit dem Scherkopf nach unten halten, damit der Li-Ionen-Akku **39** beim Lösen nicht herunterfällt, siehe Abb. 1.
- Akkuverriegelung **f** mit dem Daumen lösen.

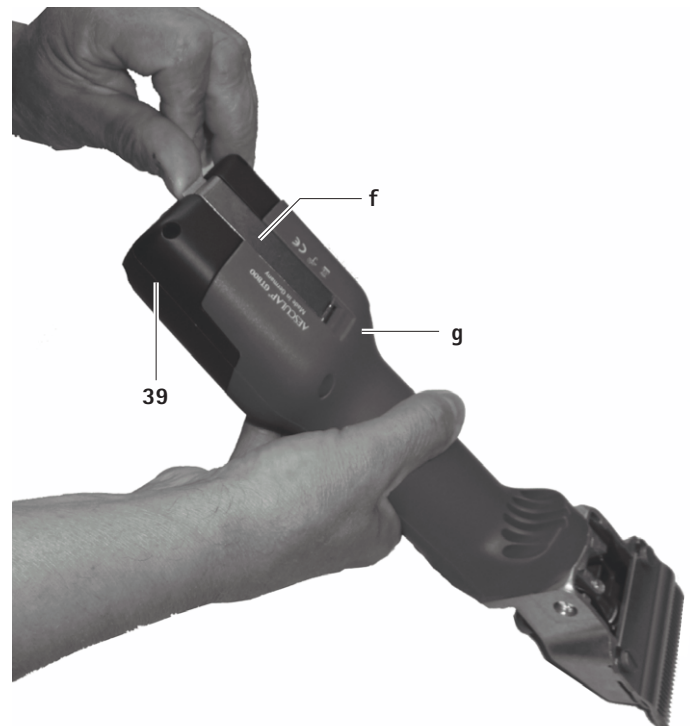


Abb. 1

## Rinder- und Pferdeschermaschine Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Li-Ionen-Akku **39** herausziehen, laden und/oder geladenen Ersatz-Li-Ionen-Akku GT801 in Akku-Schermaschine **g** schieben, siehe Abb. 2.



Abb. 2

- Li-Ionen-Akku **39** mit Akkuverriegelung **f** sichern, siehe Abb. 3.

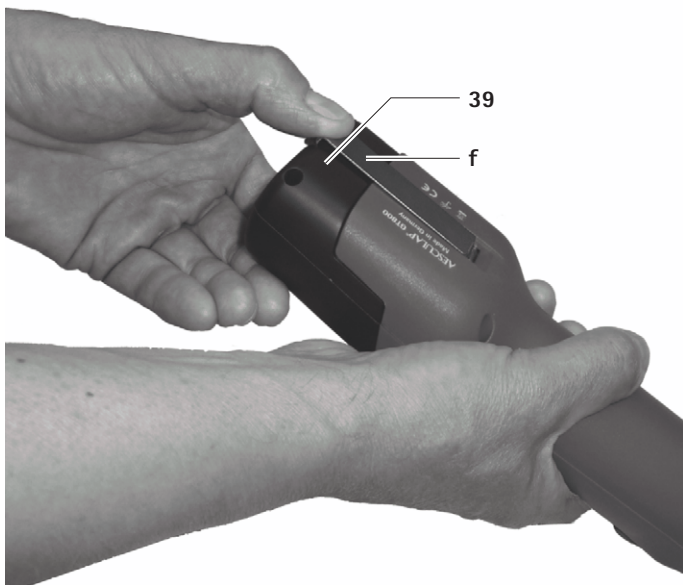


Abb. 3

### 4.5 Handhabung des Scherkopfs

#### Scherkopf ölen



**Beschädigung der Schermaschine oder des Scherkopfs durch falsches Ölen!**

- Scherkopf nur bei laufender Maschine ölen.
- Maschine und Scherkopf nicht in Flüssigkeiten tauchen.
- Nur Leichtschmieröl GT604 verwenden.

- Scherkopf über Ölstelle **a** vor jedem Tier reichlich ölen, siehe Abb. A.
- Federblätter **10** 2–3 mal täglich mit 3–4 Tropfen ölen, siehe Abb. C.

#### Zahnrad fetten



**Beschädigung der Schermaschine oder des Zahnrad durch falsches Fetten!**

- Nur Getriebefett GT605 verwenden.
- Zahnrad 1–2 mal je Schursaison fetten.

- Li-Ionen-Akku **39** entriegeln und entfernen.
- Beide Schrauben **6** herausdrehen, siehe Abb. B.
- Bei Blick auf den Scherkopf diesen um ca. 15° nach links verdrehen und vom Motorgehäuse abnehmen.
- Ca. 1 cm Fett auf zwei gegenüberliegende Stellen des Zahnrad **11** auftragen, siehe Abb. C.
- Scherkopf vorsichtig auf den Motor stecken. Dabei sicherstellen, dass der Scherkopf um ca. 15° nach links verdreht aufgesteckt wird und die untere Nase in die Nut des Motorgehäuses greift.

#### Schneideplatten wechseln

- Li-Ionen-Akku **39** entriegeln und entfernen.
- Rändelmutter **3** lösen und Regulierschraube **4** ca. 2 Umdrehungen herausdrehen, siehe Abb. A.
- Beide Klemmschrauben **9** lösen, die untere Schneideplatte **1** nach vorn abziehen und die obere Schneideplatte **2** entnehmen, siehe Abb. D und Abb. E.
- Vor dem Einlegen der oberen Schneideplatte **2** sicherstellen, dass sich Schwingklötzchen **8** in der dafür vorgesehenen Aussparung des Schwingers **7** befindet, siehe Abb. E.
- Obere Schneideplatte **2** einsetzen. Dabei sicherstellen, dass beide Spitzen **b** des Schwingers **7** genau in die Bohrungen **c** der oberen Schneideplatte **2** eingreifen, siehe Abb. D.
- Untere Schneideplatte **1** unter den Köpfen der Klemmschrauben **9** bis zum Anschlag an das Scherkopfgehäuse schieben und beide Klemmschrauben **9** festziehen.
- Regulierschraube **4** eindrehen, bis beide Schneideplatten leicht aufeinanderdrücken, siehe Abb. A.



## Plattendruck einstellen

### Hinweis

Die Einstellung des Plattendrucks muss bei laufender Maschine und ohne Hilfswerkzeuge erfolgen.

### Hinweis

Ein zu hoher Plattendruck führt zu hoher Erwärmung und einem größeren Verschleiß der Schneideplatten.

- Rändelmutter **3** lösen und Regulierschraube **4** vorsichtig herausdrehen, bis die obere Schneideplatte **2** nicht mehr auf die untere Schneideplatte **1** gedrückt wird (heller Laufton), siehe Abb. A.
- Regulierschraube **4** hineindrehen, bis ein leichter Widerstand spürbar wird. Ab hier noch ca. eine Umdrehung weiterdrehen und danach Rändelmutter **3** anziehen.

## Scherkopf reinigen

- Scherkopf mindestens nach einigen Tagen Schurzeit oder bei Verschmutzung reinigen.
- Li-Ionen-Akku **39** entriegeln und entfernen.
- Beide Schrauben **6** herausdrehen, siehe Abb. B.
- Bei Blick auf den Scherkopf diesen um ca. 15° nach links verdrehen und vom Motorgehäuse abnehmen.
- Schneideplatten abnehmen, siehe Schneideplatten wechseln.
- Innenraum und Einzelteile des Scherkopfs gründlich mit einer Bürste oder einem Pinsel reinigen.
- Schneideplatten einlegen und festziehen, siehe Schneideplatten wechseln.
- Zahnrad fetten, siehe Zahnrad fetten.
- Scherkopf vorsichtig auf den Motor stecken. Dabei sicherstellen, dass der Scherkopf um ca. 15° nach links verdreht aufgesteckt wird und die untere Nase in die Nut des Motorgehäuses greift.
- Scherkopf ölen, siehe Scherkopf ölen.

## Luftfilter reinigen

- Luftfilter **37/38** mindestens einmal täglich oder bei Verschmutzung reinigen.
- Luftfilter **37/38** von der Akku-Schermaschine abnehmen, siehe Abb. G.
- Luftfilter **37/38** gründlich in warmem Wasser mit einer Bürste reinigen.
- Luftfilter **37/38** trocknen lassen.
- Akku-Schermaschine säubern.
- Luftfilter **37/38** auf die Akku-Schermaschine stecken.

## Schneideplatten nachschleifen

- Zum Nachschleifen der Schneideplatten an den Technischen Service wenden, siehe Technischer Service.

## 4.6 Lagerung

- Schermaschine und Schneideplatten vor der Lagerung gut reinigen, siehe Aufbereitung.
- Schermaschine in einem trockenen, dunklen und sauberen Raum lagern.

# 5. Schneideplatten

## 5.1 Schneideplatten passend zu Scherkopf GT367

Art.-Nr.	Bezeichnung
GT501	Obere Schneideplatte mit 15 Zähnen
GT502	Untere Schneideplatte mit 31 Zähnen, Schnitthöhe 3 mm
GT503	Obere Schneideplatte mit 17 Zähnen
GT504	Untere Schneideplatte mit 18 Zähnen, Schnitthöhe 3 mm
GT505	Obere Schneideplatte mit 23 Zähnen
GT506	Untere Schneideplatte mit 23 Zähnen, Schnitthöhe 3 mm
GT508	Untere Schneideplatte mit 51 Zähnen, Schnitthöhe 1 mm
GT510	wie GT506, jedoch Schnitthöhe 5 mm
GT511	wie GT502, jedoch Schnitthöhe 1 mm

## 5.2 Empfohlene Kombinationen

Kombination	Ober-/Unterplatte	Geeignet für
eng gezahnt	GT501/GT502	Rinder und Pferde (Normalausstattung von GT474 und GT367)
	GT501/GT511	Industrielle Schur
	GT505/GT508	(z. B. Pelzschur)
mittel gezahnt	GT505/GT506	Rinder, Hunde und Ziegen
	GT505/GT510	Hunde und Ziegen
weit gezahnt	GT503/GT504	Rinder, feinwollige Schafe und Einzelschafe

## 6. Aufbereitung

### 6.1 Reinigung/Desinfektion



#### Stromschlag- und Brandgefahr!

- **Vor der Reinigung:**
  - Netzstecker vom Ladegerät ziehen.
  - Li-Ionen-Akku entriegeln und aus Akku-Schermaschine entfernen.
- Keine brennbaren und explosiven Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwenden.
- Sicherstellen, dass keine Flüssigkeit in das Produkt eindringt.



#### Beschädigung oder Zerstörung des Produkts durch maschinelle Reinigung/Desinfektion!

- Produkt nur manuell reinigen/desinfizieren.
- Produkt niemals sterilisieren.



#### Schäden am Produkt durch ungeeignete Reinigungs-/Desinfektionsmittel!

- Für die Flächenreinigung zugelassene Reinigungs-/Desinfektionsmittel nach Anweisung des Herstellers verwenden.
- Produkt nie in Wasser oder Reinigungsmittel legen.
- Keine Flüssigkeit in die Ladeschächte einbringen.
- Kontakte im Ladeschacht mit größter Sorgfalt reinigen.

- Gehäuse des Produkts mit einem flusenfreien Tuch, das mit einem handelsüblichen Mittel zur Wischdesinfektion befeuchtet ist, abwischen.
- Bei Bedarf Rückstände des Reinigungs- und Desinfektionsmittels nach dessen Einwirkzeit mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten, flusenfreien Tuch abwischen.
- Zum Trocknen sauberes, flusenfreies Tuch verwenden.
- Kontakte in den Ladeschächten mit Isopropanol bzw. Äthylalkohol und einem Wattestäbchen reinigen. Keine korrosionsfördernden Chemikalien verwenden.
- Falls nötig, Reinigung/Desinfektion wiederholen.

### 6.2 Kontrolle und Prüfung

- Produkt auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Produkt nach jeder Reinigung und Desinfektion prüfen auf: Sauberkeit, Funktion und Beschädigung.
- Produkt auf Beschädigungen, unregelmäßige Laufgeräusche, übermäßige Erwärmung oder zu starke Vibration prüfen.
- Scherkopf auf abgebrochene, beschädigte und stumpfe Schneiden kontrollieren.
- Beschädigtes Produkt sofort aussortieren.

## 7. Wartung

Um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, empfiehlt Aesculap eine Wartung **mindestens einmal jährlich**.



## 8. Fehler erkennen und beheben

### 8.1 Akku-Schermaschine Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Störung	Erkennung	Ursache	Behebung
Akku-Schermaschine läuft nicht an	-	Li-Ionen-Akku nicht aktiviert	Taster e auf Li-Ionen-Akku betätigen
	LED von Ein-/Aus-Taster <b>36</b> blinkt zweimal pro Sekunde	Li-Ionen-Akku nicht geladen	Li-Ionen-Akku laden
	-	Li-Ionen-Akku defekt	Neuen Li-Ionen-Akku einsetzen
	-	Li-Ionen-Akku nicht eingesetzt	Li-Ionen-Akku einsetzen
Akku-Schermaschine bleibt während des Betriebs stehen	-	Li-Ionen-Akku durch Schutzschaltung abgeschaltet	Akku-Schermaschine aus- und einschalten
	-	Li-Ionen-Akku ist leer	Neuen Li-Ionen-Akku einsetzen

## 8.2 Ladegerät und Li-Ionen-Akku

Störung	Erkennung	Ursache	Behebung
Ladegerät ohne Funktion	LED-Anzeige "Akku" leuchtet nicht	Netzanschlussleitung nicht eingesteckt	Netzanschlussleitung in Gerätestecker am Ladegerät und in die Steckdose des Versorgungsnetzes stecken
	Li-Ionen-Akku nicht geladen	Netzanschlussleitung defekt	Netzanschlussleitung austauschen
		Li-Ionen-Akku defekt	Li-Ionen-Akku beim Hersteller instand setzen lassen, siehe Technischer Service
Li-Ionen-Akku wird nicht geladen	Li-Ionen-Akku eingesteckt, Ladezustandsanzeige leuchtet nicht	Kontakte des Ladegeräts verschmutzt	Kontakte im Ladeschacht reinigen, siehe Aufbereitung
	-	Kontakte des Ladegeräts beschädigt	Ladegerät beim Hersteller instand setzen lassen, siehe Technischer Service
	-	Li-Ionen-Akku defekt	Li-Ionen-Akku beim Hersteller instand setzen lassen, siehe Technischer Service
	-	Ladegerät defekt	Ladegerät beim Hersteller instand setzen lassen, siehe Technischer Service
	-	Während des Ladevorgangs wird im Li-Ionen-Akku eine zu hohe Temperatur gemessen	Li-Ionen-Akku aus Ladeschacht nehmen, abkühlen lassen und Ladevorgang wiederholen
			Bei erneuter Störung: Li-Ionen-Akku beim Hersteller instand setzen lassen, siehe Technischer Service
-	Ladestörung bzw. Li-Ionen-Akku defekt	Li-Ionen-Akku aus Ladeschacht nehmen und Ladevorgang wiederholen	
		Bei erneuter Störung: Li-Ionen-Akku beim Hersteller instand setzen lassen, siehe Technischer Service	





## 9. Technischer Service



**Verletzungsgefahr und/oder Fehlfunktion!**

➤ **Produkt nicht modifizieren.**

### Service-Adressen

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach / Germany

Phone: +49 (0) 8086 933-100

Fax: +49 (0) 8086 933-500

E-Mail: [info@kerbl.com](mailto:info@kerbl.com)

[www.kerbl.com](http://www.kerbl.com)

Weitere Service-Adressen erfahren Sie über die oben genannte Adresse.

Modifikationen an medizintechnischer Ausrüstung können zu einem Verlust der Garantie-/Gewährleistungsansprüche sowie eventueller Zulassungen führen.

## 10. Zubehör/Ersatzteile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Netzkabel oder Netzteil	Li-Ionen-Akku	Ladestation komplett	Zubehör
GT804/ GT806	Econom CL	Europa außer Groß- britannien	TA012170 Europa-Flachstecker, schwarz, L=1,8 m	GT801	GT803	GT604 Spezialöl für Schneideplatten und Scherkopf  GT605 Getriebefett (Tube)
GT814/ GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT804G/ GT806G	Econom CL	Großbritan- nien	TA012169 GB-Stecker schwarz, L=1,8 m			
GT814G/ GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT804K/ GT806K	Econom CL	USA	TA012168 2-poliger-Gerätstecker, schwarz, L=1,8 m			
GT814K/ GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT804A/ GT806A	Econom CL	Australien	TA013657 2-poliger-Gerätstecker, schwarz, L=1,8 m			
GT814A/ GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

## 11. Technische Daten

### 11.1 Akku-Schermaschine Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

	<b>GT800 Econom CL</b>	<b>GT810 Econom CL Equipe</b>	<b>GT834 Econom CL Fitter</b>
Hubzahl	max. 2 750 1/min	max. 2 250 1/min	max. 3 000 1/min
Laufzeit mit einem Li-Ionen- Akku	ca. 70 min	ca. 80 min	ca. 70 min
Nominale Span- nung	max. 21,6 V	max. 21,6 V	max. 21,6 V
Kapazität	max. 2,6 A	max. 2,6 A	max. 2,6 A
Gewicht (mit Scherkopf und Akku)	1 250 g	1 250 g	1 250 g
Prüfzeichen	TÜV-GS, CE, UL, CSA	TÜV-GS, CE, UL, CSA	CE, UL, CSA


### 11.2 Ladegerät

	<b>GT803</b>
Netzspannungsbereiche (Stromaufnahme)	100 V bis 240 V
Frequenz	50 Hz bis 60 Hz
Lade-/Ausgangsspannung	max. 25,2 V
Lade-/Ausgangsstrom	max. 2,6 A
Gewicht (mit Kabel und Netzteil)	764 g
Prüfzeichen	TÜV-GS, CE, UL, CSA

### 11.3 Li-Ionen-Akku

	<b>GT801</b>
Zellentyp	Li
Nominalspannung	21,6 V
Kapazität	2,6 Ah
Ladezeit	ca. 70 min
Prüfzeichen	TÜV-GS, CE, UL, CSA


## 11.4 Komformitätserklärung

	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: 2004/108/EG EMV-Richtlinie: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-8 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – allgemeine Anforderungen – für Haarschneidemaschinen Aesculap Suhl GmbH
---	---

## 12. Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackung sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

### 12.1 Nur für EU-Länder

	Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
---	---

### 12.2 Li-Ionen-Akku

Li-Ionen-Akkus nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder Wasser werfen. Defekte oder verbrauchte Li-Ionen-Akkus müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG gesammelt, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.



## 13. 2 Jahre Gewährleistung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
herzlichen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.

Der Name Aesculap steht seit Jahrzehnten für geprüfte Qualität und erstklassigen Service. Unseren Kunden bieten wir innovative und leistungsfähige Produkte. Aesculap stellt hochwertige Geräte her und sichert Ihnen die Verwendung hochwertigen Materials und sorgfältiger Herstellung zu. Gerne möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir für Sachmängel unserer Produkte nicht haften, wenn diese durch unsachgemäßen Gebrauch, normalen Verschleiß oder dadurch entstehen, dass das Produkt unsachgemäß verwendet wird oder nicht passende oder nicht einwandfrei funktionierende Fremdprodukte eingesetzt werden.

Teile, die typischerweise dem Verschleiß unterliegen, und für die wir deshalb nicht haften, sind der Akku und der Scherkopf. Ebenfalls ausgenommen sind Sachmängel, die den Wert oder die Funktion nicht oder nur unerheblich beeinflussen.

Sollten wir im Rahmen unserer Gewährleistung haften, behalten wir uns vor, das Produkt zu reparieren oder auszutauschen.



Tondeuse Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter pour la tonte des bovins et chevaux

Vue d'ensemble

Repère	Art. n°	Nombre	Désignation
1	GT502	1	Peigne (GT804–GT816/GT834)
2	GT501	1	Contre-peigne (GT804/GT806/GT834)
	GT505	1	Contre-peigne (GT814/GT816)
3	GT610405	1	Ecrou moleté
4	GT367205	1	Vis de réglage
6	TA010017	2	Vis
7	GT367201	1	Oscillateur
8	GT610304	1	Plot d'oscillation
9	GT610010	2	Vis de blocage
10	GT367202	6	Lame de ressort d'oscillation
11	GT367812	1	Roue dentée avec axe excentrique
15	TA008295	2	Broche de guidage
16	GT367801	1	Boîtier de tête de tonte monté
17	TA005091	2	Vis
18	GT367802	1	Entretoise gauche
19	GT367803	1	Entretoise droite
20	TA007765	1	Vis à tête conique
25	GT610307	1	Pont élastique
26	GT367207	1	Vis de fixation
27	GT367804	1	Oscillateur monté
35	TA009222	1	Tournevis
36	GT800249	1	Bouton marche/arrêt (avec DEL)
37	GT800804	1	Filtre à air (bleu) Econom CL
38	GT800844	1	Filtre à air (bordeaux) Econom CL Equipe
39	GT801	1	Accu lithium-ion
40	GT803	1	Chargeur
a	-	1	Point de lubrification de tondeuse à accu
b	-	1	Pointes de l'oscillateur
c	-	1	Orifices du contre-peigne
d	-	1	Indicateur d'état de charge de l'accu Li-ion
e	-	1	Touche de l'accu Li-ion
f	-	1	Verrouillage de l'accu
g	GT800/ GT810	1	Tondeuse à accu

Repère	Art. n°	Nombre	Désignation
-	GT604	1	Huile spéciale pour tête de tonte et peignes et contre-peignes
	GT605	1	Graisse d'engrenage (tube)

Symboles sur le produit

	Attention, symbole général de mise en garde Attention, tenir compte des documents d'accompagnement
	Marquage des appareils électriques et électroniques conformément à la directive 2012/19/UE (DEEE), voir Elimination

Sommaire

1.	Manipulation sûre .....	27
2.	Description de l'appareil .....	27
2.1	Etendue de la livraison .....	27
2.2	Composants nécessaires à l'utilisation .....	27
2.3	Champ d'application .....	27
2.4	Mode de fonctionnement .....	28
3.	Préparation .....	28
4.	Utilisation de la tondeuse à accu, du chargeur et de l'accu Li-ion .....	28
4.1	Préparation .....	28
4.2	Contrôle de fonctionnement .....	28
4.3	Branchement du chargeur et recharge de l'accu Li-ion .....	29
4.4	Changement d'accu Li-ion .....	29
4.5	Manipulation de la tête de tonte .....	30
4.6	Rangement .....	31
5.	Peignes et contre-peignes .....	31
5.1	Peignes et contre-peignes pour tête de tonte GT367 .....	31
5.2	Combinaisons recommandées .....	31
6.	Traitement stérile .....	32
6.1	Nettoyage/désinfection .....	32
6.2	Contrôle et vérification .....	32
7.	Maintenance .....	32
8.	Identification et élimination des pannes .....	33
8.1	Tondeuse à accu Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter .....	33
8.2	Chargeur et accu Li-ion .....	34
9.	Service Technique .....	35
10.	Accessoires/pièces de rechange .....	35
11.	Caractéristiques techniques .....	36
11.1	Tondeuse à accu Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter .....	36
11.2	Chargeur .....	36
11.3	Accu Li-ion .....	36
11.4	Déclaration de conformité .....	36
12.	Elimination .....	36
12.1	Uniquement pour les pays de l'UE .....	36
12.2	Accu Li-ion .....	36
13.	2 ans de garantie .....	37



## 1. Manipulation sûre



DANGER

### Danger de mort par électrocution!

- Ne pas ouvrir le produit.
- Ne raccorder le produit qu'à un réseau d'alimentation avec fil de protection.

- Vérifier le bon fonctionnement et le bon état du produit avant de l'utiliser.
- Conserver le chargeur et les accus Li-ion à température ambiante.
- Maintenir le chargeur et les accus Li-ion au sec.
- Charger les accus Li-ion avant la première utilisation.
- Pour éviter les dommages provoqués par un montage ou une utilisation incorrects et ne pas remettre en cause les droits à prestations de garantie et la responsabilité:
  - N'utiliser ce produit que conformément au présent mode d'emploi.
  - Respecter les informations sur la sécurité et les consignes de maintenance.
  - Ne combiner entre eux que des produits Aesculap.
- Le mode d'emploi doit être conservé en un lieu accessible à l'utilisateur.
- Respecter les normes en vigueur.
- Veiller à ce que l'installation électrique du local soit conforme aux prescriptions CEI.
- Pour débrancher l'appareil du secteur, tirer sur la fiche de l'appareil et jamais sur le câble.
- Ne pas utiliser le produit dans des zones à risque d'explosion.
- Ne jamais utiliser un produit endommagé ou défectueux. Mettre immédiatement au rebut tout produit endommagé.

## 2. Description de l'appareil

### 2.1 Etendue de la livraison

Art. n°	Désignation
GT800 GT810 GT834	Tondeuse à accu Econom CL, Econom CL Equipe ou Econom CL Fitter
GT801	Accu Li-ion
GT803	Chargeur
voir Accessoires/ pièces de rechange	Câble d'alimentation électrique (avec fiche côté appareil)
TA013895	Mode d'emploi
GT604	Burette d'huile

### 2.2 Composants nécessaires à l'utilisation

- Tondeuse à accu Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter
- Chargeur
- Câble d'alimentation électrique (avec fiche côté appareil)
- Accu Li-ion

### 2.3 Champ d'application

#### Tondeuse à accu Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

La tondeuse à accu Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter s'utilise pour la tonte des grands animaux tels que les bovins, chevaux et gros chiens.

#### Chargeur GT803/accu Li-ion GT801

Le chargeur GT803 s'utilise pour charger l'accu Li-ion GT801.

## 2.4 Mode de fonctionnement

### Tondeuse à accu Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

La mise en marche et l'arrêt de la tondeuse à accu Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter s'effectuent en actionnant le bouton marche/arrêt **36**.

#### Remarque

Pour éviter une mise en marche ou un arrêt involontaires de la tondeuse, le bouton marche/arrêt ne réagit qu'après un actionnement >0,5 s.

### Chargeur GT803/accu Li-ion GT801

Le chargeur GT803 est conçu pour une plage de tension secteur de 100 à 240 V et une fréquence de 50 à 60 Hz.

Pour être prêt à fonctionner, le chargeur GT803 doit être raccordé au réseau d'alimentation électrique par la fiche secteur.

Le chargeur GT803 possède un compartiment de recharge.

Le processus de recharge démarre automatiquement lorsque l'accu Li-ion est placé dans la station de recharge.

La durée de recharge dépend de l'état de charge et de la capacité de l'accu Li-ion.

#### Principe de mise en charge

Les accus Li-ion sont rechargés par des impulsions électriques constantes. L'état de charge de l'accu Li-ion est surveillé pendant la recharge. La surveillance de la courbe de charge garantit une recharge à 100 % sans surcharge.

La température de l'accu et la durée de recharge sont également contrôlées.

L'indicateur d'état de charge **d** de l'accu Li-ion comporte 5 DEL. Chaque DEL représente 20 % du volume de charge. Lorsque l'accu est en charge, la DEL correspondant à l'état de charge atteint clignote. Quand toutes les DEL restent allumées de manière fixe, l'accu est entièrement rechargé.

#### Temps de charge

Le processus de recharge est interrompu si le temps de charge maximum est atteint. Le temps de charge est d'environ 70 min.

## 3. Préparation

Si les prescriptions suivantes ne sont pas respectées, Aesculap décline toute responsabilité.

- Pour installer et faire fonctionner le produit, observer:
  - les réglementations nationales relatives à l'installation et à l'exploitation,
  - les réglementations nationales relatives à la protection contre les incendies et les explosions,
  - les consignes d'utilisation conformément aux dispositions des normes CEI/VDE.

## 4. Utilisation de la tondeuse à accu, du chargeur et de l'accu Li-ion

### 4.1 Préparation

#### Raccordement des accessoires

Les combinaisons d'accessoires non mentionnées dans le mode d'emploi ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément prévues pour l'application projetée. Ceci ne doit pas porter préjudice aux caractéristiques de puissance ni aux exigences de sécurité.

### 4.2 Contrôle de fonctionnement

#### Tondeuse à accu Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Effectuer un contrôle visuel.
- S'assurer que le filtre à air **37/38** est correctement posé, voir Fig. G.
- Insérer l'accu Li-ion **39** dans le compartiment de la tondeuse et le verrouiller.
- Contrôler l'état de charge de l'accu: Appuyer sur la touche **e**, voir Fig. F.
- L'indicateur d'état de charge **d** indique l'état de charge.

#### Remarque

Pour éviter que l'accu Li-ion ne se décharge lorsque la tondeuse n'est pas utilisée, la connexion électronique entre l'accu Li-ion et la commande de la tondeuse à accu s'interrompt au bout de 1 h.

- Réactivation de l'accu Li-ion **39**: actionner la touche **e**, voir Fig. F.  
Toutes les DEL de l'indicateur d'état de charge **d** s'allument.

#### Chargeur/accu Li-ion

- Effectuer un contrôle visuel.
- Avant de brancher le produit au réseau d'alimentation électrique:
  - Vérifier l'absence d'éventuels dégâts sur le câble d'alimentation électrique.
  - Contrôler l'absence d'éventuelles détériorations du produit (p. ex. contacts tordus dans le compartiment de recharge).
- Ficher le câble d'alimentation électrique dans la prise de la station de recharge.
- Brancher la fiche secteur dans la prise du réseau d'alimentation électrique.
- Poser l'accu Li-ion **39** dans le compartiment de recharge du chargeur et le recharger, voir Fig. F.



### 4.3 Branchement du chargeur et recharge de l'accum Li-ion



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de court-circuit des pôles provoqué par un liquide ou des pièces métalliques!

- Ne pas court-circuiter l'accum Li-ion.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures par un câble d'alimentation électrique endommagé!

- Contrôler l'absence de dégâts sur le câble d'alimentation électrique avant d'utiliser le chargeur.
- Faire remplacer par le fabricant tout câble d'alimentation électrique endommagé.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et de dégâts matériels avec un accum Li-ion endommagé!

- Contrôler l'absence de dégâts sur l'accum Li-ion avant de le recharger.
- Ne pas utiliser ni recharger un accum Li-ion endommagé.



ATTENTION

Risque de perte de capacité ou de performances de l'accum Li-ion déchargé du fait d'un stockage prolongé!

- Ne stocker l'accum Li-ion pendant une période prolongée qu'entièrement rechargé et le recharger une fois par mois.



ATTENTION

Risque de détérioration irréversible du produit, du compartiment de recharge ou de l'accum Li-ion en cas d'insertion d'un type d'accum inadapté dans le compartiment de recharge!

- N'insérer l'accum Li-ion que dans le compartiment de recharge prévu à cet effet.

#### Remarque

Le chargeur peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience et des connaissances nécessaires s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation en sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers qui en résultent.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne pas laisser des enfants sans surveillance effectuer le nettoyage et l'entretien du chargeur.

#### Remarque

L'accum Li-ion chauffe légèrement pendant le processus de recharge.

#### Remarque

Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, le câble d'alimentation électrique doit être débranché de la prise secteur.

- N'utiliser que le chargeur GT803 pour recharger l'accum lithium-ion.
- Branchement du chargeur 40: enfoncer la fiche côté appareil du câble d'alimentation électrique dans le chargeur.
- Enfoncer la fiche secteur du câble d'alimentation électrique dans la prise secteur.
- Ficher l'accum Li-ion 39 dans le compartiment de recharge du chargeur et le recharger, voir Fig. F.

Les DEL de l'indicateur d'état de charge **d** de l'accum Li-ion clignotent conformément à l'état de charge réel. Quand toutes les DEL restent allumées de manière fixe, l'accum est entièrement rechargé.

### 4.4 Changement d'accum Li-ion

- Tenir la tondeuse à accum **g** tête de tonte vers le bas, de façon à ce que l'accum Li-ion **39** ne tombe pas lors du déverrouillage, voir Fig. 1.
- Débloquer le verrouillage d'accum **f** avec le pouce.



Fig. 1

## Tondeuse Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter pour la tonte des bovins et chevaux

- Retirer l'accu Li-ion **39**, le charger et/ou insérer un accu Li-ion GT801 de recharge dans la tondeuse à accu **g**, voir Fig. 2.



Fig. 2

- Bloquer l'accu Li-ion **39** avec le verrouillage d'accu **f**, voir Fig. 3.

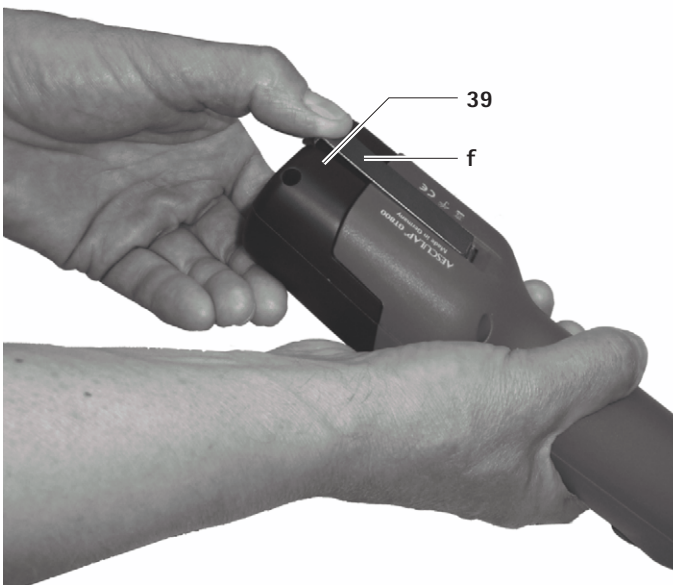


Fig. 3

### 4.5 Manipulation de la tête de tonte

#### Huilage de la tête de tonte



ATTENTION

Risque d'endommagement de la tondeuse ou de la tête de tonte en cas d'huilage incorrect!

- Ne procéder à l'huilage de la tête de tonte que lorsque la tondeuse est en marche.
- Ne pas plonger la tondeuse ni la tête de tonte dans des liquides.
- N'utiliser que l'huile lubrifiante légère GT604.

- Huiler abondamment la tête de tonte au niveau du point de lubrification **a** avant chaque animal, voir Fig. A.
- Huiler les lames de ressort **10** 2 à 3 fois par jour avec 3 à 4 gouttes d'huile, voir Fig. C.

#### Graissage de la roue dentée



ATTENTION

Risque d'endommagement de la tondeuse ou de la roue dentée en cas de graissage incorrect!

- N'utiliser que la graisse d'engrenage GT605.
- Graisser la roue dentée 1 à 2 fois par saison de tonte.

- Déverrouiller et enlever l'accu Li-ion **39**.
- Dévisser les deux vis **6**, voir Fig. B.
- En regardant la tête de tonte, tourner celle-ci d'environ 15° sur la gauche et la retirer du boîtier du moteur.
- Appliquer environ 1 cm de graisse sur deux points diamétralement opposés de la roue dentée **11**, voir Fig. C.
- Emboîter prudemment la tête de tonte sur le moteur. Veiller ce faisant à emboîter la tête de tonte en la présentant tournée d'environ 15° sur la gauche et faire attention à ce que l'ergot inférieur s'engage dans la rainure du boîtier du moteur.

#### Remplacement des peignes et contre-peignes

- Déverrouiller et enlever l'accu Li-ion **39**.
- Desserrer l'écrou moleté **3** et dévisser la vis de réglage **4** d'environ 2 tours, voir Fig. A.
- Desserrer les deux vis de blocage **9**, tirer le peigne **1** vers l'avant et enlever le contre-peigne **2**, voir Fig. D et Fig. E.
- Avant de poser le contre-peigne **2**, s'assurer que le plot d'oscillation **8** se trouve dans l'évidement prévu à cet effet sur l'oscillateur **7**, voir Fig. E.
- Mettre en place le contre-peigne **2**. S'assurer ce faisant que les deux pointes **b** de l'oscillateur **7** s'engagent exactement dans les orifices **c** du contre-peigne **2**, voir Fig. D.
- Pousser le peigne **1** sous la tête des vis de blocage **9** jusqu'à la butée sur le boîtier de tête de tonte et serrer à fond les deux vis de blocage **9**.
- Visser la vis de réglage **4** jusqu'à ce que le peigne et le contre-peigne soient légèrement pressés l'un contre l'autre, voir Fig. A.





## Réglage de la pression du contre-peigne sur le peigne

### Remarque

Le réglage de la pression du contre-peigne sur le peigne doit être effectué tondeuse en marche, sans outils.

### Remarque

Une pression trop élevée du contre-peigne sur le peigne entraînera un échauffement accru et une usure plus prononcée du peigne et du contre-peigne.

- Desserrer l'écrou moleté **3** et dévisser prudemment la vis de réglage **4** jusqu'à ce que le contre-peigne **2** ne soit plus pressé sur le peigne **1** (bruit de fonctionnement plus clair), voir Fig. A.
- Visser la vis de réglage **4** jusqu'à ce qu'une légère résistance soit perceptible. A partir de ce point, donner encore environ un tour à la vis, puis serrer l'écrou moleté **3**.

## Nettoyage de la tête de tonte

- Nettoyer la tête de tonte au minimum au bout de quelques jours de tonte ou si elle s'encrasse.
- Déverrouiller et enlever l'accu Li-ion **39**.
- Dévisser les deux vis **6**, voir Fig. B.
- En regardant la tête de tonte, tourner celle-ci d'environ 15° sur la gauche et la retirer du boîtier du moteur.
- Retirer le peigne et le contre-peigne, voir Remplacement des peignes et contre-peignes.
- Nettoyer minutieusement l'intérieur et les différentes pièces de la tête de tonte avec une brosse ou un pinceau.
- Poser et serrer le peigne et le contre-peigne, voir Remplacement des peignes et contre-peignes.
- Graisser la roue dentée, voir Graissage de la roue dentée.
- Emboîter prudemment la tête de tonte sur le moteur. Veiller ce faisant à emboîter la tête de tonte en la présentant tournée d'environ 15° sur la gauche et faire attention à ce que l'ergot inférieur s'engage dans la rainure du boîtier du moteur.
- Huiler de la tête de tonte, voir Huilage de la tête de tonte.

## Nettoyage du filtre à air

- Nettoyer le filtre à air **37/38** au moins une fois par jour ou en cas d'encrassement.
- Retirer le filtre à air **37/38** de la tondeuse à accu, voir Fig. G.
- Nettoyer minutieusement le filtre à air **37/38** dans de l'eau tiède avec une brosse.
- Laisser le filtre à air **37/38** sécher.
- Nettoyer la tondeuse à accu.
- Insérer le filtre à air **37/38** sur la tondeuse à accu.

## Affûtage des peignes et contre-peignes

- Pour l'affûtage des peignes et contre-peignes, s'adresser au Service Technique, voir Service Technique.

## 4.6 Rangement

- Bien nettoyer la tondeuse et les peignes et contre-peignes avant de les ranger, voir Traitement stérile.
- Ranger la tondeuse dans un endroit sec, sombre et propre.

# 5. Peignes et contre-peignes

## 5.1 Peignes et contre-peignes pour tête de tonte GT367

Art. n°	Désignation
GT501	Contre-peigne à 15 dents
GT502	Peigne à 31 dents, hauteur de coupe 3 mm
GT503	Contre-peigne à 17 dents
GT504	Peigne à 18 dents, hauteur de coupe 3 mm
GT505	Contre-peigne à 23 dents
GT506	Peigne à 23 dents, hauteur de coupe 3 mm
GT508	Peigne à 51 dents, hauteur de coupe 1 mm
GT510	Comme GT506 mais avec une hauteur de coupe de 5 mm
GT511	Comme GT502 mais avec une hauteur de coupe de 1 mm

## 5.2 Combinaisons recommandées

Combinaison	Contre-peigne/ peigne	Convient pour
denture étroite	GT501/GT502	Bovins et chevaux (équipement normal de GT474 et GT367)
	GT501/GT511	Tonte industrielle
	GT505/GT508	(p. ex. tonte des fourrures)
denture moyenne	GT505/GT506	Bovins, chiens et caprins
	GT505/GT510	Chiens et caprins
denture large	GT503/GT504	Bovins, ovins à poils fins et moutons individuels

## Tondeuse Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter pour la tonte des bovins et chevaux

### 6. Traitement stérile

#### 6.1 Nettoyage/désinfection



DANGER

**Risque d'électrocution et d'incendie!**

- **Avant le nettoyage:**
  - Débrancher la fiche du chargeur.
  - Déverrouiller l'accu Li-ion et le retirer de la tondeuse à accu.
- **Ne pas utiliser de produits de nettoyage et de désinfection inflammables et explosifs.**
- **Veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans le produit.**



ATTENTION

**Risque d'endommagement ou de détérioration irréversible du produit par un nettoyage ou une désinfection en machine!**

- **Ne nettoyer/désinfecter le produit que manuellement.**
- **Ne jamais stériliser le produit.**



ATTENTION

**Risque de détérioration du produit du fait d'un produit de nettoyage/désinfection inadéquat!**

- **Utiliser uniquement des produits de nettoyage/désinfection agréés pour le nettoyage des surfaces en respectant les instructions du fabricant.**
  - **Ne jamais plonger le produit dans de l'eau ou dans un produit nettoyant.**
  - **Ne pas faire pénétrer de liquide dans les compartiments de recharge.**
  - **Nettoyer avec le plus grand soin les contacts dans le compartiment de recharge.**
- Essuyer le boîtier du produit avec un chiffon non pelucheux imbibé d'un produit courant du commerce pour la désinfection par essuyage.
  - Si nécessaire, éliminer les résidus du produit de nettoyage et de désinfection à la fin de la durée d'action de celui-ci avec un chiffon non pelucheux humidifié à l'eau propre.
  - Pour le séchage, utiliser un chiffon propre non pelucheux.
  - Nettoyer les contacts dans les compartiments de recharge avec un coton-tige imbibé d'isopropanol ou d'alcool éthylique. Ne pas utiliser de produits chimiques favorisant la corrosion.
  - Si nécessaire, répéter le nettoyage/la désinfection.

#### 6.2 Contrôle et vérification

- Laisser refroidir le produit à la température ambiante.
- Après chaque nettoyage et désinfection, vérifier sur le produit les éléments suivants: propreté, bon fonctionnement et absence de détériorations.
- Contrôler sur le produit l'absence de détériorations, de bruits de fonctionnement irréguliers, d'échauffement excessif et de trop fortes vibrations.
- Vérifier que les tranchants de la tête de tonte ne sont pas cassés, endommagés ou émoussés.
- Mettre immédiatement au rebut tout produit endommagé.

### 7. Maintenance

Pour garantir un fonctionnement fiable, Aesculap recommande **au moins une maintenance par an.**



## 8. Identification et élimination des pannes

### 8.1 Tondeuse à accu Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Problème	Identification	Cause	Elimination
La tondeuse à accu ne démarre pas	-	Accu Li-ion non activé	Actionner la touche e sur l'accu Li-ion
	La DEL du bouton marche/arrêt 36 clignote deux fois par seconde	Accu Li-ion non chargé	Charger l'accu Li-ion
	-	Accu Li-ion défectueux	Insérer un nouvel accu Li-ion
	-	Accu Li-ion non inséré	Insérer l'accu Li-ion
La tondeuse à accu s'arrête en cours d'utilisation	-	Accu Li-ion mis en coupure par le disjoncteur de protection	Arrêter et remettre en marche la tondeuse à accu
	-	L'accu Li-ion est vide	Insérer un nouvel accu Li-ion

Tondeuse Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter pour la tonte des bovins et chevaux

8.2 Chargeur et accu Li-ion

Problème	Identification	Cause	Elimination
Chargeur inopérant	La DEL témoin "Accu" ne s'allume pas	Câble d'alimentation électrique non branché	Brancher le câble d'alimentation électrique sur le chargeur et le brancher dans la prise secteur
	Accu Li-ion non chargé	Câble d'alimentation électrique défectueux	Remplacer le câble d'alimentation électrique
		Accu Li-ion défectueux	Faire réparer l'accu Li-ion chez le fabricant, voir Service Technique
L'accu Li-ion ne se recharge pas	Accu Li-ion inséré, l'indicateur d'état de charge ne s'allume pas	Contacts du chargeur encrassés	Nettoyer les contacts du compartiment de recharge, voir Traitement stérile
	-	Contacts du chargeur endommagés	Faire réparer le chargeur chez le fabricant, voir Service Technique
	-	Accu Li-ion défectueux	Faire réparer l'accu Li-ion chez le fabricant, voir Service Technique
	-	Chargeur défectueux	Faire réparer le chargeur chez le fabricant, voir Service Technique
	-	Pendant le processus de charge, une température trop élevée est mesurée dans l'accu Li-ion	Retirer l'accu Li-ion du compartiment de recharge, le laisser refroidir et recommencer le processus de recharge
	-		En cas de nouveau problème: faire réparer l'accu Li-ion chez le fabricant, voir Service Technique
-	Problème de charge ou accu Li-ion défectueux	Retirer l'accu Li-ion du compartiment de recharge et recommencer le processus de recharge	
-		En cas de nouveau problème: faire réparer l'accu Li-ion chez le fabricant, voir Service Technique	



## 9. Service Technique



AVERTISSEMENT

**Risque de blessure et/ou de dysfonctionnement!**

➤ **Ne pas modifier le produit.**

Les modifications effectuées sur les équipements techniques médicaux peuvent entraîner une perte des droits à garantie de même que d'éventuelles autorisations.

### Adresses de service

Albert Kerbl GmbH  
Felizenzell 9  
84428 Buchbach / Germany  
Phone: +49 (0) 8086 933-100  
Fax: +49 (0) 8086 933-500  
E-Mail: [info@kerbl.com](mailto:info@kerbl.com)  
[www.kerbl.com](http://www.kerbl.com)

Pour obtenir d'autres adresses de service, contacter l'adresse ci-dessus.

## 10. Accessoires/pièces de rechange

Art. n°	Désignation	Version	Câble secteur ou bloc d'alimentation électrique	Accu Li-ion	Station de recharge complète	Accessoires
GT804/ GT806	Econom CL	Europe sauf Grande- Bretagne	TA012170 Fiche plate Europe, noir, L=1,8 m	GT801	GT803	GT604 Huile spéciale pour peignes et contre- peignes et tête de tonte  GT605 Graisse d'engrenage (tube)
GT814/ GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT804G/ GT806G	Econom CL	Grande- Bretagne	TA012169 Fiche GB, noir, L=1,8 m			
GT814G/ GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT804K/ GT806K	Econom CL	Etats-Unis	TA012168 Fiche côté appareil 2 broches, noir, L=1,8 m			
GT814K/ GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT804A/ GT806A	Econom CL	Australie	TA013657 Fiche côté appareil 2 broches, noir, L=1,8 m			
GT814A/ GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

Tondeuse Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter pour la tonte des bovins et chevaux

## 11. Caractéristiques techniques

### 11.1 Tondeuse à accu Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

	GT800 Econom CL	GT810 Econom CL Equipe	GT834 Econom CL Fitter
Nombre de courses	maxi. 2 750 1/min	maxi. 2 250 1/min	maxi. 3 000 1/min
Autonomie avec un accu Li-ion	env. 70 min	env. 80 min	env. 70 min
Tension nominale	21,6 V maxi.	21,6 V maxi.	21,6 V maxi.
Capacité	2,6 A maxi.	2,6 A maxi.	2,6 A maxi.
Poids (avec tête de tonte et accu)	1 250 g	1 250 g	1 250 g
Marquage de contrôle	TÜV-GS, CE, UL, CSA	TÜV-GS, CE, UL, CSA	CE, UL, CSA


### 11.2 Chargeur

	GT803
Plages de tension secteur (consommation de courant)	100 à 240 V
Fréquence	50 à 60 Hz
Tension de mise en charge/sortie	25,2 V maxi.
Intensité de mise en charge/sortie	2,6 A maxi.
Poids (avec câble et bloc d'alimentation électrique)	764 g
Marquage de contrôle	TÜV-GS, CE, UL, CSA

### 11.3 Accu Li-ion

	GT801
Type de pile rechargeable	Li
Tension nominale	21,6 V
Capacité	2,6 Ah
Temps de charge	env. 70 min
Marquage de contrôle	TÜV-GS, CE, UL, CSA


## 11.4 Déclaration de conformité

	<p>Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le présent produit est conforme aux normes et documents normatifs suivants:</p> <p>Directive CEM 2004/108/CE: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-8</p> <p>Sécurité des appareils électriques pour usage domestique et similaire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prescriptions générales</li> <li>- pour les tondeuses à cheveux/pelage</li> </ul> <p>Aesculap Suhl GmbH</p>
---	--

## 12. Elimination

Les appareils électriques, les accessoires et l'emballage doivent être recyclés dans le respect de l'environnement.

### 12.1 Uniquement pour les pays de l'UE

	<p>Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets ménagers!</p> <p>Conformément à la Directive européenne 2012/19/UE sur les appareils électriques et électroniques usagés et sa transposition dans le droit national, les appareils électriques inutilisables doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement.</p>
---	---

### 12.2 Accu Li-ion

Ne pas jeter les accus Li-ion avec les déchets ménagers, dans le feu ni dans l'eau. Les accus Li-ion défectueux ou usés doivent être collectés, recyclés ou éliminés dans le respect de l'environnement conformément à la Directive 2006/66/CE.



## 13. 2 ans de garantie

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté l'un de nos produits.

La marque Aesculap est synonyme depuis des décennies de qualité contrôlée et de service remarquable. Nous offrons à nos clients des produits innovants et performants. Aesculap fabrique des appareils de qualité supérieure et vous garantit l'utilisation de matériaux de qualité supérieure ainsi qu'une fabrication soignée. Nous tenons à souligner que nous ne sommes pas responsables des défauts de nos produits s'ils résultent d'une utilisation incorrecte, d'une usure normale ou du fait que le produit est utilisé de manière inappropriée ou que des produits d'autres marques ne fonctionnant pas parfaitement ou non adéquats sont utilisés.

Les pièces qui subissent généralement une usure et pour lesquelles nous ne donnons donc pas de garantie sont l'accu et la tête de tonte. Les défauts qui n'influencent pas ou très peu la valeur ou le fonctionnement de l'appareil sont également exclus.

Si notre responsabilité est engagée dans le cadre de notre garantie, nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer le produit.



**Máquina para bovinos y caballos Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter**

**Síntesis**

Pos.	N.º art.	Cantidad	Denominación
1	GT502	1	Placa de corte inferior (GT804-GT816/GT834)
2	GT501	1	Placa de corte superior (GT804/GT806/GT834)
	GT505	1	Placa de corte superior (GT814/GT816)
3	GT610405	1	Tuerca moleteada
4	GT367205	1	Tornillo de regulación
6	TA010017	2	Tornillo
7	GT367201	1	Oscilador
8	GT610304	1	Cubo oscil.
9	GT610010	2	Tornillo de bloqueo
10	GT367202	6	Hoja de muelle oscil.
11	GT367812	1	Piñón con árbol excéntrico
15	TA008295	2	Pasador guía
16	GT367801	1	Carcasa del cabezal de corte montada
17	TA005091	2	Tornillo
18	GT367802	1	Parte distancia, izq.
19	GT367803	1	Parte distancia, dech.
20	TA007765	1	Tornillo avellanado
25	GT610307	1	Puente de amortiguación
26	GT367207	1	Tornillo de fijación
27	GT367804	1	Oscilador, mont.
35	TA009222	1	Destornillador
36	GT800249	1	Tecla On/Off (con LED)
37	GT800804	1	Filtro de aire (azul) Econom CL
38	GT800844	1	Filtro de aire (burdeos) Econom CL Equipe
39	GT801	1	Batería de iones de litio
40	GT803	1	Cargador de acumuladores
a	-	1	Punto de lubricación de la esquiladora a batería
b	-	1	Puntas del oscilador
c	-	1	Orificios de la hoja de corte superior
d	-	1	Indicador del nivel de carga de la batería de iones de litio
e	-	1	Tecla de la batería de iones de litio
f	-	1	Bloqueo de la batería
g	GT800/ GT810	1	Esquiladora a batería

Pos.	N.º art.	Cantidad	Denominación
-	GT604	1	Aceite especial para cabezal y placas de corte
	GT605	1	Grasa para engranajes (tubo)

**Símbolos en el producto**

	Atención, señal de advertencia general. Atención, observar la documentación adjunta.
	Identificación de equipos eléctricos y electrónicos de acuerdo con la directiva 2012/19/UE (RAEE), ver Eliminación de residuos

**Índice**

1.	Manipulación correcta .....	39
2.	Descripción del aparato .....	39
2.1	Volumen de suministro.....	39
2.2	Componentes necesarios para el servicio .....	39
2.3	Finalidad de uso .....	39
2.4	Modo de funcionamiento .....	40
3.	Preparación.....	40
4.	Funcionamiento de la esquiladora a batería, el cargador y la batería de iones de litio .....	40
4.1	Puesta a punto.....	40
4.2	Comprobación del funcionamiento .....	40
4.3	Conexión del cargador/Carga de la batería de iones de litio .....	41
4.4	Cambio de la batería de iones de litio .....	41
4.5	Manejo del cabezal de corte.....	42
4.6	Almacenamiento .....	43
5.	Placas de corte.....	43
5.1	Placas de corte para el cabezal de corte GT367 .....	43
5.2	Combinaciones recomendadas.....	43
6.	Trato y cuidado .....	44
6.1	Limpieza/Desinfección .....	44
6.2	Control y comprobación.....	44
7.	Mantenimiento.....	44
8.	Identificación y subsanación de fallos.....	45
8.1	Esquiladora a batería Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter.....	45
8.2	Cargador y batería de iones de litio .....	46
9.	Servicio de Asistencia Técnica.....	47
10.	Accesorios/piezas de recambio .....	47
11.	Datos técnicos .....	48
11.1	Esquiladora a batería Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter.....	48
11.2	Cargador de acumuladores .....	48
11.3	Batería de iones de litio .....	48
11.4	Declaración de conformidad.....	48
12.	Eliminación de residuos .....	48
12.1	Sólo para países de la UE.....	48
12.2	Batería de iones de litio .....	48
13.	2 años de garantía.....	49





## 1. Manipulación correcta



PELIGRO

**Peligro de muerte por descarga eléctrica.**

- No abrir el producto.
- Conectar el producto únicamente a redes de suministro con puesta a tierra.

- Antes de utilizar el producto comprobar que funcione y que se encuentre en perfecto estado.
- Almacenar el cargador y la batería de iones de litio a temperatura ambiente.
- Mantener secos el cargador y la batería de iones de litio.
- Cargar las baterías de iones de litio antes de utilizarlas por primera vez.
- Para evitar daños causados por un montaje o uso inadecuados y conservar así los derechos de garantía y responsabilidad del fabricante:
  - Utilizar el producto sólo conforme a las presentes instrucciones de uso.
  - Respetar la información sobre las medidas de seguridad y las instrucciones de mantenimiento.
  - Sólo combinar entre sí productos Aesculap.
- Conservar las instrucciones en un lugar accesible para el operario.
- Cumplir con las normas vigentes.
- Asegurarse de que la instalación eléctrica de la sala cumpla con los requisitos IEC.
- Para desconectar el aparato de la red, tirar del enchufe, nunca del cable.
- No utilizar el producto en lugares expuestos a peligro de explosión.
- No utilizar ningún producto dañado o defectuoso. Retirar inmediatamente el producto si está dañado.

## 2. Descripción del aparato

### 2.1 Volumen de suministro

N.º art.	Descripción
GT800 GT810 GT834	Esquiladora a batería Econom CL, Econom CL Equipe o Econom CL Fitter
GT801	Batería de iones de litio
GT803	Cargador de acumuladores
ver Accesorios/piezas de recambio	Cable de red (con conector para aparatos)
TA013895	Instrucciones de uso
GT604	Aceitera

### 2.2 Componentes necesarios para el servicio

- Esquiladora a batería Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter
- Cargador de acumuladores
- Cable de red (con conector para aparatos)
- Batería de iones de litio

### 2.3 Finalidad de uso

#### **Esquiladora a batería Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter**

La esquiladora a batería Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter se utiliza para esquilar animales grandes, como bovinos, caballos y perros grandes.

#### **Cargador GT803/Batería de iones de litio GT801**

El cargador GT803 se utiliza para cargar la batería de iones de litio GT801.

## 2.4 Modo de funcionamiento

### Esquiladora a batería Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

La esquiladora a batería Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter se enciende y apaga por medio de la tecla On/Off **36**.

#### Nota

Para evitar un encendido/apagado accidental de la máquina, la tecla On/Off sólo reacciona tras una activación de >0,5 s.

### Cargador GT803/Batería de iones de litio GT801

El cargador GT203 ha sido diseñado para un rango de tensión de 100 V bis 240 V y unas frecuencias de 50 Hz bis 60 Hz.

Para que el cargador GT803 funcione se debe conectar a la red eléctrica con el enchufe de red.

El cargador GT803 dispone de dos compartimentos de carga.

El proceso de carga se inicia automáticamente después de introducir la batería de iones de litio en la estación de carga.

El tiempo de carga va en función del nivel de carga y de la capacidad de la batería de iones de litio.

#### Principio de carga

La carga de la batería de iones de litio se realiza por medio de impulsos de corriente constantes.

El cargador controla el nivel de carga de la batería de iones de litio mientras ésta se carga. Con la vigilancia del nivel de carga se garantiza la carga completa sin que se produzca una sobrecarga.

El equipo vigila asimismo la temperatura de la batería y el tiempo de carga.

El indicador del nivel de carga **d** de la batería de iones de litio dispone de 5 LEDs. Cada LED representa un 20 % del volumen de carga. Si la batería se encuentra en proceso de carga, el LED del estado de carga correspondiente parpadeará. Cuando se iluminen todos los LEDs, la batería estará completamente cargada.

#### Tiempo de carga

Una vez agotado el tiempo de carga, se interrumpe el proceso de carga. El tiempo de carga es de unos 70 minutos.

## 3. Preparación

Si no se observan las normas siguientes, Aesculap declina cualquier responsabilidad.

- Al instalar y poner en funcionamiento el producto, deberán respetarse:
  - los reglamentos de instalación y operación vigentes a nivel nacional,
  - las normas nacionales sobre prevención de incendios y explosiones
  - Instrucciones de utilización según las normas IEC/VDE.

## 4. Funcionamiento de la esquiladora a batería, el cargador y la batería de iones de litio

### 4.1 Puesta a punto

#### Conexión de los accesorios

Las combinaciones de accesorios no mencionadas en las instrucciones de manejo sólo podrán utilizarse si se indica expresamente que son adecuadas para la utilización prevista. No deben influir negativamente en las características de rendimiento ni los requisitos de seguridad.

### 4.2 Comprobación del funcionamiento

#### Esquiladora a batería Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

- Realizar una inspección visual.
- Comprobar que el filtro de aire **37/38** encaja correctamente, ver Fig. G.
- Introducir la batería de iones de litio **39** en el compartimento de la esquiladora y bloquearla.
- Comprobar el estado de carga de la batería: Pulsar la tecla **e**, ver Fig. F.
- El indicador del nivel de carga **d** muestra el nivel de carga.

#### Nota

Para evitar que la batería de iones de litio se descargue cuando la máquina no esté en uso, la conexión electrónica de la batería de iones de litio al control de la esquiladora a batería se desconecta trascurrida 1 h.

- Reactivación de la batería de iones de litio **39**: Accionar la tecla **e**, ver Fig. F.
  - Se iluminan todos los LEDs del indicador del nivel de carga **d**.

#### Cargador/Batería de iones de litio

- Realizar una inspección visual.
- Antes de conectar el producto a la red:
  - Comprobar que el cable de red no esté dañado.
  - Comprobar que el producto no presenta daños (p. ej. que los contactos del compartimento de carga no están deformados).
- Enchufar el cable de red en la estación de carga.
- Conectar el enchufe de red a la toma de corriente de la red.
- Colocar la batería de iones de litio **39** en el compartimento de carga del cargador y cargarla, ver Fig. F.



### 4.3 Conexión del cargador/Carga de la batería de iones de litio



ADVERTENCIA

Peligro de incendio por cortocircuito de los polos a causa de líquidos o piezas de metal.

- No cortocircuitar la batería de iones de litio.



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones si el cable de red está dañado.

- Comprobar que el cable de red no presenta daños antes de iniciar la carga.
- Pedir al fabricante que cambie el cable de red.



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y daños materiales si la batería de iones de litio está en mal estado.

- Comprobar que la batería de iones de litio no presenta daños antes de iniciar la carga.
- No utilizar ni cargar la batería de iones de litio si presenta algún daño.



ATENCIÓN

Pérdida de la capacidad/del rendimiento de la batería de iones de litio si se almacena descargado durante demasiado tiempo.

- Cargar siempre por completo la batería de iones de litio antes de almacenarla durante periodos largos y recargarla una vez al mes.



ATENCIÓN

Peligro de destrucción del producto, del compartimento de carga o de la batería de iones de litio si se introduce una batería incorrecta en el compartimento de carga.

- Introducir la batería de iones de litio sólo en el compartimento de carga que le corresponde.

#### Nota

El cargador puede ser utilizado tanto por niños a partir de 8 años como por personas cuyas capacidades mentales, sensoriales o físicas estén disminuidas, así como por personas con falta de experiencia y conocimiento, siempre que reciban instrucción supervisada o en materia de seguridad y entiendan los riesgos que su uso conlleva.

- Prohibido que los niños jueguen con el aparato.
- Prohibido que los niños realicen tareas de limpieza y mantenimiento del cargador sin supervisión.

#### Nota

La batería de iones de litio se calienta ligeramente durante la carga.

#### Nota

Cuando no se vaya a utilizar el cargador se desenchufará siempre el cable de red de la toma de corriente.

- Utilizar sólo el cargador GT803 de Aesculap para cargar la batería de iones de litio.
- Conectar el cargador 40: Enchufar el cable de red al cargador.
- Enchufar el enchufe de red del cable de red al enchufe.
- Introducir la batería de iones de litio 39 en el compartimento de carga del cargador y cargarla, ver Fig. F.

Los LEDs del indicador del nivel de carga **d** de la batería de iones de litio parpadean según el estado de carga actual. Cuando se iluminen todos los LEDs, la batería estará completamente cargada.

### 4.4 Cambio de la batería de iones de litio

- Sujetar la esquiladora a batería **g** con el cabezal de corte hacia abajo para que la batería de iones de litio 39 no caiga al suelo al soltarla, ver Fig. 1.
- Soltar el bloqueo de la batería **f** con el pulgar.



Fig. 1

## Máquina para bovinos y caballos Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Tirar de la batería de iones de litio **39** hasta sacarla, cargar y/o introducir la batería de iones de litio de repuesto GT801 cargada en la esquiladora a batería **g**, ver Fig. 2.



Fig. 2

- Asegurar la batería de iones de litio **39** con el bloqueo de la batería **f**, ver Fig. 3.



Fig. 3

### 4.5 Manejo del cabezal de corte

#### Lubricación del cabezal de corte



**Peligro de dañar la esquiladora o el cabezal de corte por una lubricación inadecuada.**

- Lubricar el cabezal de corte sólo cuando la máquina esté en marcha.
- No sumergir el cabezal de corte en líquidos.
- Utilizar exclusivamente el aceite lubricante ligero GT605.

- Lubricar abundantemente el cabezal de corte en el punto de lubricación **a** antes de cada animal, ver Fig. A.
- Lubricar las hojas de corte **10** 2-3 veces al día con 3-4 gotas, ver Fig. C.

#### Engrasado del piñón



**Peligro de dañar la esquiladora o el piñón por una lubricación inadecuada.**

- Utilizar exclusivamente grasa para engranajes GT605.
- Engrasar el piñón de 1 a 2 veces por temporada de esquila.

- Desenclavar y retirar la batería de iones de litio **39**.
- Desenroscar ambos tornillos **6**, ver Fig. B.
- Con la mirada puesta en el cabezal de corte, girarlo aprox. 15° hacia la izquierda y retirarlo de la carcasa del motor.
- Aplicar 1 cm de grasa aprox. en dos puntos opuestos entre sí del piñón **11**, ver Fig. C.
- Con cuidado, conectar el cabezal de corte al motor. Asegurarse de que el cabezal de corte encaje girándolo aprox. 15° hacia la izquierda y que el saliente interior encaje en la ranura de la carcasa del motor.

#### Cambio de las placas de corte

- Desenclavar y retirar la batería de iones de litio **39**.
- Desenroscar la tuerca moleteada **3** y aflojar el tornillo de regulación **4** 2 vueltas aprox., ver Fig. A.
- Soltar ambos tornillos aprisionadores **9**, tirar de la placa de corte inferior **1** hacia adelante y extraer la placa de corte superior **2**, ver Fig. D y Fig. E.
- Antes de colocar la placa de corte superior **2**, asegurarse de que el cubo oscilante **8** se encuentra en la escotadura del oscilador **7** prevista para tal fin, ver Fig. E.
- Colocar la placa de corte superior **2**. Asegurarse de que ambas puntas **b** del oscilador **7** encajen exactamente en los orificios **c** de la placa de corte superior **2**, ver Fig. D.



- Deslizar la placa de corte inferior **1** por debajo de las cabezas de los tornillos aprisionadores **9** hasta el tope de la carcasa del cabezal de corte y apretar ambos tornillos aprisionadores **9**.
- Enroscar el tornillo de regulación **4** hasta que las placas de corte presionen ligeramente la una contra la otra, ver Fig. A.

#### Ajuste de la presión de la hoja

##### Nota

El ajuste de la presión de la hoja debe realizarse con la máquina en marcha y sin herramientas.

##### Nota

Una presión excesiva de la hoja provocará un sobrecalentamiento y un desgaste excesivo de las placas de corte.

- Aflojar la tuerca moleteada **3** y extraer con cuidado el tornillo de regulación **4** hasta que la placa de corte superior **2** deje de estar presionada contra la placa de corte inferior **1** (sonido agudo de la máquina), ver Fig. A.
- Enroscar el tornillo de regulación **4** hasta notar una ligera resistencia. A partir de aquí, seguir girando aprox. una vuelta más y después, apretar la tuerca moleteada **3**.

#### Limpieza del cabezal de corte

- Limpiar el cabezal de corte como mínimo después de varios días de esquila o si se ensucia.
- Desenclavar y retirar la batería de iones de litio **39**.
- Desenroscar ambos tornillos **6**, ver Fig. B.
- Con la mirada puesta en el cabezal de corte, girarlo aprox. 15° hacia la izquierda y retirarlo de la carcasa del motor.
- Extraer las placas de corte, ver Cambio de las placas de corte.
- Limpiar a fondo el interior y las piezas del cabezal de corte con un cepillo o un pincel.
- Colocar y apretar las placas de corte, ver Cambio de las placas de corte.
- Engrasar el piñón, ver Engrasado del piñón.
- Con cuidado, conectar el cabezal de corte al motor. Asegurarse de que el cabezal de corte encaje girándolo aprox. 15° hacia la izquierda y que el saliente interior encaje en la ranura de la carcasa del motor.
- Lubricar el cabezal de corte, ver Lubricación del cabezal de corte.

#### Limpieza del filtro de aire

- Limpiar el filtro de aire **37/38** al menos una vez al día o si se ensucia.
- Retirar el filtro de aire **37/38** de la esquiladora a batería, ver Fig. G.
- Limpiar a fondo el filtro de aire **37/38** en agua tibia con un cepillo.
- Dejar que se seque el filtro de aire **37/38**.
- Limpiar la esquiladora a batería.
- Conectar el filtro de aire **37/38** a la esquiladora a batería.

#### Afilado de las placas de corte

- Para afilar las placas de corte, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica, ver Servicio de Asistencia Técnica.

#### 4.6 Almacenamiento

- Limpiar bien la esquiladora a batería y las placas de corte antes de almacenarlas, ver Trato y cuidado.
- Almacenar la esquiladora en un lugar seco, oscuro y limpio.

### 5. Placas de corte

#### 5.1 Placas de corte para el cabezal de corte GT367

N.º art.	Descripción
GT501	Placa de corte superior con 15 dientes
GT502	Placa de corte inferior con 31 dientes Altura de corte 3 mm
GT503	Placa de corte superior con 17 dientes
GT504	Placa de corte inferior con 18 dientes Altura de corte 3 mm
GT505	Placa de corte superior con 23 dientes
GT506	Placa de corte inferior con 23 dientes Altura de corte 3 mm
GT508	Placa de corte inferior con 51 dientes Altura de corte 1 mm
GT510	como GT506, pero con altura de corte 5 mm
GT511	como GT502, pero con altura de corte 1 mm

#### 5.2 Combinaciones recomendadas

Combinación	Placa superior/ inferior	Apta para
dentado estrecho	GT501/GT502	Bovinos y caballos (equipamiento normal de GT474 y GT367)
	GT501/GT511	Esquila industrial
	GT505/GT508	(p. ej. esquila de piel)
dentado medio	GT505/GT506	Bovinos, perros y cabras
	GT505/GT510	Perros y cabras
dentado ancho	GT503/GT504	Bovinos, ovejas de lana fina y ovejas individuales

## 6. Trato y cuidado

### 6.1 Limpieza/Desinfección



**Riesgo de descargas eléctricas e incendios.**

- **Antes de limpiar:**
  - Desconectar el enchufe de red del cargador.
  - Desbloquear la batería de iones de litio y extraerla de la esquiladora a batería.
- No utilizar agentes de limpieza o desinfección inflamables o explosivos.
- Asegurarse de que no penetra ningún líquido en el producto.



**Peligro de dañar o destruir el producto si se somete a una limpieza/desinfección automática.**

- Limpiar/desinfectar el producto sólo manualmente.
- No esterilizar nunca el producto.



**Peligro de dañar el producto debido al uso de desinfectantes/agentes de limpieza inadecuados.**

- Utilizar únicamente desinfectantes/agentes de limpieza autorizados para la limpieza de la superficie y según las instrucciones del fabricante.
- No sumergir nunca el producto en agua o en el agente de limpieza.
- No introducir líquidos en los compartimentos de carga.
- Limpiar los contactos del compartimento de carga con sumo cuidado.

- Limpiar la carcasa del producto con un paño sin pelusa humedecido con un desinfectante convencional.
- Eliminar los posibles restos del agente de limpieza y desinfección una vez finalizado su tiempo de actuación con un paño sin pelusa humedecido en agua clara.
- Para el secado, utilizar un paño limpio y sin pelusa.
- Limpiar los contactos de los compartimentos de carga con isopropanol o alcohol etílico y un bastoncillo de algodón. No utilizar productos químicos que puedan provocar corrosión.
- Si es necesario, repetir la limpieza/desinfección.

### 6.2 Control y comprobación

- Dejar que el producto se enfríe a temperatura ambiente.
- Tras limpiar y desinfectar el producto, comprobar que: esté limpio, funcione debidamente y no tenga defectos.
- Comprobar que el producto no presenta daños, ruidos de funcionamiento anormales, sobrecalentamiento ni una vibración excesiva.
- Comprobar que las hojas de corte no están fragmentadas, dañadas ni desafiladas.
- Retirar inmediatamente el producto si está dañado.

## 7. Mantenimiento

Para garantizar un funcionamiento fiable, Aesculap recomienda realizar un mantenimiento **al menos una vez al año**.



## 8. Identificación y subsanación de fallos

### 8.1 Esquiladora a batería Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Fallo	Detección	Causa	Subsanación
La esquiladora a batería no arranca	-	No se ha activado la batería de iones de litio	Accionar la tecla <b>e</b> de la batería de iones de litio
	El LED de la tecla On/Off <b>36</b> parpadea dos veces por segundo	No se ha cargado la batería de iones de litio	Cargar la batería de iones de litio
	-	Batería de iones de litio defectuosa	Introducir una batería de iones de litio nueva
	-	No se ha introducido la batería de iones de litio	Introducir una batería de iones de litio
La esquiladora a batería se para durante el funcionamiento	-	El circuito de protección ha desconectado la batería de iones de litio	Encender y apagar la esquiladora a batería
	-	La batería de iones de litio está descargada	Introducir una batería de iones de litio nueva

**8.2 Cargador y batería de iones de litio**

Fallo	Detección	Causa	Subsanación
El cargador no funciona	El indicador LED "batería" no está iluminado	No se ha conectado el cable de red	Enchufar el cable de red en el cargador y en la toma de la red
	No se ha cargado la batería de iones de litio	Cable de red defectuoso	Cambiar el cable de red
		Batería de iones de litio defectuosa	Encargar al fabricante la reparación de la batería de iones de litio, ver Servicio de Asistencia Técnica
La batería de iones de litio no se carga	Se ha encajado la batería de iones de litio pero el indicador del nivel de carga no se ilumina	Los contactos del cargador están sucios	Limpiar los contactos del compartimento de carga, ver Trato y cuidado
	-	Los contactos del cargador están dañados	Encargar al fabricante la reparación del cargador, ver Servicio de Asistencia Técnica
	-	Batería de iones de litio defectuosa	Encargar al fabricante la reparación de la batería de iones de litio, ver Servicio de Asistencia Técnica
	-	Cargador defectuoso	Encargar al fabricante la reparación del cargador, ver Servicio de Asistencia Técnica
	-	Durante la carga se ha detectado un sobrecalentamiento de la batería de iones de litio	Retirar la batería de iones de litio del compartimento de carga, dejarla enfriar y repetir la carga
			Si se produce otro fallo: Encargar al fabricante la reparación de la batería de iones de litio, ver Servicio de Asistencia Técnica
-	Fallo de carga o batería de iones de litio defectuosa	Retirar la batería de iones de litio del compartimento de carga y repetir la carga	
		Si se produce otro fallo: Encargar al fabricante la reparación de la batería de iones de litio, ver Servicio de Asistencia Técnica	





## 9. Servicio de Asistencia Técnica



ADVERTENCIA

**Peligro de lesiones y/o fallos de funcionamiento.**

➤ **No modificar el producto.**

Si se realizan modificaciones en el equipo médico técnico, se extinguirá la garantía y el derecho de garantía, así como las posibles homologaciones.

### Direcciones de la Asistencia Técnica

Albert Kerbl GmbH  
Felizenzell 9  
84428 Buchbach / Germany  
Phone: +49 (0) 8086 933-100  
Fax: +49 (0) 8086 933-500  
E-Mail: [info@kerbl.com](mailto:info@kerbl.com)  
[www.kerbl.com](http://www.kerbl.com)

En la dirección especificada anteriormente se le facilitará información sobre otras direcciones de Asistencia Técnica.

## 10. Accesorios/piezas de recambio

N.º art.	Descripción	Versión	Cable de red o fuente de alimentación	Batería de iones de litio	Estación de carga completa	Accesorios
GT804/ GT806	Econom CL	Europa excepto Gran Bretaña	TA012170 Conector plano Europa, negro, L=1,8 m	GT801	GT803	GT604 Aceite especial para placas y cabezal de corte  GT605 Grasa para engranajes (tubo)
GT814/ GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT804G/ GT806G	Econom CL	Gran Bretaña	TA012169 Conector UK negro, L=1,8 m			
GT814G/ GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT804K/ GT806K	Econom CL	EE UU	TA012168 Base de enchufe de 2 polos, negra L=1,8 m			
GT814K/ GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT804A/ GT806A	Econom CL	Australia	TA013657 Base de enchufe de 2 polos, negra L=1,8 m			
GT814A/ GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

**Máquina para bovinos y caballos Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter**

**11. Datos técnicos**

**11.1 Esquiladora a batería Econom CL/  
Econom CL Equipe/Econom CL Fitter**

	<b>GT800 Econom CL</b>	<b>GT810 Econom CL Equipe</b>	<b>GT834 Econom CL Fitter</b>
Velocidad	máx. 2 750 1/min	máx. 2 250 1/min	máx. 3 000 1/min
Duración con una batería de iones de litio	aprox. 70 min	aprox. 80 min	aprox. 70 min
Tensión nominal	máx. 21,6 V	máx. 21,6 V	máx. 21,6 V
Capacidad	máx. 2,6 A	máx. 2,6 A	máx. 2,6 A
Peso (con cabezal de corte y batería)	1 250 g	1 250 g	1 250 g
Marca de verificación	TÜV-GS, CE, UL, CSA	TÜV-GS, CE, UL, CSA	CE, UL, CSA


**11.2 Cargador de acumuladores**

	<b>GT803</b>
Gama de voltajes (potencia absorbida)	100 V a 240 V
Frecuencia	50 Hz a 60 Hz
Tensión de carga/salida	máx. 25,2 V
Corriente de carga/salida	máx. 2,6 A
Peso (con cable y fuente de alimentación)	764 g
Marca de verificación	TÜV-GS, CE, UL, CSA

**11.3 Batería de iones de litio**

	<b>GT801</b>
Elementos del acumulador	Li
Tensión nominal	21,6 V
Capacidad	2,6 Ah
Tiempo de carga	ca. 70 min
Marca de verificación	TÜV-GS, CE, UL, CSA


**11.4 Declaración de conformidad**

	<p>Declaramos, bajo responsabilidad propia, que este producto cumple las siguientes normas o documentos normativos:</p> <p>2004/108/EG Directriz de CEM: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-8 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- requisitos generales</li> <li>- para máquinas de cortar el pelo</li> </ul> <p>Aesculap Suhl GmbH</p>
---	---

**12. Eliminación de residuos**

Reciclar de forma ecológica las herramientas eléctricas, sus accesorios y sus envases.

**12.1 Sólo para países de la UE**

	<p>No deseche las herramientas eléctricas con la basura doméstica.</p> <p>En virtud de la Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y su transposición, las herramientas eléctricas que han dejado de ser aptas para el uso deben eliminarse mediante una recogida selectiva y reciclarse de forma ecológica.</p>
---	--

**12.2 Batería de iones de litio**

No desechar las baterías de iones de litio con la basura doméstica ni arrojándolas al fuego ni al agua. Las baterías de iones de litio defectuosas o usadas se deben recoger, reciclar o eliminar de forma respetuosa con el medio ambiente según lo dispuesto en la Directiva 2006/66/EG.



## 13. 2 años de garantía

Apreciado cliente, apreciada clienta:

Le damos las gracias por haber elegido un producto de nuestra casa.

Ya desde hace varias décadas, se asocia la marca Aesculap con productos de acreditada calidad y con un excelente servicio técnico. Ofrecemos a nuestros clientes productos innovadores y con elevadas prestaciones. Aesculap fabrica aparatos de primera calidad y le garantiza el empleo de materiales de alta calidad, así como un proceso de producción impecable. Nos gustaría indicar asimismo que no respondemos de los defectos materiales de nuestros productos cuando se derivan de un uso inadecuado, del desgaste natural del producto o de sus consecuencias, ni cuando no se utilice el producto debidamente ni cuando se use con productos de terceros que sean inapropiados o no funcionen correctamente.

Las piezas que, por lo general, se desgastan son el cabezal de corte y la batería y, por lo tanto, no respondemos de ellas. Asimismo, quedan excluidos aquellos defectos que no afectan o sólo afectan de forma insignificante al valor o la función del producto.

En el caso de responder en el ámbito de nuestra garantía, nos reservamos el derecho de reparar o sustituir el producto.



Tosatrice per bovini ed equini Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Vista d'insieme

Voce	Cod. art.	Quantità	Denominazione
1	GT502	1	Contropettine (GT804-GT816/GT834)
2	GT501	1	Pettine (GT804/GT806/GT834)
	GT505	1	Pettine (GT814/GT816)
3	GT610405	1	Dado zigrinato
4	GT367205	1	Vite di regolazione
6	TA010017	2	Vite
7	GT367201	1	Oscillatore
8	GT610304	1	Segmento oscillante
9	GT610010	2	Vite di arresto
10	GT367202	6	Molla oscillante
11	GT367812	1	Ruota cilindrica con albero ad eccentrico
15	TA008295	2	Perno guida
16	GT367801	1	Alloggiamento testa cesoia montato
17	TA005091	2	Vite
18	GT367802	1	Distanziatore, sinistra
19	GT367803	1	Distanziatore, destra
20	TA007765	1	Vite a testa svasata
25	GT610307	1	Ponte elastico
26	GT367207	1	Vite di fissaggio
27	GT367804	1	Oscillatore, montato
35	TA009222	1	Cacciavite
36	GT800249	1	Comando On/Off (con LED)
37	GT800804	1	Filtro aria (blu) Econom CL
38	GT800844	1	Filtro aria (bordeaux) Econom CL Equipe
39	GT801	1	Accumulatore a ioni di litio
40	GT803	1	Caricabatterie
a	-	1	Punto da oliare tosatrice ad accumulatore
b	-	1	Punte dell'oscillatore
c	-	1	Fori del pettine
d	-	1	Indicatore della condizione di carica accumulatore a ioni di litio
e	-	1	Tasto degli accumulatori a ioni di litio
f	-	1	Blocco accumulatore
g	GT800/ GT810	1	Tosatrice ad accumulatore

Voce	Cod. art.	Quantità	Denominazione
-	GT604	1	Olio speciale per teste di tosatura e pettini
	GT605	1	Grasso per ingranaggi (tubo)

Simboli del prodotto

	Attenzione, simbolo di avvertimento generale Attenzione, rispettare i documenti allegati
	Marchio degli apparecchi elettrici ed elettronici conformi alla direttiva 2012/19/UE (RAEE), vedere Smaltimento

Indice

1.	Manipolazione sicura.....	51
2.	Descrizione dell'apparecchio .....	51
2.1	Corredo di fornitura .....	51
2.2	Componenti necessari alla messa in funzione .....	51
2.3	Destinazione d'uso.....	51
2.4	Funzionamento.....	52
3.	Preparazione.....	52
4.	Operatività con tosatrice ad accumulatore, caricabatterie e accumulatore a ioni di litio.....	52
4.1	Messa in funzione.....	52
4.2	Controllo del funzionamento.....	52
4.3	Collegamento del caricabatterie/ricarica dell'accumulatore a ioni di litio .....	53
4.4	Sostituzione dell'accumulatore a ioni di litio.....	53
4.5	Manipolazione della testa di tosatura .....	54
4.6	Conservazione.....	55
5.	Pettini.....	55
5.1	Pettini indicati per la testa di tosatura GT367.....	55
5.2	Combinazioni raccomandate.....	55
6.	Preparazione sterile.....	56
6.1	Pulizia/Disinfezione.....	56
6.2	Controllo e prova .....	56
7.	Manutenzione.....	56
8.	Identificazione ed eliminazione dei guasti.....	57
8.1	Tosatrice ad accumulatore Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter.....	57
8.2	Caricabatterie e accumulatore a ioni di litio .....	58
9.	Assistenza tecnica .....	59
10.	Accessori/Ricambi.....	59
11.	Specifiche tecniche .....	60
11.1	Tosatrice ad accumulatore Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter.....	60
11.2	Caricabatterie .....	60
11.3	Accumulatore a ioni di litio .....	60
11.4	Dichiarazione di conformità .....	60
12.	Smaltimento.....	60
12.1	Soltanto per i paesi CE.....	60
12.2	Accumulatore a ioni di litio .....	60
13.	2 anni di garanzia.....	61



## 1. Manipolazione sicura



PERICOLO

Le scosse elettriche comportano pericolo di morte!

- Non aprire il prodotto.
- Utilizzare il prodotto soltanto su una rete elettrica con conduttore di protezione.

- Prima di utilizzare il prodotto verificarne l'idoneità funzionale ed accertarsi che sia in perfette condizioni.
- Conservare il caricabatterie e gli accumulatori a ioni di litio a temperatura ambiente.
- Mantenere asciutti il caricabatterie e gli accumulatori a ioni di litio.
- Prima del primo utilizzo caricare gli accumulatori a ioni di litio.
- In questo modo è possibile evitare danni dovuti a un montaggio o un esercizio non corretto e che, come tali, pregiudicano la garanzia:
  - Utilizzare il prodotto solo in conformità alle presenti istruzioni per l'uso.
  - Rispettare le informazioni sulla sicurezza e le avvertenze per la manutenzione.
  - Accoppiare solo prodotti Aesculap.
- Conservare le istruzioni per l'uso in modo che siano accessibili per l'utente.
- Rispettare le norme vigenti.
- Accertarsi che l'impianto elettrico dell'ambiente sia conforme ai requisiti CEI.
- Staccare la spina dalla presa di rete afferrando sempre la spina, mai tirando il cavo.
- Non utilizzare il prodotto in settori a rischio di esplosione.
- Se il prodotto è guasto o danneggiato, non utilizzarlo. Se il prodotto è danneggiato, scartarlo immediatamente.

## 2. Descrizione dell'apparecchio

### 2.1 Corredo di fornitura

Cod. art.	Descrizione
GT800 GT810 GT834	Tosatrice ad accumulatore Econom CL, Econom CL Equipe o Econom CL Fitter
GT801	Accumulatore a ioni di litio
GT803	Caricabatterie
vedere Accessori/ Ricambi	Cavo di allacciamento alla rete (con spina apparecchio)
TA013895	Istruzioni per l'uso
GT604	Oliatore

### 2.2 Componenti necessari alla messa in funzione

- Tosatrice ad accumulatore Econom CL/Econom CL Equipe/  
Econom CL Fitter
- Caricabatterie
- Cavo di allacciamento alla rete (con spina apparecchio)
- Accumulatore a ioni di litio

### 2.3 Destinazione d'uso

#### Tosatrice ad accumulatore Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

La tosatrice ad accumulatore Econom CL/Econom CL Equipe/  
Econom CL Fitter viene utilizzata per tosare animali di grossa taglia come  
bovini, equini e cani di grandi dimensioni.

#### Caricabatterie GT803/Accumulatore a ioni di litio GT801

Il caricabatterie GT803 viene utilizzato per ricaricare accumulatori a ioni  
di litio GT801.

## 2.4 Funzionamento

### Tosatrice ad accumulatore Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

La tosatrice ad accumulatore Econom CL/Econom CL Equipe/  
Econom CL Fitter viene accesa e spenta con il comando On/off 36.

#### Nota

Per evitare l'accensione e lo spegnimento accidentale dell'apparecchio, il comando On/off reagisce solo se attivato per >0,5 s.

### Caricabatterie GT803/Accumulatore a ioni di litio GT801

Il caricabatterie GT803 è concepito per un intervallo di tensione di rete da 100 V a 240 V e da 50 Hz a 60 Hz.

Per renderlo idoneo a funzionare, il caricabatterie GT803 è collegato alla rete elettrica tramite la spina.

Il caricabatterie GT803 ha un pozzetto.

Il procedimento di carica ha inizio automaticamente quando nell'apposita stazione è inserito l'accumulatore a ioni di litio.

La durata della carica dipende dalla condizione di carica e dalla capacità degli accumulatori a ioni di litio.

#### Principio di carica

Gli accumulatori a ioni di litio sono caricati mediante impulsi di corrente costanti.

La condizione di carica dell'accumulatore a ioni di litio è sorvegliata durante la ricarica. Il monitoraggio della curva di carica assicura una carica al 100 % senza sovraccariche.

Inoltre vengono monitorate la temperatura e la durata della carica degli accumulatori.

L'indicatore della condizione di carica **d** dell'accumulatore a ioni di litio ha 5 LED. Ogni LED indica un volume di carica pari al 20 %. Se l'accumulatore è in carica, il LED della condizione di carica corrispondente lampeggia. Se tutti i LED sono accesi fissi, l'accumulatore è completamente caricato.

#### Durata della carica

Al raggiungimento della durata massima della carica, il procedimento di carica è interrotto. La durata della carica è di circa 70 min.

## 3. Preparazione

Il mancato rispetto delle seguenti norme fa sì che Aesculap non si assuma alcuna responsabilità.

- Nell'installazione e l'esercizio del prodotto è necessario rispettare:
  - le norme nazionali sull'installazione ed i gestori,
  - la normativa nazionale sulla protezione da incendi ed esplosioni,
  - Avvertenze per l'impiego come da disposizioni CEI/VDE.

## 4. Operatività con tosatrice ad accumulatore, caricabatterie e accumulatore a ioni di litio

### 4.1 Messa in funzione

#### Collegamento degli accessori

Le combinazioni di accessori non menzionate nelle istruzioni per l'uso possono essere utilizzate soltanto se espressamente destinate all'applicazione prevista. Caratteristiche e sicurezza non devono risultare pregiudicate.

### 4.2 Controllo del funzionamento

#### Tosatrice ad accumulatore Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

- Eseguire un controllo visivo.
- Assicurarsi che il filtro aria 37/38 sia alloggiato correttamente, vedere Fig. G.
- Inserire e bloccare l'accumulatore a ioni di litio 39 nel pozzetto dell'apparecchio.
- Verificare la condizione di carica dell'accumulatore: premere il comando **e**, vedere Fig. F.
- L'indicatore della condizione di carica **d** indica lo stato di carica.

#### Nota

Per evitare che l'accumulatore a ioni di litio si scarichi mentre l'apparecchio non viene utilizzato, il collegamento elettronico dell'accumulatore a ioni di litio per il comando della tosatrice ad accumulatore viene scollegato dopo 1 h.

- Riattivare l'accumulatore a ioni di litio 39: attivare il comando **e**, vedere Fig. F.
- Tutti i LED dell'indicatore della condizione di carica **d** si accendono.

#### Caricabatterie/accumulatore a ioni di litio

- Eseguire un controllo visivo.
- Prima di collegare il prodotto alla rete di alimentazione:
  - Verificare che il cavo di allacciamento alla rete non sia danneggiato.
  - Controllare che il prodotto non presenti danni (ad es. contatti del pozzetto di carica deformato).
- Inserire il cavo di allacciamento alla rete nella spina apparecchio della stazione di carica.
- Inserire la spina di rete nella presa della rete di alimentazione.
- Posizionare l'accumulatore a ioni di litio 39 nel pozzetto del caricabatterie e procedere al caricamento, vedere Fig. F.



### 4.3 Collegamento del caricabatterie/ricarica dell'accumulatore a ioni di litio



AVVERTENZA

Pericolo di incendio in caso di cortocircuito dei poli causato da liquidi o parti metalliche!

- Non cortocircuitare l'accumulatore a ioni di litio.



AVVERTENZA

Pericolo di lesione a causa di cavo di allacciamento alla rete danneggiato!

- Prima di procedere con il caricamento verificare che il cavo di allacciamento alla rete non presenti danni.
- In caso di cavo di allacciamento alla rete danneggiato, farlo sostituire dal produttore.



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni e danni materiali da accumulatore a ioni di litio danneggiato!

- Prima di ricaricare l'accumulatore a ioni di litio controllare che non sia danneggiato.
- Non usare o ricaricare un accumulatore a ioni di litio danneggiato.



ATTENZIONE

Perdita di capacità/degrado delle prestazioni dell'accumulatore a ioni di litio scarico in seguito a lunga inattività!

- In caso di lunga inattività, conservare l'accumulatore a ioni di litio soltanto a piena carica e ricaricandolo una volta al mese.



ATTENZIONE

Distruzioni del prodotto, del pozzetto di carica o dell'accumulatore a ioni di litio causate dall'inserimento di modelli di accumulatore errati nel pozzetto di carica!

- Inserire l'accumulatore a ioni di litio soltanto nell'apposito pozzetto.

#### Nota

Questo caricabatterie può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto, solo se sorvegliati e se sono stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se sono consapevoli dei pericoli derivanti dall'uso.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non possono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

#### Nota

Durante il procedimento di carica l'accumulatore a ioni di litio si surriscalda leggermente.

#### Nota

Quando non si lavora con il caricabatterie, il cavo di allacciamento alla rete deve essere staccato dalla presa!

- Utilizzare il caricabatterie Aesculap GT803 per ricaricare gli accumulatori a ioni di litio.
- Collegare il caricabatterie 40: Inserire la spina apparecchio del cavo di allacciamento alla rete nel caricabatterie.
- Inserire la spina del cavo di allacciamento alla rete nella presa.
- Posizionare l'accumulatore a ioni di litio 39 nel pozzetto del caricabatterie e procedere al caricamento, vedere Fig. F.

I LED dell'indicatore della condizione di carica **d** dell'accumulatore a ioni di litio lampeggiano in base allo stato di carica attuale. Se tutti i LED sono accesi fissi, l'accumulatore è completamente caricato.

### 4.4 Sostituzione dell'accumulatore a ioni di litio

- Tenere la tosatrice ad accumulatore **g** con la testa di tosatura rivolta verso il basso, in modo che l'accumulatore a ioni di litio **39** non cada quando viene staccato, vedere Fig. 1.
- Staccare il blocco accumulatore **f** con il pollice.



Fig. 1

## Tosatrice per bovini ed equini Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Estrarre l'accumulatore a ioni di litio **39**, procedere al caricamento e/ o inserire l'accumulatore a ioni di litio GT801 nella tosatrice ad accumulatore **g**, vedere Fig. 2.



Fig. 2

- Fissare l'accumulatore a ioni di litio **39** con il blocco accumulatore **f**, vedere Fig. 3.

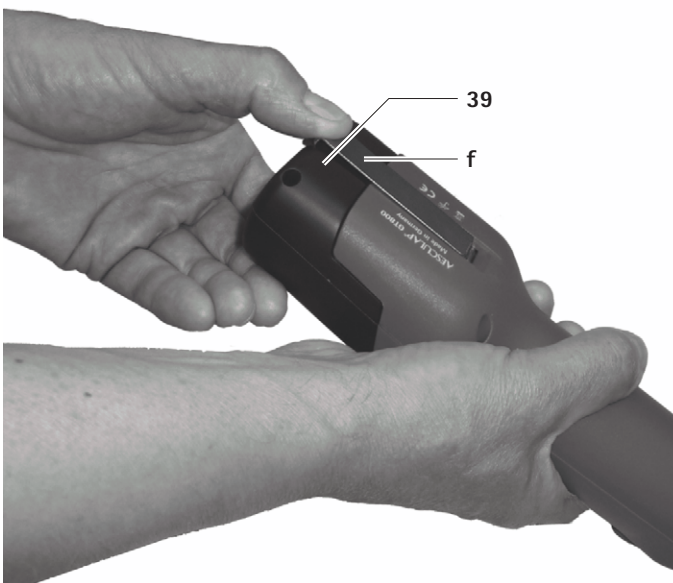


Fig. 3

### 4.5 Manipolazione della testa di tosatura

#### Oliatura della testa di tosatura



In caso di scorretta oliatura la tosatrice o la testa di tosatura potrebbero subire danneggiamenti!

- Eseguire sempre la lubrificazione della testa di tosatura solo con la tosatrice in funzione!
  - Non immergere mai la tosatrice e la testa di tosatura in liquidi.
  - Utilizzare un olio lubrificante leggero GT604.
- Oliare abbondantemente la testa di tosatura nel punto **a** prima di procedere con ogni animale, vedere Fig. A.
  - Oliare le molle **10** 2-3 volte al giorno con 3-4 gocce di olio, vedere Fig. C.

#### Ingrassaggio dell'ingranaggio



In caso di scorretto ingrassaggio la tosatrice o l'ingranaggio potrebbero subire danneggiamenti!

- Utilizzare esclusivamente grasso per ingranaggi GT605.
  - Ingrassare l'ingranaggio 1-2 volte per stagione di tosatura.
- Sbloccare e rimuovere l'accumulatore a ioni di litio **39**.
  - Svitare entrambe le viti **6**, vedere Fig. B.
  - Guardando la testa di tosatura, farla ruotare di circa 15° verso sinistra ed estrarla dalla custodia del motore.
  - Applicare ca. 1 cm di grasso su due punti opposti dell'ingranaggio **11**, vedere Fig. C.
  - Inserire con cautela la testa di tosatura sul motore, accertandosi che venga montata girata di circa 15° verso sinistra e che il nasetto inferiore vada ad inserirsi nella scanalatura della custodia del motore.

#### Sostituzione dei pettini

- Sbloccare e rimuovere l'accumulatore a ioni di litio **39**.
- Allentare il dado zigrinato **3** e svitare la vite di regolazione **4** di ca. 2 giri, vedere Fig. A.
- Allentare le due viti di arresto **9**, estrarre il contropettine **1** in avanti e rimuovere il pettine **2**, vedere Fig. D e Fig. E.
- Prima di inserire il pettine **2**, assicurarsi che il segmento oscillante **8** si trovi nell'apposita feritoia dell'oscillatore **7**, vedere Fig. E.
- Inserire il pettine **2**. Durante questa operazione assicurarsi che le due punte **b** dell'oscillatore **7** si inseriscano esattamente nei fori **c** del pettine **2**, vedere Fig. D.





- Spingere il contropettine **1** sotto le teste delle viti di arresto **9** fino a fine corsa nell'alloggiamento testa cesoia e stringere le due viti di arresto **9**.
- Avvitare la vite di regolazione **4**, finché i due pettini premono leggermente l'uno contro l'altro, vedere Fig. A.

#### Regolazione della pressione dei pettini

##### Nota

La regolazione della pressione dei pettini deve avvenire con apparecchio acceso e senza l'ausilio di utensili.

##### Nota

Una pressione esagerata dei pettini causa un eccessivo riscaldamento e un'usura troppo elevata dei pettini.

- Allentare il dado zigrinato **3** e svitare con cautela la vite di regolazione **4**, finché il pettine **2** non preme più contro il contropettine **1** (diverso rumore di funzionamento), vedere A.
- Avvitare la vite di regolazione **4**, finché non viene percepita una leggera resistenza. Da questo punto avvitare ancora di un giro e stringere di dato zigrinato **3**.

#### Pulizia della testa di tosatura

- Pulire la testa di tosatura almeno dopo una giornata di utilizzo oppure in caso di sporcizia.
- Sbloccare e rimuovere l'accumulatore a ioni di litio **39**.
- Svitare entrambe le viti **6**, vedere Fig. B.
- Guardando la testa di tosatura, farla ruotare di circa 15° verso sinistra ed estrarla dalla custodia del motore.
- Togliere i pettini, vedere Sostituzione dei pettini.
- Pulire in profondità la parte interna e i singoli componenti della testa di tosatura con una spazzola o un pennello.
- Inserire e stringere i pettini, vedere Sostituzione dei pettini.
- Ingrassare l'ingranaggio, vedere Ingrassaggio dell'ingranaggio.
- Inserire con cautela la testa di tosatura sul motore, accertandosi che venga montata girata di circa 15° verso sinistra e che il nasetto inferiore vada ad inserirsi nella scanalatura della custodia del motore.
- Oliare la testa di tosatura, vedere Oliatura della testa di tosatura.

#### Pulizia del filtro dell'aria

- Pulire il filtro aria **37/38** almeno una volta al giorno oppure in caso di sporcizia.
- Rimuovere il filtro aria **37/38** dalla tosatrice ad accumulatore, vedere Fig. G.
- Pulire a fondo il filtro aria **37/38** in acqua calda con una spazzola.
- Fare asciugare il filtro aria **37/38**.
- Pulire la tosatrice ad accumulatore.
- Inserire il filtro aria **37/38** sulla tosatrice ad accumulatore.

#### Riaffilatura dei pettini

- Per riaffilare i pettini rivolgersi all'assistenza tecnica, vedere Assistenza tecnica.

#### 4.6 Conservazione

- Prima mettere da parte l'apparecchio, procedere alla pulizia di tosatrice e pettini vedere Preparazione sterile.
- Riporre la tosatrice in un luogo asciutto, buio e pulito.

### 5. Pettini

#### 5.1 Pettini indicati per la testa di tosatura GT367

Cod. art.	Descrizione
GT501	Pettine a 15 denti
GT502	Contropettine a 31 denti Altezza di tosatura 3 mm
GT503	Pettine a 17 denti
GT504	Contropettine a 18 denti Altezza di tosatura 3 mm
GT505	Pettine a 23 denti
GT506	Contropettine a 23 denti Altezza di tosatura 3 mm
GT508	Contropettine a 51 denti Altezza di tosatura 1 mm
GT510	come GT506, ma con altezza di tosatura 5 mm
GT511	come GT502, ma con altezza di tosatura 1 mm

#### 5.2 Combinazioni raccomandate

Combinazione	Pettine/ Contropettine	Adatto per
a denti stretti	GT501/GT502	Bovini ed equini (dotazione standard di GT474 e GT367)
	GT501/GT511	Tosatura industriale
	GT505/GT508	(ad es. tosatura di pellicce)
a denti mediamente stretti	GT505/GT506	Bovini, cani e capre
	GT505/GT510	Cani e capre
a denti larghi	GT503/GT504	Bovini, pecore a lana fine e pecore singole

## 6. Preparazione sterile

### 6.1 Pulizia/Disinfezione



PERICOLO

**Pericolo di scosse elettriche ed incendi!**

- **Prima della pulizia:**
  - Staccare la spina dal caricabatterie.
  - Sbloccare l'accumulatore a ioni di litio e rimuovere la tosatrice ad accumulatore.
- Non utilizzare detersivi e disinfettanti infiammabili ed esplosivi.
- Accertarsi che nel prodotto non penetri alcun liquido.



ATTENZIONE

**Danni o distruzione del prodotto causati dalla pulizia automatica/disinfezione!**

- Pulire/disinfettare il prodotto solo manualmente.
- Non sterilizzare mai il prodotto.



ATTENZIONE

**Danni al prodotto da detersivi/disinfettanti non idonei!**

- Usare detersivi/disinfettanti ammessi per la pulizia delle superfici secondo le istruzioni del produttore.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o detersivo.
- Non introdurre liquidi nei pozzetti di carica.
- Pulire i contatti del pozzetto con la massima cura.

- Passare la scocca del prodotto con un telo non sfilacciante inumidito con un normale prodotto idoneo per la disinfezione per strofinamento.
- Se necessario, dopo il relativo tempo d'azione eliminare i residui di detersivi e disinfettanti con un telo non sfilacciante inumidito con acqua pulita.
- Per asciugare usare un telo non sfilacciante pulito.
- Pulire i contatti dei pozzetti con isopropanolo o alcool etilico ed un bastoncino cotonato. Non usare prodotti chimici che favoriscano la corrosione.
- Se necessario, ripetere la pulizia/disinfezione.

### 6.2 Controllo e prova

- Far raffreddare il prodotto a temperatura ambiente.
- Dopo ogni pulizia e disinfezione, verificare che il prodotto sia pulito, perfettamente funzionante e non danneggiato.
- Controllare che il prodotto non presenti danni, rumori da funzionamento anomali, surriscaldamenti eccessivi o vibrazioni troppo forti.
- Sottoporre la testa di taglio a un controllo mirante ad escludere che i taglienti siano rotti, danneggiati e smussi.
- Se il prodotto è danneggiato, scartarlo immediatamente.

## 7. Manutenzione

Per garantire un funzionamento affidabile, **raccomanda una manutenzione almeno una volta all'anno.**



## 8. Identificazione ed eliminazione dei guasti

### 8.1 Tosatrice ad accumulatore Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Anomalia	Identificazione	Causa	Rimedio
La tosatrice non parte	-	Accumulatore a ioni di litio non attivato	Attivare il comando e sull'accumulatore a ioni di litio
	Il LED del comando On/Off <b>36</b> lampeggia due volte al secondo	Accumulatore a ioni di litio non caricato	Caricare l'accumulatore a ioni di litio
	-	Accumulatore a ioni di litio guasto	Inserire un nuovo accumulatore a ioni di litio
	-	Accumulatore a ioni di litio non inserito	Inserire l'accumulatore a ioni di litio
La tosatrice ad accumulatore rimane ferma durante il funzionamento	-	Accumulatore a ioni di litio disattivato dal circuito di protezione	Spegnere e riaccendere la tosatrice ad accumulatore
	-	L'accumulatore a ioni di litio è vuoto	Inserire un nuovo accumulatore a ioni di litio

Tosatrice per bovini ed equini Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

8.2 Caricabatterie e accumulatore a ioni di litio

Anomalia	Identificazione	Causa	Rimedio
Caricabatterie non funzionante	L'indicatore LED "Accumulatore" non si illumina	Cavo di allacciamento alla rete non inserito	Inserire il cavo di allacciamento alla rete nella spina apparecchio della stazione di carica e nella presa della rete di alimentazione
	Accumulatore a ioni di litio non caricato	Cavo di allacciamento alla rete guasto	Sostituire il cavo di allacciamento alla rete
		Accumulatore a ioni di litio guasto	Far riparare l'accumulatore a ioni di litio dal produttore, vedere Assistenza tecnica
L'accumulatore a ioni di litio non è caricato	Accumulatore a ioni di litio inserito, l'indicatore della condizione di carica non si illumina	Contatti del caricabatterie sporchi	Pulire i contatti nel pozzetto, vedere Preparazione sterile
	-	Contatti del caricabatterie danneggiati	Far riparare il caricabatterie dal produttore, vedere Assistenza tecnica
	-	Accumulatore a ioni di litio guasto	Far riparare l'accumulatore a ioni di litio dal produttore, vedere Assistenza tecnica
	-	Caricabatterie guasto	Far riparare il caricabatterie dal produttore, vedere Assistenza tecnica
	-	Durante il caricamento nell'accumulatore a ioni di litio viene rilevata una temperatura troppo alta	Togliere l'accumulatore a ioni di litio dal pozzetto, lasciarlo raffreddare e ripetere il procedimento di carica
	-		Se l'anomalia si ripresenta: Far riparare l'accumulatore a ioni di litio dal produttore, vedere Assistenza tecnica
-	Problema di caricamento o accumulatore a ioni di litio guasto	Togliere l'accumulatore a ioni di litio dal pozzetto e ripetere il procedimento di carica	
-		Se l'anomalia si ripresenta: Far riparare l'accumulatore a ioni di litio dal produttore, vedere Assistenza tecnica	



## 9. Assistenza tecnica



AVVERTENZA

**Pericolo di lesioni e/o malfunzionamenti!**

➤ **Non modificare il prodotto.**

Eventuali modifiche delle attrezzature medico-chirurgiche possono comportare il decadere dei diritti di garanzia e delle omologazioni.

### Indirizzi dei centri assistenza

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach / Germany

Phone: +49 (0) 8086 933-100

Fax: +49 (0) 8086 933-500

E-Mail: [info@kerbl.com](mailto:info@kerbl.com)

[www.kerbl.com](http://www.kerbl.com)

Gli altri indirizzi dell'assistenza possono essere richiesti all'indirizzo pre-detto.

## 10. Accessori/Ricambi

Cod. art.	Descrizione	Esecuzione	Cavo di alimentazione o alimentatore	Accumulatore a ioni di litio	Stazione di caricamento completa	Accessori
GT804/ GT806	Econom CL	Europa tranne Gran Bretagna	TA012170 connettore piatto Euro, nero, L=1,8 m	GT801	GT803	GT604 Olio speciale per pettini e testa di tosatura  GT605 Grasso per ingranaggi (tubo)
GT814/ GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT804G/ GT806G	Econom CL	Gran Bretagna	TA012169 Spina GB, nera, L=1,8 m			
GT814G/ GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT804K/ GT806K	Econom CL	USA	TA012168 Spina apparecchio a 2 pin, nera, L=1,8 m			
GT814K/ GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT804A/ GT806A	Econom CL	Australia	TA013657 Spina apparecchio a 2 pin, nera, L=1,8 m			
GT814A/ GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

Tosatrice per bovini ed equini Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

## 11. Specifiche tecniche

### 11.1 Tosatrice ad accumulatore Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

	GT800 Econom CL	GT810 Econom CL Equipe	GT834 Econom CL Fitter
Cadenza	max. 2 750 1/min	max. 2 250 1/min	max. 3 000 1/min
Tempo di funzionamento con accumulatore a ioni di litio	ca. 70 min	ca. 80 min	ca. 70 min
Tensione nominale	max. 21,6 V	max. 21,6 V	max. 21,6 V
Capacità	max. 2,6 A	max. 2,6 A	max. 2,6 A
Peso (con testa di tosatura e accumulatore)	1 250 g	1 250 g	1 250 g
Marchio di prova	TÜV-GS, CE, UL, CSA	TÜV-GS, CE, UL, CSA	CE, UL, CSA

### 11.2 Caricabatterie

	GT803
Intervallo di tensione di rete (assorbimento di corrente)	100da V a 240 V
Frequenza	50da Hz a 60 Hz
Tensione di carica/uscita	max. 25,2 V
Corrente di carica/uscita	max. 2,6 A
Peso (con cavo e alimentatore)	764 g
Marchio di prova	TÜV-GS, CE, UL, CSA

### 11.3 Accumulatore a ioni di litio

	GT801
Tipo di pila	Li
Tensione nominale	21,6 V
Capacità	2,6 Ah
Durata della carica	ca. 70 min
Marchio di prova	TÜV-GS, CE, UL, CSA

## 11.4 Dichiarazione di conformità



Dichiariamo, sotto nostra esclusiva responsabilità, che questo prodotto è conforme alle seguenti norme o documenti normativi:  
2004/108/CE Direttiva EMV:  
DIN EN 60335-1  
DIN EN 60335-2-8  
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare  
– requisiti generali  
– per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli  
Aesculap Suhl GmbH

## 12. Smaltimento

Gli elettrodomestici, gli accessori e l'imballo devono essere conferiti ad un impianto di riciclaggio ecocompatibile.

### 12.1 Soltanto per i paesi CE



Non gettare gli elettrodomestici nei rifiuti domestici! In ottemperanza alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e la relativa attuazione nell'ambito della legislazione nazionale, gli elettrodomestici giunti a fine vita devono essere raccolti separatamente e conferiti ad un impianto di riciclaggio ecocompatibile.

### 12.2 Accumulatore a ioni di litio

Non gettare gli accumulatori a ioni di litio nei rifiuti domestici, né in fiamme o acqua. Gli accumulatori a ioni di litio guasti o esausti devono essere raccolti, riciclati o smaltiti in maniera ecologicamente corretta ai sensi della direttiva 2006/66/CE.



## 13. 2 anni di garanzia

Gentile/egregio cliente,  
grazie per aver preferito un prodotto della nostra azienda.

Il nome Aesculap è da decenni sinonimo di qualità controllata e servizio di altissimo livello. Ai nostri clienti offriamo prodotti innovativi e potenti. Aesculap fabbrica apparecchi di alta qualità e assicura l'impiego di materiali di qualità e una fabbricazione accurata. Desideriamo ricordarle che non ci assumiamo responsabilità alcuna per i vizi materiali se tali vizi derivano da utilizzo non conforme, usura normale o dal fatto che il prodotto venga usato in modo inadeguato o se vengono impiegati prodotti esterni non adeguati o non perfettamente funzionanti.

I componenti normalmente sottoposti ad usura e per i quali non ci assumiamo perciò alcuna responsabilità, sono l'accumulatore e la testa di taglio. Allo stesso modo fanno eccezione i vizi materiali che non influiscono sul funzionamento o lo fanno in modo non determinante.



Qualora fossimo responsabili in base alla garanzia, ci riserviamo di riparare o sostituire il prodotto.

## Tondeuze voor runderen en paarden Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

### Overzicht

Pos.	Art.nr.	Aantal	Benaming
1	GT502	1	Ondermes (GT804–GT816/GT834)
2	GT501	1	Bovenmes (GT804/GT806/GT834)
	GT505	1	Bovenmes (GT814/GT816)
3	GT610405	1	Kartelmoer
4	GT367205	1	Stelschroef
6	TA010017	2	Schroef
7	GT367201	1	Trildeel
8	GT610304	1	Trilblokje
9	GT610010	2	Bevestigingsschroef
10	GT367202	6	Oscillerende bladveer
11	GT367812	1	Tandrad met excentrische as
15	TA008295	2	Geleidepen
16	GT367801	1	Gemonteerd scheerkophuis
17	TA005091	2	Schroef
18	GT367802	1	Spacer, links
19	GT367803	1	Spacer, rechts
20	TA007765	1	Verzinkschroef
25	GT610307	1	Verend brugdeel
26	GT367207	1	Fixeerschroef
27	GT367804	1	Gemonteerd trildeel
35	TA009222	1	Schroevendraaier
36	GT800249	1	Aan/uit-knop (met LED)
37	GT800804	1	Luchtfilter (blauw) Econom CL
38	GT800844	1	Luchtfilter (bordeaux) Econom CL Equipe
39	GT801	1	Li-ion-batterij
40	GT803	1	Acculader
a	–	1	Smeerpunt draadloze tondeuze
b	–	1	Punten van het trildeel
c	–	1	Gaten van het bovenmes
d	–	1	Ladingsindicator lithium-ion-accu
e	–	1	Knop van de lithium-ion-accu
f	–	1	Accuvergrendeling
g	GT800/ GT810	1	Draadloze tondeuze
	GT604	1	Speciale olie voor scheerkop en messen
	GT605	1	Tandwielvet (tube)

### Symbolen op het product

	Let op: algemeen waarschuwingssymbool Let op: de bijgesloten documentatie volgen
	Aanduiding van elektrische en elektronische apparaten conform richtlijn 2012/19/EU (AEEA), zie Afvoer

### Inhoudsopgave

1.	Veilig gebruik .....	63
2.	Beschrijving van het apparaat .....	63
2.1	Bij de levering inbegrepen.....	63
2.2	Benodigde componenten voor het gebruik .....	63
2.3	Gebruiksdoel.....	63
2.4	Werkingsprincipe .....	64
3.	Vorbereiding.....	64
4.	Gebruik van de draadloze tondeuze, acculader en lithium-ion accu.....	64
4.1	Opstellen.....	64
4.2	Functietest .....	64
4.3	Acculader aansluiten/lithium-ion-accu laden.....	65
4.4	Lithium-ion-accu vervangen .....	65
4.5	Gebruik van de scheerkop.....	66
4.6	Opslag.....	67
5.	Messen.....	67
5.1	Messen passend bij scheerkop GT367 .....	67
5.2	Aanbevolen combinaties.....	67
6.	Reinigingsbehandeling .....	68
6.1	Reiniging/desinfectie .....	68
6.2	Controle en testen .....	68
7.	Onderhoud .....	68
8.	Opsporen en verhelpen van fouten.....	69
8.1	Draadloze tondeuze Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter.....	69
8.2	Lader en lithium-ion-accu .....	70
9.	Technische dienst.....	71
10.	Accessoires/Reserveonderdelen .....	71
11.	Technische specificaties.....	72
11.1	Draadloze tondeuze Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter.....	72
11.2	Acculader.....	72
11.3	Lithium-ion accu.....	72
11.4	Conformiteitsverklaring .....	72
12.	Afvoer.....	72
12.1	Alleen voor EU-landen.....	72
12.2	Lithium-ion accu.....	72
13.	2 Jaar garantie.....	73





## 1. Veilig gebruik



GEVAAR

**Levensgevaar door elektrische schok!**

- **Product niet openen.**
- **Sluit dit product uitsluitend aan op een voedingsnet met randaarde.**

- Controleer de juiste werking en de goede staat van het product voordat u dit gebruikt.
- Bewaar de lader en de lithium-ion-accu's bij kamertemperatuur.
- Houd de lader en de lithium-ion-accu's droog.
- Laad de lithium-ion-accu voor het eerste gebruik.
- Om beschadiging ten gevolge van een onoordeelkundige montage of foutief gebruik te vermijden en de garantie en aansprakelijkheid niet in het geding te brengen:
  - gebruik dit product uitsluitend volgens deze gebruiksaanwijzing.
  - Volg de veiligheidsinformatie en de onderhoudsinstructies op.
  - Combineer alleen Aesculap-producten met elkaar.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een plaats die toegankelijk is voor de gebruiker.
- Leef de toepasselijke normen na.
- Zorg ervoor dat de elektrische installatie op de plaats van gebruik aan de IEC-normen voldoet.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact en nooit aan de kabel zelf.
- Gebruik dit product niet in een explosiegevaarlijke ruimte.
- Gebruik geen beschadigde of defecte producten. Verwijder beschadigde producten onmiddellijk.

## 2. Beschrijving van het apparaat

### 2.1 Bij de levering inbegrepen

Art.nr.	Aanduiding
GT800 GT810 GT834	Draadloze tondeuze Econom CL, Econom CL Equipe of Econom CL Fitter
GT801	Lithium-ion accu
GT803	Acculader
zie Accessoires/ Reserveonderdelen	Voedingskabel (met apparaatstekker)
TA013895	Gebruiksaanwijzing
GT604	Oliebusje

### 2.2 Benodigde componenten voor het gebruik

- Draadloze tondeuze Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter
- Acculader
- Voedingskabel (met apparaatstekker)
- Lithium-ion accu

### 2.3 Gebruiksdoel

#### **Draadloze tondeuze Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter**

De draadloze tondeuze Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter wordt gebruikt voor het scheren van grote dieren zoals runderen, paarden en grote honden.

#### **Acculader GT803/lithium-ion-accu GT801**

De acculader GT803 wordt gebruikt om de lithium-ion-accu GT801 op te laden.

## Tondeuze voor runderen en paarden Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

### 2.4 Werkingsprincipe

#### Draadloze tondeuze Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

De draadloze tondeuze Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter wordt met de aan/uit-schakelaar **36** in- en uitgeschakeld.

#### Opmerking

*Om te vermijden dat de machine abusievelijk in of uit wordt geschakeld, reageert de aan/uit-schakelaar pas als de knop >0,5 s wordt ingedrukt.*

#### Acculader GT803/lithium-ion-accu GT801

De acculader GT803 is ontworpen voor een netspanning van 100 V tot 240 V en van 50 Hz tot 60 Hz.

Zodra de netstekker in het stopcontact wordt gestoken is de acculader GT803 klaar voor gebruik.

De acculader GT803 beschikt over één laadschacht.

Zodra er een lithium-ion-accu in het de lader wordt gestoken, start het laden automatisch.

De laadduur is afhankelijk van de ladingstoestand en capaciteit van de lithium-ion-accu's.

#### Laadprincipe

De lithium-ion-accu's worden opgeladen met constante stroompulsen.

De laadtoestand van de lithium-ion-accu wordt tijdens het laden continu bewaakt. Doordat de laadcurve wordt gemonitord is de lading gegarandeerd 100 % zonder overlading.

Daarnaast worden de temperatuur van de accu en de laadduur gecontroleerd.

De laadindicator **d** van de lithium-ion accu heeft 5 LEDs. Elke LED staat voor 20 % laadvolume. Als de accu wordt opgeladen, knippert de LED van de betreffende laadtoestand. Als alle LEDs zonder onderbreking branden, is de accu helemaal opgeladen.

#### Laadduur

Wanneer de maximale laadduur is bereikt, wordt het laadproces afgebroken. De laadduur bedraagt ca. 70 min.

### 3. Voorbereiding

Wanneer de volgende voorschriften niet worden nageleefd, wijst Aesculap elke aansprakelijkheid af.

- Bij de opstelling en het gebruik van dit product dient u de volgende voorschriften na te leven:
  - de nationale installatie- en gebruikersvoorschriften,
  - de nationale voorschriften aangaande brand- en explosiepreventie,
  - Gebruiksaanwijzing conform de IEC-/VDE-bepalingen.

### 4. Gebruik van de draadloze tondeuze, acculader en lithium-ion accu

#### 4.1 Opstellen

##### Accessoires aansluiten

Combinaties van accessoires die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, mogen uitsluitend worden gebruikt als ze uitdrukkelijk voor de beoogde toepassing bestemd zijn. De vermogenskenmerken en veiligheidseisen mogen daarbij niet nadelig worden beïnvloed.

#### 4.2 Functietest

##### Draadloze tondeuze Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Voer een visuele inspectie uit.
- Zorg ervoor dat het luchtfilter **37/38** correct bevestigd is, zie Afb. G.
- Schuif de lithium-ion accu **39** in de machineschacht en klik hem vast.
- De status van de accu controleren: Druk op knop **e**, zie Afb. F.
- De ladingsindicator **d** geeft de laadtoestand van de accu aan.

##### Opmerking

*Om te voorkomen dat de lithium-ion accu ontlaadt als de machine niet wordt gebruikt, wordt de elektronische verbinding van de lithium-ion accu met de bediening van de draadloze tondeuze na 1 h afgesloten.*

- Lithium-ion accu **39** reactiveren: Druk op knop **e**, zie Afb. F.  
Alle LEDs van de laadindicator **d** branden.

##### Acculader/lithium-ion accu

- Voer een visuele inspectie uit.
- Alvorens het product op het voedingsnet aan te sluiten:
  - controleer het netsnoer op eventuele beschadigingen.
  - Controleer het product op eventuele beschadigingen (bij v. contacten van de laadschachten controleren op kromgebogen contacten).
- Steek de voedingskabel in de apparaatstekker op het laadstation.
- Steek de netstekker in het stopcontact van het voedingsnet.
- Plaats de lithium-ion accu **39** in de laadschacht van de acculader en laadt hem op, zie Afb. F.



### 4.3 Acculader aansluiten/lithium-ion-accu laden



WAARSCHUWING

Brandgevaar bij kortsluiting van de polen door vloeistoffen of metalen onderdelen!

- Voorkom kortsluiting van de lithium-ion-accu.



WAARSCHUWING

Kans op letsel door beschadigde stroomkabel!

- Controleer de voedingskabel voor het laden op beschadigingen.
- Laat een beschadigde voedingskabel door de fabrikant vervangen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwondingen en materiële schade door beschadigde lithium-ion-accu's!

- Controleer de lithium-ion-accu's op beschadigingen alvorens ze op te laden.
- Beschadigde lithium-ion-accu's mogen niet worden gebruikt of opgeladen.



VOORZICHTIG

Afname van vermogen/prestatievermogen van de ontladen accu door langdurige opslag!

- Berg de lithium-ion-accu enkel volledig geladen langere tijd op en laad hem maandelijks bij.



VOORZICHTIG

Vernieling van het product, de laadschacht of de lithium-ion-accu door een verkeerd accutype in de laadschacht te steken!

- Steek de lithium-ion-accu's enkel in de daarvoor voorziene laadschachten.

#### Opmerking

Deze acculader kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis. Wel moet er dan toezicht worden gehouden of moeten deze personen instructies ontvangen met betrekking tot het veilige gebruik van dit apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren.

- Laat kinderen niet met dit apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

#### Opmerking

De lithium-ion-accu warmt tijdens het laden iets op.

#### Opmerking

Trek de stekker van de netaansluitkabel uit het stopcontact, wanneer u niet met de acculader werkt.

- Gebruik uitsluitend de Aesculap acculader GT803 om lithium-ion-accu's op te laden.
- Acculader **40** aansluiten: Steek de apparaatstekker van de voedingskabel in de acculader.
- Steek de netstekker van de voedingskabel in het stopcontact.
- Plaats de lithium-ion accu **39** in de laadschacht van de acculader en laadt hem op, zie Afb. F.

De LEDs van de laadindicator **d** van de lithium-ion-accu knipperen in aanduiding van de actuele laadstatus. Als alle LEDs zonder onderbreking branden, is de accu helemaal opgeladen.

### 4.4 Lithium-ion-accu vervangen

- Houd de draadloze tondeuze **g** met de scheerkop naar onderen, zodat de lithium-ion-accu **39** bij het losmaken niet op de grond valt, zie Afb 1.
- Druk de accuvergrendeling **f** met uw duimen los.



Afb 1


## Tondeuze voor runderen en paarden Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Haal de lithium-ion-accu **39** eruit en laad hem of stop een vervangende geladen lithium-ion-accu GT801 in de draadloze tondeuze **g**, zie Afb. 2.



Afb 2

- Zet de lithium-ion-accu **39** vast met de accuvergrendeling **f**, zie Afb. 3.

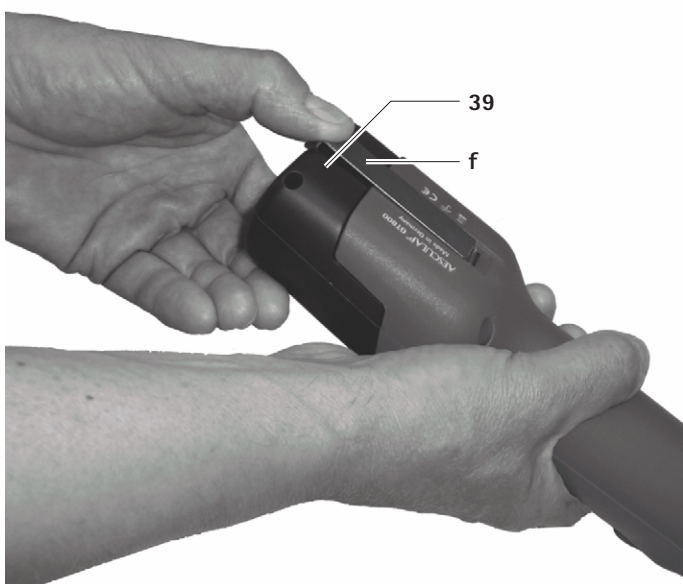

Afb 3

### 4.5 Gebruik van de scheerkop

#### Scheerkop smeren



**Beschadiging van de tondeuze of de scheerkop door verkeerd smeermiddel!**

- Smeer de scheerkop alleen wanneer de machine draait.
- Dompel de machine en scheerkop nooit in een vloeistof onder.
- Gebruik alleen lichte smeerolie GT604.

- De scheerkop moet via het smerpunt **a** voor elk dier rijkelijk worden gesmeerd, zie Afb. A.
- Smeer de verende messen **10** 2 tot 3 maal per dag met 3 tot 4 druppels, zie Afb. C.

#### Tandwiel invetten



**Beschadiging van de tondeuze of de scheerkop door verkeerd smeermiddel!**

- Gebruik alleen tandwielvet GT605.
- Smeer het tandwiel 1-2 keer per scheerseizoen.

- Ontgrendel de lithium-ion-accu **39** en verwijder hem.
- Draai beide schroeven **6** eruit, zie Afb. B.
- Kijk op de scheerkop en draai hem ong. 15° naar links, en neem hem van het motorhuis af.
- Breng ong. 1 cm vet op twee tegenoverliggende plekken van het tandwiel **11** aan, zie Afb. C.
- Plaats de scheerkop zorgvuldig op de motor. Let erop dat de scheerkop ong. 15° naar links verdraaid wordt geplaatst, en dat de onderste nok in de groef van het motorhuis grijpt.

#### Messen vervangen

- Ontgrendel de lithium-ion-accu **39** en verwijder hem.
- Draai de kartelmoer **3** los en draai de stelschroef **4** ong. 2 ronddraaiingen naar buiten, zie Afb. A.
- Draai beide bevestigingsschroeven **9** los, trek het ondermes **1** naar voren toe eraf en verwijder het bovenmes **2**, zie Afb. D en Afb. E.
- Voordat u het bovenmes **2** plaatst, moet u ervoor zorgen, dat het trilblokje **8** zich in de daarvoor bestemde uitsparing van het trildeel **7** bevindt, zie Afb. E.
- Plaats het bovenmes **2**. Zorg er daarbij voor dat de beide punten **b** van het trildeel **7** precies in de gaten **c** van het bovenmes **2** grijpen, zie Afb. D.



- Schuif het ondermes **1** onder de koppen van de bevestigingsschroeven **9** tot de aanslag tegen het scheerkophuis en draai beide bevestigingsschroeven **9** vast.
- Draai de stelschroef **4** weer in, tot beide messen licht op elkaar drukken, zie Afb. A.

### Mesdruk instellen

#### Opmerking

De mesdruk moet bij een draaiende machine en zonder gereedschap worden ingesteld.

#### Opmerking

Een te hoge mesdruk leidt tot hogere verhitting en een grotere slijtage van de messen.

- Draai de kartelmoer **3** los en draai de stelschroef **4** voorzichtig naar buiten, tot het bovenmes **2** niet meer op het ondermes **1** drukt (het geluid van de machine is hoog), zie Afb. A.
- Draai de stelschroef **4** weer in, tot een lichte weerstand voelbaar wordt. Draai vanaf dit moment nog ongeveer één draaiing verder en draai daarna de kartelmoer **3** vast.

### Scheerkop reinigen

- De scheerkop moet minimaal na enkele dagen scheren of wanneer hij vuil is worden gereinigd.
- Ontgrendel de lithium-ion-accu **39** en verwijder hem.
- Draai beide schroeven **6** eruit, zie Afb. B.
- Kijk op de scheerkop en draai hem ong. 15° naar links, en neem hem van het motorhuis af.
- Verwijder de messen, zie Messen vervangen.
- Reinig de binnenkant en de losse onderdelen van de scheerkop grondig met een borstel of een penseel.
- Plaats de messen en zet ze vast, zie Messen vervangen.
- Tandwiel invetten, zie Tandwiel invetten.
- Plaats de scheerkop zorgvuldig op de motor. Let erop dat de scheerkop ong. 15° naar links verdraaid wordt geplaatst, en dat de onderste nok in de groef van het motorhuis grijpt.
- Scheerkop smeren, zie Scheerkop smeren.

### Luchtfilter reinigen

- Het luchtfilter **37/38** moet minimaal eenmaal per dag of bij vervuiling worden gereinigd.
- Neem het luchtfilter **37/38** van de draadloze tondeuze af, zie Afb. G.
- Reinig het luchtfilter **37/38** met een borstel grondig in warm water.
- Laat het luchtfilter **37/38** drogen.
- Reinig de draadloze tondeuze.
- Plaats het luchtfilter **37/38** op de draadloze tondeuze.

### Messen naslijpen

- Voor het naslijpen van de messen kunt u zich wenden tot de technische dienst, zie Technische dienst.

## 4.6 Opslag

- De tondeuze en de messen moeten voor opslag grondig worden gereinigd, zie Reinigingsbehandeling.
- Bewaar de tondeuze in een droge, donkere en schone ruimte.

## 5. Messen

### 5.1 Messen passend bij scheerkop GT367

Art.nr.	Aanduiding
GT501	Bovenmes met 15 tanden
GT502	Ondermes met 31 tanden, snijhoogte 3 mm
GT503	Bovenmes met 17 tanden
GT504	Ondermes met 18 tanden, snijhoogte 3 mm
GT505	Bovenmes met 23 tanden
GT506	Ondermes met 23 tanden, snijhoogte 3 mm
GT508	Ondermes met 51 tanden, snijhoogte 1 mm
GT510	als GT506, maar snijhoogte 5 mm
GT511	als GT502, maar snijhoogte 1 mm

### 5.2 Aanbevolen combinaties

Combinatie	onder/boven-mes	Geschikt voor
smal getand	GT501/GT502	Runderen en paarden (normale uitrusting van GT474 en GT367)
	GT501/GT511	Industrieel scheren
	GT505/GT508	(bijvoorbeeld pelsscheren)
middel getand	GT505/GT506	Runderen, honden en geiten
	GT505/GT510	Honden en geiten
breed getand	GT503/GT504	Runderen, fijnwollige schapen en enkele schapen

## 6. Reinigingsbehandeling

### 6.1 Reiniging/desinfectie



GEVAAR

#### Gevaar voor elektrische schok en brand!

- Voordat u gaat schoonmaken:
  - Trek de stekker van de acculader.
  - Klik de lithium-ion-accu los en haal hem uit de draadloze tondeuze.
- Gebruik geen brandbare of explosieve reinigings- en desinfectiemiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het product binnendringt.



VOORZICHTIG

#### Beschadiging of vernietiging van het product door machinale reiniging/desinfectie!

- Reinig/desinfecteer het product uitsluitend handmatig.
- Het product nooit steriliseren.



VOORZICHTIG

#### Beschadiging van het product door gebruik van ongeschikte reinigings-/desinfectiemiddelen!

- Gebruik uitsluitend een toegestaan reinigings-/desinfectiemiddel voor oppervlaktereiniging en volg de aanwijzingen van de fabrikant op.
- Dompel het product nooit onder in water of reinigingsmiddel.
- Laat geen vloeistof in de laadschacht lopen.
- Reinig de contacten in het batterij compartiment met de grootste zorg.

- Wis de behuizing van het product schoon met een pluisvrije doek, bevochtigd met een in de handel verkrijgbaar desinfectiemiddel.
- Maak de resten van het reinigings- en desinfectiemiddel na de inwerkingstijd af met een pluisvrije doek, bevochtigd met zuiver water.
- Droog het product af met een schone, pluisvrije doek.
- Reinig de contacten in de laadschachten met isopropanol of ethylalcohol en een wattenstaafje. Gebruik geen chemicaliën die corrosie bevorderen.
- Herhaal de reiniging/desinfectie, indien nodig.

### 6.2 Controle en testen

- Het product tot kamertemperatuur laten afkoelen.
- Controleer het product na elke reiniging en desinfectie op: reinheid, goede werking en beschadiging.
- Inspecteer het product op beschadigingen, abnormale geluiden, buitensporige verhitte of te sterke trillingen.
- Inspecteer de scheerkop op afgebroken, beschadigde en botte sneden.
- Verwijder beschadigde producten onmiddellijk.

## 7. Onderhoud

Om een betrouwbare werking te garanderen, adviseert Aesculap tenminste eenmaal per jaar een onderhoudsbeurt uit te voeren.



## 8. Opsporen en verhelpen van fouten

### 8.1 Draadloze tondeuze Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Storing	Opsporing	Oorzaak	Oplossing
Draadloze tondeuze start niet	-	Lithium-ion accu niet geactiveerd	Druk knop <b>e</b> op de lithium-ion accu in
	LED van de aan/uit-knop <b>36</b> knippert tweemaal per seconde	Lithium-ion-accu niet geladen	Lithium-ion-accu laden
	-	Lithium-ion-accu defect	Nieuwe lithium-ion-accu aanbrengen
	-	Lithium-ion-accu niet aangebracht	Lithium-ion-accu plaatsen
Draadloze tondeuze stopt tijdens de werking	-	Lithium-ion-accu uitgeschakeld door beveiliging	Draadloze tondeuze uit- en weer inschakelen
	-	Lithium-ion-accu is leeg	Nieuwe lithium-ion-accu aanbrengen

Tondeuze voor runderen en paarden Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

8.2 Lader en lithium-ion-accu

Storing	Opsporing	Oorzaak	Oplossing
Lader werkt niet	LED-indicatie "accu" brandt niet	Voedingskabel niet aangesloten	Netaansluitkabel in de apparaatstekker aan de lader en in het stopcontact van het voedingsnet steken
	Lithium-ion-accu niet geladen	Voedingskabel defect	Voedingskabel vervangen
Lithium-ion-accu defect		Lithium-ion-accu door de fabrikant laten repareren, zie Technische dienst	
Lithium-ion-accu wordt niet geladen	Lithium-ion-accu aangebracht, ladingsindicator brandt niet	Contacten van de acculader verontreinigd	Reinig de contactpunten in de laadschacht, zie Reinigingsbehandeling
	-	Contacten van de acculader beschadigd	Acculader door de fabrikant laten repareren, zie Technische dienst
	-	Lithium-ion-accu defect	lithium-ion-accu door de fabrikant laten repareren, zie Technische dienst
	-	Acculader defect	Acculader door de fabrikant laten repareren, zie Technische dienst
	-	Tijdens het opladen wordt in de lithium-ion accu een te hoge temperatuur gemeten	Lithium-ion accu uit de laadschacht halen, laten afkoelen en het laden herhalen Als de storing opnieuw optreedt: lithium-ion-accu door de fabrikant laten repareren, zie Technische dienst
	-	Laadstoring of lithium-ion accu is defect	Lithium-ion accu uit de laadschacht nemen en het laden herhalen Als de storing opnieuw optreedt: lithium-ion-accu door de fabrikant laten repareren, zie Technische dienst





## 9. Technische dienst



WAARSCHUWING

**Gevaar voor verwonding en/of slechte werking!**

➤ **Breng geen wijzigingen aan het product aan.**

Wijzigingen aan medisch-technische hulpmiddelen kunnen leiden tot het verlies van elke aanspraak op garantie en het intrekken van eventuele goedkeuringen.

### Service-adressen

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach / Germany

Phone: +49 (0) 8086 933-100

Fax: +49 (0) 8086 933-500

E-Mail: [info@kerbl.com](mailto:info@kerbl.com)

[www.kerbl.com](http://www.kerbl.com)

Andere service-adressen zijn verkrijgbaar op het bovengenoemde adres.

## 10. Accessoires/Reserveonderdelen

Art.nr.	Aanduiding	Uitvoering	Voeding of netsnoer	Lithium-ion accu	Laadstation compleet	Accessoires
GT804/ GT806	Econom CL	Europa behalve Groot- Brittannië	TA012170 Europese platte stekker, zwart, l=1,8 m	GT801	GT803	GT604 Speciale olie voor messen en scheerkop  GT605 Tandwielvet (tube)
GT814/ GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT804G/ GT806G	Econom CL	Groot- Brittannië	TA012169 GB-stekker, zwart, l=1,8 m			
GT814G/ GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT804K/ GT806K	Econom CL	VS	TA012168 2-pins apparaatstekker, zwart, l=1,8 m			
GT814K/ GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT804A/ GT806A	Econom CL	Australië	TA013657 2-pins apparaatstekker, zwart, l=1,8 m			
GT814A/ GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

## Tondeuze voor runderen en paarden Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

### 11. Technische specificaties

#### 11.1 Draadloze tondeuze Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

	GT800 Econom CL	GT810 Econom CL Equipe	GT834 Econom CL Fitter
Aantal slagen per minuut	max. 2 750 1/min	max. 2 250 1/min	max. 3 000 1/min
Looptijd met een lithium-ion accu	ong. 70 min	ong. 80 min	ong. 70 min
Nominale spanning	max. 21,6 V	max. 21,6 V	max. 21,6 V
Capaciteit	max. 2,6 A	max. 2,6 A	max. 2,6 A
Gewicht (met scheerkop en accu)	1 250 g	1 250 g	1 250 g
Keurmerken	TÜV-GS, CE, UL, CSA	TÜV-GS, CE, UL, CSA	CE, UL, CSA


#### 11.2 Acculader

	GT803
Voedingsspanningsbereik (stroomopname)	100 V tot 240 V
Frequentie	50 Hz tot 60 Hz
Laad-/uitgangsspanning	max. 25,2 V
Laad-/uitgangsstroom	max. 2,6 A
Gewicht (met kabel en voeding)	764 g
Keurmerken	TÜV-GS, CE, UL, CSA

#### 11.3 Lithium-ion accu

	GT801
Celtype	Li
Nominale spanning	21,6 V
Capaciteit	2,6 Ah
Laadduur	ongeveer 70 min
Keurmerken	TÜV-GS, CE, UL, CSA


### 11.4 Conformiteitsverklaring

	<p>Wij verklaren in eigen naam dat dit product in overeenstemming is met de volgende normen en normatieve documenten: 2004/108/EG EMC-richtlijn: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-8 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemene voorschriften</li> <li>- voor tondeuses</li> </ul> <p>Aesculap Suhl GmbH</p>
---	--

### 12. Afvoer

Elektrisch gereedschap, accessoires en verpakking moeten op een milieubewuste manier worden gerecycled.

#### 12.1 Alleen voor EU-landen

	<p>Elektrisch gereedschap hoort niet bij het huishoudelijk afval! Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten en de overeenkomstige nationale voorschriften moet afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden worden verzameld en op een milieuverantwoorde wijze worden gerecycled.</p>
---	---

#### 12.2 Lithium-ion accu

Werp lithium-ion-accu's niet bij het huishoudelijk afval, in vuur of in het water. Defecte of verbruikte accu's moeten worden ingezameld, gerecycled of op milieuvriendelijke wijze worden verwijderd volgens richtlijn 2006/66/EG.



## 13. 2 Jaar garantie

Geachte klant,

Hartelijk dank dat u voor een product van Aesculap hebt gekozen.

De naam Aesculap staat al decennialang borg voor bewezen kwaliteit en voortreffelijke service. Wij bieden onze klanten innovatieve producten die topprestaties garanderen. Aesculap produceert kwaliteitsapparaten, die met de grootste zorg worden gefabriceerd uit hoogwaardige materialen. Wij willen u er graag op wijzen dat wij niet aansprakelijk zijn voor gebreken aan onze producten, wanneer het gebrek wordt veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of doordat het product onoordeelkundig wordt toegepast of niet-passende of niet-perfect functionerende producten van vreemde makelij worden ingezet.

Onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage en waarvoor wij om die reden niet aansprakelijk accepteren, zijn de accu en de scheerkop. Eveneens uitgesloten zijn gebreken die geen of nauwelijks invloed hebben op de waarde of goede werking van het product.

Indien wij in het kader van onze kwaliteitsgarantie de aansprakelijkheid aanvaarden, behouden wij ons voor het product te repareren of te vervangen.



## Klippemaskine til kvæg og heste Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

### Oversigt

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse
1	GT502	1	Nederste skæreplade (GT804–GT816/ GT834)
2	GT501	1	Øverste skæreplade (GT804/GT806/ GT834)
	GT505	1	Øverste skæreplade (GT814/GT816)
3	GT610405	1	Rouletmøtrik
4	GT367205	1	Reguleringskrue
6	TA010017	2	Skrue
7	GT367201	1	Svingningsgenerator
8	GT610304	1	Svingningsblokke
9	GT610010	2	Klemskrue
10	GT367202	6	Svingningsfjederblad
11	GT367812	1	Cylindrisk tandhjul med excenteraksel
15	TA008295	2	Styretap
16	GT367801	1	Klippehovedkabinet monteret
17	TA005091	2	Skrue
18	GT367802	1	Afstandsstykke, venstre
19	GT367803	1	Afstandsstykke, højre
20	TA007765	1	Undersænket skrue
25	GT610307	1	Fjederbro
26	GT367207	1	Fikseringsskrue
27	GT367804	1	Svingningsgenerator, monteret
35	TA009222	1	Skrue
36	GT800249	1	Tænd-/sluk-kontakt (med LED)
37	GT800804	1	Luftfilter (blå) Econom CL
38	GT800844	1	Luftfilter (bordeaux) Econom CL Equipe
39	GT801	1	Litium-ion-akkumulator
40	GT803	1	Opladningsapparat
a	-	1	Smørested akkumulatordrevet klippemaskine
b	-	1	Svingningsgenerators spids
c	-	1	Boringer i øverste skæreplade
d	-	1	Batteriindikator litium-ion- akkumulator
e	-	1	Kontakt på litium-ion-akkumulator
f	-	1	Akkumulatorlåsning
g	GT800/ GT810	1	Akkumulatordrevet klippemaskine

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse
-	GT604	1	Specialsmørelse til klippehoved og skæreplader
	GT605	1	Gears mørelse (tube)

### Symboler på produktet

	OBS! Generelt advarselssymbol OBS! Vær opmærksom på vedlagte dokumenter
	Mærkning af el- og elektronikudstyr i henhold til direktiv 2012/19/EU (WEEE), se Bortskaffelse

### Indholdsfortegnelse

1. Sikker håndtering.....	75
2. Apparatbeskrivelse.....	75
2.1 Leveringsomfang.....	75
2.2 Komponenter, der er nødvendige til drift.....	75
2.3 Anvendelsesformål.....	75
2.4 Funktionsmåde.....	76
3. Forberedelse.....	76
4. Arbejde med akkumulatordrevet klippemaskine, opladningsapparat og litium-ion-akkumulator.....	76
4.1 Klargøring.....	76
4.2 Funktionstest.....	76
4.3 Tilslut opladningsapparatet/oplad litium-ion-akkumulatoren.....	77
4.4 Litium-ion-akkumulator skiftes.....	77
4.5 Betjening af klippehovedet.....	78
4.6 Opbevaring.....	79
5. Skæreplader.....	79
5.1 Skæreplader, der passer til klippehoved GT369.....	79
5.2 Anbefalede kombinationer.....	79
6. Rensning.....	80
6.1 Rengøring/desinfektion.....	80
6.2 Kontrol og afprøvning.....	80
7. Vedligeholdelse.....	80
8. Fejlfinding og afhjælpning af fejl.....	81
8.1 Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter.....	81
8.2 Opladningsapparat og litium-ion-akkumulator.....	82
9. Teknisk service.....	83
10. Tilbehør/reservedele.....	83
11. Tekniske specifikationer.....	84
11.1 Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter.....	84
11.2 Opladningsapparat.....	84
11.3 Litium-ion-akkumulator.....	84
11.4 Overensstemmelseserklæring.....	84
12. Bortskaffelse.....	84
12.1 Kun EU-lande.....	84
12.2 Litium-ion-akkumulator.....	84
13. 2 års garanti.....	85



## 1. Sikker håndtering



Livsfare! Fare for elektrisk stød!

- Åbn ikke produktet.
- Produktet må kun tilsluttes til elforsyningsnet med jord.

- Inden produktet tages i anvendelse, skal det kontrolleres for korrekt funktionsduelighed og stand.
- Opladningsapparat og litium-ion-akkumulator skal opbevares ved stuetemperatur.
- Opladningsapparat og litium-ion-akkumulator skal holdes tørre.
- Inden første ibrugtagning skal litium-ion-akkumulatoren oplades.
- For at undgå skader som følge af uhensigtsmæssig opbygning eller drift og for at sikre producentens garanti og ansvar:
  - Anvend kun produktet i overensstemmelse med nærværende brugsanvisning.
  - Følg oplysningerne vedrørende sikkerheden og henvisninger til vedligeholdelses- og eftersynsarbejder.
  - Kombiner kun Aesculap-produkter med hinanden.
- Brugsanvisningen skal opbevares tilgængeligt for brugeren.
- Gældende standarder skal følges.
- Vær sikker på, at de elektriske installationer i rummet svarer til IEC-kravene.
- Netledninger tages ud af stikkontakten ved at trække i stikket og ikke i ledningen.
- Produktet må ikke anvendes på eksplosionsfarlige områder.
- Beskadede eller defekte produkter må ikke anvendes. Et beskadiget produkt skal straks frasorteres.

## 2. Apparatbeskrivelse

### 2.1 Leveringsomfang

Varenr.	Betegnelse
GT800 GT810 GT834	Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL, Econom CL Equipe hhv. Econom CL Fitter
GT801	Litium-ion-akkumulator
GT803	Opladningsapparat
se Tilbehør/ reservedele	Strømtilslutningsledning (med stik)
TA013895	Brugsanvisning
GT604	Olieflaske

### 2.2 Komponenter, der er nødvendige til drift

- Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter
- Opladningsapparat
- Strømtilslutningsledning (med stik)
- Litium-ion-akkumulator

### 2.3 Anvendelsesformål

#### Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Den akkumulatordrevne klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter anvendes til at klippe store dyr som kvæg, heste og store hunde.

#### Opladningsapparat GT803/litium-ion-akkumulator GT801

Opladningsapparatet GT803 anvendes til opladning af litium-ion-akkumulatoren GT801.

## Klippemaskine til kvæg og heste Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

### 2.4 Funktionsmåde

#### Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

Den akkumulatordrevne klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/  
Econom CL Fitter tændes og slukkes med tænd-/sluk-kontakten **36**.

#### Bemærk

For at undgå, at der ved en fejltagelse tændes eller slukkes for maskinen, reagerer tænd-/sluk-kontakten først >0,5 sekunder efter betjeningen.

#### Opladningsapparat GT803/litium-ion-akkumulator GT801

Opladningsapparatet GT803 er konstrueret til en netspænding på 100 V til 240 V og på 50 Hz til 60 Hz.

For at klargøre opladningsapparatet GT803 til drift tilsluttes det strømstikket på elforsyningskontakten.

Opladningsapparatet GT803 er udstyret med en batteriboks.

Når li-ionen-akkumulatoren tilsluttes ladestationen, starter opladningen automatisk.

Opladningstiden afhænger af opladningstilstanden og litium-ion-akkumulatorens kapacitet.

#### Opladningsprincip

Litium-ion-akkumulator oplades med konstante strømimpulser.

Litium-ion-akkumulatorens ladetilstand overvåges under opladningen. Under overvågningen af opladningskurven sikres en 100 %-opladning uden overbelastning.

Desuden overvåges akkumulatorens temperatur og opladningstid.

Ladetilstandsindikatoren **d** på litium-ion-akkumulatoren har 5 LED'er. Hver LED står for 20 % opladningsvolumen. Hvis akkumulatoren befinder sig under opladning, blinker LED'en for den pågældende ladetilstand. Når alle LED'er lyser vedvarende, er akkumulatoren helt opladet.

#### Opladningstid

Når den maksimale opladningstid er nået, afbrydes opladningen. Opladningstiden er ca. 70 min.

## 3. Forberedelse

Hvis de følgende forskrifter ikke overholdes, påtager Aesculap sig intet ansvar for dette.

- Ved opsætning og drift af produktet skal følgende overholdes:
  - de nationale installations- og brugerforskrifter,
  - de nationale forskrifter om brand og eksplosionsbeskyttelse,
  - Anvendelsesansvisninger iht. IEC-/VDE-bestemmelser.

## 4. Arbejde med akkumulatordrevet klippemaskine, opladningsapparat og litium-ion-akkumulator

### 4.1 Klargøring

#### Tilslutning af tilbehør

Tilbehørskombinationer, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må udelukkende anvendes, hvis de udtrykkeligt er bestemt til den pågældende anvendelse. Ydelseskendetegn samt sikkerhedskrav må ikke påvirkes på en negativ måde.

### 4.2 Funktionstest

#### Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

- Udfør visuel kontrol.
- Kontrollér, at luftfilteret **37/38** sidder korrekt, se Fig. G.
- Skub litium-ion-akkumulatoren **39** ind i maskinens åbning, og lås den.
- Test akkumulatorens ladetilstand: Tryk på kontakten **e**, se Fig. F.
- Ladetilstandsindikatoren **d** viser ladetilstanden.

#### Bemærk

For at forhindre, at litium-ion-akkumulatoren aflader, når maskinen ikke bruges, afbrydes den elektroniske forbindelse mellem litium-ion-akkumulatoren og styringen af den akkumulatordrevne klippemaskine efter 1 time.

- Litium-ion-akkumulator **39** reaktiveres: Betjen kontakten **e**, se Fig. F. Alle LED'er i ladetilstandsindikatoren **d** lyser.

#### Opladningsapparat/litium-ion-akkumulator

- Udfør visuel kontrol.
- Før produktet tilsluttes elforsyningsnettet:
  - Kontrollér, om strømtilslutningsledningen eventuelt er beskadiget.
  - Kontrollér produktet for eventuelle beskadigelser (f. eks. skal kontakterne i batteriboksen kontrolleres for bøjedede kontakter).
- Sæt strømtilslutningsledningen på apparatets stik ind i ladestationen.
- Tilslut netstikket til en stikkontakt fra forsyningsnettet.
- Sæt litium-ion-akkumulatoren **39** i batteriboksen på opladningsapparatet og oplad den, se Fig. F.



#### 4.3 Tilslut opladningsapparatet/oplad litium-ion-akkumulatoren



ADVARSEL

Brandfare ved kortslutning af poler pga. væsker eller metaldele!

- Litium-ion-akkumulatoren må ikke kortslutte.



ADVARSEL

Fare for personskade på grund af en beskadiget strømtilslutningsledning!

- Kontrollér strømtilslutningsledningen for beskadigelser inden opladningen.
- En beskadiget strømtilslutningsledning skal udskiftes af producenten.



ADVARSEL

Der er fare for personskade og materiel skade på grund af en beskadiget litium-ion-akkumulator!

- Litium-ion-akkumulatoren skal kontrolleres for beskadigelser før opladningen.
- En beskadiget litium-ion-akkumulator må ikke anvendes eller oplades.



FORSIGTIG

Tab af kapacitet/ydeevne for den afladde litium-ion-akkumulator på grund af opbevaring i længere tid!

- Ved længere tids opbevaring må litium-ion-akkumulatoren kun opbevares fuldt opladet og må kun oplades igen én gang om måneden.



FORSIGTIG

Ødelæggelse af produkt, batteriboks eller litium-ion-akkumulator ved isætning af en forkert akkumulatortype i batteriboksen!

- Litium-ion-akkumulatoren må kun sættes i den dertil indrettede batteriboks.

#### Bemærk

Opladningsapparatet kan benyttes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet behørigt undervist i sikker brug af apparatet og forstår de farer, som det kan medføre.

- Børn må ikke få lov til at lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse af opladningsapparatet må ikke udføres af børn, som ikke er under opsyn.

#### Bemærk

Litium-ion-akkumulatoren bliver let varm under opladningen.

#### Bemærk

Når der ikke arbejdes med opladningsapparatet, skal strømtilslutningsledningen tages ud af stikket.

- Kun Aesculap opladningsapparat GT803 må anvendes til opladning af litium-ion-akkumulatoren.
- Opladningsapparatet 40 tilsluttes: Strømtilslutningsledningens stik sættes i opladningsapparatet.
- Strømtilslutningsledningens stik sættes i stikkontakten.
- Litium-ion-akkumulatoren 39 sættes i batteriboksen på opladningsapparatet og oplades, se Fig. F.  
Ladetilstandsindikatorernes LED'er **d** på litium-ion-akkumulatoren blinker ifølge den aktuelle opladningsstatus. Når alle LED'er lyser vedvarende, er akkumulatoren helt opladet.

#### 4.4 Litium-ion-akkumulator skiftes

- Den akkumulatordrevne klippemaskine **g** med klippehovedet holdes nede, således af litium-ion-akkumulator **39** ikke falder ned ved løsningse Fig. 1.
- Akkumulatorklåsning **f** løsnes med tommelfingeren.



Fig. 1

## Klippemaskine til kvæg og heste Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Litium-ion-akkumulatoren **39** trækkes ud, oplades og/eller den opladede erstatnings-litium-ion-akkumulator GT801 skubbes ind i den akkumulatordrevne klippemaskine **g**, se Fig. 2.



Fig. 2

- Litium-ion-akkumulatoren **39** sikres med akkumulatorlås **f**, se Fig. 3.



Fig. 3

### 4.5 Betjening af klippehovedet

#### Smøring af klippehovedet



Klippemaskinen eller klippehovedet kan blive beskadiget af forkert smøring!

- Klippehovedet må kun smøres, når maskinen kører.
- Maskine og klippehoved må ikke dyppes ned i væsker.
- Anvend kun let smørelse GT604.

- Smør klippehoved rigeligt over smørestedet **a** før hvert dyr, se Fig. A.
- Fjederblade **10** smøres 2-3 gange om dagen med 3-4 dråber olie, se Fig. C.

#### Smøring af tandhjul



Klippemaskine eller tandhjul kan blive beskadiget af forkert smøring!

- Anvend udelukkende gearsørelse GT605.
- Tandhjulet smøres 1-2 gange pr. klippesæson.

- Litium-ion-akkumulatoren **39** låses op og fjernes.
- Begge skruer **6** drejes ud, se Fig. B.
- Når man ser på klippehovedet, skal dette drejes ca. 15° til venstre og fjernes fra motorbeklædningen.
- Ca. 1 cm smørelse påføres på to overfor hinanden placerede steder på tandhjulet **11**, se Fig. C.
- Klippehovedet anbringes forsigtigt på motoren. Her skal det sikres, at klippehovedet drejes ca. 15° til venstre, når det drejes på, og at det nederste stik griber ind i motorbeklædningens not.

#### Skift af skæreplader

- Litium-ion-akkumulatoren **39** låses op og fjernes.
- Rouletmøtrikken **3** løsnes, og reguleringsskruen **4** drejes ca. 2 omdrejninger ud, se Fig. A.
- Begge klemmskruer **9** løsnes, den nederste skæreplade **1** trækkes fremad og af, og den øverste skæreplade **2** tages ud, se Fig. D og Fig. E.
- Før den øverste skæreplade **2** lægges ind, skal det sikres, at svingningsblokkene **8** befinder sig i den dertil indrettede udsparring af svingningsgeneratoren **7**, se Fig. E.
- Isæt den øverste skæreplade **2**. Sørg derved for, at begge spidser **b** på svingningsgeneratoren **7** griber præcist ind i boringerne **c** på den øverste skæreplade **2**, se Fig. D.
- Den nederste skæreplade **1** under klemmskruens hoved **9** skubbes helt ind mod klippehovedkabinettet, og begge klemmskruer **9** trækkes til.
- Reguleringsskruen **4** drejes ind, indtil begge skæreplader trykker let på hinanden, se Fig. A.





## Indstil pladetryk

### Bemærk

Pladetrykkets indstilling skal ske, mens maskinen kører og uden hjælpeværktøj.

### Bemærk

Et for stort pladetryk fører til høj opvarmning og stort slid på skærepladerne.

- Rouletmøtrikken **3** løsnes, og reguleringskraven **4** drejes forsigtigt ud, indtil den øverste skæreplade **2** ikke mere trykkes på den nederste skæreplade **1** (lys køretone), se Fig. A.
- Reguleringskraven **4** drejes ind, indtil en let modstand kan mærkes. Herfra drejes endnu ca. en omdrejning, hvorefter rouletmøtrikken **3** trækkes til.

## Rengøring af klippehovedet

- Klippehovedet rengøres mindst efter nogle klippedage eller ved tilsmudsning.
- Litium-ion-akkumulatoren **39** låses op og fjernes.
- Begge skruer **6** drejes ud, se Fig. B.
- Når man ser på klippehovedet, skal dette drejes ca. 15° til venstre og fjernes fra motorbeklædningen.
- Skærepladerne tages af se Skift af skæreplader.
- Klippehovedets indre rum og klippehovedets enkeltdele rengøres grundigt med en børste eller pensel.
- Skærepladerne lægges ind og strammes, se Skift af skæreplader.
- Tandhjulet smøres, se Smøring af tandhjul.
- Klippehovedet anbringes forsigtigt på motoren. Her skal det sikres, at klippehovedet drejes ca. 15° til venstre, når det drejes på, og at det nederste stik griber ind i motorbeklædningens not.
- Smøring af klippehovedet, se Smøring af klippehovedet.

## Rengøring af luftfilteret

- Luftfilteret **37/38** skal renses mindst én gang om dagen eller ved tilsmudsning.
- Luftfilteret **37/38** tages ud af den akkumulatordrevne klippemaskine, se Fig. G.
- Luftfilteret **37/38** rengøres grundigt med en børste i varmt vand.
- Lad derefter luftfilteret **37/38** tørre.
- Akkumulatordrevet klippemaskine skylles.
- Luftfilteret **37/38** sættes på den akkumulatordrevne klippemaskine.

## Skærepladerne efterslibes

- Til efterslibning af skærepladerne skal der rettes henvendelse til den tekniske serviceafdeling, se Teknisk service.

## 4.6 Opbevaring

- Klippemaskinen og skærepladerne rengøres godt før opbevaring, se Rensning.
- Klippemaskinen opbevares i et tørt, mørkt og rent rum.

## 5. Skæreplader

### 5.1 Skæreplader, der passer til klippehoved GT369

Varenr.	Betegnelse
GT501	Øverste skæreplade med 15 tænder
GT502	Nederste skæreplade med 31 tænder, Skæringshøjde 3 mm
GT503	Øverste skæreplade med 17 tænder
GT504	Nederste skæreplade med 18 tænder, Skæringshøjde 3 mm
GT505	Øverste skæreplade med 23 tænder
GT506	Nederste skæreplade med 23 tænder, Skæringshøjde 3 mm
GT508	Nederste skæreplade med 51 tænder, Skæringshøjde 1 mm
GT510	som GT506, skæringshøjde dog 5 mm
GT511	som GT502, skæringshøjde dog 1 mm

### 5.2 Anbefalede kombinationer

Kombination	Over-/underplade	Egnet til
med tætsiddende tænder	GT501/GT502	Kvæg og heste (normalt udstyr på GT474 og GT367)
	GT501/GT511	Industriel klipning
	GT505/GT508	(f.eks. klipning af pels)
med mellemstore mellemrum mellem tænder	GT505/GT506	Kvæg, hunde og geder
	GT505/GT510	Hunde og geder
med brede tænder	GT503/GT504	Kvæg, får med fin uld og enkelte får

## 6. Rensning

### 6.1 Rengøring/desinfektion



**Fare for elektrisk stød og brand!**

- Før rengøringen:
  - Tag netstikket ud af opladningsapparatet
  - Litium-ion-akkumulatoren låses op og fjernes fra den akkumulatordrevne klippemaskine.
- Brændbare og eksplosionsfarlige rengørings- og desinfektionsmidler må ikke anvendes.
- Det skal sikres, at væske ikke kan trænge ind i produktet.



**Beskadigelse eller ødelæggelse af produktet som følge af maskinel rengøring/desinfektion!**

- Produktet må kun rengøres/desinficeres manuelt.
- Produktet må aldrig steriliseres.



**Skader på produktet som følge af uegnede rengørings-/desinfektionsmidler!**

- Til fladerengøring anvendes godkendte rengørings-/desinfektionsmidler i henhold til producentens anvisninger.
- Læg aldrig produktet i vand eller rengøringsmiddel.
- Der må ikke komme væske ind i batteriboksene.
- Kontakterne i batteriboksen rengøres med største omhu.

- Produktets kabinet aftørres med en fnugfri klud, der er vædet med et almindeligt desinfektionsmiddel, der fås i handelen.
- Efter behov kan rester af rengørings- og desinfektionsmiddel tørres af efter dets indvirkningstid med en fnugfri klud, der er vædet med rent vand.
- Til aftørring anvendes en ren, fnugfri klud.
- Kontakterne i batteriboksen rengøres med isopropanol eller ethylalkohol og en vatpind. Der må ikke anvendes korrosionsfremmende kemikalier.
- Om nødvendigt gentages rengøringen/desinfektionen.

### 6.2 Kontrol og afprøvning

- Produktet nedkøles til stuetemperatur.
- Efter hver rengøring og desinfektion kontrolleres produktet for: renhed, funktion og beskadigelser.
- Produktet skal afprøves med hensyn til beskadigelser, unormal støj, alt for kraftig opvarmning eller for stærke vibrationer.
- Klippehovedet kontrolleres for brudte, beskadigede og sløve skær.
- Et beskadiget produkt skal straks frasorteres.

## 7. Vedligeholdelse

For at kunne garantere en pålidelig drift anbefaler Aesculap vedligeholdelse **mindst én gang om året**.



## 8. Fejlfinding og afhjælpning af fejl

### 8.1 Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Fejl	Registrering	Årsag	Afhjælpning
Den akkumulatordrevne klippemaskine kører ikke	-	Litium-ion-akkumulatoren er ikke aktiveret	Tryk på kontakten e på litium-ion-akkumulatoren
	LED på tænd-/sluk-kontakten <b>36</b> blinker to gange i sekundet	Litium-ion-akkumulatoren er ikke opladet	Oplad litium-ion-akkumulatoren
	-	Litium-ion-akkumulatoren er defekt	Isæt en ny litium-ion-akkumulator
	-	Litium-ion-akkumulatoren er ikke isat	Isæt litium-ion-akkumulator
Den akkumulatordrevne klippemaskine står stille under driften	-	Litium-ion-akkumulatoren er blevet slukket af fejlstrømsrelæet	Frakobl og tilslut den akkumulatordrevne klippemaskine igen
	-	Litium-ion-akkumulator er tom	Isæt en ny litium-ion-akkumulator

Klippemaskine til kvæg og heste Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

8.2 Opladningsapparat og litium-ion-akkumulator

Fejl	Registrering	Årsag	Afhjælpning
Opladningsapparat uden funktion	LED-displayet "Akku" lyser ikke	Strømtilslutningsledningen er ikke sat i	Strømtilslutningsledningen sættes i stikket på opladningsapparatet og i forsyningsnettets stik
	Litium-ion-akkumulatoren er ikke opladet	Strømtilslutningsledningen er defekt	Udskift strømtilslutningsledningen
		Litium-ion-akkumulator er defekt	Litium-ion-akkumulatoren skal repareres af producenten, se Teknisk service
Litium-ion-akkumulatoren er ikke opladet	Litium-ion-akkumulatoren er sat i, men ladetilstandsindikatoren lyser ikke	Kontakten på opladningsapparatet er tilsmudset	Rengør kontakten i batteriboksen, se Rensning
	-	Kontakten på opladningsapparatet er beskadiget	Opladningsapparatet skal repareres af producenten, se Teknisk service
	-	Litium-ion-akkumulator er defekt	Litium-ion-akkumulatoren skal repareres af producenten, se Teknisk service
	-	Opladningsapparatet er defekt	Opladningsapparatet skal repareres af producenten, se Teknisk service
	-	Under opladningen måles en for høj temperatur i litium-ion-akkumulatoren	Tag litium-ion-akkumulatoren ud af batteriboksen, lad den afkøle, og gentag opladningen Ved fornyet fejl: Litium-ion-akkumulator skal repareres af producenten, se Teknisk service
	-	Fejl ved opladningen af litium-ion-akkumulatoren	Tag litium-ion-akkumulatoren ud af batteriboksen, og gentag opladningen Ved fornyet fejl: Litium-ion-akkumulator skal repareres af producenten, se Teknisk service



## 9. Teknisk service



ADVARSEL

**Fare for personskade og/eller fejlfunktion!**

➤ **Produktet må ikke modificeres.**

Modifikationer på medicinteknisk udstyr kan medføre, at garanti-/reklamationskrav samt eventuelle godkendelser bortfalder.

### Serviceadresser

Albert Kerbl GmbH  
Felizenzell 9  
84428 Buchbach / Germany  
Phone: +49 (0) 8086 933-100  
Fax: +49 (0) 8086 933-500  
E-Mail: [info@kerbl.com](mailto:info@kerbl.com)  
[www.kerbl.com](http://www.kerbl.com)

Yderligere serviceadresser kan hentes via den ovenfor anførte adresse.

## 10. Tilbehør/reservedele

Varenr.	Betegnelse	Model	Netkabel eller netdel	Litium-ion-akkumulator	Ladestation komplet	Tilbehør
GT804/ GT806	Econom CL	Europa uden for Storbritannien	TA012170 Europa-fladstik, sort, L=1,8 m	GT801	GT803	GT604 Specialsmørelse til skæreplader og klippehoved  GT605 Gearsmørelse (tube)
GT814/ GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT804G/ GT806G	Econom CL	Storbritannien	TA012169 GB-stik sort, L=1,8 m			
GT814G/ GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT804K/ GT806K	Econom CL	USA	TA012168 2-polet-stik, sort, L=1,8 m			
GT814K/ GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT804A/ GT806A	Econom CL	Australien	TA013657 2-polet-stik, sort, L=1,8 m			
GT814A/ GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

## Klippemaskine til kvæg og heste Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

### 11. Tekniske specifikationer

#### 11.1 Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

	GT800 Econom CL	GT810 Econom CL Equipe	GT834 Econom CL Fitter
Slagtal	maks. 2 750 1/min	maks. 2 250 1/min	maks. 3 000 1/min
Driftstid for en litium- ion-akkumulator	ca. 70 min	ca. 80 min	ca. 70 min
Nominal spænding	maks. 21,6 V	maks. 21,6 V	maks. 21,6 V
Kapacitet	maks. 2,6 A	maks. 2,6 A	maks. 2,6 A
Vægt (med klippehoved og akkumulator)	1 250 g	1 250 g	1 250 g
Kontroltegn	TÜV-GS, CE, UL, CSA	TÜV-GS, CE, UL, CSA	CE, UL, CSA

#### 11.2 Opladningsapparat

	GT803
Netspændingsområder (strømforbrug)	100 V til 240 V
Frekvens	50 Hz til 60 Hz
Opladnings-/udgangsspænding	maks. 25,2 V
Opladnings-/udgangsstrøm	maks. 2,6 A
Vægt (med kabel og netdel)	764 g
Kontroltegn	TÜV-GS, CE, UL, CSA

#### 11.3 Litium-ion-akkumulator

	GT801
Cellotype	Li
Nominal spænding	21,6 V
Kapacitet	2,6 Ah
Opladningstid	ca. 70 min
Kontroltegn	TÜV-GS, CE, UL, CSA

### 11.4 Overensstemmelseserklæring



Vi erklærer med eget ansvar, at dette produkt stemmer overens med de følgende normer samt normative dokumenter:  
2004/108/EF EMK-direktiv:  
DIN EN 60335-1  
DIN EN 60335-2-8  
Sikkerhed ved elektriske apparater til privat brug og til lignende formål  
– generelle krav  
– til hårklippemaskiner  
Aesculap Suhl GmbH

### 12. Bortskaffelse

Elværktøj, tilbehør og emballage skal afleveres på en miljøvenlig genbrugsstation.

#### 12.1 Kun EU-lande



Elværktøj må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!  
Ifølge det europæiske direktiv 2012/19/EU vedrørende elektronik og elektronikaffald og deres transponering inden for national lovgivning skal udtjent elværktøj opsamles separat og afleveres på en miljøvenlig genbrugsstation.

#### 12.2 Litium-ion-akkumulator

Litium-ion-akkumulatorer må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet og må ikke kastes i ild eller vand. Defekte eller udtjente litium-ion-akkumulatorer skal ifølge direktiv 2006/66/EF samles, genbruges eller bortskaffes på miljøvenlig måde.



## 13. 2 års garanti

Kære kunde,

Mange tak, fordi De har besluttet Dem for et produkt fra vores firma.

Navnet Aesculap har i årtier stået for afprøvet kvalitet og førsteklasses service. Vi tilbyder vores kunder innovative og effektive produkter. Aesculap fremstiller kvalitetsudstyr og garanterer Dem anvendelse af kvalitetsmaterialer og omhyggelig produktion. Vi vil gerne henvise til, at vi ikke kan påtage os ansvaret for mangler ved vores produkter, hvis disse er opstået på grund af ukorrekt brug, normalt slid eller ved, at produktet er blevet anvendt uhensigtsmæssigt, eller fordi der er isat fremmedprodukter, som ikke passer til eller som ikke fungerer upåklageligt.

Dele, som typisk bliver slidt, og som vi derfor ikke hæfter for, er akkumulatoren og klippehovedet. Ligeledes undtaget er mangler, som ikke eller kun i ubetydelig grad påvirker værdien eller funktionen.



Hvis vi hæfter inden for rammerne af vores garanti, forbeholder vi os retten til at reparere eller udskifte produktet.

## Klippemaskin til storfe og hest Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

### Oversikt

Pos.	Art.nr.	Antall	Betegnelse
1	GT502	1	Nedre klippeplate (GT804–GT816/GT834)
2	GT501	1	Øvre klippeplate (GT804/GT806/GT834)
	GT505	1	Øvre klippeplate (GT814/GT816)
3	GT610405	1	Fingermutter
4	GT367205	1	Justeringsskrue
6	TA010017	2	Skrue
7	GT367201	1	Oscillator
8	GT610304	1	Oscillatorklosser
9	GT610010	2	Klemskrue
10	GT367202	6	Oscillatorfjærblad
11	GT367812	1	Tannhjul med eksenteraksel
15	TA008295	2	Styrepinne
16	GT367801	1	Klippehodehus montert
17	TA005091	2	Skrue
18	GT367802	1	Avstandsstykke, venstre
19	GT367803	1	Avstandsstykke, høyre
20	TA007765	1	Forsenket skrue
25	GT610307	1	Fjærbro
26	GT367207	1	Festeskrue
27	GT367804	1	Oscillator, montert
35	TA009222	1	Skrutrekker
36	GT800249	1	På/av-knapp (med LED)
37	GT800804	1	Luftfilter (blått) Econom CL
38	GT800844	1	Luftfilter (bordeaux) Econom CL Equipe
39	GT801	1	Litium-ione-batteri
40	GT803	1	Lader
a	–	1	Smørepunkt batteridrevet klippemaskin
b	–	1	Spissene på oscillatoren
c	–	1	Hull i øvre klippeplate
d	–	1	Ladetilstandsindikator li-ione-batteri
e	–	1	Knapp på Li-ion-batteriet
f	–	1	Batterilås
g	GT800/ GT810	1	Oppladbar klippemaskin
	GT604	1	Spesialolje til klippehode og klippeplater
	GT605	1	Girfett (tube)

### Symboler på produktet

	Forsiktig, generelt varselsymbol Forsiktig, les følgedokumenter
	Merking av elektrisk og elektronisk utstyr i henhold til direktiv 2012/19/EF (WEEE), se Avfallsbehandling

### Indholdsfortegnelse

1.	Sikker håndtering.....	87
2.	Beskrivelse av apparatet.....	87
2.1	Leveringsomfang.....	87
2.2	Komponenter som kreves til drift.....	87
2.3	Bruksområde.....	87
2.4	Funksjonsmåte:.....	88
3.	Klargjøring.....	88
4.	Arbeide med batteridrevet klippemaskin, lader og li-ione-batteri.....	88
4.1	Klargjøring.....	88
4.2	Funksjonskontroll.....	88
4.3	Koble til lader/lade li-ione-batteri.....	89
4.4	Skifte li-ione-batteri.....	89
4.5	Håndtering av klippehodet.....	90
4.6	Lagring.....	91
5.	Klippeplater.....	91
5.1	Klippeplater som passer til klippehode GT367.....	91
5.2	Anbefalte kombinasjoner.....	91
6.	Klargjøring.....	92
6.1	Rengjøring og desinfisering.....	92
6.2	Kontroll og testing.....	92
7.	Service.....	92
8.	Oppdage og utbedre feil.....	93
8.1	Batteridrevet klippemaskin Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter.....	93
8.2	Lader og li-ione-batteri.....	94
9.	Teknisk service.....	95
10.	Tilbehør/reservedeler.....	95
11.	Tekniske data.....	96
11.1	Batteridrevet klippemaskin Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter.....	96
11.2	Lader.....	96
11.3	Li-ione-batteri.....	96
11.4	Samsvarserklæring.....	96
12.	Avfallsbehandling.....	96
12.1	Bare for EU-land.....	96
12.2	Li-ione-batteri.....	96
13.	2 års garanti.....	97





## 1. Sikker håndtering



Livsfare pga. elektrisk støt!

- Produktet må ikke åpnes.
- Koble produktet kun til en jordet strømforsyning.

- Kontroller funksjon og riktig tilstand før produktet tas i bruk.
- Oppbevar lader og li-ione-batteri ved romtemperatur.
- Hold lader og li-ione-batteri tørt.
- Lad li-ione-batteriet før første gangs bruk.
- For å unngå skader forårsaket av feil montering eller bruk, og for at ikke at garanti og ansvar skal bortfalle:
  - Bruk produktet kun i henhold til bruksanvisningen.
  - Overhold sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjonene.
  - Kombiner kun Aesculap-produkter med hverandre.
- Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig for brukeren.
- Overhold gjeldende standarder.
- Sørg for at den elektriske installasjonen i rommet er i samsvar med IEC-krav.
- Strømkabelen må alltid trekkes ut i støpselet, aldri i kabelen.
- Bruk aldri produktet i eksplosjonsfarlige områder.
- Bruk aldri skadde eller defekte produkter. Fjern defekte produkter umiddelbart.

## 2. Beskrivelse av apparatet

### 2.1 Leveringsomfang

Art.nr.	Betegnelse
GT800 GT810 GT834	Batteridrevet klippemaskin Econom CL, Econom CL Equipe eller Econom CL Fitter
GT801	Li-ione-batteri
GT803	Lader
se Tilbehør/ reservedeler	Strømkabel (med støpsel)
TA013895	Bruksanvisning
GT604	Oljeflaske

### 2.2 Komponenter som kreves til drift

- Batteridrevet klippemaskin Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter
- Lader
- Strømkabel (med støpsel)
- Li-ione-batteri

### 2.3 Bruksområde

#### Batteridrevet klippemaskin Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

Den batteridrevne klippemaskinen Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter brukes til klipping av store dyr, f.eks. storfe, hester og større hunder.

#### Lader GT803/li-ione-batteri GT801

GT803-laderen brukes til å lade li-ione-batteriet GT801.

## Klippemaskin til storfe og hest Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

### 2.4 Funksjonsmåte:

#### Batteridrevet klippemaskin Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

Den batteridrevne klippemaskinen Econom CL/Econom CL Equipe/  
Econom CL Fitter slås på og av med På/Av-knappen **36**.

#### Merk

For å unngå utilsiktet aktivisering av maskinen, reagerer På/Av-knappen først etter betjening i >0,5 sek.

#### Lader GT803/li-ione-batteri GT801

GT803-laderen er beregnet på et spenningsområde på 100 V til 240 V og fra 50 Hz til 60 Hz.

For å klargjøre til bruk kobles GT803-laderen med støpselet til strømforsyningen.

GT803-laderen har et ladespor.

Ladeprosessen starter automatisk li-ione-batteriet plasseres i laderen.

Ladetiden avhenger av ladestatus og kapasiteten på li-ione-batteriet.

#### Ladep prinsipp

Li-ione-batteriet lades med konstante strømimpulser.

Ladestatus på li-ione-batteriet overvåkes under lading. Ved å overvåke ladekurven sikres 100 % lading uten overlading.

I tillegg overvåkes batteritemperatur og ladetid.

Ladeindikatoren på li-ione-batteriet har fem LEDer. Hver LED representerer 20 % ladevolum. Dersom batteriet er i en ladeprosess, blinker LEDen for hver ladetilstand. Hvis alle LEDene lyser kontinuerlig, er batteriet fulladet.

#### Ladetid

Ladingen stopper når maksimal ladetid er nådd. Ladetiden er ca. 70 minutter.

## 3. Klargjøring

Dersom følgende forskrifter ikke overholdes, påtar ikke Aesculap noe ansvar.

- Ved installasjon og drift av produktet må følgende overholdes:
  - Nasjonale installasjons- og driftsforskrifter
  - Nasjonale forskrifter om brann- og eksplosjonsvern
  - Bruksanvisninger i henhold til IEC-/VDE-bestemmelsene

## 4. Arbeide med batteridrevet klippemaskin, lader og li-ione-batteri

### 4.1 Klargjøring

#### Koble til tilbehør

Tilbehørkombinasjoner som ikke er nevnt i veiledningen, kan bare brukes hvis de er spesielt utviklet for det beregnede formålet. Ytelse og sikkerhetskrav må ikke bli negativt påvirket.

### 4.2 Funksjonskontroll

#### Batteridrevet klippemaskin Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

- Utføre visuell inspeksjon.
- Sørg for at luftfilteret **37/38** sitter riktig, se Fig. G.
- Skyv inn og lås Li-ion-batteriet **39** i batterisporet.
- Kontroller batteritilstand: Trykk knappen **e**, se Fig. F.
- Ladeindikatoren **d** viser ladestatus.

#### Merk

For å hindre at li-ione-batteriet lades ut når maskinen ikke er i bruk, må den elektroniske tilkoblingen av li-ione-batteriet til syreenheten på klippemaskinen kobles fra etter 1 t.

- Reaktivere li-ione-batteriet **39**: Trykk knappen **e**, se Fig. F.  
Alle LEDene på ladeindikatoren **d** tennes.

#### Lader/li-ione-batteri

- Utføre visuell inspeksjon.
- Før du kobler produktet til strømforsyningen:
  - Kontroller strømkabelen for skader.
  - Kontroller produktet for mulige skader (f.eks. kontroller kontaktene i ladesporet for bøydde kontakter).
- Koble strømkabelen til stikkkontakten på ladestasjonen.
- Stikk støpselet i stikkkontakten i strømmettet.
- Plasser li-ione-batteriet **39** i ladesporet på laderen og lad opp, se Fig. F.



### 4.3 Koble til lader/lade li-ione-batteri



ADVARSEL

Brannfare ved kortslutning av polene med væske eller metalleder!

- Li-ione-batteriet må ikke kortsluttes.



ADVARSEL

Fare for personskader på grunn av skadet strømkabel!

- Kontroller strømkabelen for skader før lading.
- La produsenten skifte ut en skadet strømkabel.



ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader på grunn av skadet li-ione-batteri!

- Kontroller li-ione-batteriet for skader før lading.
- Ikke bruk eller lad opp et skadet li-ione-batteri.



FORSIKTIG

Tap av kapasitet/ytelse på utladet li-ione-batteri ved lengre lagring!

- Li-ione-batteriet må kun lagres fulladet og lades opp en gang i måneden.



FORSIKTIG

Ødeleggelse av produktet, ladesporet eller li-ione-batteriet ved å sette inn feil batteritype i ladesporet!

- Li-ione-batteriet må kun plasseres i det beregnede ladesporet.

#### Merk

Laderen kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper dersom de er under tilsyn eller har blitt instruert om sikker bruk av enheten og har forstått farene tilknyttet bruken.

- Barn må ikke leke med enheten.
- Rengjøring og vedlikehold av enheten må ikke utføres av barn uten tilsyn.

#### Merk

Li-ione-batteriet vil varmes opp litt under lading.

#### Merk

Hvis man ikke jobber med laderen, må strømledningen kobles fra stikkontakten.

- Bruk kun Aesculap GT803-laderen for å lade opp li-ione-batterier.
- Koble til laderen 40: Plugg støpselet på strømkabelen inn i laderen.
- Plugg støpselet på strømkabelen inn i stikkontakten.
- Plasser li-ione-batteriet 39 i ladesporet på laderen og lad opp, se Fig. F. LEDene på ladeindikatoren d på li-ione-batteriet blinker i henhold til gjeldende ladestatus. Hvis alle LEDene lyser kontinuerlig, er batteriet fulladet.

### 4.4 Skifte li-ione-batteri

- Hold den batteridrevne klippemaskinen g med klippeholdet ned, slik at li-ione-batteriet 39 ikke faller ned når det løsnes, se Fig. 1.
- Løsne batterilåsen f med tommelen.



Fig. 1

## Klippemaskin til storfe og hest Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Trekk ut li-ione-batteriet **39**, lad, og/eller sett inn det oppladde li-ione-batteriet GT801 inn i klippemaskinen **g**, se Fig. 2.



Fig. 2

- Fest li-ione-batteriet **39** med batterilåsen **f**, se Fig. 3.

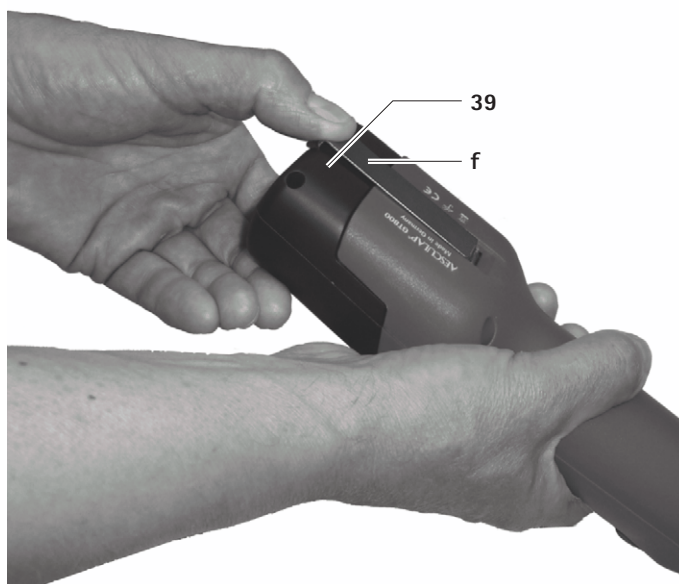


Fig. 3

### 4.5 Håndtering av klippeshodet

#### Smøre klippeshodet



Skader på klippemaskinen eller klippeshodet på grunn av feil olje!

- Smør klippeshodet bare når maskinen er i gang.
- Dypp ikke maskin og klippeshode i væske.
- Bruk kun lett smøreolje GT604.

- Smør klippeshodet via smørepunktet **a** rikelig ør du klipper hvert dyr, se Fig. A.
- Smør fjærblader **10** 2-3 ganger daglig med 3-4 dråper olje, se Fig. C.

#### Smøre tannhjulet med fett



Skader på klippemaskinen eller tannhjulet på grunn av feil smøring med fett!

- Bruk kun girfett GT605.
- Smør tannhjulet med fett 1-2 ganger per klippesessong.

- Lås opp og fjern li-ione-batteriet **39**.
- Skru ut begge skruene **6**, se Fig. B.
- Når du ser på klippeshodet vrir du den ca. 15° mot venstre og tar den ut av motorhuset.
- Påfør ca. 1 cm fett på de to motstående punktene på tannhjulet **11**, se Fig. C.
- Monter klippeshodet forsiktig på motoren. Sørg for at klippeshodet monteres ca. 15° mot venstre, og at den nederste nesen griper inn i sporet på motorhuset.

#### Skifte klippeplater

- Lås opp og fjern li-ione-batteriet **39**.
- Skru ut fingermutteren **3** og løsne justeringsskruen **4** ca. 2 omdreininger, se Fig. A.
- Løsne begge klemmskruene **9**, trekk av nedre klippeplate **1** fremover og øvre klippeplate **2**, se Fig. D og Fig. E.
- Før du setter inn den øvre klippeplaten **2** må du sørge for at oscillatorklossene **8** befinner seg i fordypningene på oscillatoren **7**, se Fig. E.
- Sett inn øvre klippeplate **2**. Sørg for at begge spissene **b** på oscillatoren **7** griper nøyaktig inn i hullene **c** i øvre klippeplate **2**, se Fig. D.
- Skyv nedre klippeplate **1** under hodene på klemmskruene **9** til den stopper på klippeshodehuset og stram de to festeskruene **9**.
- Skru inn justeringsskruen **4** til begge klippeplatene presse lett mot hverandre, se Fig. A.



## Stille inn platetrykket

### Merk

Innstillingen av platetrykket må gjøres mens maskinen er i gang og uten hjelpeverktøy.

### Merk

For høyt platetrykk fører til overdreven oppvarming og større slitasje på klippeplatene.

- Løsne fingermutteren **3** og skru ut justeringsskruen **4** forsiktig til den øvre klippeplaten **2** ikke lenger trykker på den nederste klippeplaten **1** (lys motorlyd), se Fig. A.
- Skru inn justeringsskruen **4** til du merker en svak motstand. Herfra fortsetter du å skru fingermutteren **3** ca. én omdreining og strammer den deretter.

## Rengjøre klippehodet

- Rengjør klippehodet minst etter et par dagers klipping eller ved forurensning.
- Lås opp og fjern li-ione-batteriet **39**.
- Skru ut begge skruene **6**, se Fig. B.
- Når du ser på klippehodet vrir du den ca. 15° mot venstre og tar den ut av motorhuset.
- Fjerne klippeplatene, se Skifte klippeplater.
- Rengjør det innvendige rommet og de enkelte delene av klippehodet grundig med en børste eller pensel.
- Sett inn klippeplatene og stram dem, se Skifte klippeplater.
- Smør tannhjulet med fett, se Smøre tannhjulet med fett.
- Monter klippehodet forsiktig på motoren. Sørg for at klippehodet monteres ca. 15° mot venstre, og at den nederste nesen griper inn i sporet på motorhuset.
- Smør klippehodet med olje, se Smøre klippehodet.

## Rengjøre luftfilteret

- Rengjør luftfilteret **37/38** minst en gang daglig eller ved forurensning.
- Fjern luftfilteret **37/38** fra klippemaskinen, se Fig. G.
- Rengjør luftfilteret **37/38** grundig i varmt vann med en børste.
- La luftfilteret **37/38** tørke.
- Rengjør klippemaskinen.
- Monter luftfilteret **37/38** på klippemaskinen.

## Etterslipe klippeplatene

- Kontakt teknisk service, se Teknisk service, for å få etterslipt klippeplatene.

## 4.6 Lagring

- Rengjør klippemaskinen og klippeplatene grundig før lagring, se Klargjøring.
- Lagre klippemaskinen på et tørt, mørkt og rent sted.

## 5. Klippeplater

### 5.1 Klippeplater som passer til klippehode GT367

Art.nr.	Betegnelse
GT501	Øvre klippeplate med 15 tenner
GT502	Nedre klippeplate med 31 tenner Klippehøyde 3 mm
GT503	Øvre klippeplate med 17 tenner
GT504	Nedre klippeplate med 18 tenner Klippehøyde 3 mm
GT505	Øvre klippeplate med 23 tenner
GT506	Nedre klippeplate med 23 tenner Klippehøyde 3 mm
GT508	Nedre klippeplate med 51 tenner Klippehøyde 1 mm
GT510	som GT506, men klippehøyde 5 mm
GT511	som GT502, men klippehøyde 1 mm

### 5.2 Anbefalte kombinasjoner

Kombinasjon	Over-/underplate	Egnet til
tett tanning	GT501/GT502	Storfe og hester (normalutstyr for GT474 og GT367)
	GT501/GT511	Industriklipping
	GT505/GT508	(f.eks. pelsklipping)
middels tanning	GT505/GT506	Storfe, hunder og geiter
	GT505/GT510	Hunder og geiter
bred tanning	GT503/GT504	Storfe, sau med fin ull, sau og enkeltsau

## 6. Klargjøring

### 6.1 Rengjøring og desinfisering



**Fare for elektrisk støt og brann!**

- Før rengjøring:
  - Trekk ut støpselet fra laderen.
  - Lås opp li-ione-batteriet og fjern det fra klippemaskinen.
- Bruk ikke brennbare og eksplosive rengjørings- og desinfeksjonsmidler.
- Sørg for at ingen væsker kommer inn i produktet.



**Skader på eller ødeleggelse av produktet ved maskinell rengjøring/desinfeksjon!**

- Produktet må kun rengjøres/desinfiseres manuelt.
- Steriliser aldri produktet.



**Skader på produktet på grunn av uegnet rengjørings-/desinfeksjonsmiddel!**

- Bruk rengjørings-/desinfeksjonsmidler godkjent av produsenten til overflaterengjøring.
- Legg aldri produktet i vann eller rengjøringsmiddel.
- Ikke la væske trenge inn i ladesporene.
- Rengjør kontaktene i sporet grundig.

- Produkthuset rengjøres med en lofri klut fuktet med vanlige desinfiserende middel til avtørkingsdesinfeksjon.
- Tørk av ved behov rester etter rengjørings- og desinfeksjonsmidler en fuktet, lofri klut med rent vann.
- Bruk en ren, lofri klut til tørking.
- Rengjør kontaktene i ladesporene med isopropanol eller etylalkohol og en bomullspinne. Bruk ikke etsende kjemikalier.
- Gjenta rengjørings-/desinfeksjonsprosessen om nødvendig.

### 6.2 Kontroll og testing

- La produktet avkjøles til romtemperatur.
- Kontroller etter hver rengjøring og desinfeksjon at produktet: er rent, funksjonsdyktig og uten skader.
- Kontroller produktet for skader, uregelmessige støy, sterk varme eller overdreven vibrasjon.
- Kontroller klippehodet for ødelagte, skadde og sløve kniver.
- Fjern defekte produkter umiddelbart.

## 7. Service

For å sikre pålitelig drift anbefaler Aesculap å foreta en service på produktet **minst en gang i året**.



## 8. Oppdage og utbedre feil.

### 8.1 Batteridrevet klippemaskin Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Feil	Oppdage	Årsak	Utbedring
Klippemaskinen starter ikke	-	Li-ione-batteriet ikke aktivert	Trykk på knappen e på li-ione-batteriet
	LED på På/Av-knappen 36 blinker to ganger per sekund	Li-ione-batteriet ikke ladet opp	Lad opp li-ione-batteriet
	-	Li-ione-batteriet er defekt	Sett inn et nytt li-ione-batteri.
	-	Li-ione-batteriet ikke satt inn	Sett inn li-ione-batteriet
Klippemaskinen stopper under drift	-	Li-ione-batteriet slått av med vernebryteren	Slå klippemaskinen av og på
	-	Li-ione-batteriet er tomt	Sett inn et nytt li-ione-batteri.

Klippemaskin til storfe og hest Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

8.2 Lader og li-ione-batteri

Feil	Oppdage	Årsak	Utbedring
Lader uten funksjon	LED-indikator "Batteri" lyser ikke	Støpsel ikke plugget i stikkontakten.	Plugg støpselet inn i laderkontakten og støpselet i stikkontakten på strømforsyningen
	Li-ione-batteriet ikke ladet opp	Strømkabelen er defekt	Skift ut strømkabelen
		Li-ione-batteriet er defekt	La produsenten reparere li-ion-batteriet se Teknisk service
Li-ione-batteriet lades ikke opp	Li-ione-batteriet er koblet til, ladeindikator lyser ikke	Skitten kontakt på laderen	Rengjør kontaktene i ladesporet, se Klargjøring
	-	Skadet kontakt på laderen	La produsenten reparere laderen se Teknisk service
	-	Li-ione-batteriet er defekt	La produsenten reparere li-ion-batteriet se Teknisk service
	-	Lader defekt	La produsenten reparere laderen se Teknisk service
	-	Under lading vises for høy temperatur i li-ione-batteriet	Fjern li-ione-batteriet fra ladesporet, la det avkjøles og gjenta ladeprosedyren
	-		Ved ny feil: La produsenten reparere li-ion-batteriet se Teknisk service
-	Ladesvikt eller li-ione-batteri defekt	Fjern li-ione-batteriet fra ladesporet og gjenta ladeprosedyren	
-		Ved ny feil: La produsenten reparere li-ion-batteriet se Teknisk service	





## 9. Teknisk service



**Fare for personskader og/eller feilfunksjon!**

➤ Ikke modifier produktet.

Modifisering av medisinsk utstyr kan medføre at garantier, krav til erstatning og eventuelle godkjenninger faller bort.

### Serviceadresser

Albert Kerbl GmbH  
Felizenzell 9  
84428 Buchbach / Germany  
Phone: +49 (0) 8086 933-100  
Fax: +49 (0) 8086 933-500  
E-Mail: [info@kerbl.com](mailto:info@kerbl.com)  
[www.kerbl.com](http://www.kerbl.com)

Flere serviceadresser kan fås ved henvendelse til ovennevnte adresse.

## 10. Tilbehør/reservedeler

Art.nr.	Betegnelse	Utførelse	Strømkabel eller strømadapter	Li-ione-batteri	Ladestasjon komplett	Tilbehør
GT804/ GT806	Econom CL	Europa unntatt Storbritannia	TA012170 EU-flatstøpsel, svart, L=1,8 m	GT801	GT803	GT604 Spesialolje til klippehode og klippeplater
GT814/ GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT804G/ GT806G	Econom CL	Storbritannia	TA012169 GB-støpsel svart, L=1,8 m			
GT814G/ GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT804K/ GT806K	Econom CL	USA	TA012168 Topolet støpsel, svart L=1,8 m			
GT814K/ GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT804A/ GT806A	Econom CL	Australia	TA013657 Topolet støpsel, svart L=1,8 m			
GT814A/ GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

## Klippemaskin til storfe og hest Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

### 11. Tekniske data

#### 11.1 Batteridrevet klippemaskin Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

	GT800 Econom CL	GT810 Econom CL Equipe	GT834 Econom CL Fitter
Turtall	maks. 2 750 1/min	maks. 2 250 1/min	maks. 3 000 1/min
Brukstid med et li-ione- batteri	ca. 70 min	ca. 80 min	ca. 70 min
Nominell spenning	maks. 21,6 V	maks. 21,6 V	maks. 21,6 V
Kapasitet	maks. 2,6 A	maks. 2,6 A	maks. 2,6 A
Vekt (med klippehode og batteri)	1 250 g	1 250 g	1 250 g
Godkjenningssmerke	TÜV-GS, CE, UL, CSA	TÜV-GS, CE, UL, CSA	CE, UL, CSA


#### 11.2 Lader

	GT803
Nettspenningsområde (strømforbruk)	100 V til 240 V
Frekvens	50 Hz til 60 Hz
Lade-/utgangsspenning	maks. 25,2 V
Lade-/utgangsstrøm	maks. 2,6 A
Vekt (med kabel og strømadapter)	764 g
Godkjenningssmerke	TÜV-GS, CE, UL, CSA

#### 11.3 Li-ione-batteri

	GT801
Celletype	Li
Nominell spenning	21,6 V
Kapasitet	2,6 Ah
Ladetid	ca. 70 min
Godkjenningssmerke	TÜV-GS, CE, UL, CSA


### 11.4 Samsvarserklæring

	<p>Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder eller normgivende dokumenter. 2004/108/EF EMK-retningslinje: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-8 Sikkerhet for elektriske apparater til husholdningsbruk og lignende formål – generelle krav – til hårklippemaskiner Aesculap Suhl GmbH</p>
---	---

### 12. Avfallsbehandling

Elektroverktøy, tilbehør og emballasje skal kildesorteres for miljøvennlig resirkulering.

#### 12.1 Bare for EU-land

	<p>Ikke kast elektroverktøy i husholdningsavfallet Ifølge EF-direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og gjennomføring i nasjonal rett skal brukt elektroverktøy samles inn og sorteres separat for miljøvennlig resirkulering.</p>
---	--

#### 12.2 Li-ione-batteri

Li-ione-batterier må ikke kastes i husholdningsavfall, ild eller vann. Defekte eller utbrukte li-ione-batterier skal samles inn resirkuleres eller kastes på en miljøvennlig måte i samsvar med direktiv 2006/66/EF.



## 13. 2 års garanti

Kjære kunde,

Takk for at du har valgt et produkt fra oss.

Navnet Aesculap står for utprøvd kvalitet og førsteklasses service i mange tiår. Vi tilbyr våre kunder innovative og effektive produkter. Aesculap produserer kvalitetsutstyr og sikrer deg bruk av kvalitetsmaterialer og grundig utførelse. Vi ønsker å påpeke at vi ikke er ansvarlige for feil på våre produkter, dersom disse ikke fungerer perfekt dersom dette er forårsaket av feil bruk, normal slitasje eller at produktet brukes feil eller det benyttes produkter fra andre leverandører som ikke fungerer riktig.

Deler som normalt er utsatt for slitasje, og som vi ikke er ansvarlige for, er batteriet og klippehodet. Også unntatt er feil som ikke påvirker verdien eller funksjonen, eller bare ubetydelig.



Dersom vi er ansvarlige under garantien, forbeholder vi oss retten til å reparere eller erstatte produktet.

## Nötkreaturs- och hästklippmaskin Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

### Översikt

Pos.	Art.nr.	Antal	Beteckning
1	GT502	1	Nedre klipplatta (GT804–GT816/GT834)
2	GT501	1	Övre klipplatta (GT804/GT806/GT834)
	GT505	1	Övre klipplatta (GT814/GT816)
3	GT610405	1	Räfflad mutter
4	GT367205	1	Inställningsskruv
6	TA010017	2	Skruv
7	GT367201	1	Oscillator
8	GT610304	1	Svängkloss
9	GT610010	2	Klämskruv
10	GT367202	6	Svängfjäderblad
11	GT367812	1	Cylindrist kuggjul med excenteraxel
15	TA008295	2	Styrningsstift
16	GT367801	1	Klipphuvudkapsling monterad
17	TA005091	2	Skruv
18	GT367802	1	Distansdel, vänster
19	GT367803	1	Distansdel höger
20	TA007765	1	Sänkskruv
25	GT610307	1	Fjäderbrygga
26	GT367207	1	Fixeringsskruv
27	GT367804	1	Oscillator, monterad
35	TA009222	1	Dra ur skruvmejseln
36	GT800249	1	Till-/Från-knapp (med LED)
37	GT800804	1	Luftfilter (blått) Econom CL
38	GT800844	1	Luftfilter (vinröd) Econom CL Equipe
39	GT801	1	Litium-jon-batteri
40	GT803	1	Laddningsaggregat
a	–	1	Oljeställe batteridriven klippmaskin
b	–	1	Oscillatorns spetsar
c	–	1	Borrhål i den övre klipplattan
d	–	1	Laddningsstatusvisning Li-jon-batteri
e	–	1	Knapp till Li-jon-batteri
f	–	1	Batterilåsning
g	GT800/ GT810	1	Batteridriven klippmaskin
	GT604	1	Specialolja för klipphuvud och klipplattor
	GT605	1	Växelldäsfett (tub)

### Symboler på produkten

	Observera, allmän varningssymbol OBS! Uppmärksamma medföljande dokument!
	Märkning av elektriska och elektroniska produkter enligt direktiv 2012/19/EU (WEEE), se Avfallshantering

### Innehållsförteckning

1.	Säkert handhavande.....	99
2.	Apparatbeskrivning.....	99
2.1	Leveransbeskrivning .....	99
2.2	Komponenter som behövs för driften .....	99
2.3	Användningsändamål .....	99
2.4	Funktionssätt.....	100
3.	Förberedelser .....	100
4.	Arbete med batteridriven klippmaskin, laddare och Li-jon-batteri .....	100
4.1	lördningställande.....	100
4.2	Funktionskontroll.....	100
4.3	Ansluta laddaren/Ladda li-jon-batteri .....	101
4.4	Byte av li-jon-batteri.....	101
4.5	Hantering av klipphuvudet.....	102
4.6	Förvaring.....	103
5.	Klipplattor .....	103
5.1	Klipplattor passande till klipphuvud GT367 .....	103
5.2	Rekommenderade kombinationer .....	103
6.	Beredning .....	104
6.1	Rengöring/desinficering .....	104
6.2	Kontroll och granskning.....	104
7.	Underhåll .....	104
8.	Identifiering och avhjälpan av fel.....	105
8.1	Batteridriven klippmaskin Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter.....	105
8.2	Laddare och Li-jon-batteri.....	106
9.	Teknisk service .....	107
10.	Tillbehör/reservdelar.....	107
11.	Tekniska data.....	108
11.1	Batteridriven klippmaskin Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter.....	108
11.2	Laddningsaggregat .....	108
11.3	Li-jon-batteri .....	108
11.4	Konformitetsförklaring.....	108
12.	Avfallshantering .....	108
12.1	Endast för EU-länder.....	108
12.2	Li-jon-batteri .....	108
13.	2 års garanti .....	109



## 1. Säkert handhavande



Livsfara på grund av elektriska stötar!

- Öppna inte produkten.
- Anslut produkten endast till ett elnät med skyddsjord.

- Kontrollera att produkten är funktionsduglig och i föreskrivet skick innan den används.
- Förvara laddare och Li-jonbatterier vid rumstemperatur.
- Håll laddare och Li-jonbatterier torra.
- Ladda upp Li-jonbatterier före första användningen.
- För att undvika skador till följd av icke fackmässig montering eller drift och inte riskera att garantin och tillverkaransvaret går förlorade:
  - Använd bara produkten enligt denna bruksanvisning.
  - Följ säkerhetsinformation och reparationsanvisningar.
  - Kombinera endast Aesculap-produkter med varandra.
- Förvara bruksanvisningen så att den är tillgänglig för användaren.
- Följ gällande standarder.
- Säkerställ att den elektriska installationen i lokalen följer IEC-kraven.
- Lossa nätkabeln genom att dra i stickproppen, inte genom att dra i kabeln.
- Använd inte produkten i utrymmen med explosionsrisk.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt. Kassera produkten omedelbart om den är skadad.

## 2. Apparatbeskrivning

### 2.1 Leveransbeskrivning

Art.nr.:	Beteckning
GT800 GT810 GT834	Batteridrivna klippmaskin Econom CL, Econom CL Equipe resp. Econom CL Fitter
GT801	Li-jon-batteri
GT803	Laddningsaggregat
se Tillbehör/ reservdelar	Nätanslutningsledning (med apparatstickkontakt)
TA013895	Bruksanvisning
GT604	Oljeflaska

### 2.2 Komponenter som behövs för driften

- Batteridrivna klippmaskin Econom CL/Econom CL Equipe/  
Econom CL Fitter
- Laddningsaggregat
- Nätanslutningsledning (med apparatstickkontakt)
- Li-jon-batteri

### 2.3 Användningsändamål

#### Batteridrivna klippmaskin Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

Batteriklippmaskinen Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter används för att klippa stora djur, såsom nötkreatur, hästar och stora hundar.

#### Laddare GT803/Li-jon-batteri GT801

Laddaren GT803 används för att ladda Li-jon-batteriet GT801.

## 2.4 Funktionssätt

### Batteridrivna klippmaskin Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

Batteriklippmaskinen Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter sätts på och stängs av med Till-/Från-knappen **36**.

#### Tips

För att undvika att maskinen sätts på eller stängs av av misstag reagerar Till-/Från-knappen först efter att den tryckts i >0,5 sek.

### Laddare GT803/Li-jon-batter GT801

Laddare GT803 är avsedd för ett nätspänningsintervall på 100 V till 240 V och för 50 Hz till 60 Hz.

För att göras driftklart ansluts laddningsaggregatet GT803 till elnätet med nätanslutningskabeln.

Laddaren GT803 har ett laddningsschakt.

När ett Li-jon-batteri sticks in i laddningsstationen startar laddningen automatiskt.

Laddningstiden är beroende av batteriets laddningstillstånd och kapacitet.

#### Laddningsprincip

Li-jon-batterierna laddas upp mycket skonsamt med konstanta strömpulser.

Li-jon-batteriernas laddningstillstånd övervakas kontinuerligt under uppladdningen. Genom övervakningen av laddningskurvan säkerställs 100 % laddning utan överladdning.

Dessutom övervakas batteritemperatur och laddningstiden.

Li-jon-batteriets laddningsstatus har 5 LED:er. Varje LED står för 20 % laddningsvolym. Om batteriet laddas blinkar den respektive laddningsstatusens LED. Om alla LED:er lyser permanent är batteriet fulladdat.

#### Laddningstid

När den maximala laddningstiden uppnås avbryts laddningen. Laddningstiden är ca. 70 min.

## 3. Förberedelser

Om föreskrifterna nedan inte följs tar Aesculap inte på sig något ansvar.

- Iaktta följande vid uppställning och användning av produkten:
  - nationella installations- och användarföreskrifter,
  - nationella föreskrifter om brand- och explosionskydd,
  - användningsanvisningar enligt IEC-/VDE-bestämmelser.

## 4. Arbete med batteridrivna klippmaskin, laddare och Li-jon-batteri

### 4.1 Iordningställande

#### Anslutning av tillbehör

Kombinationer av tillbehör som inte nämns i bruksanvisningen får användas endast om de uttryckligen är avsedda för den planerade användningen. De får inte inverka negativt på prestanda och säkerhetskrav.

### 4.2 Funktionskontroll

#### Batteridrivna klippmaskin Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

- Gör en visuell kontroll.
- Kontrollera att luftfiltret **37/38** sitter korrekt, se Bild G.
- Skjut in Li-jon-batteriet **39** i maskinschaktet och lås.
- Kontrollera batteriets laddningsstatus: Tryck på knappen **e**, se Bild F.
- Laddningsstatusvisningen **d** visar aktuell laddningsstatus.

#### Tips

För att förhindra att Li-jon-batteriet laddas ur när maskinen inte används skiljs den elektroniska anslutningen till Li-jon-batteriet för styrning av den batteridrivna klippmaskinen efter 1 h.

- Reaktivera Li-jon-batteriet **39**: Tryck på knappen **e**, se Bild F.  
Samtliga LED:er på laddningsstatusvisningen **d** tänds.

#### Laddare/Li-jon-batteri

- Gör en visuell kontroll.
- Innan produkten ansluts till elnätet:
  - Kontrollera att nätanslutningskabeln inte är skadad.
  - Kontrollera att produkten inte är skadad (kontrollera t.ex. att laddningsfackets kontakter inte är deformerade).
- Stick in nätanslutningsledningen i laddningsstationens apparatstickkontakt.
- Stick in nätkontakten i vägguttaget.
- Placera Li-jon-batteriet **39** i laddarens laddningsfack och ladda upp, se Bild F.



### 4.3 Ansluta laddaren/Ladda li-jon-batteri



**Brandfara om polerna kortsluts med vätskor eller metalldelar!**

- Li-jon-batteri får inte kortslutas.



**Risdk för personskador vid skadad nätanslutningsledning!**

- Kontrollera innan laddningen att nätanslutningsledningen inte är skadad.
- Låt tillverkaren byta ut en skadad nätanslutningsledning.



**Risk för personskador och skador på utrustning vid skadat li-jon-batteri!**

- Kontrollera innan laddningen att li-jon-batteriet inte är skadat.
- Använd eller ladda inte ett skadat li-jon-batteri.



**Ett urladdat li-jon-batteri förlorar sin kapacitet om det förvaras en längre tid!**

- Förvara bara li-jon-batteriet fulladdat vid en längre tids förvaring, och ladda om det en gång i månaden.



**Risk för att produkten, laddningsfacket eller li-jon-batteriet förstörs genom att fel typ av batteri placeras i laddningsfacket!**

- Placera endast li-jon-batteriet i ett laddningsfack som är avsett för detta.

#### Tips

Laddaren kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenheter och kunskaper om de står under uppsikt beträffande en säker användning av apparaten och förstår de risker som finns.

- Låt inte barn leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll av laddaren får inte utföras av barn utan uppsikt.

#### Tips

Li-jon-batteriet värmer upp sig något vid laddningen.

#### Tips

När det inte arbetas med laddaren skall nätanslutningsledningen skiljas från uttaget.

- Använd endast Aesculap-laddaren GT803 för att ladda upp litium-jon-batterier.
- Ansluta laddaren **40**: Stick in nätanslutningsledningens apparatstickkontakt i laddaren.
- Stick in nätanslutningsledningens apparatstickkontakt i uttaget.
- Placera li-jon-batteriet **39** i laddarens laddningsfack och ladda upp, se Bild F.

LED:n till li-jon-batteriets laddningsstatusvisning **d** blinkar i enlighet med den aktuella laddningsstatusen. Om alla LED:er lyser permanent är batteriet fulladdat.

### 4.4 Byte av li-jon-batteri

- Håll batteriklippmaskinen **g** med klipp huvudet nedåt så att li-jon-batteriet **39** inte skall falla ner när det lossas, se Bild 1.
- Lossa batterilåsningen **f** med tummen.



Bild 1

## Nötkreaturs- och hästklippmaskin Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Dra ut li-jon-batteriet **39**, ladda det och/eller sätt in ett uppladdat ersättnings-li-jon-batteri GT801 i batteri-klippmaskinen **g**, se Bild 2.



Bild 2

- Säkra li-jon-batteriet **39** med batterilåsning **f**, se Bild 3.

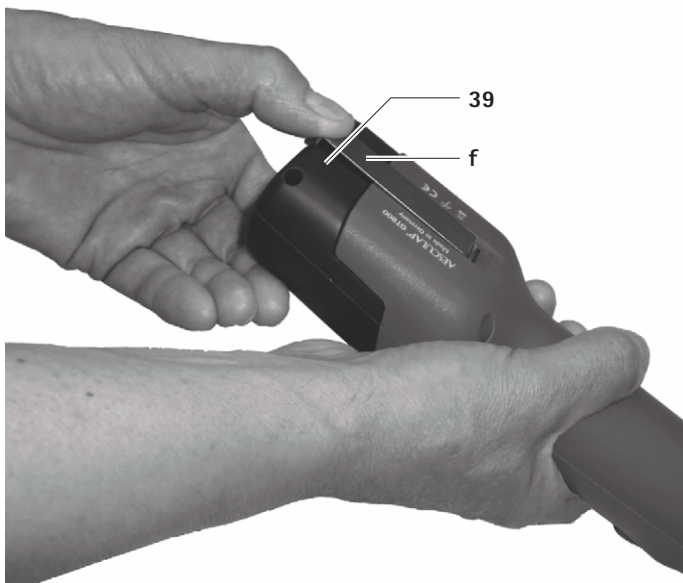


Bild 3

### 4.5 Hantering av klipphuvudet

#### Olja klipphuvudet



klippmaskinen eller klipphuvudet skadas vid felaktig inoljning!

- Olja endast in klipphuvudet när maskinen är igång.
- Doppa inte maskinen och klipphuvudet i vätska.
- Använd endast lättsmörjolja GT604.

- Olja in klipphuvudet rikligt via oljestället **a** innan varje djur, se Bild A.
- Olja in fjäderbladen **10** 2-3 ggr dagligen med 3-4 droppar olja, se Bild C.

#### Fetta in kugghjul



klippmaskinen eller kugghjulet skadas vid felaktig infettning!

- Använd endast växellådsfett GT605.
- Fetta in kugghjulet 1-2 ggr per säsong.

- Lås upp och ta bort li-jon-batteri **39**.
- Skruva ut båda skruvarna **6**, se Bild B.
- Vid blick mot klipphuvudet vrids detta ca. 15° åt vänster och tas av från motorhuset.
- Applicera ca. 1 cm fett på två mittenot varandra liggande ställen på kugghjulet **11**, se Bild C.
- Sätt försiktigt på klipphuvudet på motorn. Kontrollera att klipphuvudet sätts på med ca. 15° vridning åt vänster och att den undre näsan griper in i motorkapslingens spår.

#### Byta klipplattor

- Lås upp och ta bort li-jon-batteri **39**.
- Lossa de räfflad muttrarna **3** och skruva ut justeringsskruven **4** ca. 2 varv, se Bild A.
- Lossa båda klämskruvar **9**, dra av den nedre klipplattan **1** framåt och ta bort den övre klipplattan **2**, se Bild D och Bild E.
- Kontrollera innan iläggningen av den övre klipplattan **2** att oscilleringsklossen **8** är i den härför avsedda ursparningen på oscillatoren **7**, se Bild E.
- Sätt in den övre klipplattan **2**. Kontrollera därvid att båda spetsarna **b** till oscilleraren **7** griper in exakt i borrhålen **c** till den övre klipplattan **2**, se Bild D.
- Skjut den nedre klipplattan **1** under klämskruvarnas **9** huvuden ända till anslaget mot klipphuvudets kapsling och dra åt båda klämskruvar **9**.
- Skruva in inställningsskruven **4** tills båda klipplattorna trycker lätt mot varandra, se Bild A.





## Inställning av plattrycket

### Tips

Inställningen av plattrycket skall ske när maskinen är igenpm och utan hjälpverktyg.

### Tips

Ett alltför högt plattryck leder till alltför hög uppvärmning och till ett större slitage på klipplattorna.

- Lossa den räfflade muttern **3** och skruva försiktigt ut justeringsskruven **4** tills den övre klipplattan **2** inte längre trycks mot den nedre klipplattan **1** (ljus gångljud), se Bild A.
- Skruva in justeringsskruven **4** tills ett lätt motstånd märks. Skruva från och med här endast in ca. ett varv och dra sedan åt den räfflade muttern **3**.

## Rengöra klipphuvudet

- klipphuvudet skall rengöras minst efter några dagars arbete eller vid nedsmutsning.
- Lås upp och ta bort li-jon-batteri **39**.
- Skruva ut båda skruvarna **6**, se Bild B.
- Vid blick mot klipphuvudet vrids detta ca. 15° åt vänster och tas av från motorhuset.
- Ta av klipplattan, se Byta klipplattor.
- Rengör klipphuvudets inre och dess enskilda delar med en borste eller en pensel.
- Lägg in klipplattan och dra åt, se Byta klipplattor.
- Fetta in kuggjul, se Fetta in kuggjul
- Sätt försiktigt på klipphuvudet på motorn. Kontrollera att klipphuvudet sätts på med ca. 15° vridning åt vänster och att den undre näsan griper in i motorkapslingens spår.
- Olja in klipphuvud, se Olja klipphuvudet.

## Rengöra luftfilter

- Luftfiltret **37/38** rengörs minst en gång per dag eller vid nedsmutsning.
- Ta av luftfiltret **37/38** från den batteridrivna klippmaskinen, se Bild G.
- Rengör luftfiltret **37/38** noga i varmt vatten med en borste.
- Låt luftfiltret **37/38** torka.
- Rengör den batteridrivna klippmaskinen.
- Sätt på luftfiltret **37/38** på den batteridrivna klippmaskinen.

## Efterslipa klipplattor

- Vid efterslipning av klipplattor vänder du dig tekniska service, se Teknisk service.

## 4.6 Förvaring

- Rengör klippmaskin och klipplattor noga innan förvaringen, se Beredning.
- Förvara klippmaskinen i ett torrt, mörkt och jämnt tempererat utrymme.

## 5. Klippplattor

### 5.1 Klippplattor passande till klipphuvud GT367

Art.nr.	Beteckning
GT501	Övre klipplatta med 15 kuggar
GT502	Nedre klipplatta med 31 kuggar Klipphöjd 3 mm
GT503	Övre klipplatta med 17 kuggar
GT504	Nedre klipplatta med 18 kuggar Klipphöjd 3 mm
GT505	Övre klipplatta med 23 kuggar
GT506	Nedre klipplatta med 23 kuggar Klipphöjd 3 mm
GT508	Nedre klipplatta med 51 kuggar Klipphöjd 1 mm
GT510	som GT506, dock med klipphöjden 5 mm
GT511	som GT502, dock med klipphöjden 1 mm

### 5.2 Rekommenderade kombinationer

Kombination	Övre/undre platta	Lämplig för
tätkuggad	GT501/GT502	Nötkreatur och hästar (normalutrustning till GT474 och GT367)
	GT501/GT511	Industriell klippning
	GT505/GT508	(t.ex. pälsklippning)
medelkuggad	GT505/GT506	Nötkreatur, hundar och getter
	GT505/GT510	Hundar och getter
bredkuggad	GT503/GT504	Nötkreatur, får med fin ull och enstaka får

## 6. Beredning

### 6.1 Rengöring/desinficering



FARA

**Risk för elektrisk stöt och brand!**

- **Innan rengöringen:**
  - Dra ut nätstickkontakten ur laddaren.
  - Lås upp li-jon-batteriet och ta ut det ur den batteridrivna klippmaskinen.
- Brännbara och explosiva rengörings- och desinfektionsmedel får inte användas.
- Se till att det inte tränger in vätska i produkten.



OBSERVERA

**Risk för att produkten skadas eller förstörs genom maskinell rengöring/desinficering!**

- Rengör/desinficera produkten endast manuellt.
- Sterilisera aldrig produkten.



OBSERVERA

**Risk att produkten skadas genom olämpliga rengörings-/desinfektionsmedel!**

- Använd rengörings-/desinfektionsmedel som är tillåtna för rengöring av ytorna enligt tillverkarens anvisning.
- Lägg aldrig produkten i vatten eller rengöringsmedel.
- Låt det inte komma in vätska i laddningsfacken.
- Rengör kontakterna i laddningsfacket ytterst nog.

- Torka av produktens kapsling med en luddfri duk, som fuktats med ett vanligt i handeln förekommande medel för avtorkningsdesinficering.
- Torka vid behov av rester av rengörings- och desinfektionsmedlet med en luddfri duk som fuktats i rent vatten efter verkningstiden.
- Använd en ren, luddfri duk för torkningen.
- Rengör kontakterna i laddningsfacken med isopropanol eller etylalkohol och en bomullspinne. Använd inte korrosionsbefrämjande kemikalier.
- Upprepa rengöringen/desinfektionen, om det behövs.

### 6.2 Kontroll och granskning

- Låt produkten svalna till rumstemperatur.
- Kontrollera efter varje rengöring och desinficering att produkterna Renhet, funktion och skador.
- Kontrollera produkten med avseende på skador, ovanliga lagerljud, kraftig uppvärmning eller kraftig vibration.
- Kontrollera att klipp huvudet inte är brutet, skadat eller har trubbiga egg.
- Kassera produkten omedelbart om den är skadad.

## 7. Underhåll

För att garantera tillförlitlig drift rekommenderar Aesculap service **minst en gång om året**.



## 8. Identifiering och avhjälpande av fel

### 8.1 Batteridrivna klippmaskin Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Störning	Identifiering	Orsak	Åtgärd
Den batteridrivna klippmaskinen startar inte	-	Li-jon-batteri inte aktiverat	Tryck på knappen <b>e</b> på li-jon-batteriet
	LED:n till Till-/Från-knappen <b>36</b> blinkar två gånger per sekund	Li-jon-batteri inte laddat	Ladda li-jon-batteri
	-	Li-jon-batteri defekt	Sätt in ett nytt li-jon-batteri
	-	Li-jon-batteri inte isatt	Sätt in ett nytt li-jon-batteri
Den batteridrivna skärmaskinen stannar under driften	-	Li-jon-batteriet har stängts av av skyddsavstängningen	Starta och stäng av den batteridrivna skärmaskinen
	-	Li-jon-batteriet är tomt	Sätt in ett nytt li-jon-batteri

Nötkreaturs- och hästklippmaskin Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

**8.2 Laddare och Li-jon-batteri**

Störning	Identifiering	Orsak	Åtgärd
Laddningsaggregat utan funktion	LED-lampan "Batteri" lyser inte	Nätanslutningskabeln inte isatt	Stick in nätanslutningskabeln i apparatstickkontakten på laddaren och i försörjningsnätets vägguttag
	Li-jon-batteri inte laddat	Nätanslutningskabeln defekt	Byt ut nätanslutningskabeln
Li-jon-batteri defekt		Låt tillverkaren reparera li-jon-batteriet se Teknisk service	
Li-jon-batteriet laddas inte	Li-jon-batteriet isatt, laddningsstatusvisningen lyser inte	Laddningsaggregatets kontakter smutsiga	Rengör kontakter i laddningsfacket, se Beredning
	-	Laddarens kontakter är skadade	Låt tillverkaren reparera laddningsaggregatet, se Teknisk service
	-	Li-jon-batteri defekt	Låt tillverkaren reparera li-jon-batteriet, se Teknisk service
	-	Laddningsaggregatet defekt	Låt tillverkaren reparera laddningsaggregatet, se Teknisk service
	-	Under laddningen uppmäts en alltför hög temperatur i li-jon-batteriet	Ta ut li-jon-batteriet ur laddningsfacket, låt det svalna och upprepa laddningen
			Vid upprepade störningar: Låt tillverkaren reparera li-jon-batteriet, se Teknisk service
-	Laddningsstörning eller så är li-jon-batteriet defekt	Ta ut li-jon-batteriet ur laddningsfacket och upprepa laddningen	
		Vid upprepade störningar: Låt tillverkaren reparera li-jon-batteriet, se Teknisk service	



## 9. Teknisk service



**Risk för personskador och/eller felaktig funktion!**

➤ **Modifiera inte produkten.**

### Serviceadresser

Albert Kerbl GmbH  
Felizenzell 9  
84428 Buchbach / Germany  
Phone: +49 (0) 8086 933-100  
Fax: +49 (0) 8086 933-500  
E-Mail: [info@kerbl.com](mailto:info@kerbl.com)  
[www.kerbl.com](http://www.kerbl.com)

Ytterligare serviceadresser kan erhållas via ovannämnda adress.

Om medicinteknisk utrustning modifieras kan det medföra att garantin/  
garantianspråken och eventuella godkännanden upphör att gälla.

## 10. Tillbehör/reservdelar

Art.nr.:	Beteckning	Utförande	Nätkabel eller nätdel	Li-jon-batteri	Laddningsstation komplett	Tillbehör
GT804/ GT806	Econom CL	Europa utom Storbritannien	TA012170 Europeisk plattkontakt, svart, L=1,8 m	GT801	GT803	GT604 Specialolja för klipphuvud och klipplattor  GT605 Växellådsfett (tub)
GT814/ GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT804G/ GT806G	Econom CL	Storbritannien	TA012169 GB-stickkontakt svart, L=1,8 m			
GT814G/ GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT804K/ GT806K	Econom CL	USA	TA012168 2-polig apparatstickkontakt, svart L=1,8 m			
GT814K/ GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT804A/ GT806A	Econom CL	Australien	TA013657 2-polig apparatstickkontakt, svart L=1,8 m			
GT814A/ GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

## Nötkreaturs- och hästklippmaskin Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

### 11. Tekniska data

#### 11.1 Batteridrivna klippmaskin Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

	<b>GT800 Econom CL</b>	<b>GT810 Econom CL Equipe</b>	<b>GT834 Econom CL Fitter</b>
Antal slag	max. 2 750 varv/min	max. 2 250 varv/min	max. 3 000 varv/min
Gångtid med ett li-jon-batteri	ca 70 min	ca 80 min	ca 70 min
Noninell spänning	max. 21,6 V	max. 21,6 V	max. 21,6 V
Kapacitet	max. 2,6 A	max. 2,6 A	max. 2,6 A
Vikt (med skärhuvud och batteri)	1 250 g	1 250 g	1 250 g
Provningstecken	TÜV-GS, CE, UL, CSA	TÜV-GS, CE, UL, CSA	CE, UL, CSA


#### 11.2 Laddningsaggregat

	<b>GT803</b>
Nätspänningsområden (strömförbrukning)	100 V bis 240 V
Frekvens	50 Hz till 60 Hz
Laddnings-/utspänning	max. 25,2 V
Laddnings-/utström	max. 2,6 A
Vikt (med med kabel och nät-del)	764 g
Provningstecken	TÜV-GS, CE, UL, CSA

#### 11.3 Li-jon-batteri

	<b>GT801</b>
Celltyp	Li
Nominell spänning	21,6 V
Kapacitet	2,6 Ah
Laddningstid	ca. 70 min
Provningstecken	TÜV-GS, CE, UL, CSA


### 11.4 Konformitetsförklaring

	<p>Vi förklarar under ensamt ansvar att denna produkt stämmer överens med följande normer eller normativa dokument: 2004/108/EG Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-8 Säkerhet hos elektriska apparater för hushållsbruk och liknande ändamål – allmänna krav – för hårt klippningsmaskiner Aesculap Suhl GmbH</p>
---	---

### 12. Avfallshantering

Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning skall tillföras en miljövänlig återvinning.

#### 12.1 Endast för EU-länder

	<p>Elektriska verktyg får inte slängas bland hushållsavfall. Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU gällande uttjänta elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning till nationell rätt skall ej längre fungerande elektriska verktyg samlas in separat och tillföras en miljövänlig återanvändning.</p>
---	---

#### 12.2 Li-jon-batteri

Li-jon-batterier får inte kastas bland hushållsavfall, i öppen eld eller vatten. Defekta eller förbrukade li-jon-batterier skall samlas in enligt direktivet 2006/66/EG, återvinnas eller avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.



## 13. 2 års garanti

Bäste kund,

Tack för att du bestämt dig för en produkt från vårt företag.

Namnet Aesculap står sedan årtionden tillbaka för utprovad kvalitet och förstklassig service. Vi erbjuder våra kunder innovativa och kraftfulla produkter. Aesculap tillverkar högklassiga apparater och försäkrar att via använt material av hög kvalitet och att produkten är omsorgsfullt tillverkad och sammansatt. Vi vill påpeka att vi inte tar ansvar för materiella brister på våra produkter om dessa beror på en felaktig användning, normalt slitage eller för att produkten använts på ett felaktigt sätt eller om ej passande eller ej felfritt fungerande externa produkter använts.

Delar, som i vanliga fall utsätts för slitage och för vilka vi inte tar något ansvar är batteriet och klipphuvudet. Även sådana brister, som inte på ett väsentligt sätt påverkar produktens värde eller funktion är undantagna.



Vid ett garantifall förbehåller vi oss rätten att antingen reparera produkten eller byta ut den.

## Karjan ja hevosen klipperit Econom CL/CL Econom Equipe/CL Econom Fitter

### Yleiskuva

Tuote	Tuotenro	Määrä	Nimike
1	GT502	1	Alempi leikkuulevy (GT804-GT816/ GT834)
2	GT501	1	Ylempi leikkuulevy (GT804/GT806/ GT834)
	GT505	1	Ylempi leikkuulevy (GT814/GT816)
3	GT610405	1	Lukkomutteri
4	GT367205	1	Säätöruuvi
6	TA010017	2	Ruuvi
7	GT367201	1	Värähtelijä
8	GT610304	1	Värähtelylohko
9	GT610010	2	Kiristysruuvi
10	GT367202	6	Värähtelyjousilevy
11	GT367812	1	Hammaspyörä ja epäkeskotanko
15	TA008295	2	Ohjuritappi
16	GT367801	1	Leikkuripään runko asennettuna
17	TA005091	2	Ruuvi
18	GT367802	1	Välikappale, vasen
19	GT367803	1	Välikappale, oikea
20	TA007765	1	Upporuuvi
25	GT610307	1	Jousisilta
26	GT367207	1	Kiinnitysruuvi
27	GT367804	1	Värähtelijä, asennettu
35	TA009222	1	Ruuvitaltta
36	GT800249	1	Päälle-/poispainike (LED-merkivalolla)
37	GT800804	1	Ilmansuodatin (sininen) Econom CL
38	GT800844	1	Ilmansuodatin (viininpunainen) Econom CL Equipe
39	GT801	1	Litium-ioni-akku
40	GT803	1	Laturi
a	-	1	Johdottoman klipperin öljypiste
b	-	1	Värähtelijän kärjet
c	-	1	Ylälevyn leikkausreiät
d	-	1	Li-ion-akun lataustilan osoitin
e	-	1	Li-ion-akun painike
f	-	1	Akun lukitus
g	GT800/ GT810	1	Johdoton klipperit
-	GT604	1	Leikkuupään ja leikkuulevyjen erikoisöljy
	GT605	1	Hammaspyörärasva (putki)

### Tuotteessa olevat merkinnät

	Huomio, yleinen varoitusmerkki Huomio: noudata annettuja käyttöohjeita.
	Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevaa direktiiviä 2012/19/EU (WEEE) vastaavat merkinnät, katso Hävittäminen

### Sisällysluettelo

1.	Turvallinen käsittely .....	111
2.	Laitteen kuvaus .....	111
2.1	Toimituksen sisältö .....	111
2.2	Käytössä tarvittavat osat .....	111
2.3	Käyttötarkoitus .....	111
2.4	Toimintatapa .....	112
3.	Esivalmistelut .....	112
4.	Langattoman klipperin, laturin ja li-ion-akun käyttö .....	112
4.1	Järjestelmän kokoaminen .....	112
4.2	Toiminnan testaus .....	112
4.3	Laturin kytkeminen/li-ion-akun lataaminen .....	113
4.4	Li-ion-akun vaihto .....	113
4.5	Leikkuupään käsittely .....	114
4.6	Säilytys .....	115
5.	Leikkuulevyt .....	115
5.1	GT367-leikkuupäähän sopivat leikkurilevyt .....	115
5.2	Suosittelut yhdistelmät .....	115
6.	Käsittely .....	116
6.1	Puhdistus ja desinfiointi .....	116
6.2	Tarkastus ja testaus .....	116
7.	Huolto .....	116
8.	Vikojen tunnistaminen ja korjaaminen .....	117
8.1	Johdoton klipperit Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter .....	117
8.2	Laturi ja li-ion-akku .....	118
9.	Tekninen asiakaspalvelu .....	119
10.	Lisävarusteet ja varaosat .....	119
11.	Tekniset tiedot .....	120
11.1	Johdoton klipperit Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter .....	120
11.2	Laturi .....	120
11.3	Li-ion-akku .....	120
11.4	Yhdenmukaisuusvakuutus .....	120
12.	Hävittäminen .....	120
12.1	Vain EU-maille .....	120
12.2	Li-ion-akku .....	120
13.	2 vuoden takuu .....	121





## 1. Turvallinen käsittely



Sähköisku on hengenvaarallinen!

- Älä avaa tuotetta.
- Liitä tuote ainoastaan maadoitusjohtimella varustettuun sähköverkkoon.

- Tarkasta ennen tuotteen käyttöä sen toimivuus ja kaikkien osien moitteeton kunto.
- Säilytä laturi ja li-ion-akku huoneenlämmössä.
- Säilytä laturi ja li-ion-akku kuivassa.
- Lataa li-ion-akku ennen ensimmäistä käyttöä.
- Jotta ei syntyisi vahinkoja, jotka johtuvat laitteen virheellisestä kokoamisesta ja käytöstä ja jotta takuu tai vastuu eivät vaarantuisi, on noudatettava seuraavia ohjeita:
  - Käytä tuotetta vain käyttöohjeen mukaisesti.
  - Noudata laitteen turvallisuutta ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.
  - Yhdistä toisiinsa vain Aesculap-tuotteita.
- Käyttöohjetta on säilytettävä niin, että se on käyttäjän käytettävissä
- Noudata voimassa olevia standardeja.
- On varmistettava, että sen tilan sähköasennukset, jossa tuotetta käytetään, vastaavat IEC-vaatimuksia.
- Irrota verkkojohto vetämällä verkkopistokkeesta, älä koskaan vedä johdosta.
- Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa tiloissa.
- Älä käytä vahingoittunutta tai viallista tuotetta. Poista vahingoittunut tuote heti käytöstä.

## 2. Laitteen kuvaus

### 2.1 Toimituksen sisältö

Tuotenro	Nimike
GT800 GT810 G834	Johdoton klipperi Econom CL, Econom CL Equipe tai Econom CL Fitter
GT801	li-ion-akku
GT803	Laturi
katso Lisävarusteet ja varaosat	Virtajohto (pistokkeella)
TA013895	Käyttöohje
GT604	Öljypullo

### 2.2 Käytössä tarvittavat osat

- Johdoton klipperi Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter
- Laturi
- Virtajohto (pistokkeella)
- li-ion-akku

### 2.3 Käyttötarkoitus

#### Johdoton klipperi Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Johdotomia klippereitä Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter käytetään suurten eläinten, kuten nautakarjan, hevosten ja suurten koirien karvan leikkaamiseen.

#### Laturi GT803/Li-ion-akku GT801

GT803 laturia käytetään GT801 li-ion-akun lataamiseen.

## Karjan ja hevosien klipperin Econom CL/CL Econom Equipe/CL Econom Fitter

### 2.4 Toimintatapa

#### Johdoton klipperin Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Johdoton klipperin Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter kytketään päälle ja pois päältä päälle-/poiskykimellä **36**.

#### Viite

*Virtapainikeessa on >0,5 s reagointiviive koneen päällekytkemisen välttämiseksi vahingossa.*

#### Laturi GT803/Li-ion-akku GT801

Laturi GT803 suunniteltu toimimaan verkkojännitteellä 100 V–240 V ja 50 Hz – 60 Hz.

Laitteen saattamiseksi käyttövalmiiksi kytketään laturin GT803 virtapistoke verkkopistorasiaan.

Laturi GT803 syöttää latausvirran latauskoskettimiin.

Lataus käynnistyy automaattisesti, kun li-ion-akku kytketään laturiin.

Latausaika riippuu li-ion-akun varaustilasta ja kapasiteetista.

#### Latauseriaate

Li-ion-akkuja ladataan jatkuvilla virtapulsseilla.

Li-ion-akun varaustilaa seurataan latauksen aikana. Latauskäyrää valvomalla taataan 100 %:n lataus, eikä ylilatausta tapahdu.

Lisäksi seurataan akun lämpötilaa ja latausaikaa.

Li-ion-akun lataustilan osoittimessa **d** on 5 LED-merkkivaloa. Kukin LED edustaa 20 %:n lataustilaa. Kutakin lataustilaa osoittava merkkivalo vilkkuu akun latautuessa. Kun kaikki merkkivalot palavat jatkuvasti, akku on täyteen ladattu.

#### Latausaika

Kun suurin latausaika on saavutettu, lataus keskeytyy. Latausaika on noin 70 minuuttia.

### 3. Esivalmistelut

Jos seuraavia sääntöjä ei noudateta, Aesculap ei ota mitään vastuuta.

- Tuote tulee asentaa ja sitä tulee käyttää noudattaen:
  - kansallisia asennus- ja käyttö määräyksiä,
  - kansallisia määräyksiä, jotka koskevat tulipalo- ja räjähdys suojausta,
  - IEC-/VDE-määräysten mukaisia käyttöohjeita.

### 4. Langattoman klipperin, laturin ja li-ion-akun käyttö

#### 4.1 Järjestelmän kokoaminen

##### Varusteiden liittäminen

Lisävarusteyhdistelmiä, joita ei ole mainittu käyttöohjeessa, saa käyttää vain, jos ne nimenomaan on tarkoitettu kulloinkin tarvittavaan käyttöön. Lisävarusteyhdistelmien käyttö ei saa vaikuttaa haitallisesti laitteen suorituskykyyn tai turvallisuuteen.

#### 4.2 Toiminnan testaus

##### Johdoton klipperin Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Tarkista silmämääräisesti.
- Varmista, että ilmansuodatin **37/38** on oikein paikoillaan, katso Kuva G.
- Työnnä li-ion-akku **39** paikalleen koneen kädensijan kanavaan ja lukitse.
- Tarkista akun varaustila: Paina painiketta **e**, katso Kuva F.
- Lataustilan osoitin **d** osoittaa latauksen tilan.

##### Viite

*Li-ion-akun purkautumisen estämiseksi koneen ollessa käyttämättömässä tilassa, ohjautuu akun sähköinen yhteys irti johdottomasta klipperistä 1 h kuluttua.*

- Li-ion-akun **39** uudelleenaktivointi: Paina painiketta **e**, katso Kuva F. Kaikki akun lataustilan LED-merkkivalot **d** palavat.

##### Laturi/li-ion-akku

- Tarkista silmämääräisesti.
- Ennen kuin kytket tuotteen verkkovirtaan:
  - Tarkista virtajohto vaurioiden varalta.
  - Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden varalta (esim. B. akkukanavan kontaktien mahdollinen vääntyminen).
- Virtajohdon liittäminen latausasemaan.
- Liitä verkkopistoke sähköpistorasiaan.
- Aseta li-ion-akku **39** laturin latauskanavaan ja lataa, katso Kuva F.



### 4.3 Laturin kytkeminen/li-ion-akun lataaminen



Nesteen tai metalliesineen aiheuttama oikosulku latauskoskettimissa aiheuttaa palovaaran!

- Älä oikosulje li-ion-akku.



Vaurioitunut verkkojohto aiheuttaa loukkaantumisvaaran!

- Tarkista virtajohto ennen latausta vaurioiden varalta.
- Pyydä valmistajaa korvaamaan vaurioitunut virtajohto.



Vaurioitunut li-ion-akku voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran ja omaisuusvahinkoja!

- Tarkista li-ion-akku ennen latausta vaurioiden varalta.
- Älä käytä tai lataa vahingoittunutta li-ion-akku.



Li-ion akun kapasiteetti/suorituskyky laskee pidempään varastoitaessa!

- Varastoi li-ion-akku vain täysin ladattuna ja lataa uudelleen kerran kuukaudessa.



Tuote, latauskanava tai li-ion-akku voivat vioittua, jos latauskanavaan työnnetään vääräntyyppinen akku!

- Työnnä li-ion-akku vain sille varattuun latauskanavaan.

Viite

Laturia eivät saa käyttää alle 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoitteiset tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä laitteen turvallisesta käytöstä tai jotka eivät ymmärrä sen käytöstä aiheutuvia riskejä.

- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa laturia ilman valvontaa.

Viite

Li-ion-akku kuumenee hieman latauksen aikana.

Viite

Jos laturia ei käytetä, virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta.

- Käytä litium-ioni-akkujen lataamiseen vain Aesculap GT803-laturia.
- Laturin 40 kytkeminen: Liitä virtajohto laturin liittimeen.
- Liitä virtajohto verkkopistorasiaan.
- Aseta li-ion-akku 39 laturin latauskanavaan ja lataa, katso Kuva F. Li-ion-akun varaustilan osoittimen LED-valot d vilkkuvat lataustilan mukaan. Kun kaikki merkkivalot palavat jatkuvasti, akku on täysin ladattu.

### 4.4 Li-ion-akun vaihto

- Pidä johdottoman klipperin g leikkauspäätä alaspäin niin, ettei li-ion-akku 39 putoa sitä irrotettaessa, katso Kuva 1.
- Vapauta akun lukko f peukalolla.



Kuva 1


## Karjan ja hevosen klipperi Econom CL/CL Econom Equipe/CL Econom Fitter

- Vedä ulos li-ion-akku **39**, työnnä ladattu ja/tai ladattu vara-li-ion-akku GT801 johdottomaan klipperiin **g**, katso Kuva 2.



Kuva 2

- Varmista li-ion-akku **39** akkulukolla **f**, katso Kuva 3.

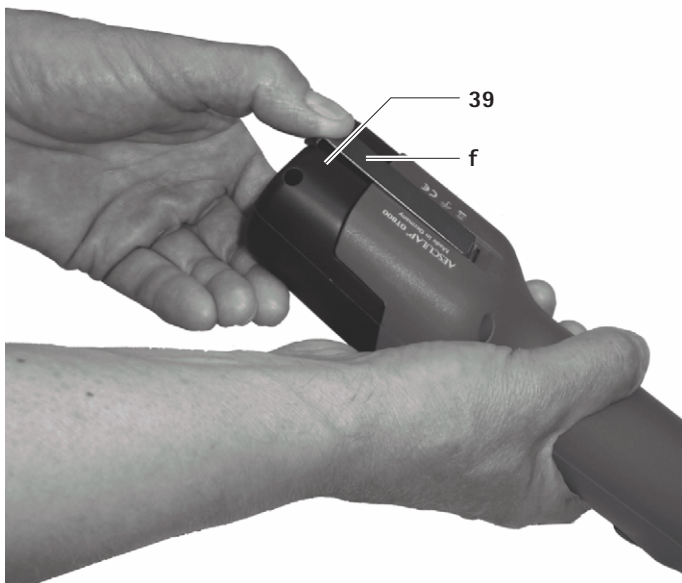

Kuva 3

### 4.5 Leikkuupään käsittely

#### Leikkuupään öljyminen



Klipperikoneen tai leikkuupään vioittuminen väärää öljyä käytettäessä!

- Öljyä leikkuupää vain koneen käydessä.
- Koneita ja leikkuupäätä ei saa upottaa nesteeseen.
- Käytä vain GT604-kevytöljyä.

- Öljyä ajopään öljypiste **a** runsaalla öljyllä ennen kunkin eläimen käsittelyä, katso Kuva A.
- Öljyä jousilehdet **10** 2–3 kertaa päivässä 3–4 öljytipalla, katso Kuva C.

#### Hammaspyörän rasvaus



Klipperikoneen tai leikkauspään vioittuminen väärää rasvaa käytettäessä!

- Käytä vain GT604-hammaspyörärasvaa.
- Rasvaa hammaspyörä **1–2** kertaa kauden aikana.

- Vapauta ja poista li-ion-akku **39**.
- Irrota molemmat ruuvit **6**, katso Kuva B.
- Leikkuupään asentoa huomioiden, kierrä tätä noin 15° vasemmalle ja irrota se moottorikotelosta.
- Voitele n. 1 cm:n matkalta hammaspyörän **11** kaksi vastakkaista puolta, katso Kuva C.
- Työnnä ajopää kiinni moottoriin huolellisesti. Varmista samalla, että leikkuupää asennetaan kiertäen noin 15° vasemmalle ja että alempi uloke tarttuu moottorikotelon uraan.

#### Leikkuulevyn vaihto

- Vapauta ja poista li-ion-akku **39**.
- Löysää lukkomutteri **3** ja avaa säätöruuvia **4** n. 2 kierrosta, katso Kuva A.
- Löysää molemmat lukitusruuvit **9**, poista alempi leikkuulevy **1** eteenpäin vetäen ja poista ylempi leikkuulevy **2**, katso Kuva D ja Kuva E.
- Ennen kuin asetat ylemmän leikkuulevyn **2**, varmista, että värähtelylohko **8** osuu värähtelijässä sille varattuun koloon **7**, katso Kuva E.
- Aseta ylempi leikkurilevy **2** paikalleen. Varmista samalla, että värähtelijän **7** molemmat kärjet **b** kohdistuvat tarkasti ylemmän leikkuulevyn **2** reikiin **c**, katso Kuva D.
- Työnnä alempi leikkuulevy **1** lukitusruuvien päiden **9** alle leikkuupään kotelon pohjaan saakka ja kiristä molemmat lukitusruuvit **9**.
- Kiristä säätöruuvia **4** kunnes molemmat leikkuulevyt painavat kevyesti toisiinsa, katso Kuva A.



## Painelevyn säätö

Viite

Painelevyn säätö tulee tehdä koneen käydessä ja ilman työkaluja.

Viite

Liian suuri levyypaine johtaa liialliseen kuumenemiseen ja leikkuulevyjen liialliseen kulumiseen.

- Löysää lukkomutteria **3** ja avaa säätöruuvia **4** varovasti, kunnes ylempi leikkuulevy **2** ei enää paina alemmaa leikkuulevyä **1** (pienempi käyntiääni), katso Kuva A.
- Ruuvaa kiinni säätöruuvia **4** kunnes tuntuu pieni vastus. Kierrä edelleen noin yksi kierros ja kiristä sitten lukkomutteri **3**.

## Leikkuupään puhdistaminen

- Puhdista leikkuupää ainakin muutaman päivän välein tai poistaaksesi kertynyttä likaa.
- Vapauta ja poista li-ion-akku **39**.
- Irrota molemmat ruuvit **6**, katso Kuva B.
- Leikkuupään asentoa huomioiden, kierrä tätä noin 15° vasemmalle ja irrota se moottorikotelosta.
- Leikkuulevyjen poistaminen, katso Leikkuulevyn vaihto.
- Puhdista leikkuupään sisus ja yksittäiset osat huolellisesti harjalla tai siveltimellä.
- Aseta leikkuulevyt paikalleen ja kiristä, katso Leikkuulevyn vaihto.
- Hammaspyörän rasvaus, katso Hammaspyörän rasvaus.
- Työnä leikkuupää kiinni moottoriin huolellisesti. Varmista samalla, että leikkuupää asennetaan kiertäen noin 15° vasemmalle ja että alempi uloke tarttuu moottorikotelon uraan.
- Leikkuupään öljyäminen, katso Leikkuupään öljyäminen.

## Ilmansuodattimen puhdistaminen

- Puhdista ilmansuodatin **37/38** vähintään kerran päivässä tai sen likaantuessa.
- Irrota ilmansuodatin **37/38** johdottomasta klipperistä, katso Kuva G.
- Puhdista ilmansuodatin **37/38** huolellisesti kuumassa vedessä harjaa käyttäen.
- Anna ilmansuodattimen **37/38** kuivua.
- Johdottoman klipperin puhdistaminen.
- Kiinnitä ilmansuodatin **37/38** johdottomaan klipperiin.

## Leikkurilevyjen teroittaminen

- Ota yhteyttä tekniseen palveluun leikkurilevyjen teroittamiseksi, katso Tekninen asiakaspalvelu.

## 4.6 Säilytys

- Puhdista klipperi ja leikkurilevyt ennen varastointia, katso Käsittely.
- Säilytä klipperiä kuivassa, pimeässä ja puhtaassa tilassa.

## 5. Leikkuulevyt

### 5.1 GT367-leikkuupäähän sopivat leikkurilevyt

Tuotenumero	Nimike
GT501	Ylempi 15-hampainen leikkuulevy
GT502	Alempi 31-hampainen leikkuulevy, Leikkuukorkeus 3 mm
GT503	Ylempi 17-hampainen leikkuulevy
GT504	Alempi 18-hampainen leikkuulevy, Leikkuukorkeus 3 mm
GT505	Ylempi 23-hampainen leikkuulevy
GT506	Alempi 23-hampainen leikkuulevy, Leikkuukorkeus 3 mm
GT508	Alempi 51-hampainen leikkuulevy, Leikkuukorkeus 1 mm
GT510	kuten GT506, mutta leikkuukorkeus 5 mm
GT511	kuten GT502, mutta leikkuukorkeus 1 mm

### 5.2 Suositellut yhdistelmät

Yhdistelmä	Ylempi/alempi levy	Soveltuu
tiivisti hammastettu	GT501/GT502	Naudat ja hevoset (tavanomainen varustus GT474 ja GT367)
	GT501/GT511	Teollinen puhdistus
	GT505/GT508	(Esim. turkispuhdistus)
keskihammastus	GT505/GT506	Nautakarja, koirat ja vuohet
	GT505/GT510	Koirat ja vuohet
leveä hammastus	GT503/GT504	Nautakarja, hienovillaiset lampaat ja yksittäiset lampaat

## 6. Käsittely

### 6.1 Puhdistus ja desinfiointi



VAARA

#### Sähköiskun ja tulipalon vaara!

- Ennen puhdistusta:
  - Irrota laturin verkkopistoke.
  - Vapauta li-ion-akku ja irrota se johdottomasta klipperistä.
- Älä käytä mitään tulenarkoja ja räjähdysherkkiä puhdistus- tai desinfiointiaineita.
- Varmista, ettei nestettä pääse valumaan laitteen sisälle.



VARO!

#### Koneellinen pesu/desinfiointi saattaa vaurioittaa tai rikkoa tuotteen!

- Puhdista/desinfioi tuote vain käsin.
- Älä koskaan steriloi tuotetta.



VARO!

#### Väärät puhdistus-/desinfiointiaineet vahingoittavat tuotetta!

- Käytä pintojen puhdistukseen hyväksytyjä puhdistus-/desinfiointiaineita valmistajan antamien ohjeiden mukaan.
- Älä koskaan aseta tuotetta veteen tai puhdistusaineeseen.
- Älä päästä mitään nestettä laturiin.
- Puhdista laturikanavan kontaktit erittäin huolellisesti.

- Pyyhi tuotteen runko nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu kaupallisesti saatavaan desinfiointiaineeseen.
- Pyyhi sen jälkeen tarvittaessa puhdistus- ja desinfiointiaineiden jäämiä puhtaaseen veteen kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla.
- Käytä kuivaamiseen puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- Puhdista laturin kontaktit isopropanolilla tai etyylialkoholilla ja pumpulipuikolla. Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja.
- Tarvittaessa toista puhdistus/desinfiointi.

### 6.2 Tarkastus ja testaus

- Anna tuotteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi.
- Tarkista jokaisen puhdistus- ja desinfiointikerran jälkeen tuotteen: puhtaus, toiminta ja mahdolliset vauriot.
- Tarkasta, onko tuotteessa vaurioita, epäsäännöllisiä käyntiääniä, liiallista lämpenemistä tai liian voimakasta värinää.
- Tarkista leikkuupää rikkoutuneiden, vaurioituneiden ja tylsien terien varalta.
- Poista vahingoittunut tuote heti käytöstä.

## 7. Huolto

Jotta käytön luotettavuus voitaisiin taata, Aesculap suosittelee huoltoa vähintään kerran vuodessa.



## 8. Vikojen tunnistaminen ja korjaaminen

### 8.1 Johdoton klipperi Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Häiriö	Vian tunnistaminen	Syy	Vian korjaaminen
Johdoton klipperi ei käynnisty	-	Li-ion-akku ei aktivoitu.	Paina toistuvasti li-ion-akun painiketta <b>e</b>
	Päälle-/pois painikkeen LED <b>36</b> vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa	Li-ion-akku ei lataudu	Li-ion-akku latautuu
	-	Li-ion-akku on viallinen	Aseta uusi li-ion akku
	-	Li-ion-akkua ei ole asennettu	Aseta li-ion-akku paikalleen
Johdoton klipperi pysähtyy kesken käytön	-	Li-ion-akun suojaipiiri katkaissut	Katkaise virta johdottomasta klipperistä ja kytke sitten uudestaan päälle
	-	Li-ion-akku on tyhjä	Vaihda paikalleen uusi li-ion akku

Karjan ja hevosen klipperi Econom CL/CL Econom Equipe/CL Econom Fitter

8.2 Laturi ja li-ion-akku

Häiriö	Vian tunnistaminen	Syy	Vian korjaaminen
Laturi ei toimi	"Akku"-LED-osoitin ei pala	Virtajohtoa ei ole kytketty	Kytke virtajohto laturiin ja pistoke verkkopistorasiaan
	Li-ion-akku ei lataudu	Virtajohto viallinen	Vaihda virtajohto
		Li-ion-akku on viallinen	Toimita akku valmistajalle korjattavaksi katso Tekninen asiakaspalvelu
Li-ion-akku ei lataudu	Li-ion-akku kytketty, latausosoitin ei pala	Laturin kontaktit likaiset	Puhdista laturikanavan kontaktit, katso Käsi­tely
	-	Laturin kontaktit vioittuneet	Toimita laturi valmistajalle korjattavaksi, katso Tekninen asiakaspalvelu
	-	Li-ion-akku on viallinen	Toimita akku valmistajalle korjattavaksi katso Tekninen asiakaspalvelu
	-	Laturi viallinen	Toimita laturi valmistajalle korjattavaksi, katso Tekninen asiakaspalvelu
	-	Latauksen aikana mitataan li-ion-akun liian korkea lämpötila	Irrota li-ion-akku latauskanavasta, anna jäähtyä ja toista latausmenettely
			Häiriön uusiutuessa: Toimita akku valmistajalle korjattavaksi katso Tekninen asiakaspalvelu
	-	Latausvika tai viallinen li-ion-akku	Irrota li-ion-akku latauskanavasta ja toista latausmenettely
Häiriön uusiutuessa: Toimita akku valmistajalle korjattavaksi katso Tekninen asiakaspalvelu			





## 9. Tekninen asiakaspalvelu



**VAROITUS**

**Loukkaantumisvaara ja/tai toimintahäiriö!**

➤ Tuotetta ei saa muuttaa.

Lääkintäteknisiin varusteisiin tehdyt muutokset saattavat aiheuttaa takuun ja vahingonkorvausvelvollisuuden sekä mahdollisen käyttöluvan raukeamisen.

### Palveluosoitteet

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach / Germany

Phone: +49 (0) 8086 933-100

Fax: +49 (0) 8086 933-500

E-Mail: [info@kerbl.com](mailto:info@kerbl.com)

[www.kerbl.com](http://www.kerbl.com)

Muita huolto-osoitteita saa edellä mainitusta osoitteesta.

## 10. Lisävarusteet ja varaosat

Tuotenro	Nimike	Toteutus	Verkkojohto tai virtalähde	Li-ion-akku	Täydellinen latausasema	Lisävarusteet
GT804/ GT806	Econom CL	Eurooppa Paitsi UK	TA012170 Euroopan litteä pistoke, musta, P=1,8 m	GT801	GT803	GT604 Leikkuupään ja leikkuulevyjen erikoisöljy  GT605 Hammasvaihterasva (putki)
GT814/ GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT804G/ GT806G	Econom CL	Iso- Britannia	TA012169 UK-pistoke musta, P=1,8 m			
GT814G/ GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT804K/ GT806K	Econom CL	USA	TA012168 2-napainen laiteliitin, musta, P=1,8 m			
GT814K/ GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT804A/ GT806A	Econom CL	Australia	TA013657 2-napainen laiteliitin, musta, P=1,8 m			
GT814A/ GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

## Karjan ja hevosen klipperi Econom CL/CL Econom Equipe/CL Econom Fitter

### 11. Tekniset tiedot

#### 11.1 Johdoton klipperi Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter

	GT800 Econom CL	GT810 Econom CL Equipe	GT834 Econom CL Fitter
Lyöntimäärät	kork. 2 750 1/min	kork. 2 250 1/min	kork. 3 000 1/min
Yhden li-ion-akun käyttöaika	n. 70 min	n. 80 min	n. 70 min
Nimellisjännite	kork. 21,6 V	kork. 21,6 V	kork. 21,6 V
Kapasiteetti	kork. 2,6 A	kork. 2,6 A	kork. 2,6 A
Paino (leikkuupäällä ja akulla)	1 250 g	1 250 g	1 250 g
Hyväksynät	TÜV-GS, CE, UL, CSA	TÜV-GS, CE, UL, CSA	CE, UL, CSA

#### 11.2 Laturi

	GT803
Verkojännitealueet (virranotto)	100 V - 240 V
Taajuus	50 V - 60 V
Lataus-/lähtöjännite	kork. 25,2 V
Lataus-/lähtövirta	kork. 2,6 A
Paino (kaapelilla ja verkkolaitteella)	764 g
Hyväksynät	TÜV-GS, CE, UL, CSA

#### 11.3 Li-ion-akku

	GT801
Kennotyyppi	Li
Nimellisjännite	21,6 V
Kapasiteetti	2,6 Ah
Latausaika	n. 70 min
Hyväksynät	TÜV-GS, CE, UL, CSA

### 11.4 Yhdenmukaisuusvakuutus



Me vakuutamme omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavien asiakirjojen mukaiset standardit ja normit:  
EMC-direktiivi 2004/108/EY:  
DIN EN 60335-1  
DIN EN 60335-2-8  
Kotikäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuutta koskevat  
– yleiset vaatimukset  
– hiustenleikkukoneille  
Aesculap Suhl GmbH

### 12. Hävittäminen

Sähkötyökalut, tarvike- ja pakkausmateriaalit tulee lajitella ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

#### 12.1 Vain EU-maille



Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana!  
EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja kansallisen lainsäädännön mukaan käyttökelpoisia työkaluja ei enää tule lajitella erikseen toimitettaviksi ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

#### 12.2 Li-ion-akku

Li-ion-akkuja ei saa heittää talousjätteisiin, tuleen tai veteen. Vialliset tai käytetyt li-ion-akut on kerättävä, kierrätettävä tai hävitettävä ympäristöystävällisesti direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaisesti.



## 13. 2 vuoden takuu

Hyvä asiakas,

kiitos päätöksestäsi valita yhtiömme tuote.

Nimi Aesculap on jo vuosikymmenien ajan merkinnyt testattua laatua ja ensiluokkaista palvelua. Tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia ja suorituskykyisiä tuotteita. Aesculap valmistaa korkealaatuisia laitteita ja takaa käyttävänsä laadukkaita materiaali ja sekä valmistavansa tuotteet huolella. Emme vastaa laaturvirheistä, jotka johtuvat asiattomasta käytöstä, normaalista kulumisesta tai siitä, että laitetta käytetään muissa tuotteissa, jotka eivät toimi moitteettomasti.

Emme vastaa kulumista osista, esim. akuista tai leikkuupäistä. Emme myöskään vastaa virheistä, jotka vaikuttavat vain vähäisessä määrin tuotteen arvoon tai toimintaan.



Mikäli tuotevirhe kuuluu takuun piiriin, pidätämme itsellämme oikeuden korjata tai vaihtaa tuotteen.

**Обзор**

Поз.	Артикул	Количество	Наименование
1	GT502	1	Нижний нож (GT804–GT816/ GT834)
2	GT501	1	Верхний нож (GT804/GT806/ GT834)
	GT505	1	Верхний нож (GT814/GT816)
3	GT610405	1	Гайка с накаткой
4	GT367205	1	Регулировочный винт
6	TA010017	2	Винт
7	GT367201	1	Вибратор
8	GT610304	1	Вибрационная колодка
9	GT610010	2	Зажимной винт
10	GT367202	6	Вибрационный пружинный лист
11	GT367812	1	Цилиндрическое зубчатое колесо с эксцентриковым валом
15	TA008295	2	Направляющий штифт
16	GT367801	1	Корпус стригущей головки в сборе
17	TA005091	2	Винт
18	GT367802	1	Распорка, слева
19	GT367803	1	Распорка, справа
20	TA007765	1	Винт с потайной головкой
25	GT610307	1	Скоба для крепления пружины
26	GT367207	1	Стопорный винт
27	GT367804	1	Вибратор, в сборе
35	TA009222	1	Отвертка
36	GT800249	1	Кнопка "Вкл./Выкл." (со светодиодом)
37	GT800804	1	Воздушный фильтр (синий) Econom CL
38	GT800844	1	Воздушный фильтр (бордовый) Econom CL Equipe
39	GT801	1	Литиево-ионный аккумулятор
40	GT803	1	Зарядное устройство

Поз.	Артикул	Количество	Наименование
a	–	1	Точка смазки машинки для стрижки с аккумулятором
b	–	1	Концы вибратора
c	–	1	Отверстия верхнего ножа
d	–	1	Индикатор зарядки литиево-ионного аккумулятора
e	–	1	Кнопка литиево-ионного аккумулятора
f	–	1	Блокировка аккумулятора
g	GT800/ GT810	1	Машинка для стрижки с аккумулятором
–	GT604	1	Специальное масло для стригущей головки и ножей
	GT605	1	Трансмиссионная смазка (тюбик)

**Маркировка**

	Внимание, символ предупреждения общего характера Внимание, соблюдайте требования, содержащиеся в сопроводительной документации
	Маркировка электрических и электронных приборов в соответствии с Директивой 2012/19/EC (WEEE), см. Утилизация

**Содержание**

1	Правильное обращение с прибором .....	123
2	Описание прибора .....	123
2.1	Комплект поставки .....	123
2.2	Компоненты, необходимые для эксплуатации прибора .....	123
2.3	Назначение .....	124
2.4	Принцип действия .....	124
3	Подготовка к работе .....	124
4	Работа с машинкой для стрижки с аккумулятором, зарядным устройством и литиево-ионным аккумулятором .....	124
4.1	Подготовка .....	124
4.2	Проверка работоспособности .....	125
4.3	Подключение зарядного устройства/зарядка литиево-ионного аккумулятора .....	125
4.4	Замена литиево-ионного аккумулятора .....	126
4.5	Работа со стригущей головкой .....	127



4.6	Хранение .....	128
5	Ножи .....	129
5.1	Ножи, подходящие для использования со стригущей головкой GT367 .....	129
5.2	Рекомендуемые сочетания .....	129
6	Подготовка .....	129
6.1	Очистка/дезинфекция .....	129
6.2	Контроль и проверка .....	130
7	Техническое обслуживание .....	130
8	Распознавание и устранение неисправностей .....	130
8.1	Машинка для стрижки с аккумулятором Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter .....	130
8.2	Зарядное устройство и литиево-ионный аккумулятор .....	131
9	Сервисное обслуживание .....	132
10	Принадлежности/запасные части .....	133
11	Технические характеристики .....	133
11.1	Машинка для стрижки с аккумулятором Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter .....	134
11.2	Зарядное устройство .....	134
11.3	Литиево-ионный аккумулятор .....	134
11.4	Декларация о соответствии .....	134
12	Утилизация .....	135
12.1	Только для стран ЕС .....	135
12.2	Литиево-ионный аккумулятор .....	135
13	Гарантия 2 года .....	135

- Чтобы избежать повреждений, являющихся результатом неправильного монтажа или эксплуатации, и сохранить право на гарантию, необходимо:
  - использовать изделие только в соответствии с данной инструкцией по применению;
  - соблюдать указания по технике безопасности и техническому обслуживанию;
  - для комплектации использовать только изделия компании Aescular;
- хранить инструкцию по применению в доступном для пользователей месте;
- соблюдать действующие нормы.
- Убедиться, что электропроводка помещения соответствует стандартам IEC (Международной комиссии по электротехнике).
- Отсоединять устройство от сети, вытаскивая вилку, ни в коем случае не тянуть за кабель.
- Не использовать изделие во взрывоопасных зонах.
- Не использовать поврежденное или неисправное изделие. Поврежденное изделие сразу же отсортировать.

## 1. Правильное обращение с прибором



**ОПАСНОСТЬ**

**Опасность для жизни вследствие удара током!**

- Не открывать изделие.
- Устройство можно подключать только к сети питания с заземлением.

- Перед применением изделия проверить его на работоспособность и надлежащее состояние.
- Зарядное устройство и литиево-ионные аккумуляторы хранить при комнатной температуре.
- Зарядное устройство и литиево-ионные аккумуляторы хранить в сухом помещении.
- Перед первым применением зарядить литиево-ионные аккумуляторы.

## 2. Описание прибора

### 2.1 Комплект поставки

Артикул	Обозначение
GT800 GT810 GT834	Машинка для стрижки, с аккумулятором, Econom CL, Econom CL Equipe или Econom CL Fitter
GT801	Литиево-ионный аккумулятор
GT803	Зарядное устройство
см. Принадлежности/ запасные части	Линия подключения к сети (с штепсельным разъемом)
TA013895	Инструкция по применению
GT604	Бутылочка с маслом

### 2.2 Компоненты, необходимые для эксплуатации прибора

- Машинка для стрижки с аккумулятором Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter
- Зарядное устройство
- Линия подключения к сети (с штепсельным разъемом)
- Литиево-ионный аккумулятор

## 2.3 Назначение

### Машинка для стрижки с аккумулятором Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Машинка для стрижки с аккумулятором Econom CL/  
Econom CL Equipe/Econom CL Fitter используется для  
стрижки крупного рогатого скота, лошадей и больших  
собак.

### Зарядное устройство GT803/литиево-ионный аккумулятор GT801

Зарядное устройство GT803 используется для зарядки  
литиево-ионного аккумулятора GT801.

## 2.4 Принцип действия

### Машинка для стрижки с аккумулятором Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Машинка для стрижки с аккумулятором Econom CL/  
Econom CL Equipe/Econom CL Fitter включается и  
выключается посредством кнопки "Вкл./Выкл." **36**.

#### Указание

*Во избежание случайного включения/выключения  
машинки кнопка "Вкл./Выкл." срабатывает только при  
нажатии в течение >0,5 с.*

### Зарядное устройство GT803/литиево-ионный аккумулятор GT801

Зарядное устройство GT803 рассчитано на сетевое  
напряжение в диапазоне от 100 В до 240 В и от 50 Гц до  
60 Гц.

Для готовности к эксплуатации нужно подключить зарядное  
устройство GT803 при помощи сетевого штекера к сети  
питания.

Зарядное устройство GT803 имеет одно зарядное гнездо.  
При установке литиево-ионного аккумулятора в зарядную  
станцию процесс зарядки начинается автоматически.  
Время зарядки зависит от уровня зарядки и мощности  
литиево-ионного аккумулятора.

#### Принцип зарядки

Литиево-ионные аккумуляторы заряжаются импульсами  
постоянного тока.

Во время зарядки литиево-ионных аккумуляторов  
контролируется уровень зарядки. Контроль кривой заряда  
обеспечивает 100 %-ную зарядку без перезарядки.

Кроме того, отслеживается температура аккумулятора и  
время зарядки.

Индикатор зарядки **d** литиево-ионного аккумулятора  
состоит из 5 светодиодов. Каждый светодиод означает  
20 % зарядки. В процессе зарядки аккумулятора мигает  
светодиод, обозначающий соответствующую степень  
зарядки. Если все светодиоды непрерывно светятся,  
аккумулятор заряжен.

#### Время зарядки

При достижении максимального времени зарядки процесс  
зарядки прекращается. Продолжительность зарядки  
составляет около 70 мин.

## 3. Подготовка к работе

Если не выполняются следующие предписания, компания  
Aescular

снимает с себя всякую ответственность.

- При установке и эксплуатации изделия должны  
соблюдаться:
  - предписания по установке и эксплуатации, принятые в  
данной конкретной стране;
  - национальные предписания по противопожарной  
защите и взрывозащите;
  - предписания по эксплуатации в соответствии с  
положениями IEC/VDE.

## 4. Работа с машинкой для стрижки с аккумулятором, зарядным устройством и литиево-ионным аккумулятором

### 4.1 Подготовка

#### Подсоединение принадлежностей

Комбинации принадлежностей, которые не упоминаются в  
данном руководстве по эксплуатации, разрешаются к  
применению лишь в том случае, если они определенно  
предназначены для планируемого использования. Не  
разрешаются какие-либо действия, оказывающие  
негативное влияние на характеристики мощности, а также  
на соответствие требованиям по технике безопасности.



## 4.2 Проверка работоспособности

### Машинка для стрижки с аккумулятором Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Провести визуальную проверку.
- Убедиться, что воздушный фильтр **37/38** вставлен правильно, см. Рис. G.
- Вставить литиево-ионный аккумулятор **39** в гнездо машинки и зафиксировать его.
- Проверить уровень зарядки аккумулятора: нажать кнопку **e**, см. Рис. F.
- Индикатор зарядки **d** показывает уровень зарядки аккумулятора.

#### Указание

Чтобы предотвратить разрядку литиево-ионного аккумулятора, когда машинка не используется, электронное соединение литиево-ионного аккумулятора с системой управления машинки для стрижки разъединяется спустя 1 ч.

- Реактивация литиево-ионного аккумулятора **39**: нажать кнопку **e**, см. Рис. F.  
Загораются все светодиоды индикатора зарядки **d**.

### Зарядное устройство/литиево-ионный аккумулятор

- Провести визуальную проверку.
- Перед подключением изделия к сети питания:
  - Проверить сетевой кабель на наличие возможных повреждений.
  - Проверить изделие на наличие возможных повреждений (например, проверить контакты зарядного гнезда на наличие деформаций).
- Вставить сетевой кабель в приборный штекер на зарядной станции.
- Вставить штепсельную вилку сетевого кабеля в розетку сети питания.
- Вставить литиево-ионный аккумулятор **39** в гнездо зарядного устройства и зарядить его, см. Рис. F.

## 4.3 Подключение зарядного устройства/ зарядка литиево-ионного аккумулятора



ВНИМАНИЕ

Опасность пожара в результате короткого замыкания полюсов из-за попадания жидкостей или металлических частей!

- Не допускать короткого замыкания литиево-ионного аккумулятора.



ВНИМАНИЕ

Опасность травмирования в результате повреждения сетевого кабеля!

- Перед зарядкой проверять сетевой кабель на наличие повреждений.
- Поврежденный сетевой кабель заменяется производителем.



ВНИМАНИЕ

При повреждении литиево-ионного аккумулятора существует опасность травмирования и нанесения материального ущерба!

- Перед зарядкой проверить литиево-ионный аккумулятор на наличие повреждений.
- Не использовать и не заряжать поврежденный литиево-ионный аккумулятор.



ОСТОРОЖНО

Потеря мощности/производительности разряженного литиево-ионного аккумулятора в результате длительного хранения!

- Размещать литиево-ионный аккумулятор на длительное хранение только в полностью заряженном состоянии и выполнять подзарядку один раз в месяц.



ОСТОРОЖНО

Если в зарядное гнездо установлен аккумулятор несоответствующего типа, это может вызвать разрушение изделия, зарядного гнезда или литиево-ионного аккумулятора!

- Подключать литиево-ионный аккумулятор только через предусмотренное для этого зарядное гнездо.

**Указание**

Зарядное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не обладающими достаточным опытом и достаточными знаниями, только в том случае, если они находятся под надзором или получили инструкции по безопасному обращению с устройством и ознакомлены с исходящими от него опасностями.

- Запрещается использовать устройство в качестве детской игрушки.
- Очистка и техническое обслуживание зарядного устройства не могут выполняться детьми без присмотра.

**Указание**

Литиево-ионный аккумулятор слегка нагревается в процессе зарядки.

**Указание**

Если зарядное устройство не используется, необходимо извлечь сетевой кабель из розетки.

- Для зарядки литиево-ионных аккумуляторов использовать только зарядное устройство Aesculap GT803.
- Подключение зарядного устройства **40**: вставить приборный штекер сетевого кабеля в зарядное устройство.
- Сетевой штекер сетевого кабеля вставить в штепсельную розетку.
- Вставить литиево-ионный аккумулятор **39** в гнездо зарядного устройства и зарядить его, см. Рис. F.  
Светодиоды индикатора зарядки **d** литиево-ионного аккумулятора мигают в соответствии с текущим уровнем зарядки. Если все светодиоды непрерывно светятся, аккумулятор заряжен.

**4.4 Замена литиево-ионного аккумулятора**

- Держать машинку для стрижки с аккумулятором **g** стригущей головкой вниз, чтобы литиево-ионный аккумулятор **39** не вывалился при отсоединении, см. Рис. 1.
- Большим пальцем отключить блокировку аккумулятора **f**.



Рис. 1





- Извлечь литиево-ионный аккумулятор **39**, зарядить и/или вставить заряженный запасной литиево-ионный аккумулятор GT801 в машинку для стрижки с аккумулятором **g**, см. Рис. 2.



Рис. 2


- Зафиксировать литиево-ионный аккумулятор **39** при помощи блокировки аккумулятора **f**, см. Рис. 3.



Рис. 3

## 4.5 Работа со стригущей головкой

### Смазка стригущей головки маслом

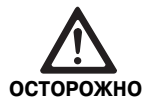

ОСТОРОЖНО

**Повреждение машинки для стрижки или стригущей головки в результате неправильной смазки!**

- Смазывать стригущую головку только во время работы машинки.
- Не погружать машинку и стригущую головку в жидкости.
- Применять только легкое смазочное масло GT604.

- Обильно смазывать стригущую головку через точку смазки **a** перед стрижкой каждого животного, см. Рис. А.
- Смазывать пружинные листы **10** 2-3 раза ежедневно 3-4 каплями масла, см. Рис. С.

### Смазка зубчатого колеса



ОСТОРОЖНО

**Повреждение машинки для стрижки или зубчатого колеса в результате неправильной смазки!**

- Применять только трансмиссионную смазку GT605.
- Смазывать зубчатое колесо 1-2 раза за сезон стрижки.

- Разблокировать и извлечь литиево-ионный аккумулятор **39**.
- Вывинтить оба винта **6**, см. Рис. В.
- Повернуть стригущую головку примерно на 15° влево (если смотреть на стригущую головку) и снять с корпуса двигателя.
- Нанести примерно 1 см смазки на две противоположные точки зубчатого колеса **11**, см. Рис. С.
- Осторожно надеть стригущую головку на двигатель. При этом убедиться, что стригущая головка насаживается с поворотом влево примерно на 15°, а носик снизу заходит в паз корпуса двигателя.

### Замена ножей

- Разблокировать и извлечь литиево-ионный аккумулятор **39**.
- Ослабить гайку с накаткой **3** и вывинтить регулировочный винт **4** примерно на 2 оборота, см. Рис. А.
- Ослабить оба зажимных винта **9**, снять нижний нож **1** в направлении вперед и извлечь верхний нож **2**, см. Рис. D и Рис. Е.
- Перед установкой верхнего ножа **2** убедиться, что вибрационная колодка **8** находится в предназначенном для этого пазу вибратора **7**, см. Рис. Е.
- Вставить верхний нож **2**. При этом убедиться, что оба конца **b** вибратора **7** точно входят в отверстия **c** верхнего ножа **2**, см. Рис. D.
- Протолкнуть нижний нож **1** под головками зажимных винтов **9** к корпусу стригущей головки до упора и затянуть оба зажимных винта **9**.
- Ввинтить регулировочный винт **4** так, чтобы оба ножа слегка нажимали друг на друга, см. Рис. А.

### Регулировка давления пластины

#### Указание

Настройка давления пластины должна производиться во время работы машинки и без вспомогательных инструментов.

#### Указание

Слишком сильное давление пластины приводит к сильному нагреву и большому износу ножей.

- Ослабить гайку с накаткой **3** и осторожно вывинчивать регулировочный винт **4** до тех пор, пока верхний нож **2** не перестанет нажимать на нижний нож **1** (высокий звук при работе), см. Рис. А.
- Ввинчивать регулировочный винт **4** до тех пор, пока не станет ощущаться легкое сопротивление. Начиная с этого момента, добавить еще примерно один оборот, а затем затянуть гайку с накаткой **3**.

### Очистка стригущей головки

- Очищать стригущую головку через несколько дней использования или в случае загрязнения.
- Разблокировать и извлечь литиево-ионный аккумулятор **39**.
- Вывинтить оба винта **6**, см. Рис. В.
- Повернуть стригущую головку примерно на 15° влево (если смотреть на стригущую головку) и снять с корпуса двигателя.
- Снять ножи, см. Замена ножей.

- Основательно почистить щеткой или кисточкой внутреннюю полость стригущей головки и отдельные детали.
- Вставить и зажать ножи, см. Замена ножей.
- Смазать зубчатое колесо, см. Смазка зубчатого колеса.
- Осторожно надеть стригущую головку на двигатель. При этом убедиться, что стригущая головка насаживается с поворотом влево примерно на 15°, а носик снизу заходит в паз корпуса двигателя.
- Смазать стригущую головку маслом, см. Смазка стригущей головки маслом.

### Очистка воздушного фильтра

- Очищать воздушный фильтр **37/38** не реже одного раза в день или при загрязнении.
- Снять воздушный фильтр **37/38** с машинки для стрижки с аккумулятором, см. Рис. G.
- Основательно почистить воздушный фильтр **37/38** щеткой в теплой воде.
- Высушить воздушный фильтр **37/38**.
- Очистить машинку для стрижки с аккумулятором.
- Надеть воздушный фильтр **37/38** на машинку для стрижки.

### Подточка ножей

- Для подточки ножей необходимо обратиться в техническую службу, см. Сервисное обслуживание.

## 4.6 Хранение

- Перед хранением тщательно очистить машинку для стрижки и ножи, см. Подготовка.
- Машинку для стрижки хранить в сухом, темном и чистом помещении.



## 5. Ножи

### 5.1 Ножи, подходящие для использования со стригущей головкой GT367

Артикул	Обозначение
GT501	Верхний нож с 15 зубьями
GT502	Нижний нож с 31 зубом, высота среза 3 мм
GT503	Верхний нож с 17 зубьями
GT504	Нижний нож с 18 зубьями, Высота среза 3 мм
GT505	Верхний нож с 23 зубьями
GT506	Нижний нож с 23 зубьями, Высота среза 3 мм
GT508	Нижний нож с 51 зубом, Высота среза 1 мм
GT510	Как GT506, однако высота среза 5 мм
GT511	Как GT502, однако высота среза 1 мм

### 5.2 Рекомендуемые сочетания

Сочетание	Верхний/ нижний нож	Подходит для
Узкие зубья	GT501/GT502	Крупный рогатый скот и лошади (стандартная комплектация GT474 и GT367)
	GT501/GT511	Промышленная стрижка
	GT505/GT508	(например, стрижка шкур)
Средние зубья	GT505/GT506	Крупный рогатый скот, собаки и козы
	GT505/GT510	Собаки и козы
Широкие зубья	GT503/GT504	Крупный рогатый скот, тонкошерстные овцы и отдельные овцы

## 6. Подготовка

### 6.1 Очистка/дезинфекция



**ОПАСНОСТЬ**

Опасность удара током и возникновения пожара!

➤ **Перед очисткой:**

– извлечь сетевой штекер из зарядного устройства;

– разблокировать литиево-ионный аккумулятор и извлечь его из машинки для стрижки.

➤ **Нельзя использовать чистящие и дезинфицирующие средства, которые могут воспламениться или являются взрывоопасными.**

➤ **Не допускать попадания жидкости в прибор.**



**ОСТОРОЖНО**

При проведении машинной очистки/дезинфекции существует опасность повреждения или разрушения прибора!

➤ **Выполнять очистку/дезинфекцию прибора только вручную.**

➤ **Никогда не стерилизовать изделие.**



**ОСТОРОЖНО**

Применение несоответствующего чистящего/дезинфицирующего средства может привести к повреждению изделия!

➤ **Для очистки поверхностей применять разрешенные чистящие/дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями производителя.**

➤ **Ни в коем случае не помещать изделие в воду или чистящий раствор.**

➤ **Не допускать попадания жидкости в зарядные гнезда.**

➤ **Чистку контактов в зарядном гнезде выполнять с максимальной осторожностью.**

➤ Протереть корпус изделия безворсовой салфеткой, смоченной стандартным средством для дезинфекции протиранием.

➤ При необходимости, вытереть остатки чистящего и дезинфицирующего средства по истечении времени его воздействия безворсовой салфеткой, смоченной чистой водой.

- Для протирки насухо использовать чистую безворсовую салфетку.
- Для чистки контактов в зарядных гнездах использовать изопропанол или, соответственно, этиловый спирт и ватную палочку. Не применять химические средства, вызывающие коррозию.
- При необходимости провести повторную очистку/дезинфекцию.

## 6.2 Контроль и проверка

- Охладить изделие до комнатной температуры.
- Каждый раз после проведения очистки и дезинфекции проверять: чистоту, функциональность и наличие повреждений.
- Проверять изделие на предмет повреждений, посторонних шумов, чрезмерного нагревания или слишком сильной вибрации.
- Проверить стригущую головку на наличие обломившихся, поврежденных и затупившихся режущих частей.
- Поврежденное изделие сразу же отсортировать.

## 7. Техническое обслуживание

Для обеспечения надежной эксплуатации компания Aesculap рекомендует проводить техническое обслуживание **не реже одного раза в год**.

## 8. Распознавание и устранение неисправностей

### 8.1 Машинка для стрижки с аккумулятором Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Неисправность	Распознавание	Причина	Устранение
Машинка для стрижки с аккумулятором не работает	–	Не активирован литиево-ионный аккумулятор	Нажать кнопку <b>e</b> на литиево-ионном аккумуляторе
	Светодиод кнопки "Вкл./Выкл." <b>36</b> мигает дважды в секунду	Не заряжен литиево-ионный аккумулятор	Зарядить литиево-ионный аккумулятор
	–	Литиево-ионный аккумулятор неисправен	Использовать новый литиево-ионный аккумулятор
	–	Не вставлен литиево-ионный аккумулятор	Вставить литиево-ионный аккумулятор
Машинка для стрижки с аккумулятором останавливается в процессе эксплуатации	–	Предохранитель отключил литиево-ионный аккумулятор	Выключить и включить машинку для стрижки
	–	Литиево-ионный аккумулятор разряжен	Использовать новый литиево-ионный аккумулятор



## 8.2 Зарядное устройство и литиево-ионный аккумулятор

Неисправность	Распознавание	Причина	Устранение	
Зарядное устройство не функционирует	Не горит светодиодный индикатор "Аккумулятор"	Не подсоединен сетевой кабель	Подсоединить сетевой кабель к приборному штекеру на зарядном устройстве и к розетке сети питания	
	Не заряжен литиево-ионный аккумулятор	Сетевой кабель неисправен	Заменить сетевой кабель	
		Литиево-ионный аккумулятор неисправен	Отдать литиево-ионный аккумулятор в ремонт фирме-производителю, см. Сервисное обслуживание	
Литиево-ионный аккумулятор не заряжается	Литиево-ионный аккумулятор подключен, индикатор зарядки не горит	Загрязнены контакты зарядного устройства	Почистить контакты в зарядном гнезде, см. Подготовка	
	–	Повреждены контакты зарядного устройства	Отдать зарядное устройство в ремонт фирме-производителю, см. Сервисное обслуживание	
	–	Литиево-ионный аккумулятор неисправен	Отдать литиево-ионный аккумулятор в ремонт фирме-производителю, см. Сервисное обслуживание	
	–	Зарядное устройство неисправно	Отдать зарядное устройство в ремонт фирме-производителю, см. Сервисное обслуживание	
	–	В процессе зарядки в литиево-ионном аккумуляторе слишком высокая температура		Вынуть аккумулятор из зарядного гнезда, дать ему остыть и повторить процесс зарядки
				При повторном возникновении неисправности: отдать литиево-ионный аккумулятор в ремонт фирме-производителю, см. Сервисное обслуживание
	–	Неполадки в процессе зарядки или неисправность литиево-ионного аккумулятора		Вынуть аккумулятор из зарядного гнезда и повторить процесс зарядки
При повторном возникновении неисправности: отдать литиево-ионный аккумулятор в ремонт фирме-производителю, см. Сервисное обслуживание				

## 9. Сервисное обслуживание



ВНИМАНИЕ

**Опасность травмирования и/или сбоев в работе!**

➤ **Нельзя изменять изделие.**

Модификации медико-технического оборудования могут привести к потере права на гарантийное обслуживание, а также к прекращению действия соответствующих допусков к эксплуатации.

### **Адреса сервисных центров**

Albert Kerbl GmbH  
Felizenzell 9  
84428 Buchbach / Germany  
Phone: +49 (0) 8086 933-100  
Fax: +49 (0) 8086 933-500  
E-Mail: [info@kerbl.com](mailto:info@kerbl.com)  
[www.kerbl.com](http://www.kerbl.com)

Адреса других сервисных центров можно узнать по вышеуказанному адресу.



## 10. Принадлежности/запасные части

Артикул	Обозначение	Форма	Сетевой кабель или блок питания	Литиево-ионный аккумулятор	Зарядная станция в комплекте	Принадлежности
GT804/ GT806	Econom CL	Европа кроме Великобритании	TA012170 Плоский евро-штекер, черный, длина=1,8 м	GT801	GT803	GT604 Специальное масло для ножей и стригущей головки
GT814/ GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT804G/ GT806G	Econom CL	Великобритания	TA012169 Британский штекер, черный, длина=1,8 м			
GT814G/ GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT804K/ GT806K	Econom CL	США	TA012168 2-контактный приборный штекер, черный, длина=1,8 м			
GT814K/ GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT804A/ GT806A	Econom CL	Австралия	TA013657 2-контактный приборный штекер, черный, длина=1,8 м			
GT814A/ GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

## 11. Технические характеристики

### 11.1 Машинка для стрижки с аккумулятором Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

	GT800 Econom CL	GT810 Econom CL Equipe	GT834 Econom CL Fitter
Число ходов	макс. 2 750 1/мин	макс. 2 250 1/мин	макс. 3 000 1/мин
Продолжительность работы на одном литиево-ионном аккумуляторе	ок. 70 мин	ок. 80 мин	ок. 70 мин
Номинальное напряжение	макс. 21,6 В	макс. 21,6 В	макс. 21,6 В
Мощность	макс. 2,6 А	макс. 2,6 А	макс. 2,6 А
Вес (со стригущей головкой и аккумулятором)	1 250 г	1 250 г	1 250 г
Знак соответствия нормам	ТЪV-GS, CE, UL, CSA	ТЪV-GS, CE, UL, CSA	CE, UL, CSA


### 11.2 Зарядное устройство

	GT803
Диапазон параметров сетевого напряжения (потребление тока)	100 В – 240 В
Частота	50 Гц – 60 Гц
Зарядное/выходное напряжение	макс. 25,2 В
Зарядный ток/выходной ток	макс. 2,6 А
Вес (с кабелем и блоком питания)	764 г
Знак соответствия нормам	ТЪV-GS, CE, UL, CSA

### 11.3 Литиево-ионный аккумулятор

	GT801
Тип элементов	Li
Номинальное напряжение	21,6 В
Мощность	2,6 А·ч
Время зарядки	ок. 70 мин
Знак соответствия нормам	ТЪV-GS, CE, UL, CSA

### 11.4 Декларация о соответствии

	<p>Мы, под собственную ответственность, заявляем, что данное изделие соответствует следующим нормам или нормативным документам:</p> <p>2004/108/ЕС Директива по ЭМС: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-8</p> <p>Безопасность электрических приборов, предназначенных для домашнего использования и аналогичных целей</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общие требования</li> <li>- к машинкам для стрижки волос</li> </ul> <p>Aesculap Suhl GmbH</p>
---	---






## 12. Утилизация

Электроинструменты, комплектующие и упаковка должны сдаваться для экологически целесообразного вторичного использования.

### 12.1 Только для стран ЕС

	<p>Не выбрасывать электроинструменты в бытовые отходы! В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах и ее реализацией в национальном праве электроинструменты, больше не пригодные к эксплуатации, должны собираться отдельно и сдаваться для экологически целесообразного вторичного использования.</p>
---	---

### 12.2 Литиево-ионный аккумулятор

Литиево-ионные аккумуляторы нельзя бросать в домашний мусор, в огонь или воду. Неисправные или отработанные литиево-ионные аккумуляторы необходимо собирать, вторично использовать или утилизировать без нанесения ущерба окружающей среде согласно Директиве 2006/66/ЕС.

## 13. Гарантия 2 года

Уважаемый покупатель,

большое спасибо за то, что Вы выбрали изделие, производимое нашей фирмой.

Название Aescular уже несколько десятилетий является синонимом проверенного качества и первоклассного обслуживания. Мы предлагаем нашим покупателям инновационное и производительное оборудование. Фирма Aescular производит высококачественные приборы и гарантирует применение высококачественных материалов и точность изготовления. Мы обращаем Ваше внимание на то, что мы не несем ответственность за те недостатки нашей продукции, которые возникают вследствие ненадлежащей эксплуатации, обычного износа, вследствие ненадлежащего использования изделия или использования неподходящей или небезупречно функционирующей продукции других производителей.

К числу деталей, которые обычно подвергаются износу и в связи с этим не охвачены гарантией, относятся аккумулятор и стригущая головка. Также действие гарантии не распространяется на недостатки, которые не формируют или лишь в незначительной степени формируют стоимость изделия и не влияют или почти не влияют на его функционирование.

При наступлении гарантийного случая мы сохраняем за собой право отремонтировать или заменить изделие.



Maszynka do strzyżenia sierści bydłowej i końskiej Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Przeгляд

Poz.	Nr artykułu	Liczba	Nazwa
1	GT502	1	Dolna płytką tnącą (GT804-GT816/GT834)
2	GT501	1	Górna płytką tnącą (GT804/GT806/GT834)
	GT505	1	Górna płytką tnącą (GT814/GT816)
3	GT610405	1	Nakrętka radełkowa
4	GT367205	1	Śruba regulacyjna
6	TA010017	2	Śruba
7	GT367201	1	Element oscylujący
8	GT610304	1	Kłoczek oscylujący
9	GT610010	2	Śruba zaciskowa
10	GT367202	6	Płytką sprężynowa
11	GT367812	1	Koło zębate czołowe z wałkiem mimośrodowym
15	TA008295	2	Wypustka prowadząca
16	GT367801	1	Obudowa głowicy strzyżącej
17	TA005091	2	Śruba
18	GT367802	1	Element dystansowy, lewy
19	GT367803	1	Element dystansowy, prawy
20	TA007765	1	Śruba z łbem stożkowym płaskim
25	GT610307	1	Mostek sprężynujący
26	GT367207	1	Śruba mocująca
27	GT367804	1	Element oscylujący, zamontowany
35	TA009222	1	Śrubokręt
36	GT800249	1	Włłącznik/wyłłącznik (z diodą)
37	GT800804	1	Filtr powietrza (niebieski) Econom CL
38	GT800844	1	Filtr powietrza (bordowy) Econom CL Equipe
39	GT801	1	Akumulator litowo-jonowy
40	GT803	1	Ładowarka
a	-	1	Punkt smarowania olejem akumulatorowej maszyny do strzyżenia
b	-	1	Końcówka elementu oscylującego
c	-	1	Otwory obu płytek tnących
d	-	1	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora litowo-jonowego
e	-	1	Przycisk akumulatora litowo- jonowego
f	-	1	Blokada akumulatora

Poz.	Nr artykułu	Liczba	Nazwa
g	GT800/ GT810	1	Akumulatorowa maszyna do strzyżenia
-	GT604	1	Specjalny olej do głowicy strzyżącej i płytek tnących
	GT605	1	Smar przekładniowy (w tubce)

Oznaczenia na produkcie

	Uwaga, ogólny symbol ostrzeżenia Uwaga, przestrzegać dokumentacji dołączonej do produktu
	Oznakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych wg dyrektywy 2012/19/UE (WEEE), patrz Utylizacja

Spis treści

1.	Bezpieczne posługiwanie się urządzeniem.....	137
2.	Opis urządzenia .....	137
2.1	Zakres dostawy .....	137
2.2	Komponenty niezbędne do eksploatacji urządzenia .....	137
2.3	Przeznaczenie.....	137
2.4	Zasada działania.....	138
3.	Przygotowanie .....	138
4.	Praca z użyciem akumulatorowej maszyny do strzyżenia, ładowarki i akumulatora litowo-jonowego .....	138
4.1	Czynności przygotowawcze .....	138
4.2	Kontrola działania.....	138
4.3	Podłączanie ładowarki/ładowanie akumulatora litowo-jonowego.....	139
4.4	Wymiana akumulatora litowo-jonowego .....	139
4.5	Posługiwanie się głowicą strzyżącą .....	140
4.6	Przechowywanie.....	141
5.	Płytki tnące .....	141
5.1	Płytki tnące pasujące do głowicy strzyżącej GT367 .....	141
5.2	Zalecane zestawienia.....	141
6.	Przygotowanie .....	142
6.1	Czyszczenie/dezynfekcja.....	142
6.2	Kontrola i testowanie .....	142
7.	Konserwacja .....	142
8.	Wykrywanie i usuwanie usterek.....	143
8.1	Akumulatorowa maszyna do strzyżenia Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter.....	143
8.2	Ładowarka i akumulator litowo-jonowy .....	144
9.	Serwis techniczny .....	145
10.	Aksesoria/części zamienne.....	145
11.	Dane techniczne.....	146
11.1	Akumulatorowa maszyna do strzyżenia Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter.....	146
11.2	Ładowarka.....	146
11.3	Akumulator litowo-jonowy.....	146
11.4	Deklaracja zgodności .....	146
12.	Utylizacja.....	146
12.1	Tylko kraje UE.....	146
12.2	Akumulator litowo-jonowy.....	146
13.	2 lata gwarancji .....	147



## 1. Bezpieczne posługiwanie się urządzeniem 2. Opis urządzenia



### Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem!

- Nie otwierać produktu
- Produkt przyłączać wyłącznie do sieci, korzystając z przewodu PE.

- Przed użyciem produktu sprawdzić poprawność działania i stan urządzenia.
- Ładowarkę i akumulatory litowo-jonowe przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie zamaczać ładowarki i akumulatorów litowo-jonowych.
- Naładować akumulator litowo-jonowy przed pierwszym użyciem.
- Aby uniknąć szkód spowodowanych przez niewłaściwe złożenie lub użytkowanie i nie ryzykować utraty rękopisów i gwarancji:
  - Używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją użycia.
  - Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i utrzymania w stanie sprawności.
  - Zestawiać wzajemnie tylko wyroby firmy Aesculap.
- Instrukcję obsługi należy przechowywać w miejscu dostępnym dla osoby stosującej urządzenie.
- Przestrzegać obowiązujących norm.
- Upewnić się, czy instalacja elektryczna w pomieszczeniu spełnia standardy IEC.
- Urządzenie odłączać od sieci przez wyciągnięcie wtyczki przyrządowej – nie ciągnąć za kabel.
- Produktu nie wolno stosować w strefach zagrożenia wybuchem.
- Nie używać uszkodzonego lub zepsutego produktu. Uszkodzony produkt należy natychmiast wysortować.

### 2.1 Zakres dostawy

Nr artykułu	Nazwa
GT800 GT810 GT834	Akumulatorowa maszynka do strzyżenia Econom CL, Econom CL Equipe lub Econom CL Fitter
GT801	Akumulator litowo-jonowy
GT803	Ładowarka
patrz Akcesoria/ części zamienne	Przewód sieciowy (z wtyczką przyrządową)
TA013895	Instrukcja użycia
GT604	Butelka z olejem

### 2.2 Komponenty niezbędne do eksploatacji urządzenia

- Akumulatorowa maszynka do strzyżenia Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter
- Ładowarka
- Przewód sieciowy (z wtyczką przyrządową)
- Akumulator litowo-jonowy

### 2.3 Przeznaczenie

#### Akumulatorowa maszynka do strzyżenia Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Akumulatorowa maszynka do strzyżenia Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter jest przeznaczona do strzyżenia sierści dużych zwierząt, takich jak krowy, konie i duże psy.

#### Ładowarka GT803/akumulator litowo-jonowy GT801

Ładowarka GT803 jest stosowana do ładowania akumulatora litowo-jonowego GT801.

## 2.4 Zasada działania

### Akumulatorowa maszynka do strzyżenia Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Akumulatorową maszynkę do strzyżenia Econom CL/Econom CL Equipe/  
Econom CL Fitter włącza się i wyłącza za pomocą włącznika/  
wyłącznika 36.

#### Wskazówka

Aby uniknąć przypadkowego włączenia lub wyłączenia maszyny,  
włącznik/wyłącznik reaguje dopiero po naciśnięciu trwającym >0,5  
sekundy.

### Ładowarka GT803/akumulator litowo-jonowy GT801

Ładowarka GT803 została zaprojektowana dla zakresu napięć od 100 V do  
240 V i od 50 Hz do 60 Hz.

W celu uzyskania stanu gotowości do pracy ładowarkę GT803 należy  
podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą kabla zasilającego.

Ładowarka GT803 posiada jedno gniazdo ładowania.

Z chwilą włożenia akumulatora litowo-jonowego do gniazda ładowania  
automatycznie rozpoczyna się proces ładowania.

Czas ładowania jest zależny od stopnia rozładowania i pojemności  
akumulatora litowo-jonowego.

#### Zasada ładowania

Akumulatory litowo-jonowe są ładowane stałymi impulsami prądu.

Stan naładowania akumulatora litowo-jonowego jest nadzorowany przez  
cały czas ładowania. Kontrola krzywej ładowania gwarantuje naładowanie  
bez przedładowania na poziomie 100 %.

Dodatkowo nadzorowane są temperatura akumulatora i czas ładowania.

Wskaźnik poziomu naładowania **d** akumulatora litowo-jonowego składa  
się z 5 diod. Każda dioda symbolizuje 20 % pojemności ładowania. Jeżeli  
trwa ładowanie akumulatora, miga dioda danego stanu naładowania.  
Jeżeli przez cały czas świecą wszystkie diody, oznacza to, że akumulator  
jest w pełni naładowany.

#### Czas ładowania

Po osiągnięciu maksymalnego czasu ładowania proces ładowania zostanie  
przerwany. Czas ładowania wynosi ok. 70 min.

## 3. Przygotowanie

Jeśli poniższe zalecenia nie będą przestrzegane, to firma

Aesculap

ponosi odpowiedzialności za sprawność urządzenia.

- Podczas montażu i eksploatacji produktu należy przestrzegać:
  - krajowych przepisów dotyczących instalacji i użytkowania,
  - krajowych przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i  
przeciwybuchowej,
  - wskazówek dotyczących stosowania, a wynikających z przepisów IEC/  
VDE.

## 4. Praca z użyciem akumulatorowej maszynki do strzyżenia, ładowarki i akumulatora litowo-jonowego

### 4.1 Czynności przygotowawcze

#### Podłączanie wyposażenia

Kombinacje dotyczące elementów wyposażenia, których nie wymieniono  
w instrukcji obsługi, mogą być stosowane tylko wówczas, gdy są  
przeznaczone do danego zastosowania. Charakterystyka wydajnościowa  
oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa nie mogą być niekorzystnie  
zmienione.

### 4.2 Kontrola działania

#### Akumulatorowa maszynka do strzyżenia Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Skontrolować wzrokowo.
- Upewnić się, że filtr powietrza **37/38** jest prawidłowo osadzony, patrz  
Rys. G.
- Wsunąć akumulator litowo-jonowy **39** do komory maszyny i  
zablokować go.
- Sprawdzić stan naładowania akumulatora: Nacisnąć przycisk **e**,  
patrz Rys. F.
- Wskaźnik poziomu naładowania **d** wskazuje poziom naładowania.

#### Wskazówka

Aby zapobiec rozładowywaniu się akumulatora litowo-jonowego, gdy  
maszynka nie jest używana, połączenie elektryczne akumulatora ze  
sterowaniem akumulatorowej maszyny do strzyżenia zostaje  
odłączone po upływie 1 godziny.

- Wznawianie pracy akumulatora litowo-jonowego **39**: Nacisnąć  
przycisk **e**, patrz Rys. F.  
Wszystkie diody wskaźnika poziomu naładowania **d** świecą.

#### Ładowarka/akumulator litowo-jonowy

- Skontrolować wzrokowo.
- Przed podłączeniem produktu do sieci zasilania elektrycznego:
  - Sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
  - Produkt należy zbadać pod kątem możliwych uszkodzeń (np. czy styki  
gniazda ładowarki nie są wygięte).
- Podłączyć przewód sieciowy do gniazda w stacji ładowania.
- Wtyczkę sieciową włożyć do gniazdka sieci elektrycznej.
- Włożyć akumulator litowo-jonowy **39** do gniazda ładowania i  
naładować go, patrz Rys. F.



### 4.3 Podłączenie ładowarki/ładowanie akumulatora litowo-jonowego



OSTRZEŻENIE

**Niebezpieczeństwo pożaru w razie wystąpienia zwarcia biegunów przez płyny lub części metalowe!**

- Nie należy zwierać akumulatora litowo-jonowego.



OSTRZEŻENIE

**Niebezpieczeństwo zranienia przez uszkodzony przewód sieciowy!**

- Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewód sieciowy nie jest uszkodzony.
- Wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić producentowi.



OSTRZEŻENIE

**Niebezpieczeństwo zranienia lub spowodowania szkód materialnych przez uszkodzony akumulator litowo-jonowy!**

- Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy akumulator litowo-jonowy nie jest uszkodzony.
- Nie należy używać ani ładować uszkodzonego akumulatora litowo-jonowego.



PRZESTROGA

**Dłuższe przechowywanie rozładowanego akumulatora litowo-jonowego powoduje utratę ich pojemności/wydajności!**

- W razie dłuższego przechowywania akumulator litowo-jonowy należy magazynować w stanie całkowicie naładowanym i raz w miesiącu doładowywać.



PRZESTROGA

**Włożenie niewłaściwego akumulatora litowo-jonowego do gniazda ładowarki grozi zniszczeniem produktu, gniazda ładowarki lub akumulatora!**

- Akumulator litowo-jonowy wkładać tylko do przewidzianego dla niego gniazda.

#### Wskazówka

Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, czuciowymi lub umysłowymi bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli pozostają one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem urządzenia.

- Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
- Prace związane z czyszczeniem i konserwacją ładowarki nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

#### Wskazówka

Akumulator litowo-jonowy nagrzewa się podczas ładowania.

#### Wskazówka

Gdy ładowarka nie jest używana, należy odłączyć jej przewód sieciowy od gniazda zasilającego.

- Do ładowania akumulatora litowo-jonowego stosować tylko ładowarkę GT803 marki Aesculap.
- Podłączenie ładowarki **40**: Podłączyć wtyczkę przyrządową przewodu sieciowego do ładowarki.
- Wtyczkę sieciową przewodu sieciowego podłączyć do gniazda zasilającego.
- Włożyć akumulator litowo-jonowy **39** do gniazda ładowania i naładować go, patrz Rys. F.

Diody wskaźnika poziomu naładowania **d** akumulatora litowo-jonowego migają w zależności od aktualnego stanu naładowania. Jeżeli przez cały czas świecą wszystkie diody, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.

### 4.4 Wymiana akumulatora litowo-jonowego

- Ustawioną w dół akumulatorową maszynkę do strzyżenia **g** przytrzymać za głowicę strzygącą tak, aby akumulator litowo-jonowy **39** nie wypadł podczas wyciągania, patrz Rys. 1.
- Kciukami zwolnić blokadę akumulatora **f**.



Rys. 1


## Maszynka do strzyżenia sierści bydłowej i końskiej Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- Wyciągnąć akumulator litowo-jonowy **39**, naładować i/lub wsunąć naładowany zapasowy akumulator litowo-jonowy GT801 do akumulatorowej maszyny do strzyżenia **g**, patrz Rys. 2.



Rys. 2

- Zabezpieczyć akumulator litowo-jonowy **39** za pomocą blokady **f**, patrz Rys. 3.

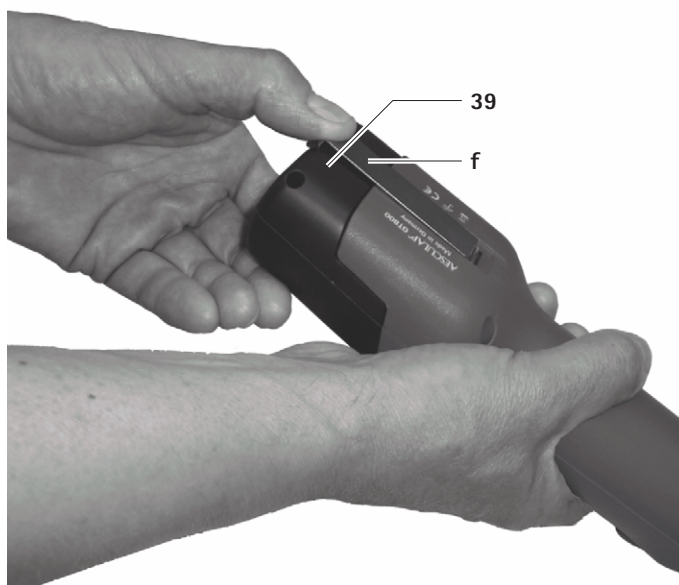

Rys. 3

### 4.5 Posługiwanie się głowicą strzygącą

#### Oliwienie głowicy strzygącej



Uszkodzenie maszyny do strzyżenia lub głowicy strzygącej na skutek użycia niewłaściwego oleju!

- Głowicę strzygącą oliwić tylko wówczas, gdy maszyna pracuje.
- Nie umieszczać maszyny ani głowicy strzygącej w cieczach.
- Używać wyłącznie lekkiego oleju smarowego GT604.
- Przed użyciem u kolejnego zwierzęcia głowicę strzygącą dokładnie nasmarować przez punkt smarowania olejem **a**, patrz Rys. A.
- Płytki sprężynowe **10** oliwić 2–3 razy dziennie 3–4 kroplami oleju, patrz Rys. C.

#### Smarowanie koła zębatego



Uszkodzenie maszyny do strzyżenia lub koła zębatego na skutek użycia niewłaściwego środka smarowego!

- Używać wyłącznie smaru do przekładni GT605.
- Koło zębate smarować 1–2 razy w sezonie strzyżenia.
- Odblokować i wyjąć akumulator litowo-jonowy **39**.
- Wykręcić obie śruby **6**, patrz Rys. B.
- Ustawić się na wprost głowicy strzygącej, obrócić ją o ok. 15° w lewo i zdjąć z obudowy silnika.
- Nanieść ok. 1 cm smaru na dwa przeciwległe miejsca na kole zębatym **11**, patrz Rys. C.
- Ostrożnie założyć głowicę strzygącą na silnik. Zwrócić przy tym uwagę, aby nakładać głowicę strzygącą przekręconą w lewo o ok. 15° oraz aby dolny nosek wszedł w rowek w obudowie silnika.

#### Wymiana płytek tnących

- Odblokować i wyjąć akumulator litowo-jonowy **39**.
- Odkręcić nakrętkę radełkowaną **3** i śrubę regulacyjną **4** wykręcić o około 2 obroty, patrz Rys. A.
- Odkręcić obie śruby zaciskowe **9**, ściągnąć dolną płytkę tnącą **1** do przodu i zdjąć górną płytkę tnącą **2**, patrz Rys. D i Rys. E.
- Przed założeniem górnej płytki tnącej **2** zwrócić uwagę, by klocek oscylujący **8** znajdował się w przewidzianym do niego wycięciu elementu oscylującego **7**, patrz Rys. E.
- Założyć górną płytkę tnącą **2**. Upewnić się, że obie końcówki **b** elementu oscylującego **7** wchodzą dokładnie w otwory **c** górnej płytki tnącej **2**, patrz Rys. D.
- Dolną płytkę tnącą **1** wsunąć pod łbami śrub zaciskowych **9** do oporu na obudowę głowicy strzygącej i dokręcić obie śruby zaciskowe **9**.
- Wkręcić śrubę regulacyjną **4**, aż obie płytki tnące zostaną lekko dociśnięte, patrz Rys. A.



## Ustawianie docisku płytek

### Wskazówka

Ustawienia docisku płytek należy dokonać, gdy maszynka pracuje, ale bez narzędzi pomocniczych.

### Wskazówka

Zbyt silny docisk płytek tnących powoduje ich silne nagrzewanie i większe zużycie.

- Najpierw odkręcić nakrętkę radełkowaną **3** i ostrożnie wykręcić śrubę regulacyjną **4**, aż górna płytka tnąca **2** przestanie dociskać do dolnej płytki tnącej **1** (delikatne odgłosy pracy), patrz Rys. A.
- Wkręcić śrubę regulacyjną **4** aż do napotkania niewielkiego oporu. Dokręcić jeszcze o około jeden obrót, a następnie dokręcić nakrętkę radełkowaną **3**.

## Czyszczenie głowicy strzygącej

- Głowicę strzygącą należy wyczyścić po kilku dniach strzyżenia lub w razie zabrudzenia.
- Odblokować i wyjąć akumulator litowo-jonowy **39**.
- Wykręcić obie śruby **6**, patrz Rys. B.
- Ustawić się na wprost głowicy strzygącej, obrócić ją o ok. 15° w lewo i zdjąć z obudowy silnika.
- Zdejmowanie płytek tnących, patrz Wymiana płytek tnących.
- Wnętrze głowicy strzygącej oraz inne pojedyncze części należy dokładnie czyścić za pomocą szczoteczki lub pędzelka.
- Wkładanie i przykręcania płytek tnących, patrz Wymiana płytek tnących.
- Smarowanie koła zębatego, patrz Smarowanie koła zębatego.
- Ostrożnie założyć głowicę strzygącą na silnik. Zwrócić przy tym uwagę, aby nakładać głowicę strzygącą przekręconą w lewo o ok. 15° oraz aby dolny nosek wszedł w rowek w obudowie silnika.
- Oliwienie głowicy strzygącej, patrz Oliwienie głowicy strzygącej.

## Czyszczenie filtra powietrza

- Filtr powietrza **37/38** należy czyścić raz dziennie lub w razie zabrudzenia.
- Zdjąć filtr powietrza **37/38** z akumulatorowej maszynki do strzyżenia, patrz Rys. G.
- Filtr powietrza **37/38** dokładnie wyczyścić szczotką w ciepłej wodzie.
- Wysuszyć filtr powietrza **37/38**.
- Wyczyścić akumulatorową maszynkę do strzyżenia.
- Nałożyć filtr powietrza **37/38** na akumulatorową maszynkę do strzyżenia.

## Ostrzenie płytek tnących

- W sprawie ostrzenia płytek tnących należy zwrócić się do serwisu technicznego, patrz Serwis techniczny.

## 4.6 Przechowywanie

- Przed przechowywaniem dokładnie wyczyścić maszynkę do strzyżenia i płytki tnące, patrz Przygotowanie.
- Maszynkę do strzyżenia przechowywać w suchym, ciemnym i czystym miejscu.

## 5. Płytki tnące

### 5.1 Płytki tnące pasujące do głowicy strzygącej GT367

Nr artykułu	Nazwa
GT501	Górna płytka tnąca z 15 zębami
GT502	Dolna płytka tnąca z 31 zębami, wysokość cięcia 3 mm
GT503	Górna płytka tnąca z 17 zębami
GT504	Dolna płytka tnąca z 18 zębami, wysokość cięcia 3 mm
GT505	Górna płytka tnąca z 23 zębami
GT506	Dolna płytka tnąca z 23 zębami, wysokość cięcia 3 mm
GT508	Dolna płytka tnąca z 51 zębami, wysokość cięcia 1 mm
GT510	jak GT506, ale wysokość cięcia wynosi 5 mm
GT511	jak GT502, ale wysokość cięcia wynosi 1 mm

### 5.2 Zalecane zestawienia

Zestawienie	Płytki górna/dolna	Przeznaczenie
zęby ciasno rozmieszczone	GT501/GT502	Bydło i konie (wersja standardowa GT474 i GT367)
	GT501/GT511	Strzyżenie przemysłowe
	GT505/GT508	(np. strzyżenie futra)
zęby średnio rozmieszczone	GT505/GT506	Bydło, psy i kozy
	GT505/GT510	Psy i kozy
zęby rzadko rozmieszczone	GT503/GT504	Bydło, owce o delikatnej wełnie i pojedyncze owce

## 6. Przygotowanie

### 6.1 Czyszczenie/dezynfekcja



**Niebezpieczeństwo porażenia prądem i powstania pożaru!**

- **Przed czyszczeniem:**
  - Wyciągnąć wtyczkę ładowarki z gniazda sieciowego.
  - Odblokować akumulator litowo-jonowy i wyjąć go z akumulatorowej maszynki do strzyżenia.
- Nie stosować łatwopalnych i wybuchowych środków czyszczących i dezynfekujących.
- Upewnić się, że płyny nie przedostały się do wnętrza produktu.



**Mycie maszynowe/dezynfekcja grozi uszkodzeniem produktu!**

- Produkt należy myć i dezynfekować wyłącznie ręcznie!
- Nigdy nie sterylizować produktu.



**Zastosowanie niewłaściwych środków czyszczących/dezynfekcyjnych może doprowadzić do uszkodzenia produktu!**

- Do czyszczenia powierzchni stosować tylko środki czyszczące/dezynfekcyjne dopuszczonego typu, zgodnie z zaleceniami ich producenta.
- Nigdy nie wkładać produktu do wody lub do płynu myjącego.
- Nie wlewać płynów do gniazd ładowarki.
- Z największą starannością czyścić styki gniazda ładowarki.

- Obudowę produktu wycierać niepozostawiającą kłaczków ściereczką nawilżoną dostępnym w handlu środkiem do dezynfekcji.
- W razie potrzeby po upływie czasu oddziaływania resztki środka myjącego i dezynfekcyjnego zmyć za pomocą zwilżonej wodą, niepozostawiającą kłaczków ściereczki.
- Do osuszenia używać suchych, niepozostawiających kłaczków ściereczek.
- Styki w gniazdach ładowarki czyścić patyczkiem kosmetycznym i izopropanolem lub alkoholem etylowym. Nie stosować środków chemicznych wywołujących korozję.
- W razie potrzeby czyszczenie/dezynfekcję należy powtórzyć.

### 6.2 Kontrola i testowanie

- Ostudzić produkt do temperatury pokojowej.
- Każdorazowo po zakończeniu czyszczenia i dezynfekcji sprawdzić produkt pod kątem: czystości, prawidłowości działania i obecności uszkodzeń.
- Sprawdzić, czy produkt podczas pracy nie wydaje nieoczekiwanych odgłosów, nie nagrzewa się nadmiernie ani nie drga zbyt silnie.
- Sprawdzić, czy ostrza głowicy strzygącej nie są uszkodzone, odłamane lub tępe.
- Uszkodzony produkt należy natychmiast wysortować.

## 7. Konserwacja

Aby zapewnić bezawaryjną pracę, firma Aesculap zaleca konserwację **co najmniej raz do roku**.





## 8. Wykrywanie i usuwanie usterek

### 8.1 Akumulatorowa maszynka do strzyżenia Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Usterka	Rozpoznanie	Przyczyna	Sposób usunięcia
Akumulatorowa maszynka do strzyżenia nie włącza się	-	Akumulator litowo-jonowy nieaktywny	Nacisnąć przycisk e na akumulatorze litowo-jonowym
	Dioda włącznika/wyłącznika <b>36</b> miga z częstotliwością dwa razy na sekundę	Akumulator litowo-jonowy nie jest naładowany	Naładować akumulator litowo-jonowy
	-	Akumulator litowo-jonowy uszkodzony	Włożyć nowy akumulator litowo-jonowy
	-	Akumulator litowo-jonowy nie jest włożony	Włożyć akumulator litowo-jonowy
Akumulatorowa maszynka do strzyżenia przerywa pracę	-	Akumulator litowo-jonowy wyłączony przez wyłącznik automatyczny	Wyłączyć i ponownie włączyć akumulatorową maszynkę do strzyżenia
	-	Akumulator litowo-jonowy jest rozładowany	Włożyć nowy akumulator litowo-jonowy

Maszynka do strzyżenia sierści bydłowej i końskiej Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

8.2 Ładowarka i akumulator litowo-jonowy

Usterka	Rozpoznanie	Przyczyna	Sposób usunięcia
Ładowarka nie działa	Wskaźnik diodowy akumulatora nie świeci	Nie podłączony przewód zasilający	Włożyć przewód zasilający do gniazda zasilania w ładowarce i do gniazda elektrycznego
	Akumulator litowo-jonowy nie jest naładowany	Uszkodzenie przewodu zasilającego	Wymienić przewód zasilający
Akumulator litowo-jonowy uszkodzony		Zlecić naprawę akumulatora litowo-jonowego w serwisie producenta, patrz Serwis techniczny	
Akumulator litowo-jonowy nie ładuje się	Akumulator litowo-jonowy włożony, ale nie świeci wskaźnik poziomu naładowania	Zanieczyszczone styki ładowarki	Oczyścić styki w gnieździe ładowarki, patrz Przygotowanie
	-	Uszkodzone styki ładowarki	Oddać ładowarkę do naprawy w serwisie producenta, patrz Serwis techniczny
	-	Akumulator litowo-jonowy uszkodzony	Zlecić naprawę akumulatora litowo-jonowego w serwisie producenta, patrz Serwis techniczny
	-	Ładowarka uszkodzona	Oddać ładowarkę do naprawy w serwisie producenta, patrz Serwis techniczny
	-	Podczas ładowania wykryto zbyt wysoką temperaturę akumulatora litowo-jonowego	Wyciągnąć akumulator litowo-jonowy z gniazda, ochłodzić i ponownie rozpocząć proces ładowania
	-	Usterka podczas ładowania lub uszkodzony akumulator litowo-jonowy	Wyjąć akumulator litowo-jonowy z gniazda i ponownie rozpocząć proces ładowania
			W przypadku ponownej usterki: Zlecić naprawę akumulatora litowo-jonowego w serwisie producenta, patrz Serwis techniczny



## 9. Serwis techniczny



Ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub niewłaściwego działania!

➤ Wprowadzanie zmian konstrukcyjnych do produktu jest zabronione.

Wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w urządzeniach medycznych może skutkować utratą roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, jak również ewentualnych atestów.

### Adresy punktów serwisowych

Albert Kerbl GmbH  
Felizenzell 9  
84428 Buchbach / Germany  
Phone: +49 (0) 8086 933-100  
Fax: +49 (0) 8086 933-500  
E-Mail: info@kerbl.com  
www.kerbl.com

Adresy pozostałych punktów serwisowych można uzyskać pod powyższym adresem.

## 10. Akcesoria/części zamienne

Nr artykułu	Nazwa	Wersja	Przewód sieciowy lub zasilacz	Akumulator litowo-jonowy	Stacja ładowania, kompletna	Osprzęt
GT806	Econom CL	Europa poza Wielką Brytanią	TA012170 płaska wtyczka europejska, czarna, L=1,8 m	GT801	GT803	GT604 Specjalny olej do płytek tnących i głowicy strzygącej  GT605 Smar przekładniowy (w tubce)
GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT806G	Econom CL	Wielka Brytania	TA012169 wtyczka GB, czarna, L=1,8 m			
GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT806K	Econom CL	USA	TA012168 2-wtykowa wtyczka przyrządowa, czarna, L=1,8 m			
GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT806A	Econom CL	Australia	TA013657 2-wtykowa wtyczka przyrządowa, czarna, L=1,8 m			
GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

## Maszynka do strzyżenia sierści bydłowej i końskiej Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

### 11. Dane techniczne

#### 11.1 Akumulatorowa maszynka do strzyżenia Econom CL/ Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

	GT800 Econom CL	GT810 Econom CL Equipe	GT834 Econom CL Fitter
Prędkość skokowa	maks. 2 750 obr./min	maks. 2 250 obr./min	maks. 3 000 obr./min
Pracy z akumulatorem litowo-jonowym	ok. 70 min	ok. 80 min	ok. 70 min
Napięcie znamionowe	maks. 21,6 V	maks. 21,6 V	maks. 21,6 V
Pojemność	maks. 2,6 A	maks. 2,6 A	maks. 2,6 A
Masa (z głowicą strzygącą i akumulatorem)	1 250 g	1 250 g	1 250 g
Znak kontrolny	TÜV-GS, CE, UL, CSA	TÜV-GS, CE, UL, CSA	CE, UL, CSA

#### 11.2 Ładowarka

	GT803
Zakresy napięcia sieciowego (pobór prądu)	100 V-240 V
Częstotliwość	50 Hz-60 Hz
Napięcie ładowania/napięcie wyjściowe	maks. 25,2 V
Prąd ładowania/prąd wyjściowy	maks. 2,6 A
Masa (z przewodem zasilającym i zasilaczem)	764 g
Znak kontrolny	TÜV-GS, CE, UL, CSA

#### 11.3 Akumulator litowo-jonowy

	GT801
Typ akumulatora	Li
Napięcie znamionowe	21,6 V
Pojemność	2,6 Ah
Czas ładowania	ok. 70 min
Znak kontrolny	TÜV-GS, CE, UL, CSA

### 11.4 Deklaracja zgodności



Oświadczamy na własną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jest zgodny z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi:  
2004/108/WE dyrektywa o zgodności elektromagnetycznej:  
DIN EN 60335-1  
DIN EN 60335-2-8  
Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku domowego i innych celów  
– wymagania ogólne  
– dla golarek do włosów  
Aesculap Suhl GmbH

### 12. Utylizacja

Narzędzia elektryczne, akcesoria i opakowanie należy przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

#### 12.1 Tylko kraje UE



Nie należy wyrzucać narzędzi elektrycznych do pojemników na odpady z gospodarstw domowych! Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz właściwymi krajowymi przepisami nieużyteczne narzędzia elektryczne należy gromadzić osobno i przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

#### 12.2 Akumulator litowo-jonowy

Nie wyrzucać akumulatorów litowo-jonowych do pojemników na odpady z gospodarstw domowych, do ognia ani wody. Uszkodzone lub zużyte akumulatory litowo-jonowe zgodnie z dyrektywą 2006/66/UE należy gromadzić, poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



## 13. 2 lata gwarancji

Szanowni Klienci,

dziękujemy za wybór produktu naszej firmy.

Marka Aesculap do wielu dziesięcioleci symbolizuje sprawdzoną jakość oraz pierwszorzędną obsługę. Naszym Klientom oferujemy innowacyjne i wydajne produkty. Aesculap wytwarza wysokiej klasy produkty i gwarantuje użycie wysokogatunkowych materiałów oraz staranne wykonanie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie odpowiadamy za wady fizyczne naszych produktów, jeżeli powstają one w wyniku nieprawidłowego użycia, normalnego zużycia bądź stosowania nieodpowiednich lub niesprawnych produktów obcych producentów.

Do części, które podlegają normalnemu zużyciu i za które nie odpowiadamy, należą akumulator i głowica strzygąca. Z odpowiedzialności producenta wyłączone są także wady fizyczne, które nie wpływają bądź wpływają jedynie nieznacznie na wartość lub działanie produktu.



W ramach naszego świadczenia gwarancyjnego zastrzegamy sobie prawo do naprawy lub wymiany produktu.

動物用バリカン Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

概要

位置	商品番号	個数	名称
1	GT502	1	下側カットプレート (GT804-GT816/ GT834)
2	GT501	1	上側カットプレート (GT804/GT806/ GT834)
	GT505	1	上側カットプレート (GT814/GT816)
3	GT610405	1	ロックナット
4	GT367205	1	調整用ネジ
6	TA010017	2	ネジ
7	GT367201	1	レゾネータ
8	GT610304	1	レゾネータブロック
9	GT610010	2	クランプネジ
10	GT367202	6	発振スプリングシート
11	GT367812	1	偏心シャフト付き平歯車
15	TA008295	2	ガイドピン
16	GT367801	1	取付け状態のカットヘッドケース
17	TA005091	2	ネジ
18	GT367802	1	左スペーサー
19	GT367803	1	右スペーサー
20	TA007765	1	皿ビス
25	GT610307	1	スプリングブリッジ
26	GT367207	1	固定ネジ
27	GT367804	1	取付け状態のレゾネータ
35	TA009222	1	ドライバー
36	GT800249	1	オン / オフスイッチ (LED 付き)
37	GT800804	1	エアフィルター (青) Econom CL
38	GT800844	1	エアフィルター (ボルドー) Econom CL Equipe
39	GT801	1	リチウムイオンバッテリー
40	GT803	1	チャージャー
a	-	1	ヘアカッターバッテリー注油箇所
b	-	1	レゾネータの先端部
c	-	1	上カットプレートの穴
d	-	1	リチウムイオンバッテリー残量表示
e	-	1	リチウムイオンバッテリーのボタン
f	-	1	バッテリーロック
g	GT800/ GT810	1	バッテリー駆動ヘアカッター
-	GT604	1	カッターヘッドとカットプレート用 スペシャルオイル
	GT605	1	ギアボックスグリース (チューブ)

製品に表示されている記号

	注意、一般的警告記号 注意、酸公文書に注意
	欧州指令 2012/19/EU (WEEE) 準拠による電気電 子機器の標識、廃棄処分を参照

目次

1. 安全な取り扱い.....	149
2. 装置の説明.....	149
2.1 納品内容.....	149
2.2 使用のために必要な部品.....	149
2.3 使用目的.....	149
2.4 機能概要.....	150
3. 準備.....	150
4. 充電式ヘアカッター、チャージャー、 リチウムイオンバッテリーの使い方 .....	150
4.1 準備.....	150
4.2 機能の確認.....	150
4.3 チャージャーを接続 / リチウムイオンバッテリーを充 電する .....	151
4.4 リチウムイオンバッテリーの交換.....	151
4.5 カッターヘッドの取扱い.....	152
4.6 保管.....	153
5. カットプレート.....	153
5.1 カッターヘッド GT367 用カットプレート.....	153
5.2 推奨される組合せ.....	153
6. 再生処理.....	154
6.1 洗浄 / 消毒.....	154
6.2 点検と確認.....	154
7. メンテナンス.....	154
8. トラブルシューティング.....	155
8.1 充電式ヘアカッター Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter .....	155
8.2 チャージャーとリチウムイオンバッテリー.....	156
9. テクニカルサービス.....	157
10. アクセサリー / 交換部品.....	158
11. 仕様.....	159
11.1 充電式ヘアカッター Econom CL/Econom CL Equipe/ Econom CL Fitter .....	159
11.2 チャージャー.....	159
11.3 リチウムイオンバッテリー.....	159
11.4 準拠性宣言.....	159
12. 廃棄処分.....	159
12.1 EU のみ該当 .....	159
12.2 リチウムイオンバッテリー.....	160
13. 2年保証.....	160



## 1. 安全な取り扱い



危険

感電による生命の危険！

- ▶ 製品を開かないでください。
- ▶ 製品はアースのある電源のみと接続してください。

- ▶ 製品をご使用になる前に機能することおよび規定通りの状態であることを確認してください。
- ▶ チャージャーとリチウムイオンバッテリーは室温で保管してください。
- ▶ チャージャーとリチウムイオンバッテリーは乾燥状態に維持してください。
- ▶ 初めてご使用になる前にリチウムイオンバッテリーを充電してください。
- ▶ 不正な取り外しや運転による損害を防止し、保証および賠償責任を無効にしないために：
  - 製品を本取扱説明書に従ってのみご仕様ください。
  - 安全情報およびメンテナンス上の注意事項を遵守してください。
  - アーセクラップの製品のみ組み合わせられます。
- ▶ 取扱説明書はユーザーがすぐ手に取れるように保管してください。
- ▶ 適用規格を遵守してください。
- ▶ 使用室内の電気設備が IEC 要件に準拠することを確認してください。
- ▶ 電力網との接続部は装置のプラグを引き抜いて切断し、決してケーブルを引いて行わないでください。
- ▶ 製品を爆発性雰囲気の中で使用しないでください。
- ▶ 損傷していたり胡椒している製品を使用しない。損傷している製品は直ちに分別してください。

## 2. 装置の説明

### 2.1 納品内容

商品番号	名称
GT800 GT810	充電式ヘアカッター Econom CL、 Econom CL Equipe、 Econom CL Fitter
GT801	リチウムイオンバッテリー
GT803	チャージャー
アクセサリ / 交換部品を参照	電源ケーブル（装置プラグ付き）
TA013895	取扱説明書
GT604	オイルボトル

### 2.2 使用のために必要な部品

- ・ 充電式ヘアカッター Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter
- ・ チャージャー
- ・ 電源ケーブル（装置プラグ付き）
- ・ リチウムイオンバッテリー

### 2.3 使用目的

充電式ヘアカッター Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

充電式ヘアカッター Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter は牛、馬や大型犬などのヘアカット専用です。

チャージャー GT803/ リチウムイオンバッテリー GT801

チャージャー GT803 はリチウムイオンバッテリー GT801 の充電に使用します。

## 動物用バリカン Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

### 2.4 機能概要

充電式ヘアカッター Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

充電式ヘアカッター Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter はオン / オフスイッチ **36** で電源を入 / 切を行います。

#### 注意

機械が不慮に電源投入 / 切断されないようにするため、オン / オフスイッチは操作後 0.5 秒以上たってから反応します。

チャージャー GT803 / リチウムイオンバッテリー GT801

チャージャー GT803 は電源電圧範囲 100V ~ 240 V / 50 Hz ~ 60 Hz 用です。

使用するにはチャージャー GT803 の電源プラグをコンセントに差し込んでください。

チャージャー GT803 には充電用の穴が 1 個あります。

リチウムイオンバッテリーをチャージステーションに差し込むと充電が自動的に始まります。

充電用穴での充電時間はリチウムイオンバッテリーの容量により異なります。

#### 充電原理

リチウムイオンバッテリーは一定の電流インパルスで充電されます。

リチウムイオンバッテリーの充電状態は充電中に監視されています。充電曲線を監視しているため 100% 充電状態が過剰充電無く確実になっています。

追加的にバッテリーの温度と充電時間も監視されます。

リチウムイオンバッテリーの充電状態表示は 5 個の LED によります。各 LED は充電量 20 % に相当します。バッテリーの充電中は各充電状態の LED が点滅します。すべての LED が連続点灯していればバッテリーはフル充電状態です。

#### 充電時間

最大充電時間に達すると充電は中断されます。充電時間は約 70 分です。

### 3. 準備

以下の規定に従わない場合は、エースクラップは一切責任を負いません。

- ▶ この製品の据付および使用時には以下のことに従ってください。
  - 国別の設置規定および運用者の規定、
  - 防火・防爆に関する国別規定、
  - ご使用方法は IEC-VDE の規定に従います。

### 4. 充電式ヘアカッター、チャージャー、リチウムイオンバッテリーの使い方

#### 4.1 準備

アクセサリを接続する

取扱説明書に記載のないアクセサリの組み合わせは意図されている使用目的のために明示的に決められている場合のみご使用可能です。性能特長ならびに安全要件に不利な影響が及ぶことはできません。

#### 4.2 機能の確認

充電式ヘアカッター Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

▶ 目視点検を実行してください。

▶ エアフィルター **37/38** が正しく嵌っていることに注意してください。図 G 参照。

▶ リチウムイオンバッテリー **39** を装置のダクトに入れてロックします。

▶ バッテリーの充電状態を確認し、スイッチ **e** を押します。図 F 参照。

▶ 充電状態表示 **d** は充電状態を示します。

#### 注意

リチウムイオンバッテリーが製品を使用しないときに放電しないように、リチウムイオンバッテリーと充電式ヘアカッターとの電気接続は 1 時間後に切断されます。

▶ リチウムイオンバッテリー **39** を再度有効にし、スイッチ **e** を押します。図 F 参照。

充電状態表示 **d** のすべての LED が点灯します。

チャージャー / リチウムイオンバッテリー

▶ 目視点検を実行してください。

▶ 製品を電力網コンセントに接続する前に：

- 電源ケーブルが損傷していないか確認します。

- 製品が損傷していないか確認します (充電用穴の接点の曲がり等)。

▶ 電源ケーブルをチャージャーの装置プラグに差し込みます。

▶ 電源プラグを電力網のコンセントに差し込みます。

▶ リチウムイオンバッテリー **39** をチャージャーの充電穴に差し、充電します。図 F 参照。





#### 4.3 チャージャーを接続 / リチウムイオンバッテリーを充電する



警告

液体や金属部品 / 片による極のショートによる火災の危険！

- ▶ リチウムイオンバッテリーをショートさせない。



警告

電源ケーブルの損傷による負傷の危険があります！

- ▶ 電源ケーブルは充電前に損傷していないか確認してください。
- ▶ 損傷した電源ケーブルはメーカーに交換させていただきます。



警告

損傷したリチウムイオンバッテリーを使用すると負傷や物損の危険があります！

- ▶ リチウムイオンバッテリーは充電前に損傷していないか確認してください。
- ▶ 損傷しているリチウムイオンバッテリーを使用 / 充電しないでください。



注意

長期間保管すると放電したリチウムイオンバッテリーの容量 / 性能が損失します！

- ▶ リチウムイオンバッテリーを長期間保管するときはフル充電してから保管し、月一回補給充電してください。



注意

充電用穴に種類が異なるバッテリーを繋ぐと製品、充電用穴またはリチウムイオンバッテリーの破損がありえます！

- ▶ リチウムイオンバッテリーは専用充電穴に差し込んでください。

#### 注意

チャージャーは8歳以上の子供および使用経験や知識に関する肉体的、知覚的または精神的な能力または障害を持つ人が使用することができます。但し、監督されるまたは装置の安全な使用について指示されたことおよび使用に起因する危険を理解したことが前提条件です。

- ▶ 子供にこの装置で遊ばせないでください。
- ▶ チャージャーの清掃および保守は子供には監督無く行わせないでください。

#### 注意

リチウムイオンバッテリーは充電中に若干暖かくなります。

#### 注意

チャージャーを使用しないときは電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

- ▶ リチウムイオンバッテリーの充電にエースクラップのチャージャー GT803 のみご使用ください。
- ▶ チャージャー 40 を接続します：電源ケーブルのプラグをチャージャーに差し込みます。
- ▶ 電源ケーブル 5 のプラグをコンセントに差し込みます。
- ▶ リチウムイオンバッテリー 39 をチャージャーの充電穴に差し込み、充電します。図 F を参照。  
リチウムイオンバッテリー充電状態表示 d の LED は現在の充電状態に応じて点滅します。すべての LED が連続点灯していればバッテリーはフル充電状態です。

#### 4.4 リチウムイオンバッテリーの交換

- ▶ 充電式ヘアカッター g のカッターヘッドごと下へ向けて持ち、リチウムイオンバッテリー 39 が緩めるとき落ちないようにします、図 1 を参照。
- ▶ バッテリーロック f を親指でロックします。



図 1

動物用バリカン Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

- リチウムイオンバッテリー **39** を引き抜き、充電するか充電済みのリチウムイオンバッテリー GT801 を充電式ヘアカッター **g** に押し込みます、図 2 を参照。



図 2  
➤ リチウムイオンバッテリー **39** をバッテリーロックで **f** ロックします、図 3 を参照。

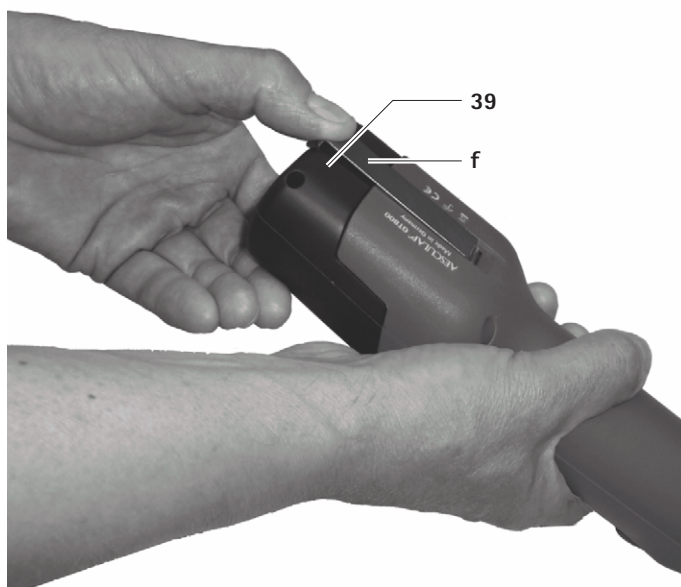


図 3

#### 4.5 カッターヘッドの取扱い

##### カッターヘッドの潤滑



注油が不正な場合はヘアカッターやカッターヘッドの損傷につながります！

- カッターヘッドはカッターを稼働させてのみ注油してください。
- カッターとカッターヘッドを液体に浸けないでください。
- 薄めの潤滑油 GT604 のみご使用下さい。

- カッターヘッドを注油箇所 **a** で一頭ごとに十分注油します。図 A 参照。
- スプリングシート **10** を一日 2~3 回 3~4 滴注油します。図 C を参照。

##### 歯車の潤滑



注油が不正な場合はヘアカッターや歯車の損傷につながります！

- ギアボックスグリース GT605 のみご使用下さい。
- ヘアカットシーズンごとに歯車を 1~2 回潤滑します。

- リチウムイオンバッテリー **39** をアンロックし、取外します。
- 両方のネジ **6** を回して外します。図 B を参照。
- カッターヘッドを見下ろしたときこのヘッドを左へ 15° 回し、モーターケースから取外します。
- 歯車 **11** の対向している箇所に約 1 cm だけグリースを塗ります。図 C を参照。
- カッターヘッドを慎重にモーターに差し込みます。このときカッターヘッドが左へおよそ 15° 回って差し込まれ、下のノーズがモーターケースの溝に嵌ることを確認してください。

##### カットプレートの交換

- リチウムイオンバッテリー **39** をアンロックし、取外します。
- ロックナット **3** を緩め、調整ネジ **4** を約 2 回回して外します。図 A を参照。
- 両方のクランプネジ **9** を緩め、下カットプレート **1** を前へ引き抜き、上カットプレート **2** を取外します。図 D と図 E を参照。
- 上カットプレート **2** を差し込む前に、レゾネータブロック **8** がこのためのレゾネータの窪み **7** に来ることを確認してください。図 E を参照。
- 上カットプレート **2** をはめ込みます。レゾネータ **7** の先端部 **b** が正確に上カットプレート **2** の穴 **c** に嵌ることを確認してください。図 D を参照。



- ▶ 下カットプレート **1** をクランプネジ **9** のヘッドの下へストップまでカッターヘッドケースに押し込み、両方のクランプネジ **9** を締付けます。
- ▶ 調整ネジ **4** を両方のカットプレートが軽く相互に押し合うまでねじ込みます。図 A を参照。

プレートの圧力を設定する

**注意**

プレートの圧力設定は製品が稼働している状態で補助工具を用いずに行います。

**注意**

プレートの圧力が高すぎると余計に加熱され、カットプレートの摩耗が激しくなります。

- ▶ ロックナット **3** を緩め、調整ネジ **4** を、上カットプレート **2** が下カットプレート **1** に押されなくなるまで（動作音が高くなる）慎重に回して抜き取ります。図 A を参照。
- ▶ 調整ネジ **4** を軽く抵抗が感じられるまで回してネジ込みます。ここからさらにおよそ一回転回し、次にロックナット **3** を締付けます。

カッターヘッドの洗浄

- ▶ カッターヘッドはカット時期に数日後にはまたは汚れ方に応じて洗浄してください。
- ▶ リチウムイオンバッテリー **39** をアンロックし、取外します。
- ▶ 両方のネジ **6** を回して外します。図 B を参照。
- ▶ カッターヘッドを見下ろしたときこのヘッドを左へ 15° 回し、モータケースから取外します。
- ▶ カットプレートを取外します、 カットプレートの交換を参照。
- ▶ カッターヘッドの内部空間と個々の部品をブラシや筆でよく清掃してください。
- ▶ カットプレートを挿入し、引き締めます、 カットプレートの交換を参照。
- ▶ 歯車を潤滑します、歯車の潤滑を参照。
- ▶ カッターヘッドを慎重にモータに差し込みます。このときカッターヘッドが左へおよそ 15° 回って差し込まれ、下のノーズがモータケースの溝に嵌ることを確認してください。
- ▶ カッターヘッドの潤滑、カッターヘッドの潤滑を参照。

エアフィルターを清掃する

- ▶ エアフィルター **37/38** を一日一回以上または汚れ方に応じて洗浄してください。
- ▶ エアフィルター **37/38** を充電式ヘアカッターから取外します。図 G を参照。
- ▶ エアフィルター **37/38** をお湯とブラシでよく洗います。
- ▶ エアフィルター **37/38** を自然に乾燥させます。
- ▶ 充電式ヘアカッターを清掃します。
- ▶ エアフィルター **37/38** を充電式ヘアカッターに差し込みます。

カットプレートの研磨

- ▶ カットプレートを研磨するにはズールのエースクラップ本社テクニカルサービスにご送付ください、テクニカルサービスを参照。

## 4.6 保管

- ▶ カッターとカットプレートは保管前によく清掃してください、再生処理を参照。
- ▶ この製品は乾燥した暗く清潔な空間に保管してください。

## 5. カットプレート

### 5.1 カッターヘッド GT367 用カットプレート

商品番号	名称
GT501	上カットプレート、15 個の歯付き
GT502	下カットプレート、31 個の歯付き カット高さ：3 mm
GT503	上カットプレート、17 個の歯付き
GT504	下カットプレート、18 個の歯付き カット高さ：3 mm
GT505	上カットプレート、23 個の歯付き
GT506	下カットプレート、23 個の歯付き カット高さ：3 mm
GT508	下カットプレート、51 個の歯付き カット高さ：1 mm
GT510	GT506 と同じ、カット高さは 5 mm
GT511	GT502 と同じ、カット高さは 1 mm

### 5.2 推奨される組合せ

組合せ	上 / 下プレート	最適な用途
歯が狭くアレンジされた	GT501/GT502	牛馬 (GT474 と GT367 の標準装備)
	GT501/GT511	工業用刃
	GT505/GT508	(皮革用シア)
ミディアム歯	GT505/GT506	牛、犬、ヤギ
	GT505/GT510	犬、ヤギ
ワイド歯	GT503/GT504	牛、ファインウールの羊、個々の羊

## 6. 再生処理

### 6.1 洗浄／消毒



感電および火災の危険！

- クリーニング前に：
  - 電源プラグをチャージャーから引き抜きます。
  - リチウムイオンバッテリーをアンロックし、充電式ヘアカッターを取外します。
- 可燃性や爆発性の洗浄液や消毒液を使用しないでください。
- 液体が製品に侵入しないようにしてください。



機械を使用して清掃や消毒を行うと製品が損傷または破損します！

- 製品は手でのみ清掃 / 消毒してください。
- 製品を絶対に滅菌処理しないでください。



不適切な洗浄液や消毒液では製品が損傷します！

- 地面の清掃に許可されている洗浄液や消毒液をメーカーの指図に従ってご使用下さい。
- 製品を水や洗浄液に浸さないでください。
- 液体が充電用穴に侵入しないようにしてください。
- 充電用穴内の接点を細心の注意を払ってよく清掃してください。

- 製品のケースは糸くずが立たない布に市販の消毒液を湿らせて拭き取ってください。
- 必要なら残余清掃 / 消毒液を効果が出る時間放置した後できれいな水を湿らせた糸くずが立たない布で拭き取ってください。
- きれいな糸くずが立たない布で拭きとって乾燥させます。
- 充電用穴の中の接点をイソプロパノールまたはエチルアルコールおよび綿棒で清掃します。腐食性薬剤を使用しないでください。
- 必要なら、清掃 / 消毒を繰り返します。

### 6.2 点検と確認

- 製品は室温で冷まします。
- 製品を清掃および消毒したら清潔な状態、機能、損傷がないかを点検してください。
- 製品の損傷、異常なノイズ、過熱または強すぎる振動がないか確認します。
- カッターヘッドの破損、損傷や切れなくなった刃がないか点検します。
- 損傷している製品は直ちに分別してください。

## 7. メンテナンス

信頼してご使用頂けるようにエースクラップは年一回以上メンテナンスを行うようにお勧めします。



## 8. トラブルシューティング

### 8.1 充電式ヘアカッター Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

障害	症状	原因	解決策
充電式ヘアカッターが始動しない	-	リチウムイオンバッテリーが有効にされていない	リチウムイオンバッテリーのスイッチ <b>e</b> を入れる
	オン / オフスイッチの LED <b>36</b> が一秒に二回点滅します	リチウムイオンバッテリーが充電されていない	リチウムイオンバッテリーを充電する
	-	リチウムイオンバッテリーが故障している	新しいリチウムイオンバッテリーを入れる
	-	リチウムイオンバッテリーが入っていない	リチウムイオンバッテリーを入れる
充電式ヘアカッターが使用中に止まったままになる	-	リチウムイオンバッテリーが保護スイッチによってオフになっている	充電式ヘアカッターをオフにしてまたオンにする
	-	リチウムイオンバッテリーが消耗した	新しいリチウムイオンバッテリーを入れる

動物用バリカン Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

8.2 チャージャーとリチウムイオンバッテリー

障害	症状	原因	解決策
チャージャーが機能しない	LED表示「Accu」が点灯しない	電源ケーブルがコンセントから抜けている	電源ケーブルをチャージャーの装置プラグおよび電力網のコンセントに差し込む
	リチウムイオンバッテリーが充電されていない	電源ケーブルの不具合 リチウムイオンバッテリーが故障している	電源ケーブルを交換する リチウムイオンバッテリーをメーカーに交換させてください、テクニカルサービスを参照
リチウムイオンバッテリーが充電されない	リチウムイオンバッテリーを差し込んでも充電状態インジケータが点灯しない	チャージャー接点の汚れ	充電穴内の接点をきれいにし、再生処理を参照
	-	チャージャーの接点が損傷している	チャージャーをメーカーに修理させてください、テクニカルサービスを参照
	-	リチウムイオンバッテリーが故障している	リチウムイオンバッテリーをメーカーに交換させてください、テクニカルサービスを参照
	-	チャージャーの不具合	チャージャーをメーカーに修理させてください、テクニカルサービスを参照
	-	充電中にリチウムイオンバッテリーが熱くなる	リチウムイオンバッテリーを充電用穴から取り出し、冷ましてから充電を再開する
	-	充電の障害またはリチウムイオンバッテリーの不具合	リチウムイオンバッテリーを充電用穴から取り出し、充電を再開する 障害がまだあればリチウムイオンバッテリーをメーカーに交換させてください、テクニカルサービスを参照



## 9. テクニカルサービス



警告

怪我する危険や故障があります！  
 ▶ 製品を改造しないでください。

医療機器の改造は保証 / 填補請求権の無効化や、該当する場合には認可の失効があります。

サービス拠点

B. Braun Aesculap Japan Co., Ltd.

2-38-16 Hongo, Bunkyo-ku

113-0033 Tokyo, JAPAN

Phone: +81 3-3814-2525

Fax: +81 3-3814-3140

<http://www.bbraun.jp>

その他のサービス拠点については上記の住所までお問い合わせください。

## 10. アクセサリー / 交換部品

商品番号	名称	仕様	電源ケーブルまたは電源アダプター	リチウムイオンバッテリー	チャージステーション一式	アクセサリ
GT804/ GT806	Econom CL	欧州 イギリスを 除く	TA012170 欧州フラットプラグ、黒 L=1.8 m	GT801	GT803	GT604 カットプレート とカッターヘッド 用スペシャル オイル  GT605 ギアボックスグ リース (チュー ブ)
GT814/ GT816	Econom CL Equipe					
GT834	Econom CL Fitter					
GT804G/ GT806G	Econom CL	イギリス	TA012169 イギリス仕様プラグ、黒 L=1.8 m			
GT814G/ GT816G	Econom CL Equipe					
GT834G	Econom CL Fitter					
GT804K/ GT806K	Econom CL	米国	TA012168 2極デバイスプラグ、黒 L=1.8 m			
GT814K/ GT816K	Econom CL Equipe					
GT834K	Econom CL Fitter					
GT804A/ GT806A	Econom CL	オーストラ リア	TA013657 2極デバイスプラグ、黒 L=1.8 m			
GT814A/ GT816A	Econom CL Equipe					
GT834A	Econom CL Fitter					

動物用バリカン Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

11. 仕様

11.1 充電式ヘアカッター Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

	GT800 Econom CL	GT810 Econom CL Equipe	GT834 Econom CL Fitter
ストローク数	最大 2 750 1/min	最大 2 250 1/min	最大 3 000 1/min
リチウムイオン バッテリー 1 個の作動時 間	約 70 分	約 80 分	約 70 分
通常の電圧	最大 21.6 V	最大 21.6 V	最大 21.6 V
容量	最大 2.6 A	最大 2.6 A	最大 2.6 A
重量 (カッ ターヘッドと バッテリー込 み)	1 250 g	1 250 g	1 250 g
認証マーク	TÜV-GS, CE, UL, CSA, PSE	TÜV-GS, CE, UL, CSA, PSE	CE, UL, CSA, PSE


11.2 チャージャー

	GT803
電源電圧範囲 (消費電流)	100 V ~ 240 V
周波数	50Hz/60Hz
充電電圧 / 出力電圧	最大 25.2 V
充電電流 / 出力電流	最大 2.6 A
重量 (ケーブルと電源アダプター 込み)	764 g
認証マーク	TÜV-GS, CE, UL, CSA

11.3 リチウムイオンバッテリー

	GT801
セルタイプ	リチウム
電圧	21.6 V
容量	2.6 Ah
充電時間	約 70 分
認証マーク	TÜV-GS, CE, UL, CSA


11.4 準拠性宣言

	<p>弊社は本製品が下記の規格または規範規定書に準拠していることを単独で保証します。</p> <p>2004/108/EC EMC 指令： DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-8</p> <p>世帯用途および類似の目的に使用する電気機器の安全性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 一般要件</li> <li>- ヘアカッター</li> </ul> <p>Aesculap Suhl GmbH</p>
--	---

12. 廃棄処分

電動ツール、アクセサリおよび梱包は環境両立性のある再利用ルートに処分してください

12.1 EU のみ該当

	<p>電動ツールは一般家庭ゴミと一緒に捨てないでください！</p> <p>電気電子機器に関する欧州指令 2012/19/EU およびその加盟国国内法に従い耐用に適さない電動ツールは分別収集し環境両立性のある再利用ルートに処分しなければなりません。</p>
---	---

12.2 リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリーを家庭ゴミ、火や水の中に投げ込まないでください。故障したまたは使用終了したリチウムイオンバッテリーは欧州指令 2006/66/EC に従い集取、再利用または環境に優しい方法で処分しなければなりません。





## 13. 2年保証

お客様へ

本製品のお買い上げ心からお礼申し上げます。



弊社の名前である Aesculap（ビー・ブラウンエースクラップ）は数十年以来検査合格保証および最高品質のサービスで知られています。お客様に革新的で高性能な製品をお届けするのは弊社の使命です。Aesculap は高品質機器を生産しており、お客様のために高級素材の使用ならびに入念な加工品質を確実に行っていきます。弊社の製品の瑕疵につきましては、不適切な使用、通常の劣化または、製品の誤った使用方法、および不適格で正常に機能しない他社製品の使用を原因として生じた故障については製品保証を致しておりませんので、ご注意ください。

通常の劣化が避けられないため、弊社が保証対象外としている部品はバッテリーおよびシェービングヘッドです。同様に、価値または機能に影響しないかまたは軽微な影響しか与えない瑕疵も保証対象外です。

保証の範囲で賠償責任を負う場合には、製品を修理または交換するかを弊社の裁量によって決めさせていただきます。

מכונת תספורת לבקר ולסוסים Econom CL/Econom CL Equipe

סימול על המוצר

<p>זהירות, סימול אזהרה כללי זהירות, נא לעניין בתיעוד הנלווה</p> 	<p>סימול מכשירים חשמליים ואלקטרוניים במסגרת תקנה (WEEE) 2012/19/EU, ר' פינני</p> 
---	--

סקירה כללית

סעיף	מספר	מס' פריט	תיאור
1	1	GT502	להב עליון (GT816/GT804)
2	1	GT501	להב תחתון (GT806/GT804)
	1	GT505	להב עליון (GT816/GT814)
3	1	GT610405	אום עם הברגה פנימית
4	1	GT367205	בורג ויסות
6	2	TA010017	בורג
7	1	GT367201	רוטט
8	1	GT610304	בלוק לרוטט
9	2	GT610010	בורג הידוק
10	6	GT367202	עלה של קפיץ עלים
11	1	GT367812	תמסורת גלגלי שיניים עם ציר אקסצנטרי
15	2	TA008295	פין כיוון
16	1	GT367801	תושבת ראש חיתוך מורכבת
17	2	TA005091	בורג
18	1	GT367802	לוחית הפרדה, שמאל
19	1	GT367803	לוחית הפרדה, ימין
20	1	TA007765	בורג משוקע
25	1	GT610307	גשר קפיצי
26	1	GT367207	בורג הידוק
27	1	GT367804	רוטט, מורכב
35	1	TA009222	מברג
36	1	GT800249	מתג הפעלה (עם LED)
37	1	GT800804	מסנן אוויר (כחול) Econom CL
38	1	GT800844	מסנן אוויר (בורדו) Econom CL Equipe
39	1	GT801	סוללת ליתיום-יון
40	1	GT803	מטען
א	1	-	נקודת סיכה למכונת תספורת נטענת
ב	1	-	קצוות הרוטט
ג	1	-	נקבים בלהב העליון
ד	1	-	מחווני מצב טעינת סוללת ליתיום-יון
ה	1	-	מתג סוללת ליתיום-יון
ו	1	-	נעילת סוללה
ז	1	GT800 / GT810	מכונת תספורת נטענת
-	1	GT604	שמן מיוחד לראש החיתוך וללהבים
	1	GT605	שמן מכונות לגלגלי שיניים (שפופרת)

תוכן העניינים

161..... שימוש זהיר..... 1

161..... תיאור המכשיר..... 2

161..... באריזה..... 2.1

161..... מרכיבים נדרשים להפעלה..... 2.2

161..... שימוש ייעודי..... 2.3

162..... צורת ההפעלה..... 2.4

162..... הכנה..... 3

162..... השימוש במכונת התספורת הנטענת, המטען וסוללת הליתיום-יון..... 4

162..... הכנות..... 4.1

162..... בדיקת תקינות..... 4.2

163..... חיבור המטען/טעינת סוללת ליתיום-יון..... 4.3

163..... החלפת סוללות ליתיום-יון..... 4.4

164..... הטיפול בראש החיתוך..... 4.5

165..... אחסון..... 4.6

165..... להבים..... 5

165..... להבים מתאימים לראש החיתוך..... 5.1

165..... שילובים מומלצים..... 5.2

166..... הכנה לשימוש מחדש..... 6

166..... ניקוי/חיטוי..... 6.1

166..... בקרה ובדיקה..... 6.2

166..... שירות תקופתי..... 7

167..... זיהוי וטיפול בתקלות..... 8

167..... Econom CL Equipe/Econom CL מכונת תספורת נטענת..... 8.1

168..... מטען וסוללת ליתיום-יון..... 8.2

169..... שירות טכני..... 9

169..... אביזרים/חלקי חילוף..... 10

170..... נתונים טכניים..... 11

170..... מכונת תספורת לבקר ולסוסים Econom CL Eq/Econom CL uipe..... 11.1

170..... מטען..... 11.2

170..... סוללת ליתיום-יון..... 11.3

170..... הצהרת ציות לתקינה..... 11.4

170..... סילוק פסולת..... 12

170..... למדינות הקהילה האירופית בלבד..... 12.1

170..... סוללת ליתיום-יון..... 12.2

171..... שנתיים אחריות..... 13



## 1. שימוש זהיר

סכנת מוות מהלם חשמלי!

אין לפתוח את המוצר.

יש לחבר את המוצר אך ורק למקור חשמלי מוארק.



סכנה

- אין להשתמש במוצר אך ורק על פי הוראות שימוש אלה.
- יש להקפיד על קיום הוראות הבטיחות והתחזוקה.
- יש לשלב אך ורק מוצרים של Aesculap.
- יש לשמור את הוראות השימוש במקום עם גישה נוחה למשתמש.
- יש לפעול על פי התקנים הרלוונטיים.
- יש לוודא שההתקנים החשמליים של החדר עומדים בתקנות IEC.
- יש למשוך את התקע מתוך השקע ולא להוציאו על ידי משיכת הכבל החשמלי.
- אין להשתמש במכשיר בסביבה הנמצאת בסכנת התפוצצות.
- אין להשתמש במכשיר פגום או מקולקל. יש להוציא מכלל שימוש את המוצר הפגום.

## 2. תיאור המכשיר

### 2.1 באריזה

מס' פריט	תיאור
GT800 GT810	מכונת תספורת נטענת Econom CL או Econom CL Equipe
GT801	סוללת ליתיום-יון
GT803	מטען
ר' אביזרים/חלקי חילוף	קבל חיבור לרשת החשמל (עם תקע למכשיר)
TA013895	הוראות שימוש
GT604	משמנת ידנית

### 2.2 מרכיבים נדרשים להפעלה

- מכונת תספורת נטענת Econom CL Equipe/Econom CL
- מטען
- קבל חיבור לרשת החשמל (עם תקע למכשיר)
- סוללת ליתיום-יון

### 2.3 שימוש ייעודי

#### מכונת תספורת נטענת Econom CL Equipe/Econom CL

מכונת התספורת הנטענת Econom CL Equipe/Econom CL מיועדת לגזיזת בעלי חיים גדולים כגון בקר, סוסים וכלבים גדולים.

#### מטען GT803/סוללת ליתיום-יון GT801

המטען GT803 מיועד לטעינת הסוללות GT801.

## מכונת תספורת לבקר ולסוסים Econom CL/Econom CL Equipe

### 2.4 צורת ההפעלה

#### מכונת תספורת נטענת Econom CL Equipe/Econom CL

מכונת התספורת הנטענת Econom CL Equipe/Econom CL מופעלת ומופסקת באמצעות מתג ההפעלה 36.

הערה:

מתג ההפעלה מגיב רק אחרי כחצי שנייה, וזאת כדי למנוע הפעלה בשוגג.

#### מטען GT803/סוללת ליתיום-יון GT801

המטען GT803 מיועד למתח רשת של 100 עד 240 וולט בתדירות של 50 עד 60 הרץ.

כדי להכין את המטען GT803 לשימוש יש לחברו לרשת החשמל באמצעות התקע החשמלי.

מטען GT803 מצויד בחיבור לסוללה אחת.

עם חיבור סוללת הליתיום-יון מתחילה הטעינה באופן אוטומטי.

משך הטעינה תלוי במצב הטעינה ובקיבולת של סוללות הליתיום-יון.

#### תהליך הטעינה

סוללות הליתיום-יון נטענות על ידי פעימות בלתי פוסקות של זרם חשמלי.

מצב הטעינה של סוללות הליתיום-יון נמצא בניטור במהלך הטעינה. הניטור מבטיח טעינה של 100% בלי טעינת יתר.

נוסף על כך מנוטרת גם הטמפרטורה של הסוללות.

מחונן מצב הטעינה של סוללות הליתיום-יון ד מצויד ב-5 LED נוריות. כל נורית LED מייצגת 20% מקיבולת הטעינה. כאשר הסוללה נמצאת בטעינה, נורית ה-LED המתאימה למצב הטעינה מהבהבת. כאשר כל נוריות ה-LED דולקות באופן יציב, הסוללה טעונה לגמרי.

#### משך הטעינה

הטעינה נפסקת כאשר היא מגיעה לזמן הטעינה המרבי. משך הטעינה הוא כ-70 דקות.

### 3. הכנה

אי ציות להנחיות דלהלן יביא לביטול כל אחריות מצד Aesculap.

על הכנת המכשיר לשימוש ועל הפעלתו חלות ההנחיות הבאות:

- התקנות הלאומיות על הכנת מכשירים לשימוש והפעלתם,
- התקנות הלאומיות על הגנה מפני אש והתפוצצות,
- המלצות ההפעלה על פי תקנות VDE/IEC

### 4. השימוש במכונת התספורת הנטענת, המטען וסוללת הליתיום-יון

#### 4.1 הכנות

##### חיבור האביזרים למכשיר

שילוב אביזרים שאינם נזכרים בהוראות שימוש אלה מותר רק אם הם מיועדים במפורש ליישום הרלוונטי. בכל מקרה אסור ששילוב כזה ישפיע על פעולתו התקינה של המכשיר ו/או על הוראות הבטיחות.

#### 4.2 בדיקת תקינות

##### מכונת תספורת נטענת Econom CL Equipe/Econom CL

בצע בדיקה ויזואלית.

ודא שמסנן האוויר 38/37 מחובר נכון. ר' איור ז.

הכנס את סוללת הליתיום-יון 39 לתושבת המתאימה במכונה ונעל אותה.

בדוק את מצב הטעינה של הסוללה. לחץ על מתג ה ראה איור ו.

מחונן מצב הטעינה ד מציג את מצב הטעינה.

הערה:

כדי למנוע את התרוקנות סוללת הליתיום-יון כאשר המכשיר אינו בשימוש, החיבור האלקטרוני בין סוללות הליתיום-יון לבין מנוע מכונת התספורת הנטענת ינותק אחרי שעה אחת.

חידוש מצב הפעולה של סוללת הליתיום-יון 39: לחץ על מתג ה. ר' איור ו'. כל נוריות ה-LED של מחונן מצב הטעינה ד יידלקו.

##### מטען/סוללת ליתיום-יון

בצע בדיקה ויזואלית

לפני חיבור המוצר לרשת החשמל:

- בדוק את כבל החשמל כדי לוודא שלא נגרם לו נזק
- בדוק את המוצר כדי לוודא שלא נגרם לו נזק (לדוגמה, מגעים מכופפים בתושבת המטען).

חבר את תקע הכבל החשמלי לשקע שביחידת הטעינה.

חבר את התקע האחר לשקע של רשת החשמל

הכנס את סוללת הליתיום-יון 39 לתושבת של המטען וטען אותה. ר' איור ו'.



### 4.3 חיבור המטען/טעינת סוללת ליתיום-יון

סכנת דליקה במקרה של קצר בין קטבי הסוללה על ידי נוזלים או חלקי מתכת!  
 הימנע מיצירת קצר בסוללת הליתיום-יון.



אזהרה

סכנה לנזק גופני בשל כבל חשמלי פגום!  
 יש לבדוק את הכבל החשמלי לפני הטעינה ולוודא שאינו פגום.  
 יש להחליף כבל חשמלי פגם באמצעות היצרן.



אזהרה

סכנת נזק גופני וחומרי בשל סוללת ליתיום-יון פגומה  
 יש לבדוק את הסוללה לפני הטעינה ולוודא שאינה פגומה.  
 אין להשתמש בסוללות פגומות ואין לטעון אותן.



אזהרה

הקיבולת/הביצועים של סוללת הליתיום-יון הנטענת ירדו עקב אחסון ממושך!  
 לפני אחסון ממושך יש לטעון את הסוללות טעינה מלאה ומדי חודש לטעון אותן מחדש.



זהירות

המכשיר, המטען או סוללת הליתיום-יון התקלקלו עקב הכנסת סוללה מסוג לא נכון לתושבת!  
 יש להכניס לתושבת המיועדת לכך אך ורק סוללות ליתיום-יון.



זהירות

הערה:

השימוש במטען מותר לילדים בני 8 ומעלה, לאנשים בעלי לקויות פיזיות, חושיות או מנטליות או מעוטי ניסיון /או ידע מותר להשתמש במכשיר זה רק אם הם נמצאים תחת השגחה או מקבלים הנחיות לגבי השימוש הבטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בו.

אין להתיר לילדים לשחק במכשיר.  
 אין להתיר לילדים לנקות או לתחזק את המטען בלא השגחה.

הערה:


במהלך הטעינה סוללות הליתיום-יון מתחממות מעט.

הערה:

כאשר אין כוונה להשתמש במטען, יש להוציא את התקע שלו מן השקע.

### 4.4 החלפת סוללות ליתיום-יון

אחוז את מכונת התספורת הנטענת z עם ראש החיתוך מופנה כלפי מטה, כדי למנוע את נפילת סוללת הליתיום-יון 39 בעת שחרורה. ר' איור 1.  
 שחרר את תופסן נעילת הסוללה ו' בעזרת האגודל.

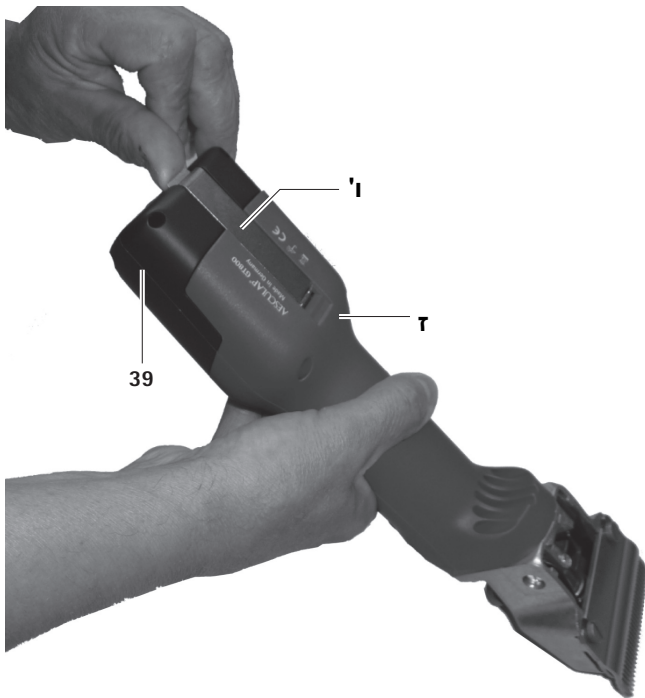

איור 1

מכונת תספורת לבקר ולסוסים Econom CL/Econom CL Equipe

4.5 הטיפול בראש החיתוך

סיכת ראש החיתוך

- נזק למכונת התספורת או לראש החיתוך עקב סיכה לא נכונה! <
- סיכת ראש החיתוך תתבצע אך ורק בזמן שהמכשיר פועל. <
- אין לטבול את המכשיר ואת ראש החיתוך בנוזל מכל סוג שהוא. <
- יש להשתמש אך ורק בשמן סיכה קל מסוג GT604. <
- יש לשמן היטב את ראש החיתוך בנקודת הסיכה א לפני התספורת של כל בעל חיים. ר' איור א'. <
- יש לשמן את עלי קפיץ העלים 10 פעמיים-שלוש ביום בעזרת 3-4 טיפות שמן. ר' איור ג'. <



זהירות

סיכת גלגל השיניים

- נזק למכונת התספורת או לגלגל השיניים עקב סיכה לא נכונה! <
- יש להשתמש אך ורק בשמן סיכה מסוג GT605. <
- יש לשמן את גלגל השיניים פעם-פעמיים בעונת גזיזה. <
- שחרר והוצא את סוללת הליתיום-יון 39. <
- הברג החוצה את שני הברגים 6. ר' איור ב'. <
- סובב את ראש החיתוך כ-15° נגד כיוון השעון והוצא אותו מתושבת המנוע. <
- שפוך כסנטימטר אחד שמן סיכה על שני הקצוות המנוגדים של גלגל השיניים 11. ר' איור ג'. <
- הרכב בזהירות את ראש החיתוך על המנוע, תוך כדי הקפדה שראש החיתוך מורכב כשהוא מוטה שמאלה כ-15° כך שהפין התחתון ייכנס לתוך החריץ בתושבת המנוע. <



זהירות

החלפת להבים


- שחרר והוצא את סוללת הליתיום-יון 39. <
- שחרר את בורג החיזוק 3 והברג את בורג הוויסות 4 כ 2-סיבובים נגד כיוון השעון. ר' איור א'. <
- שחרר את שני ברגי ההידוק 9 משוך את הלהב התחתון 1 קדימה והסר את הלהב העליון 2. ר' תרשימים ד' ו-ה'. <
- לפני הכנסת הלהב העליון החדש 2 יש לוודא שהבלוק לרוטט 8 נמצאת בתושבת המיועדת לה ברוטט 7. ר' איור ה'. <
- הכנס את הלהב העליון 2, תוך הקפדה ששני הקצוות ב של הרוטט 7 נמצאים בדיוק בנקבים ג בלהב העליון 2. ר' איור ד'. <
- דחף את הלהב התחתון 1 מתחת לראשים של ברגי ההידוק 9 עד שהוא יגיע לתושבת ראש החיתוך והברג היטב את שני ברגי ההידוק 9. <
- הדק בחזרה את בורג הוויסות 4 עד ששני הלהבים יפעילו לחץ קל זה על זה. ר' איור א'. <

משוך החוצה את סוללת הליתיום-יון 39, טען או דחף סוללת ליתיום-יון חלופית GT801 לתוך מכונת התספורת הנטענת ז. ר' איור 2.



איור 2

נעל את סוללת הליתיום-יון 39 בעזרת תופסן נעילת הסוללה ו'. ר' איור 3.

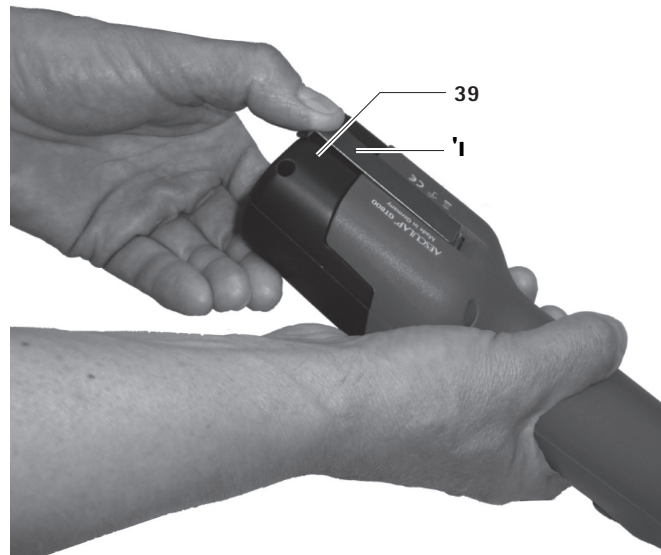

איור 3



## ויסות לחץ הלהבים

הערה:

יש לבצע את ויסות לחץ הלהבים כאשר המכשיר פועל ובלא שימוש בכל אביזר אחר.

הערה

לחץ חזק מדי בין הלהבים מגביר את התחממות המכשיר ואת הבלאי של הלהבים.

## 4.6 אחסון

- לפני האחסון יש לנקות היטב את מכונת התספורת ואת הלהבים. ר' הכנה לשימוש מחדש.
- אחסן את מכונת התספורת במקום יבש, חשוך ונקי.

## 5. להבים

### 5.1 להבים מתאימים לראש החיתוך

מס' פריט	תיאור
GT501	להב עליון עם 15 שיניים
GT502	להב תחתון עם 31 שיניים גובה גזיזה: 3 מ"מ
GT503	להב עליון עם 17 שיניים
GT504	להב תחתון עם 18 שיניים גובה גזיזה: 3 מ"מ
GT505	להב עליון עם 23 שיניים
GT506	להב תחתון עם 23 שיניים גובה גזיזה: 3 מ"מ
GT508	להב תחתון עם 51 שיניים גובה גזיזה: 1 מ"מ
GT510	כמו GT506, אבל עם גובה גזיזה של 5 מ"מ
GT511	כמו GT502, אבל עם גובה גזיזה של 1 מ"מ

- שחרר את בורג החיזוק 3 והברג בזהירות את בורג הוויסות 4 נגד כיוון השעון, עד שהלהב העליון 2 לא יפעיל עוד שום לחץ על הלהב התחתון 1 (רעש המנוע יהיה עם צליל גבוה יותר). ר' איור א'.
- הברג את בורג הוויסות 4 ימינה, עד שתרגיש התנגדות קלה. המשך להבריג בערך סיבוב אחד נוסף ולאחר מכן חזק את בורג החיזוק 3.

### ניקי ראש החיתוך

- יש לנקות את ראש החיתוך לפחות לאחר מספר ימי גזיזה או כאשר הוא מתלכלך.
- שחרר והוצא את סוללת הליתיום-יון 39.
- הברג החוצה את שני הברגים 6. ר' איור ב.
- סובב את ראש החיתוך כ-15° נגד כיוון השעון והוצא אותו מתושבת המנוע.
- הסר את הלהבים - ר' החלפת הלהבים.
- נקה היטב את החלל הפנימי ואת כל חלקי ראש החיתוך בעזרת מברשת או מכחול.
- החזר וחזק את הלהבים - ר' החלפת הלהבים.
- בצע סיכה של גלגל השיניים - ר' סיכת גלגל השיניים.
- הרכב בזהירות את ראש החיתוך על המנוע, תוך כדי הקפדה שראש החיתוך מורכב כשהוא מוטה שמאלה כ-15° כך שהפין התחתון ייכנס לתוך החריץ בתושבת המנוע.
- בצע סיכה לראש החיתוך - ר' סיכת ראש החיתוך.

### 5.2 שילובים מומלצים

שילוב	להב עליון/תחתון	מתאים ל-
שיניים צפופות	GT502/GT501	בקר וסוסים (ציוד סטנדרטי של GT474 ושל GT367)
	GT511/GT501	גזיזה תעשייתית
	GT508/GT505	(לדוגמה, גזיזת פרווה)
שיניים בצפיפות בינונית	GT506/GT505	בקר, כלבים ועזים
	GT510/GT505	כלבים ועזים
שיניים מרווחות	GT504/GT503	בקר, כבשים עם צמר רך וכבשים יחידים

### ניקי מסנן האוויר

- יש לנקות את מסנן האוויר 38/37 לפחות פעם ביום או כאשר הוא מתלכלך.
- הסר את מסנן האוויר 38/37 ממכונת התספורת הנטענת. ר' איור ז'.
- נקה היטב את מסנן האוויר 38/37 בעזרת מים חמים ומברשת.
- המתן עד שמסנן האוויר 38/37 יתייבש.
- נקה את מכונת התספורת הנטענת.
- הכנס את מסנן האוויר 38/37 לתוך מכונת התספורת הנטענת.

### השחזת הלהב

- לצורך השחזת הלהבים יש ליצור קשר עם השירות הטכני של ר' שירות טכני.

מכונת תספורת לבקר ולסוסים Econom CL/Econom CL Equipe

6. הכנה לשימוש מחדש

6.1 ניקוי/חיטוי



סכנה

סכנת התחשמלות ודליקה!

לפני הניקוי:

- הוצא את תקע הכבל החשמלי מן המטען.
- שחרר את סוללת הליתיום-יון והוצא אותה ממכונת התספורת הנטענת.
- אל תשתמש בחומרי ניקוי וחיטוי דליקים או נפיצים.
- ודא שלא חדרו נוזלים כלשהם לתוך המוצר.



זהירות

נזק או תקלה במוצר עקב ניקוי/חיטוי מכני!

- נקה/חטא את המוצר אך ורק באופן ידני.
- בשום פנים ואופן אין לבצע במכשיר סטריליזציה.



זהירות

- נזק למוצר עקב שימוש בחומר ניקוי/חיטוי לא מתאים!
- השתמש אך ורק בחומרי הניקוי/חיטוי המומלצים על ידי היצרן לניקוי משטחים.
- בשום פנים ואופן אין לטבול את המכשיר במים או בחומר ניקוי.
- אין להניח לנוזלים כלשהם להיכנס לתושבות הטעינה.
- היזהר במיוחד בעת ניקוי המגעים של תושבות הטעינה.

- נגב את מארז המוצר בעזרת מטלית נטולת פשתן כשהיא לחה עם נוזל חיטוי מסחרי.
- במקרה הצורך, נגב את שאריות חומר החיטוי, לאחר זמן המתנה סביר, בעזרת מטלית נטולת פשתן, כשהיא לחה עם מים נקיים.
- השתמש במטלית נטולת פשתן לייבוש המכשיר.
- נקה את המגעים של המטען בעזרת איזופרופנול או אתנול ומקל ניקוי אוזניים. אין להשתמש בכימיקלים ממרטים.
- במקרה הצורך יש לחזור על הניקוי/חיטוי.

6.2 בקרה ובדיקה

- המתן להתקררות המכשיר לטמפרטורת החדר.
- בדוק את המוצר לאחר כל ניקוי וחיטוי וודא שהוא: נקי, במצב פעולה תקין ולא ניזוק.
- בדוק את המוצר במקרה של נזק, רעש מנוע חריג, התחממות חריקה או רעידות חזקות מדי.
- יש לבדוק שלראש החיתוך אין להבים שבורים, פגומים או קהים.
- יש להוציא מכלל שימוש את המוצר הפגום.

7. שירות תקופתי

כדי להבטיח תפעול אמין, Aesculap ממליצה לבצע שירות תקופתי לפחות פעם בשנה.





## 8. זיהוי וטיפול בתקלות

### 8.1 מכונת תספורת נטענת Econom CL Equipe/Econom CL

תקלה	זיהוי	סיבה	טיפול
מכונת התספורת הנטענת אינה נדלקת	-	סוללת הליתיום-יון אינה מופעלת	הפעל את מתג השעל סוללת הליתיום-יון
	-	סוללת הליתיום-יון אינה טעונה	טען את סוללת הליתיום-יון
	-	פגם בסוללת הליתיום-יון	הכנס סוללת ליתיום-יון חדשה
	-	סוללת הליתיום-יון אינה מוכנסת	הכנס סוללת ליתיום-יון
מכונת התספורת הנטענת מפסיקה לפעול תוך כדי שימוש	-	סוללת הליתיום-יון נותקה על ידי מפסק הגנה	הפסק והפעל מחדש את מכונת התספורת הנטענת
	-	סוללת הליתיום-יון ריקה	הכנס סוללת ליתיום-יון חדשה

מכונת תספורת לבקר ולסוסים Econom CL/Econom CL Equipe

8.2 מטען וסוללת ליתיום-יון

תקלה	זיהוי	סיבה	טיפול
המטען אינו פועל	נורית ה" LED-סוללה "אינה דולקת	כבל החיבור לרשת החשמל אינו מחובר	הכנס את התקעים למטען ולשקע החשמלי
	סוללת הליתיום-יון אינה טעונה	פגם בכבל החיבור לרשת החשמל	החלף כבל חיבור לרשת החשמל
		פגם בסוללת הליתיום-יון	שלח את סוללת הליתיום-יון ליצרן. ר' שירות טכני
סוללת הליתיום-יון אינה נטענת	סוללת הליתיום-יון מוכנסת, מחוון מצב הטעינה אינו דולק	מגעי המטען מלוכלכים	נקה את מגעי המטען. ר' הכנה לשימוש מחדש
	-	מגעי המטען התקלקלו	שלח את המטען ליצרן. ר' שירות טכני
	-	פגם בסוללת הליתיום-יון	שלח את סוללת הליתיום-יון ליצרן. ר' שירות טכני
	-	פגם במטען	שלח את המטען ליצרן. ר' שירות טכני
	-	סוללת הליתיום-יון מתחממת יתר על המידה במהלך הטעינה	הוצא את סוללת הליתיום-יון מתושבת המטען, תן לה להתקרר והמשך בטעינה
	-		אם התקלה נשנית: שלח את סוללת הליתיום-יון ליצרן. ר' שירות טכני
	-	שגיאה בטעינה או פגם בסוללת הליתיום-יון	הוצא את סוללת הליתיום-יון מתושבת המטען והמשך בטעינה
	-		אם התקלה נשנית: שלח את סוללת הליתיום-יון ליצרן. ר' שירות טכני



## 9. שירות טכני

סכנת נזק גופני ו/או תקלה בתפעול!  
אין לבצע שינויים במוצר.



אזהרה

שינויים שיעשו בציוד טכני-רפואי עלולים להביא לביטול האחריות/חבות היצרן וכן לביטול רישיונות.

### כתובות מחלקת השירות

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach / Germany

טלפון: +49-8086 933-100

פקס: +49-8086 933-500

דוא"ל: info@kerbl.com

www.kerbl.com


כתובות נוספות של מחלקת השירות ניתן לקבל בכתובת הנ"ל.

## 10. אביזרים/חלקי חילוף

אביזרים	תחנת טעינה מלאה	סוללת ליתיום-יון	כבל חיבור לרשת החשמל או ספק כוח	גירסה	תיאור	מס' פריט
GT604 שמן מיוחד לראש החיתוך וללהבים GT605 שמן מכונות לגלגלי שיניים (שפופרת)	GT803	GT801	TA012170 תקע אירופי שטוח, שחור, אורך: 1.8 מ'	אירופה חוץ מבריטניה	Econom CL	/GT804 GT806
					Econom CL Equipe	/GT814 GT816
			TA012169 תקע בריטי, שחור, אורך: 1.8 מ'	בריטניה	Econom CL	/GT804G GT806G
					Econom CL Equipe	/GT814G GT816G
			TA012168 תקע מכשירי חשמל דו-קוטבי שחור, אורך: 1.8 מ'	ארה"ב	Econom CL	/GT804K GT806K
					Econom CL Equipe	/GT814K GT816K
			TA013657 תקע מכשירי חשמל דו-קוטבי שחור, אורך: 1.8 מ'	אוסטרליה	Econom CL	/GT804A GT806A
					Econom CL Equipe	/GT814A GT816A

**מכונת תספורת לבקר ולסוסים Econom CL/Econom CL Equipe**

**11.4 הצהרת ציות לתקינה**

	<p>אנו מצהירים באחריותנו הבלעדית שמוצר זה עומד בדרישות התקנים או מסמכי התקן הבאים:          הנחיות 2004/108/EG EMC          DIN EN 60335-1          DIN EN 60335-2-8          בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ודומה – דרישות כלליות          – למכונות תספורת          Aesculap Suhl GmbH</p>
---	--

**11. נתונים טכניים**


**11.1 מכונת תספורת לבקר ולסוסים Econom CL Equipe/Econom CL**

GT810 Econom CL Equipe	GT800 Econom CL	
מקסימום 2,250 בדקה	מקסימום 2,750 בדקה	קצב תנוודות
כ-80 דקות	כ-70 דקות	משך ההפעלה עם סוללת ליתיום-יון אחת
מקסימום 21.6 וולט	מקסימום 21.6 וולט	מתח נומינלי
מקסימום 2.6 אמפר	מקסימום 2.6 אמפר	זרם
1.25 ק"ג	1.25 ק"ג	משקל (כולל ראש חיתוך וסוללה)
UL, CE, TÜV-GS, CSA	UL, CE, TÜV-GS, CSA	אישורי איכות:

**12. סילוק פסולת**

יש לשלוח מכשירי חשמל, אביזרים ואריזות למחזור אחראי מבחינה סביבתית.

**12.1 למדינות הקהילה האירופית בלבד**

<p>אל תשליכו מכשירי חשמל לאשפה הביתית! על פי ההנחיה האירופית 2012/19/EU על מכשירים חשמליים ואלקטרוניים ישנים ויישומה בחוק הלאומי, יש לאסוף מכשירים חשמליים שאינם שמישים בנפרד ולשלוח אותם למחזור אחראי מבחינה סביבתית.</p>	
--	---

**12.2 סוללת ליתיום-יון**

אין להשליך סוללות ליתיום-יון לאשפה, לאש או למים. סוללות פגומות או משומשות יש לאסוף על פי הנחיה 2006/66/EG ולמחזור או לסלק בדרך אחראית מבחינה סביבתית.

**11.2 מטען**

GT803	
240-100 וולט	טווח מתחים (צריכה שוטפת)
60-50 הרץ	תדירות
מקסימום 25.2 וולט	מתח טעינה / מתח יציאה
מקסימום 2.6 אמפר	זרם טעינה / זרם יציאה
764 גר'	משקל (כולל כבל וספק כוח)
UL, CE, TÜV-GS, CSA	אישורי איכות:

**11.3 סוללת ליתיום-יון**

GT801	
ליתיום-יון	סוג תאים
21.6 וולט	מתח נומינלי
2.6 אמפר/שעה	זרם
כ-70 דקות	משך הטעינה
UL, CE, TÜV-GS, CSA	אישורי איכות:



### 13. שנתיים אחריות

לקוח נכבד, לקוחה נכבדה, תודה מקרב לב שהחלטתם לרכוש מוצר מתוצרתנו.

השם Aesculap מייצג זה עשרות שנים איכות מוכחת ושירות ממדרגה ראשונה. אנו ידועים בזכות המוצרים החדשניים והאיכותיים שאנו מציעים ללקוחותינו. Aesculap מייצרת מכשירים מעולים ויכולה לאשר שהיא משתמשת בחומרים מעולים ובתהליכי ייצור קפדניים. ברצוננו להבהיר כי איננו אחראים לפגמים במוצרינו אם אלה נוצרו עקב שימוש לא נכון, בלאי סביר או שימוש לא נכון או לא מתאים או שימוש עם מוצרים אחרים פגומים או לא מתאימים.

חלקים שבאופן טבעי מתבלים עם השימוש, ושלגביהם איננו נושאים באחריות, הם הסוללה וראש החיתוך. כמו כן, פגמים שאינם משפיעים, או המשפיעים במידה שולית, על ערך המוצר, גם לגביהם איננו נושאים באחריות.

אם חלה עלינו חבות במסגרת האחריות שלנו, אנו שומרים את הזכות לתקן או להחליף את המוצר.



AESCULAP®



Technical alterations reserved  
Technische Änderungen vorbehalten  
Sous réserve de modifications techniques  
Sujeto a modificaciones técnicas  
Con riserva di modifiche tecniche  
Technische wijzigingen voorbehouden  
Retten til tekniske ændringer forbeholdes  
Vi tar forbehold om eventuelle tekniske endringer  
Med reservation för eventuella tekniska ändringar  
Oikeusteknisistä syistä johtuviin muutoksiin pidätetään  
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения  
Zmiany techniczne zastrzeżone  
技術的理由により、内容に変更を加える場合があります

TA-Nr. 013895 03/17 V5 Änd.-Nr. 56542

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

**Aesculap Suhl GmbH**

Fröhliche-Mann-Straße 15  
98528 Suhl

Germany

Phone +49 3681 4982-0

Fax +49 3681 4982-34

[www.aesculap-schermaschinen.de](http://www.aesculap-schermaschinen.de)